



Användarmanual

SwipeCare Version 4.2.19 – Automatiserat vårdstöd

iPad

- kräver iOS 16.0 eller senare

2024 05 23

SwipeCare

2023-08-15



EUDAMED-DI: B-SwipeCare4JF



Strikersoft


Isafjordsgatan 39, 164 40 Kista, Sweden

www.strikersoft.com Org. nr. 556661-1637




Efter ny-/ominstallation av SwipeCare 4 app på iPad:

Välj organisation (OBS: Detta kan redan vara gjort av er tekniska support)

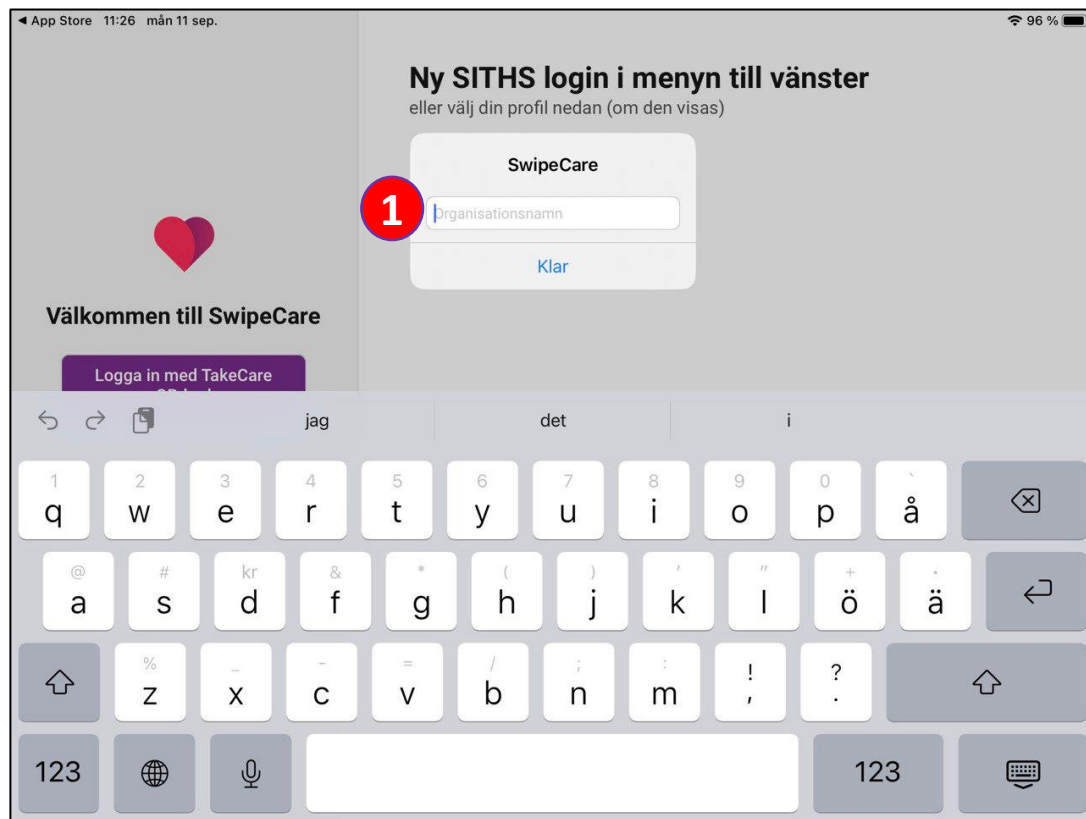


1. Skriv in din organisation: t.ex Aleris, Sophiahemmet, Danderyd
2. OM du har access till flera vårdenheter så får du välja i en lista

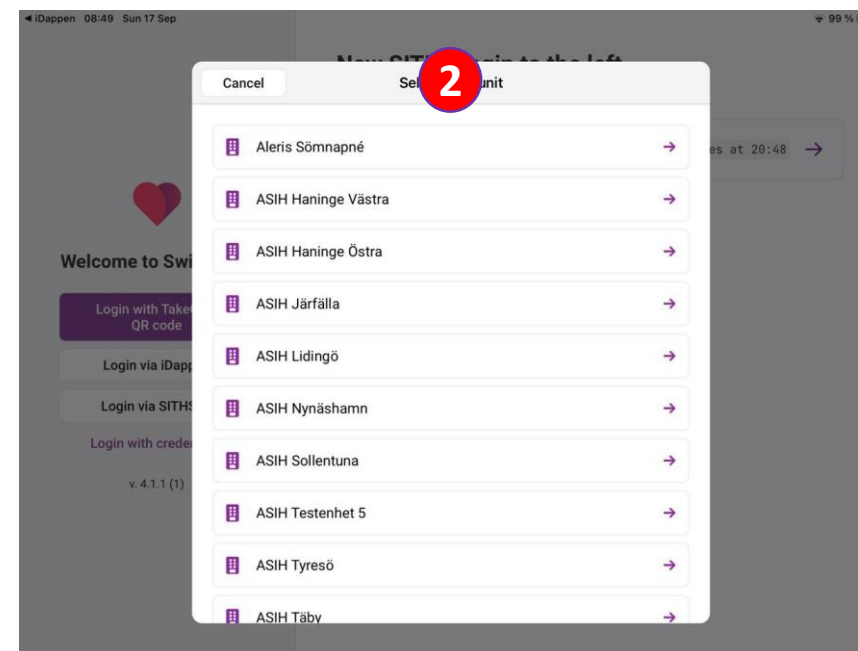



iPad: Logga in

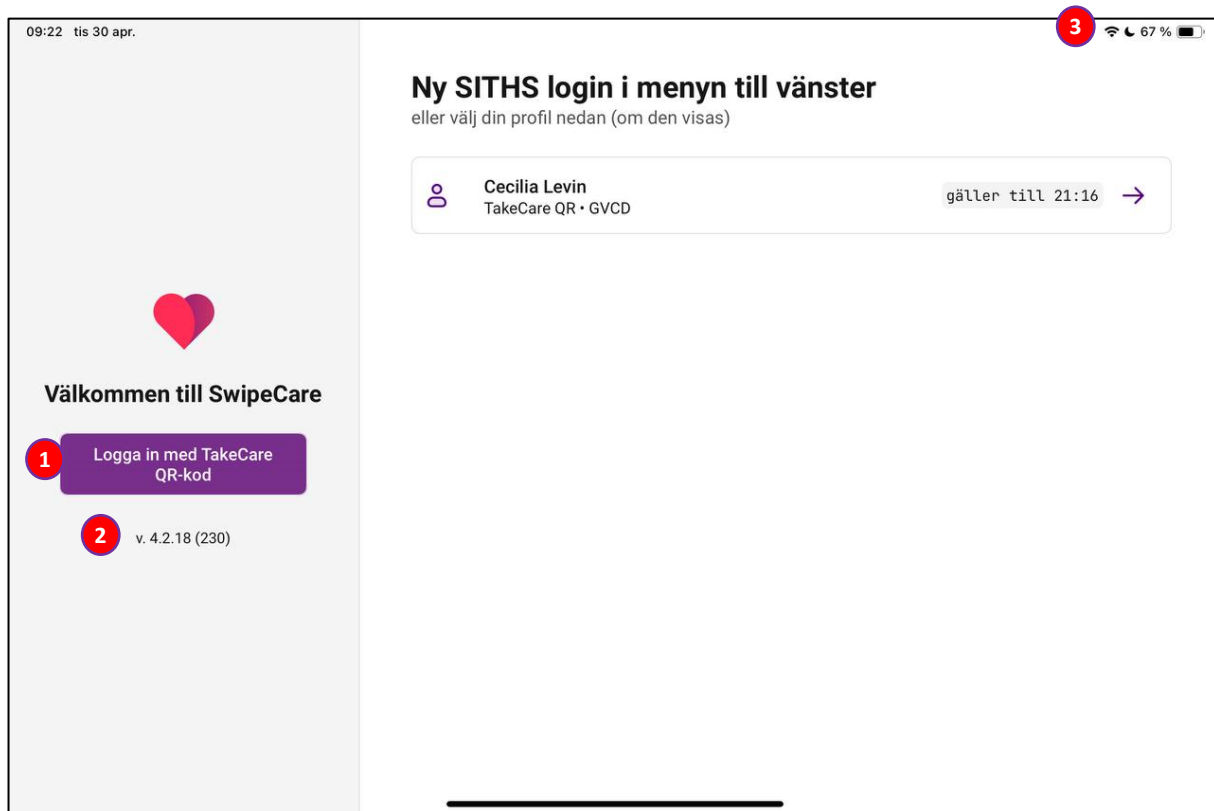


1. Logga in med din QRkod från TakeCare (se nästa sida)
2. Versionsnummer på appen
3. Ikon för att visa om du är på WIFI (eller mobilnät)
Har du ingen täckning visas en röd ribba överst med texten "SwipeCare är offline"
4. Login profil ("kort login") som visar hur du loggat in (QR kod eller iD appen) och hur länge din profil med personlig PIN är giltig innan du behöver logga in från början på vänster sida




iPad: QR kods login efter du tryckt på

Logga in med TakeCare
QR-kod

Inne i TakeCare på PC:

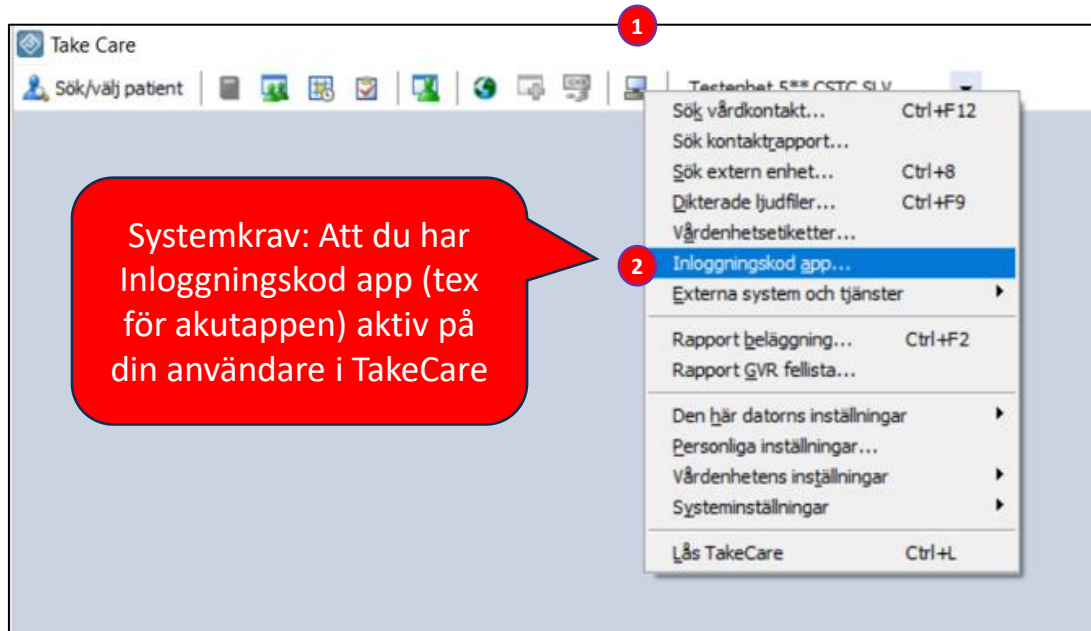

Använd PIN 2 för Underskrift.
På SITHS kortet finns PIN 1 för Inloggning
och PIN 2 för Underskrift

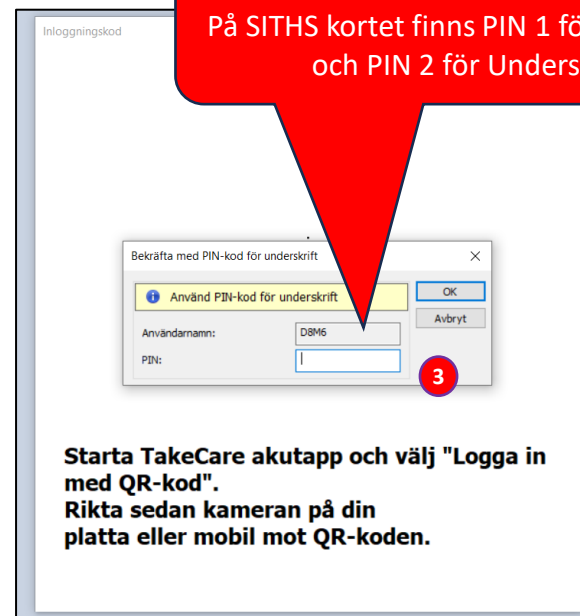


4. Starta TakeCare akutapp och välj "Logga in med QR-kod".
Rikta sedan kameran på din platta eller mobil mot QR-koden.

1. Välj TakeCare Systemmeny (PC ikonen) inne i TakeCare på din egen inloggning
2. Välj Inloggningskod app...
3. Mata in din PIN kod för **signering (=PIN2)**
Notera att du kan välja att ändra din SITHS PIN2 till något du kommer ihåg. Det görs inte inne i SwipeCare.
4. Fota QR koden med SwipeCare iPad
5. VIPS, så är du inne i SwipeCare



iPad: Välj din egen Personliga PIN


Välj och upprepa din personliga PIN

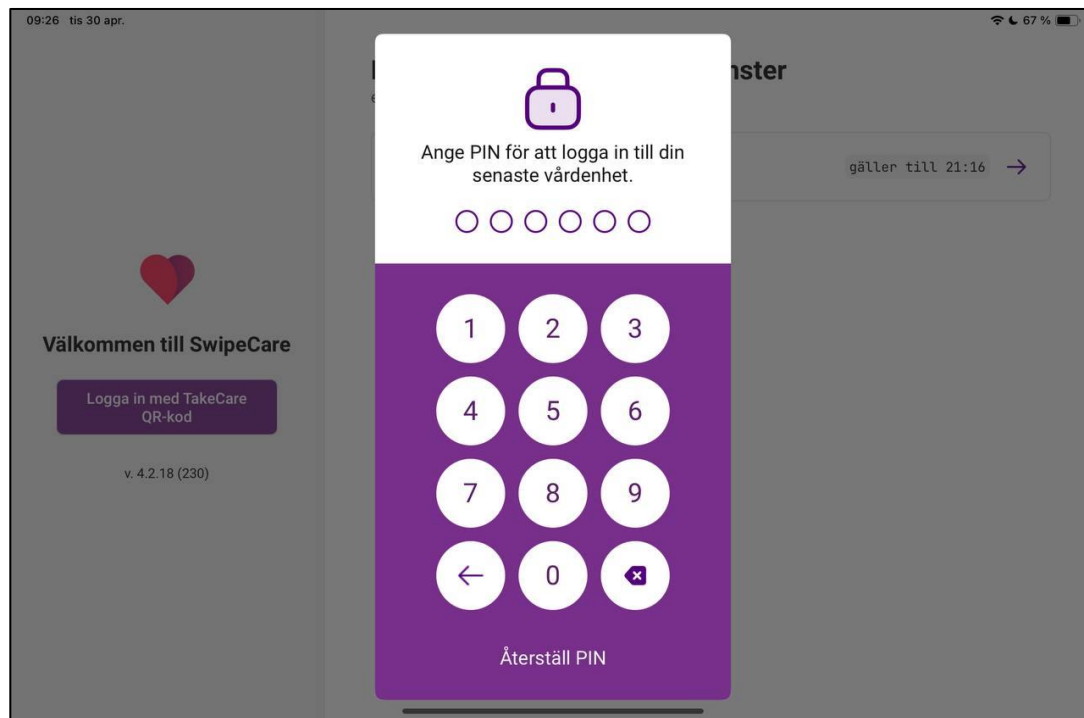

- **VIKTIGT:** Den PIN du väljer ska vara personlig. Den är kopplad till ditt HSA ID som används av SwipeCare för att skriva/läsa mot TakeCare.
- Denna PIN använder du för att låsa upp SwipeCare från standbyläge (under giltig TakeCare session). Er IT kan ha autostandby på en viss tid, varefter PIN måste användas för att fortsätta arbeta.
- Du kan också använda denna PIN för att låsa upp iPaden med din giltiga profil från högersidan på loginsidan.
- Om du har glömt din personliga PIN kan du trycka på "Återställ PIN"
 - Då öppnas automatiskt kameran för att du ska kunna skanna din QR-kod i TakeCare igen. Sen får du välja PIN kod igen.



iPad: Välj vårdenhet

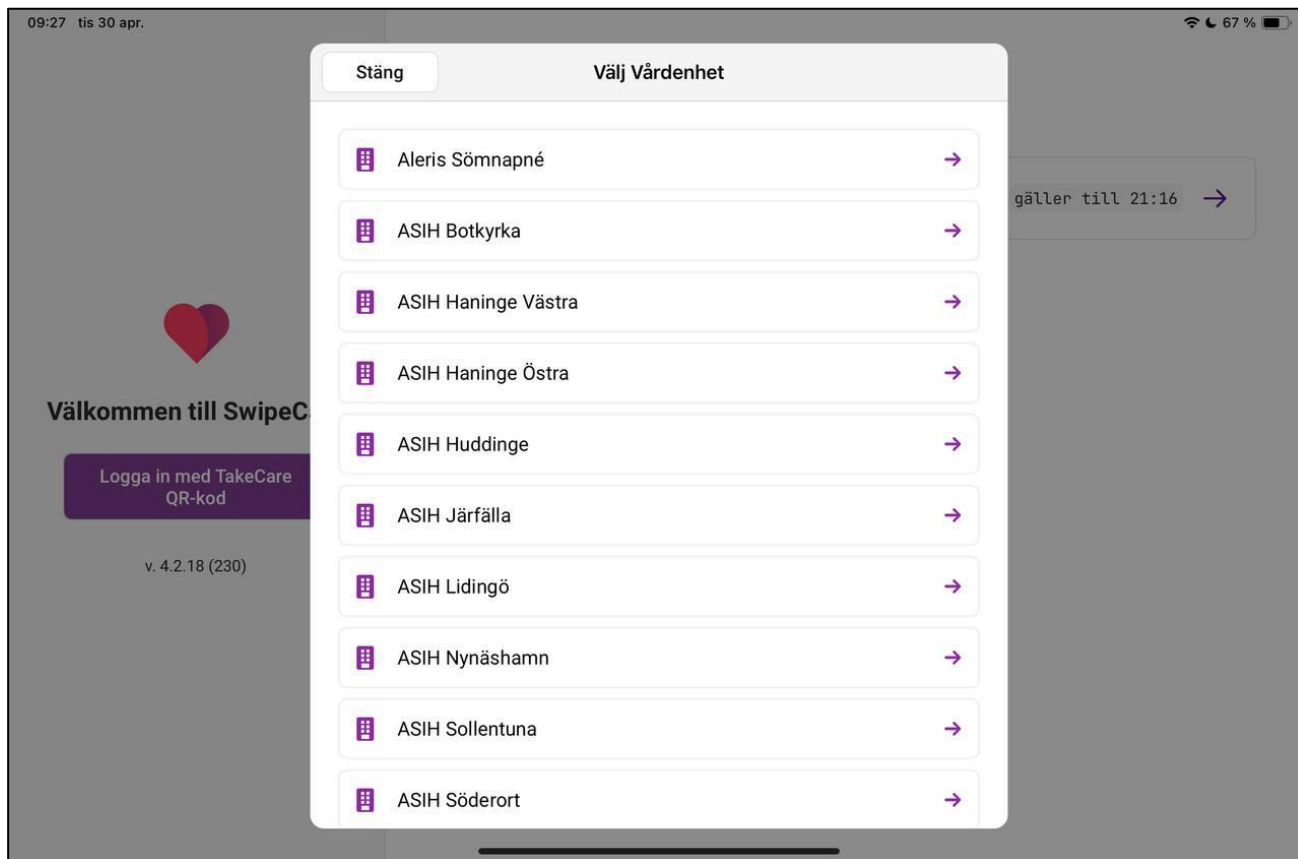

- Om du har access till flera vårdenheter får du välja vårdenhet här

iPad: Vårdenhetens patientlista



4 sista siffror i personnummer maskerade med stjärnor

09:27 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Sök på Namn/Personnr...

Visa Skanna Lägg till

	Nummer	Namn
1:2	19121212-****	Tolvan
2	19500505-****	Linda Testsson
3:1	19500505-****	Pelle Svensson
4:2	18101010-****	Fiktiv Pojke Test
5:2	99201857-****	Barn Under 13 Hd
6	19810107-****	Klas Testsson
7:2	18020202-****	Fiktiv Kvinna
8	19791230-****	Apptest Testperson III
K84 sal 1	19530416-****	Karin Komma
Staffans	99200376-****	Kranksson Kalle
	18040404-****	Fiktiv Flicka
	18121212-****	VRM Tolvan

Omaskerade patienter (utan stjärnor)

09:27 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Sök på Namn/Personnr...

Dölj Skanna Lägg till

	Nummer	Namn
1:2	19121212-1212	Tolvan
2	19500505-0546	Linda Testsson
3:1	19500505-0520	Pelle Svensson
4:2	18101010-1010	Fiktiv Pojke Test
5:2	99201857-5395	Barn Under 13 Hd
6	19810107-9294	Klas Testsson
7:2	18020202-0202	Fiktiv Kvinna
8	19791230-9296	Apptest Testperson III
K84 sal 1	19530416-2349	Karin Komma
Staffans	99200376-5399	Kranksson Kalle
	18040404-0404	Fiktiv Flicka
	18121212-1212	VRM Tolvan

1. Plats: Här läses vårdplats ut från TakeCare. Har en patient blivit tilldelad vårdplats i TakeCare syns det här.
2. Patient som antingen är inskriven men inte tilldelad vårdplats eller patient som manuellt lagts till i SwipeCare.
3. Tid för när listan senast uppdaterats. För att uppdatera drar man listan nedåt, svep neråt.
4. Sökruta för att söka efter patienter. Antingen på namn eller personnummer.
5. Genom att trycka på ögat i höger hörn kan du avmaskera personnumret. Standard är att de 4 sista är maskerade.
6. Här kan du skanna t.ex. streckkod på patientens armband och på så sätt lägga till patienten eller öppna patientens profil. (För t.ex. ökad patientsäkerhet)
7. Genom att trycka på denna knapp kan du manuellt lägga till en patient.

SwipeCare har inte tillgång till spärrad patientinformation. Du kommer alltså inte kunna läsa ut eller skicka information till TakeCare på patienter med låst journal.




iPad: Vårdenhetens patientlista



1. Viktigt att kolla på "Senast uppdaterad" där det indikeras om du behöver uppdatera patientlista. Detta gör du genom att svepa patientlistan neråt. Efter 12 timmar blir texten röd för att det ska vara tydligt för användaren att listan bör uppdateras.



iPad: Addera patienter

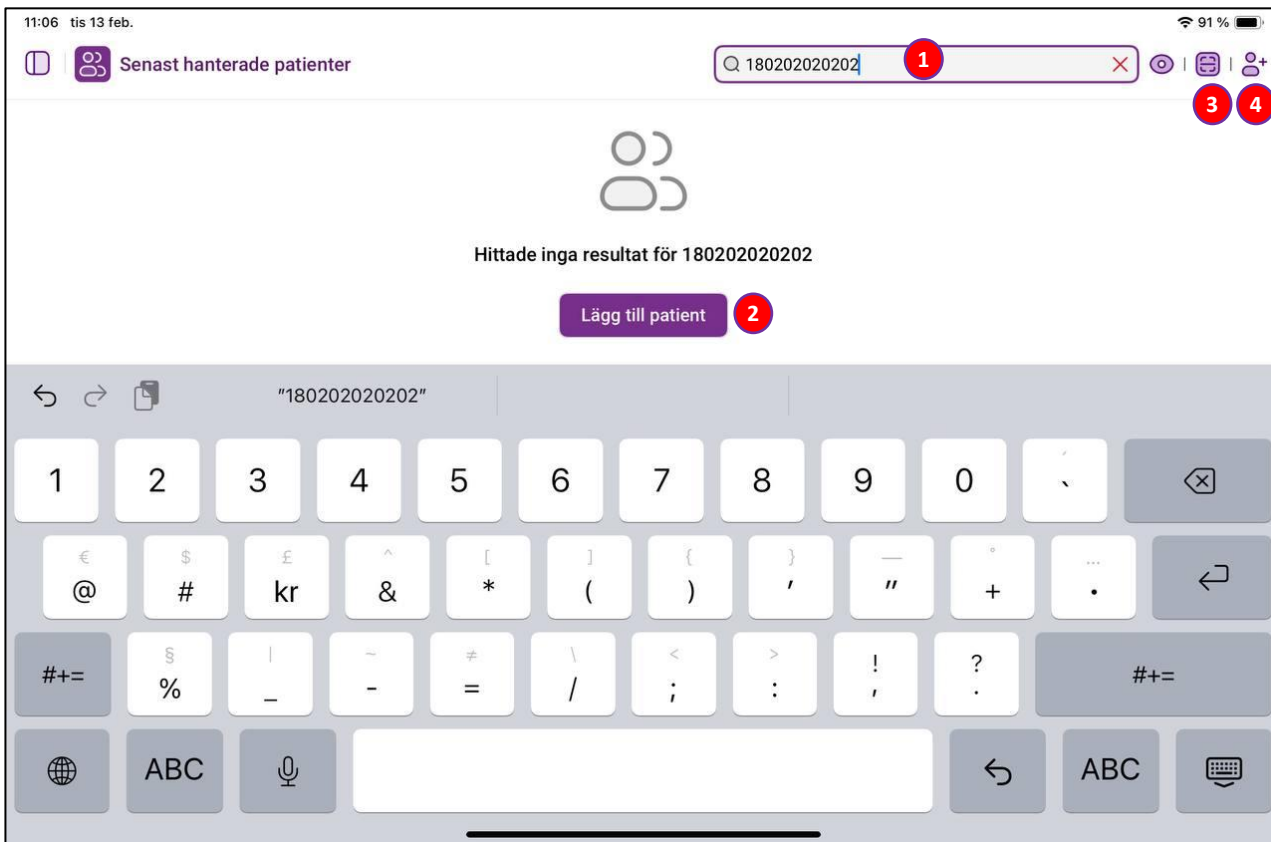

1. Sök patient (i SwipeCare systemet) på personnummer
2. "Lägg till patient": Om SwipeCare inte hittar patienten i sitt system så trycker du på den **lila knappen** för att addera patienten med det nummer du skrev i sökfältet.
3. Addera patient genom att scanna streckkod/QR kod
4. Addera patient manuellt



iPad: Lägg till ny patient

iDappen 17:51 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer T.ex. 1912121212 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn E-post

SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2

Postnummer Stad

Lägg till patient

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer 19750806-8413 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn App Testperson X E-post T.ex. namn.namn@mail.com

Lägg till patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 å

q w e r t y u i o p

@ # kr & * () ' " + .

a s d f g h j k l ö ä

↑ % _ - = / ; : ! ?

123

Personnummer Reservnummer

1804040404

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn Tolvan Tolvanesson E-post

SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2


Postnummer Stad

Lägg till patient

- Patientid och namn är obligatoriska uppgifter.
- Om ni har funktionen SPAR, så läggs namnet till automatiskt
- Vid journalskrivning förs endast patientid över till TakeCare, som lägger till namnet själv.



iPad: Vårdenhetens patienter

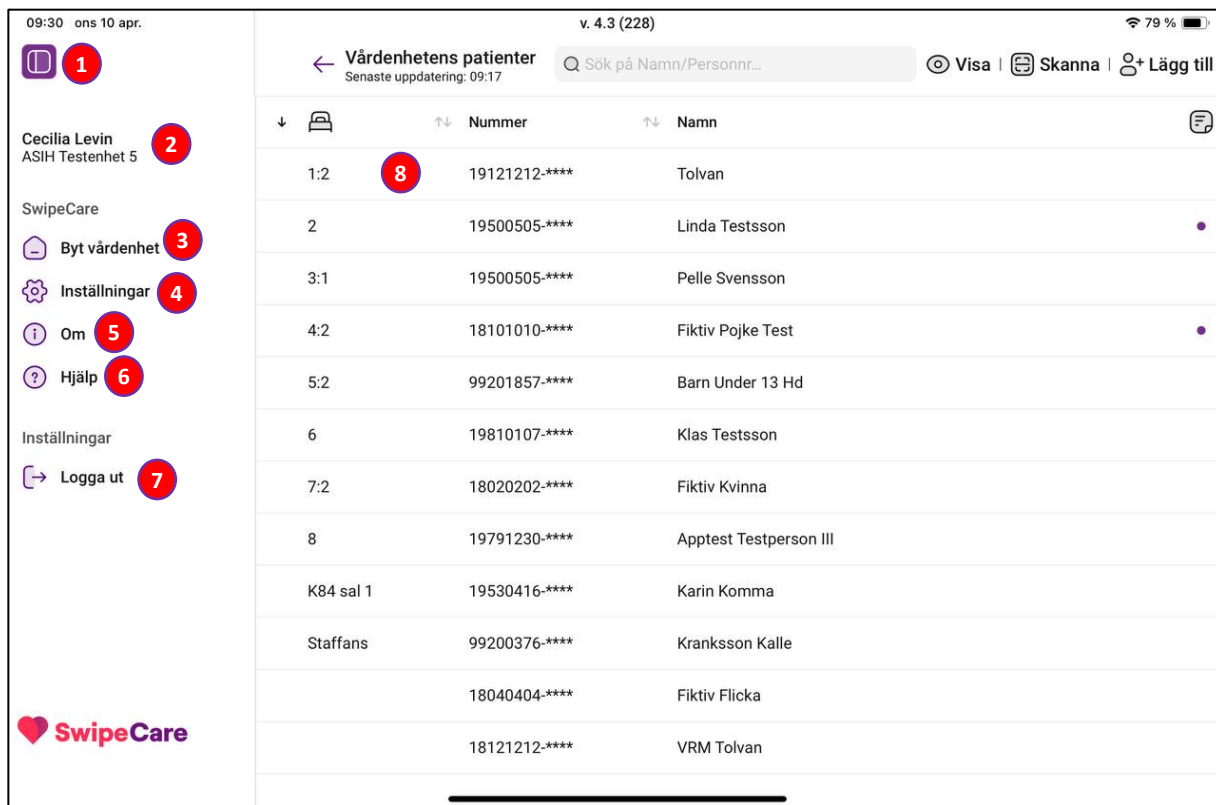

1. Öppna/stäng menyn (kommer in från vänster).
2. Du ser användare och vårdenhet
3. **Byta vårdenhet** (om du har behörighet i SwipeCare till flera)
4. **Inställningar**. Idag finns dessa:
 - Skicka teknisk information (för felspårning)
 - Se vilket backend system iPaden är kopplad mot.
5. **Om**, berättar om systemet
6. **Hjälp** leder till hjälpsidan på internet. Du kan nå den sidan från en dator också.
7. **Logga ut**
8. Klicka på en patientrad för att öppna patientens profil



iPad: Arbetslista i patientlistan, Notiser

09:31 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Sök på Namn/Personnr...

Visa Skanna Lägg till

↓	↑↓ Nummer	↑↓ Namn	
1:2	19121212-****	Tolvan	3
2	19500505-****	Linda Testsson	4
00505-****	Pelle Svensson		1 2 Fäst Notiser Ta bort
4:2	18101010-****	Fektiv Pojke Test	
5:2	99201857-****	Barn Under 13 Hd	
6	19810107-****	Klas Testsson	
7:2	18020202-****	Fektiv Kvinna	
8	19791230-****	Apptest Testperson III	
K84 sal 1	19530416-****	Karin Komma	
Staffans	99200376-****	Kranksson Kalle	5 6 7
	18040404-****	Fektiv Flicka	Lösgör Notiser Ta bort
	18121212-****	VRM Tolvan	

Arbetslista - "Fäst" dina patienter högst upp i patientlista

1. Slep patienten åt vänster
2. Välj Fäst
3. Patienten stannar högst upp i din lista, på **denna** iPad.
 - Om du loggar ut och in igen stannar Fästa patienter i din arbetslista
 - Om du tar en annan padda får du skapa din arbetslista på nytt.
4. Notiser. Har patienten en notis, så syns det som en prick.
5. Lösgör: Patienten är inte fäst längre
6. Här kan du också läsa/skapa notiser på patient.
 - OBS: Notiser journalförs inte i TakeCare.
7. Ta bort: Ta bort patienten från patientlistan

iPad: vänster ram innehåller generell information om patienten, den är synkad med web portalen



12:35 ons 22 maj v. 4.3 (246) 28 %

Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Uppgifter Att göra Mer 5

Sök i patientinfo

Uppgifter
Senaste uppdatering: 12:34 NYTT

Allmän information 1

Patientnamn
Fiktiv Kvinna

Personnummer 18020202-0202 Kön Kvinna Ålder 222

Email
fredrik.eriksson@strikersoft.com

Telefonnummer
-

☒ Tillåt e-post-aviseringar

☒ Tillåt SMS-aviseringar

Adressinformation 1
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter 1
Hantera etiketter

Göm 3
Lägg till en ny notis eller se historik

Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din vårdenhet har valt att visa av:

- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden

Telefonnummer 4

123455789

Avbryt Spara

12:04 ons 22 maj v. 4.3 (246) 28 %

Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Uppgifter Att göra Mer 5

Sök i patientinfo

Uppgifter
Senaste uppdatering: 12:03

Allmän information Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter Hantera etiketter

Notiser Lägg till en ny notis eller se historik +

Dokumentation 5

Diagnoser

Läkemedel

Mätvärden

Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din vårdenhet har valt att visa av:

- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden

Göm 3

1. Kollapsa/expandera informationen med pilen.
2. Skriv en notis på patienten, den journalförs inte.
Notisen kan också ses i patientlistan om du sveper patienten åt vänster.
3. Göm/ta fram sidopanelen med "Göm". Röda horisontella pilen återställer sidopanelen.
4. Radera en patients registrerade telefonnummer om det inte stämmer, raderas bara i SwipeCare-systemet.
5. Kollapsbar meny där man hittar SwipeRead.



iPad: Uppgifter - Starta & välj formulär (=mall)

The left screenshot shows the 'Uppgifter' app interface for a patient named 'Fiktiv Kvinna'. The top bar includes a search icon, a back arrow, the patient name, and a date '13:28 3 2 maj'. The main content area has a large 'NYTT' button circled in red and labeled '1'. Below it, there is a list of items under 'Mer'.

The right screenshot shows a modal window titled 'Alla tillgängliga formulär'. It contains a search bar and a list of forms. The first item, 'Arabiska: Omvårdnadsstatus 1.4.5', is circled in red and labeled '2'. The list also includes 'Arbetssterapeututredning 1.0.0', 'Bedömd enl NVP 2D (Palliativ vård i sent skede) SPSV 0.4.2', 'Bedömd enl NVP 2D (Palliativ vård i sent skede), ASIH 0.1.2', 'Dietistanteckning 1.1.1', and 'Egenvårdsbedömning 1.0.0'.

1. Starta en mall på lila knappen "NYTT"
2. Välj eller sök formulär (=Mall)
3. Tryck på tillbakapilen för att komma tillbaka till hela patientlistan



iPad: Uppgifter - Skapa journalanteckning

1. Fyll i formuläret (=mallen)
2. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
3. Skicka till TakeCare (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka).
4. Välj datum och tid för anteckningen. Automatiskt blir det dagens datum och tid, men du har möjlighet att välja ett tidigare datum och tid. Den tiden du väljer blir det i TakeCare, men den blir signerad med nutid.



iPad: Uppgifter - Registrera mätvärden

15:23 mån 11 mars v. 4.3 (215) 77%

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter Att göra Mer

Inskrivningsanteckning 0/4

Allmänna uppgifter 0/11

Smittanamnes 0/3

Preoperativ förberedelse 0/16

Omvårdnadstatus 0/10

Andningsfrekvens

1

Kommentar: 2

Pulsfrekvens

Kommentar:

Syremättnad

Kommentar:

Syrgas, NEWS

Mer nedan 3

11:05 tis 13 feb. 77%

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter Att göra Mer

Jouranteckning

Innehållsförteckning

Jouranteckning läk ASIH/SPSV Fyll i journalanteckning

4 Skicka till TakeCare

Stäng SwipeCare Ja

5 Skicka in anteckning? februari 13, 2024 11:01

Skicka datum och tid

lör 10 feb.	08	08
sön 11 feb.	09	59
mån 12 feb.	10	00
idag	11	01
ons 14 feb.	12	02
tors 15 feb.	13	03
fre 16 feb.	14	04

Oplanerat hembesök



Telefonkontakt med patient

Telefo Mer nedan patient

1. Fyll i formuläret (=mallen). Fält för mätvärde.
2. Om inget mätvärde har fyllts i så kan man inte skriva en kommentar.
3. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
4. Skicka till TakeCare (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka).
5. Välj datum och tid för anteckningen. Automatiskt blir det dagens datum och tid, men du har möjlighet att välja ett tidigare datum och tid. Den tiden du väljer blir det i TakeCare, men den blir signerad med nutid.





iPad: Uppgifter – Bekräftelse på importerad anteckning/mall

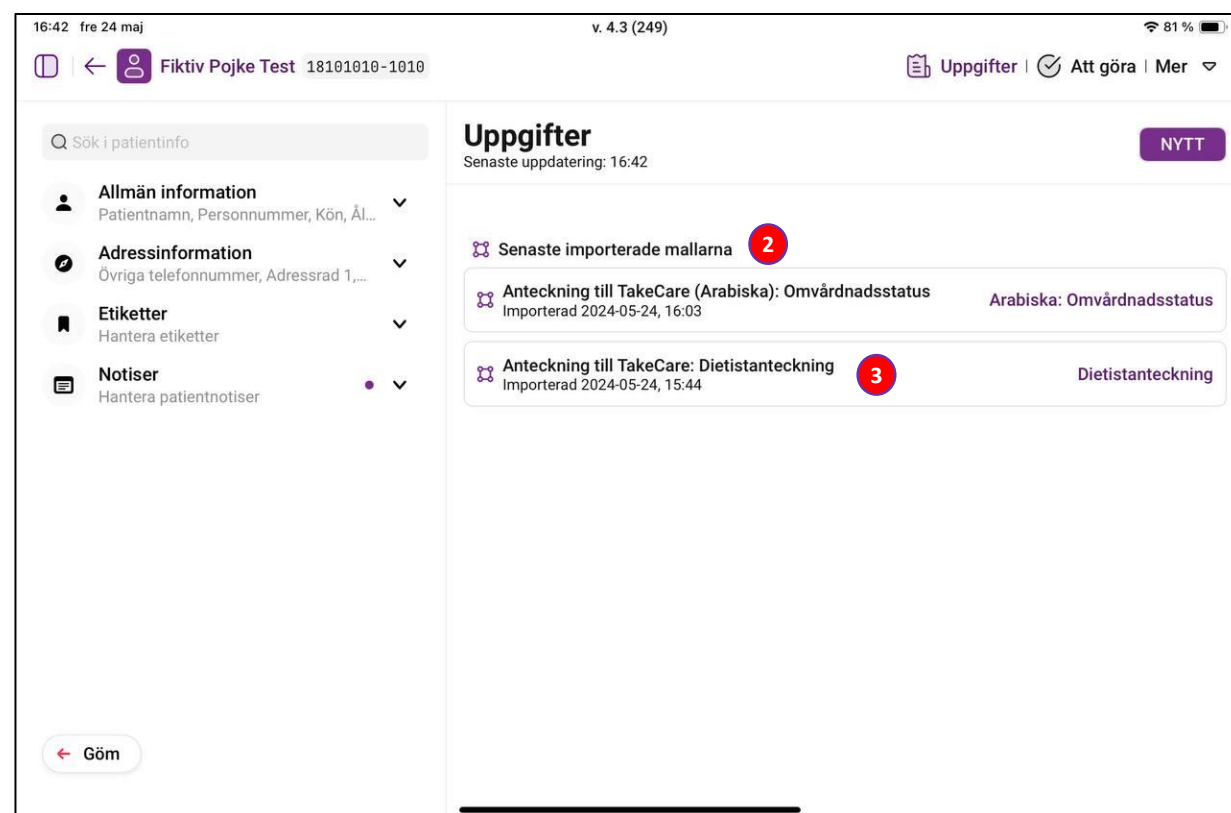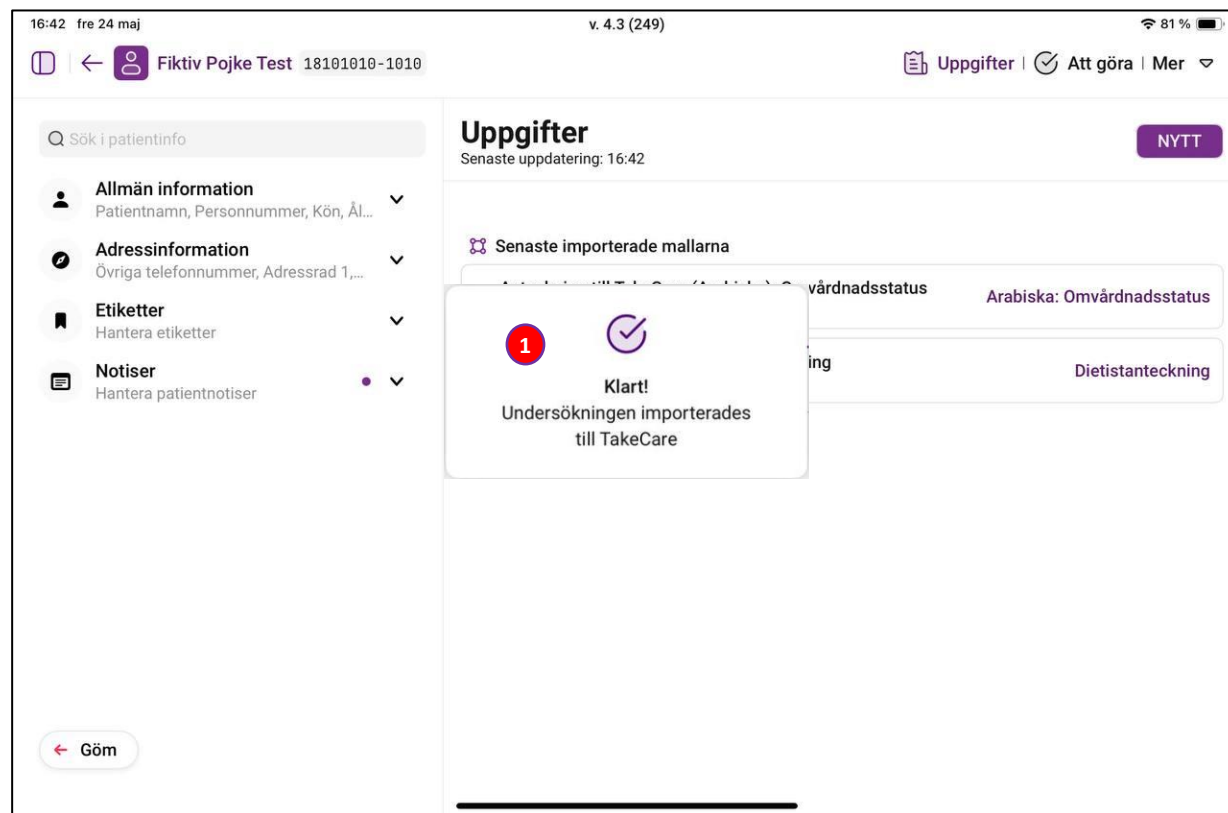

1. När en mall har importerats till TakeCare kommer denna popup upp i ca 5 sekunder. För att stänga den så klickar du på den.
2. Lista på de 10 senast importerade mallarna de senaste 24 timmarna.
3. Namnet på mallen samt information om att mallen har importerats inklusive datum och klockslag.

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)

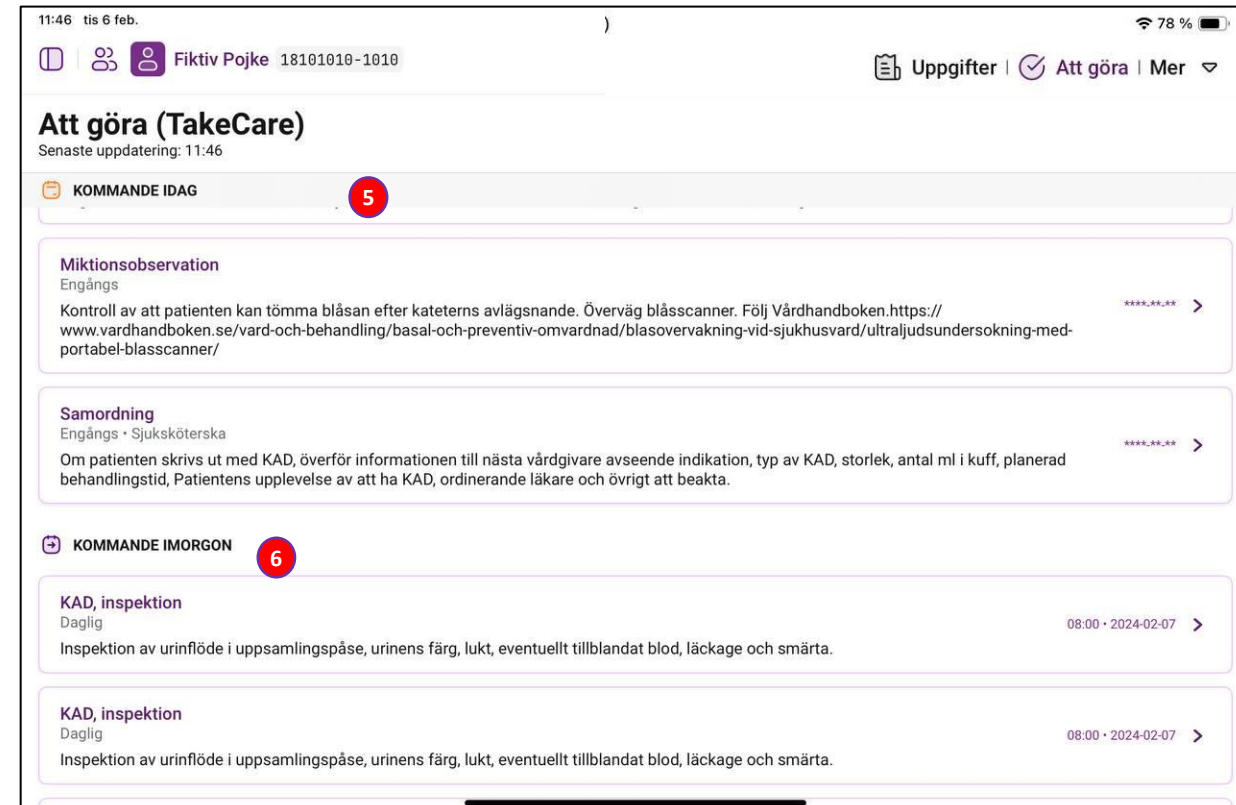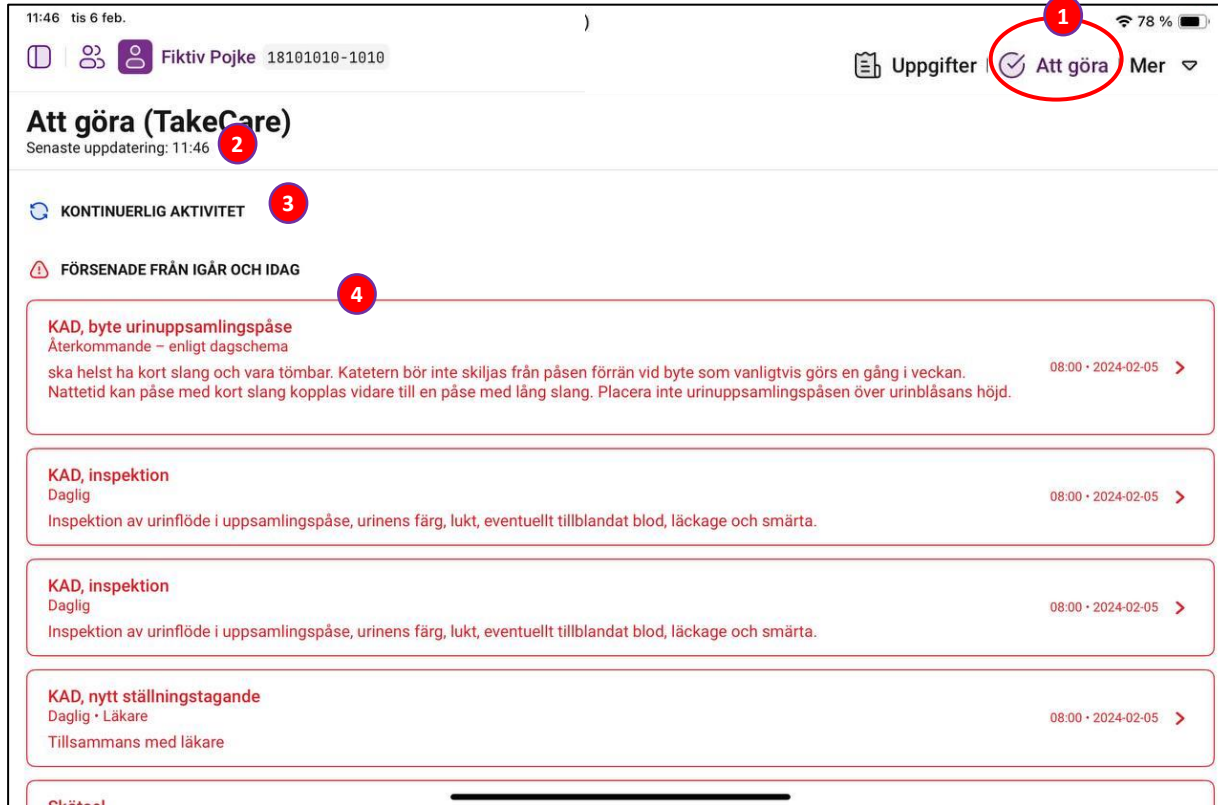

1. Menyval: Att göra
2. Senaste uppdatering.
För att uppdatera utläsningen, svep nedåt
3. Kontinuerliga aktiviteter: klarmarkeras aldrig
4. Försenade från igår och idag: Försenade aktiviteter som har försenad planerad tid i rött
5. Kommande idag: Dagens aktiviteter
6. Kommande imorgon: Morgondagens planerade aktiviteter

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)



11:35 tis 6 feb. Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 11:34

FÖRSENAD

KAD, nytt s
Daglig • Läk
Tillsamman

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdha...

KOMMAN

KAD, inspe
Daglig
Inspektion s

KAD, inspe
Daglig
Inspektion av urinflöde i uppsamlingspåse, urinens färg, lukt, eventuellt tillblandat blod, läckage och smärta.

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdhandboken.

11:34 tis 6 feb. Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 11:34

FÖRSENAD

KAD, nytt s
Daglig • Läk
Tillsamman

Skötsel
Daglig
Om nedsatt

KOMMAN

KAD, inspe
Daglig
Inspektion s

KAD, inspe
Daglig
Inspektion av urinflöde i uppsamlingspåse, urinens färg, lukt, eventuellt tillblandat blod, läckage och smärta.

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdhandboken.

1. Utförd nu: Aktiviteten får nuvarande tid registrerad i TakeCare
2. Utförd tidigare: Om aktiviteten utförts tidigare kommer du till 4:an.
3. Ej utförd: Om aktiviteten ej ska utföras/utförts kommer du till 5:an
4. Välj datum och tid när aktiviteten utförts, klicka sen på Godkänn. Detta datum och tid registreras i TakeCare.
5. Lämna kommentar (vid behov) om varför aktiviteten ej utförts och klicka på godkänn.

11:35 tis 6 feb. Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 11:34

FÖRSENAD

KAD, nytt s
Daglig • Läk
Tillsamman

Skötsel
Daglig
Om nedsatt

KOMMAN

KAD, inspe
Daglig
Inspektion s

KAD, inspe
Daglig
Inspektion av urinflöde i uppsamlingspåse, urinens färg, lukt, eventuellt tillblandat blod, läckage och smärta.

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdhandboken.

Läsa TakeCare



12:04 ons 22 maj v. 4.3 (246)

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Sök i patientinfo

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
Lägg till en ny notis eller se historik

Uppgifter
Senaste uppdatering: 12:03

Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din vårdenhet har valt att visa av:

- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden

Uppgifter | Att göra | Mer

Dokumentation
Diagnoser
Läkemedel
Mätvärden

1. "Läsa TakeCare" moduler

- Dokumentation
- Diagnoser
- Läkemedel
- Mätvärden

Göm



iPad: Dokumentation – Välj utläsning från TakeCare

SwipeCare stödjer Journalfilter enligt Sammanhållen journalföring, så du väljer ditt urval. Dessutom tidsperiod för utläsning. Går du utanför din spärrgrupp får du logga patients medigvande eller Kritisk situation. Läkemedelslistan är undantaget från journalfilter, du ser från alla vårdenheter i hela TakeCare

12:13 tis 13 feb. 76 %

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter | Att göra | Dokumentation

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" 1 Filter

Dokumentation

Senaste uppdatering: 12:13

Sök dokument på namn Filter

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV 2

Aleris Palliativ avd Handen

Systemförvaltare Mia Hägglöf

Skapad (datum): 2024-02-05 13:14

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV

Aleris Palliativ avd Handen

Systemförvaltare Mia Hägglöf

Skapad (datum): 2024-02-05 12:08

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV

Aleris Palliativ avd Handen

Palliativt vårdbehov

Bedömning

Bedömning var 4:e tim enligt NVP 2D, (Nationell vårdplan för palliativ vård).

Smärta enl IPOS

Måttligt

Påverkat ansiktsuttryck Spänd och orörlig

Smärta

Vidbehovs läkemedel enligt ordination Lägesändring

Andnöd enl IPOS

1. Standard journalfilter utläsning är "Egna spärrgruppen" och tidsperioden är "Senaste månaden". För att ändra journalfilter trycker du på den orangea flaggan.
2. Här ser du journalanteckningar för patienten, scrolla neråt för att se fler. Klicka på kortet för att kunna läsa anteckningen till höger



iPad: Dokumentation – Välj utläsning från TakeCare

The screenshots illustrate the following steps:

- Journalfilter:** A popup menu is shown with options: 'Egna vårdenheten', 'Egna spärrgruppen', 'Alla vårdgivare', and 'Detaljerad filtrering'. The 'Alla vårdgivare' option is highlighted with a red circle 1.
- Välj patientmedgivande:** A popup menu is shown with options: 'Registrera patientmedgivande', 'Kritisk situation', and 'Smärta'. The 'Registrera patientmedgivande' option is highlighted with a red circle 2.
- Välj tidsperiod:** A popup menu is shown with options: 'Visa senaste veckan', 'Visa senaste månaden', 'Visa senaste halvåret', 'Visa senaste året', and 'Datumväljare'. The 'Visa senaste veckan' option is highlighted with a red circle 3.
- Filtrering på "Egen spärrgrupp":** The main screen shows a list of documents. The filter bar at the top is orange, indicating the 'Egen spärrgrupp' filter is active. A red circle 4 is on the filter bar.
- Läs journalanteckningar:** A document is selected, showing details for 'test49 KVR' by 'Sollentunager avd51 Capio'. The document is highlighted with a red circle 5.

1. Vill du ha en annan filtrering klickar du på den orangea flaggan och då får du välja "Journalfilter" i en popup.
2. Väljer du "Alla vårdgivare" måste du registrera patientmedgivande
3. Välj tidsperiod du vill se anteckningar för
4. När du går ifrån filtrering på "Egen spärrgrupp" blir flaggan lila. Här kan du trycka igen för att ändra journalfilter.
5. Här kan du välja och läsa journalanteckningar för patienten





iPad: Dokumentation – Välj patientmedgivande

1. "Registrera patientmedgivande": Behöver du läsa journaler utanför din spärrgrupp behöver du registrera samtycke. Trycker du på "Registrera patientmedgivande" kommer till steg 3.
2. "Kritisk situation": Här klickar du om patienten t.ex. är medvetslös och ej kan ge samtycke men det bedöms vara av ytterst vikt att kunna se journaler från alla vårdgivare. Samtycket gäller endast under det tillfället du läser ut information. Sen kommer du till steg 4.
3. "Välj från kalender": Här behöver du välja hur länge patientsamtycket gäller. Den ställer sig automatiskt 1 månad framåt.
4. "Välj tidsperiod": Här väljer du tidsperiod du vill filtrera på.



iPad: Mätvärden – Välj utläsning från TakeCare

I SwipeCare can du läsa mätvärden och använda olika Journalfilter, samt även läsa ut mätvärden inskickade via Mätvärdesmallar eller via Journaltext.

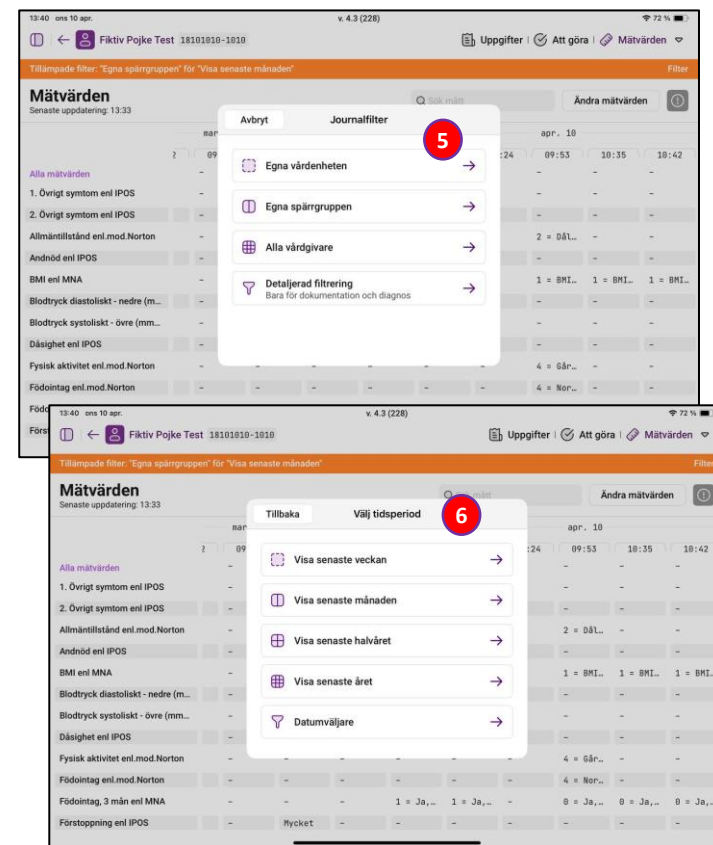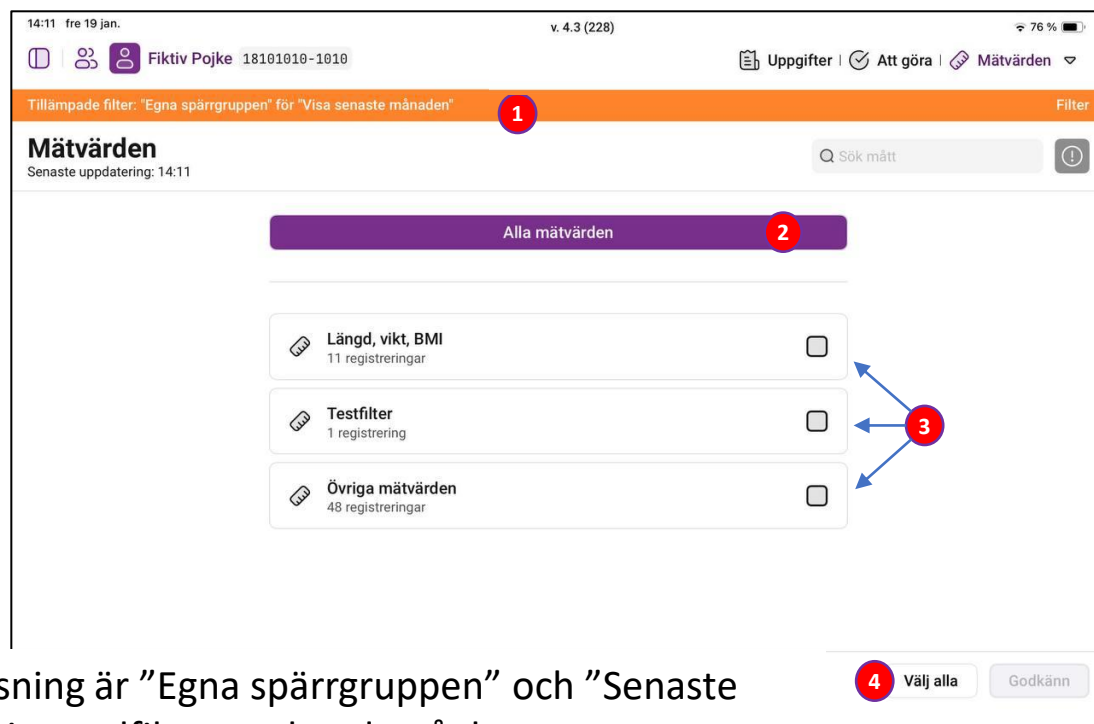

1. Default journalfilter utläsning är "Egna spärrgruppen" och "Senaste månaden". För att ändra journalfilter trycker du på den orangea bannern och kommer till steg 5 & 6
2. Alla mätvärden: ofiltrerat, läser ut alla mätvärden i bokstavsordning oavsett filtrerade eller ofiltrerade. Väljer du "Alla mätvärden" kommer du direkt till utläsningen
3. Välj mätvärdesfilter: Specifika filter som enheten har valt att skapa
4. Välja alla: Klickar du här så väljer du alla filter ovan.
5. Journalfilter: Välj journalfilter
6. Välj tidsperiod: Tidsperiod för utläsning



iPad: Mätvärden – Utläsning av "Alla mätvärden"

SwipeCare läser nu ut mätvärden. Nedan ser du ofiltrerade och filtrerade mätvärden i samma vy.

10:52 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 10:46

Sök mått Ändra mätvärden

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Alla mätvärden	14:09	15:57	15:58	09:46	11:55	15:49
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	-
BMI	-	-	19	-	-	-
BMI enl MNA	-	1 = BMI...	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	-	-	-	110	110	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	-	-	-	-	110	100
Kontakttyp	a...	-	-	-	-	-
Längd (cm)	-	-	158	-	80	-
Läppar enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-
Medvetandegrad, NEWS2	-	-	-	-	-	V = rea...
Midjemått (cm)	-	-	-	-	-	-
Nasogastrisk sond, inspektion	-	-	-	-	-	Komplik...
Protes enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-

11:00 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 10:57

Andn Andn Ändra mätvärden

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	-

	22	feb. 26		7	mars		13	mars		
	1	11:30	11:33	15:58	09:33	09:41	10:00	11:24	14:41	15:20
Alla mätvärden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andningsfrekvens (andetag/min)	5	45	50	45	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (mmHg)		89	89	90	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mmHg)		110	110	110	-	-	-	-	-	-
Kroppstemperatur (°C)		37	37	37	-	-	-	-	-	-
Medvetandegrad, NEWS2	t...	Alert	C = nyt...	Alert	-	-	-	-	-	-
Pulsfrekvens (slag/min)		89	99	89	-	-	-	-	-	-
Smärtintensitet enl NRS		-	-	-	6	1	7	9	2	0
Syremättnad (%)		99	97	99	-	-	-	-	-	-

1. Översikt av Alla mätvärden (ofiltrerade OCH filtrerade i detta fall). Sorterade i bokstavsordning. Senast registrerade mätvärden längst till höger på skärmen.
2. Sökruta för att söka efter specifika värden
3. "Ändra mätvärden": Klicka här för att komma tillbaka till mätvärdesfiltrerna.
4. Klicka här för mer information om utläsningen
5. Du kan "highlighta" ett eller flera mätvärden genom att klicka på dem. För att ta bort markeringen klickar du en gång till på mätvärdet.
6. En popup med information om begränsningar i utläsningen. För att stänga klicka på "Jag förstår".

12:32 tis 13 feb. Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Dokumentation | Diagnoser | Läkemedel | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 12:32

Sök mått

	29 jan	30 jan	31 jan	1 feb	2 feb	3 feb	5 feb
Alla mätvärden	01:07	12:08	13:14				
1. Övrigt symtom enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-
2. Övrigt symtom enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-
Allmäntillstånd enl.mod.Norton	-	-	-	-	-	-	-
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	-	-
Andnöd enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-
BMI enl MNA	-	-	-	-	-	-	-
Begärda bolusdoser, intravenös...	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	-	-	-	-	-	-	-
Dåsighet enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-
Fysisk aktivitet enl.mod.Norton	-	-	-	-	-	-	-
Födointag enl.mod.Norton	-	-	-	-	-	-	-

6

!

Läkemedelslistan får endast användas som komplement vid iordningställande och administrering av läkemedel.

Läkemedel som är spärrade hos annan vårdgivare syns inte på läkemedelslistan.

OBS: SwipeCare visar inte uträknade mätvärden vid dagsläget

Jag förstår



iPad: Mätvärden – Kommentarer

13:09 tis 13 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden
Senaste uppdatering: 13:09

Sök mått Ändra mätvärden

	12 feb. 13	09:29	08:01	09:06	09:12	09:39	09:46	09:50	10:06	11:00
Begärda bolusdoser, intratekal l...	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
Begärda bolusdoser, intravenös...	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Benomfång	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Benämning enl MoCA (/ 3 poäng)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berättat för närstående om sitt...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Blåsvolym före blåstömning, sc...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blåsvolym vid KAD-behandling,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolusdos. epidural läkemedelso...	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-

13:09 tis 13 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden
Senaste uppdatering: 13:09

Sök mått Ändra mätvärden

	12 feb. 13	09:29	08:01	09:06	09:12	09:39	09:46	09:50	10:06	11:00
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benomfång	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Benämning enl MoCA (/ 3 poäng)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berättat för närstående om sitt...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Blåsvolym före blåstömning, sc...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blåsvolym vid KAD-behandling,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolusdos. epidural läkemedelso...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MÄTVÄRDE: 30
KOMMENTAR: ar

30

6

110

34

v. 4.3 (246)

27 %

Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden
Senaste uppdatering: 13:32

Sök mått Ändra mätvärden

	2 maj 7	08:19	08:19	08:21	08:21	12:53	14:46	14:47	15:00	15:53
Alla mätvärden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andningsfrekvens (andetag/mi...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andnöd enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
CGI - förändring efter behandlin...	-	-	-	2 = "H...	-	-	-	-	-	-
CGI - sjukdomens svårighetsgr...	3 = "Li...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dålig aptit enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inte a...
Illamående enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Måttligt
Kontakttyp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kroppstemperatur (°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Kräkningar enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Värsta...
Medvetandegrad, NEWS2	t...	-	-	-	-	-	-	-	-	-


MÄTVÄRDE: 110
KOMMENTAR: Kommentar för detta mätvärde kan läsas via journaltext.

110



1. Lila ifylld cirkel betyder att det finns en kommentar som tillhör mätvärdet inskickat via mätvärdesmall.
2. Tom lila cirkel betyder att det finns en kommentar som tillhör mätvärdes inskickat via journaltext.
3. Klickar du på mätvärde med lila ifylld cirkel kan du läsa kommentar
4. Klickar du på tom lila cirkel kommer du få information om att kommentaren kan läsas i journaltext



iPad Mätvärden – Förinställda filter och ofiltrerade mätvärden

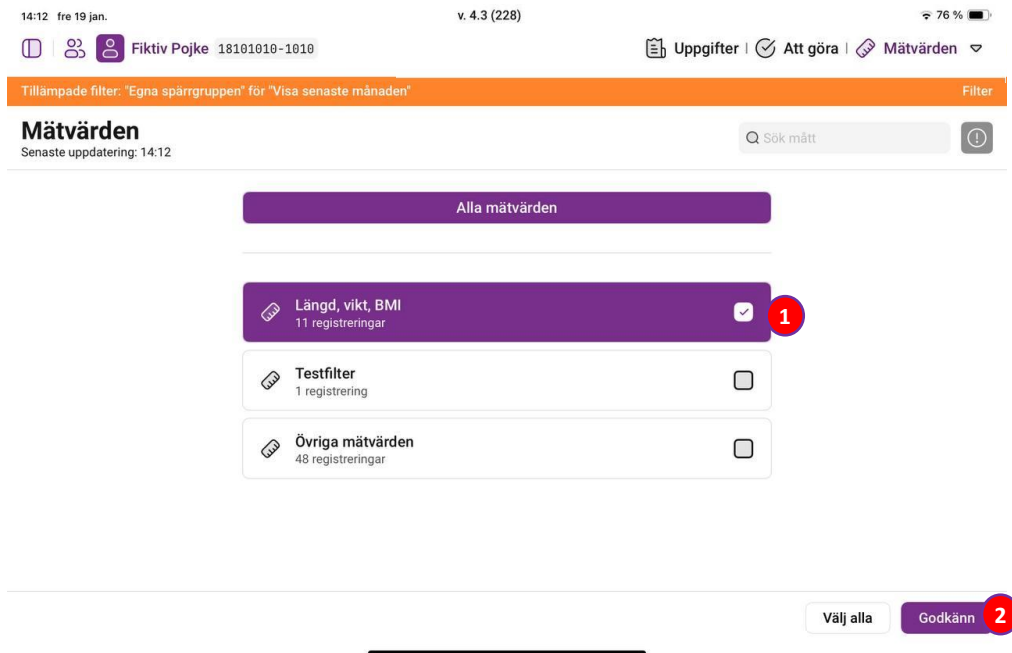

1. "Längd, vikt, BMI": Filter skapat av enheten
2. "Godkänn": DU behöver klicka på denna knapp för utläsning av valda filter
3. Utläsning av filtret "Längd, vikt, BMI"
4. Mätvärden med en prick har en kommentar som man kan öppna
5. "Övriga mätvärden": Ofiltrerade mätvärden

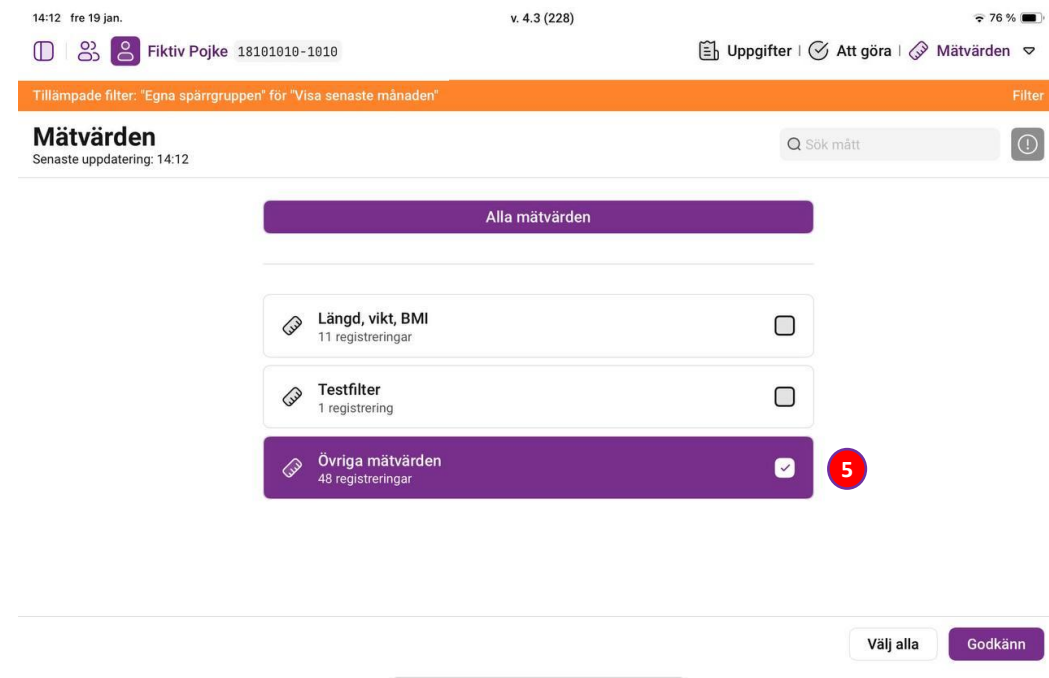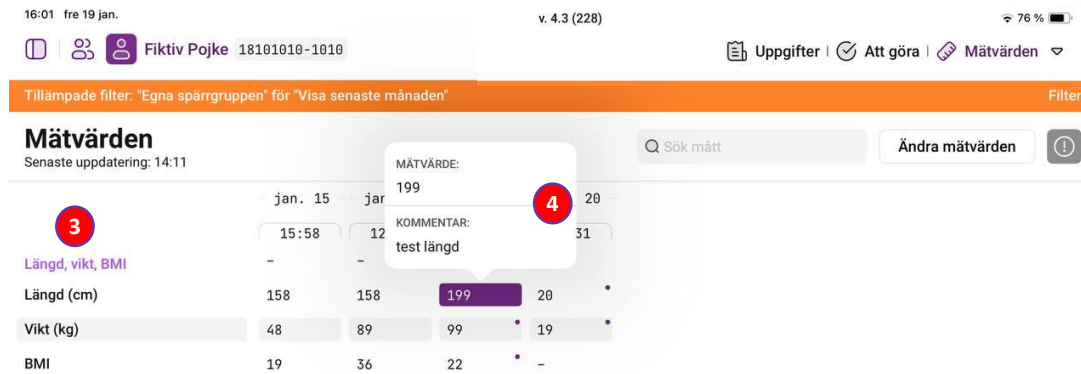



iPad: Diagnoser (Huvuddiagnoser)

19:47 lör 16 sep. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Kvinna 18020202-020

Uppgifter | Att göra | Diagnoser ▾

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "hela tidsperioden" Filter

Diagnoser

Senaste uppdatering: 19:44

Diagnoser	Kod	Registrerad	Senast uppdaterad	Kronisk
Essentiell hypertoni	I109	2023-09-15	2023-09-15	
Misstänkt cannabissyndrom	F129	2023-09-13	2023-09-13	
Akut stressreaktion	F430	2023-09-06	2023-09-06	
Reaktion på svår stress, ospecificerad	F439	2023-09-06	2023-09-06	
Irritabilitet och vrede	R454	2023-09-06	2023-09-06	
Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget	R458	2023-09-06	2023-09-06	
Ångesttillstånd, ospecificerat	F419	2023-09-06	2023-09-06	
Icke-organisk sömnstörning, ospecificerad	F519	2023-09-06	2023-09-06	
Smärta eller värk, ospecificerad	R529	2023-09-06	2023-09-06	
Sömnstörning, ospecificerad	G479	2023-09-06	2023-09-06	



iPad: Läkemedelslistan med ordination

Senast signerad	Vårdenheten	Preparat	Styrka	Adm. väg	Typ	Adm. Inst.	Dagens dosider
2021-12-15	Testenhet 5** CSTC SLV	Madopar Quick mite	50 mg/ 12,5 mg	Oralt	Sch	-	Enl schema
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Morfin Meda	10 mg	Oralt	Vb	+	
2022-05-18	Testenhet 5** CSTC SLV	Waran	2.5 mg	Oralt	Rb	-	20:00 - 3 st
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Losartan Actavis	100 mg	Oralt	Rb	-	?
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Betolvidon	1 mg	Oralt	Rb	-	?

1. Välj att se aktuella läkemedel på egna/alla vårdenheter eller alla läkemedel inkl. utsatta sådana
2. Se när läkemedlen lästes ut, svep nedåt i fönstret för att uppdatera listan

Klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

Kolumnerna betyder:

3. Senast signerad
4. På vilken vårdenhet är det signerat
5. Läkemedlets namn
6. Styrka
7. Administrationsväg
8. Typ
9. Administrationsinstruktioner
10. Dagens dosider
11. Information om begränsningar
12. Stäng SwipeRead, återgå till patientprofilen



iPad: Läkemedelslistan / Läkemedelsordination

13:50 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 71 %

Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter Att göra Läkemedel

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "Visa senaste månaden" Filter

Läkemedel Senaste uppdatering

Senast signerad 2023-08-28

Avbryt **2** **Alvedon** Period

Utdelningstid	02:00	agens dostider
Dosering	2 st	2:00 - 2 st
Utdelningstid	08:00	8:00 - 2 st
Dosering	2 st	4:00 - 2 st
Utdelningstid	14:00	0:00 - 2 st
Dosering	2 st	
Utdelningstid	20:00	
Dosering	2 st	
Ordinationstyp	kontinuerlig (varje dag)	
Preparatnamn	Alvedon	
Läkemedelsform	Filmdragerad tablett	
Adm. Väg	Oralt	
Ordinationsorsak	1 ↓ Mer nedan	

Adm. Väg

Ordinationsorsak

Behandlingsmål

Adm. Instruktion

Generika (Ersättlig?) Ja

Insatt 2023-08-28 13:21

Förskrivare Mia Hägglöf **3**

Hit kommer du genom att klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

1. Mer nedan betyder att du får svepa nedåt för att komma längst ned i ordinationen
2. Avbryt och stäng fönstret
3. Förskrivande läkare står längst ned.



iPad: Läkemedelslistans begrepp

Vi använder TakeCares xChange API:
Medications.MedicationHistoryGet

De små siffrorna efter begreppen nedan visar på vilket element i TakeCares API som använts för att skapa informationen i SwipeRead.

Framsidan: Läkemedel

- Senast signerad¹⁵
- Vårdenheten¹⁷
- Preparat⁶³
- Styrka⁷¹⁺⁷²
- Adm.väg³⁵ (dvs Administreringsväg)
- Typ²¹ (dvs Ordinationstyp: Vb=Vid Behov, Rb=Regelbundet, Sch=Schema)
- Adm. Inst. (+ tecknet betyder bara att det finns administrationsinstruktioner, klicka på raden och läs Ordinationsdetaljer)
- Dostid: Dosschema⁸⁶⁻⁹⁶_ Dostext¹⁰¹

Ordination (när man klickat på ett läkemedel)



- Ordinationstyp²¹
- Preparatsnamn⁶³
- Administration³⁵⁺³⁷
- Ordinationsorsak³⁸
- Behandlingsmål³⁹
- Administrationsinstruktioner⁴⁰
- Generika (Ersättlig?)⁴⁴
(Ja=får ersättas med generika / Nej=Får ej ersättas med generika)
- Skapad¹¹
- Review Date⁴¹

Administreringstillfälle (ordination)

- Utdelningstid (fr.o.m.)⁵⁰⁻⁵³
- Dostext¹⁰¹

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

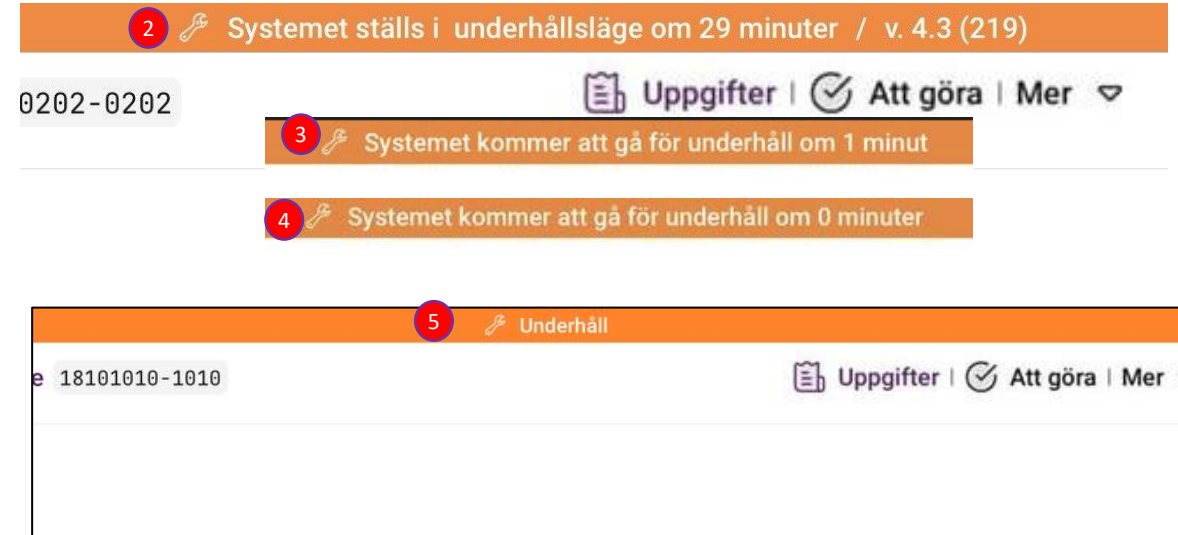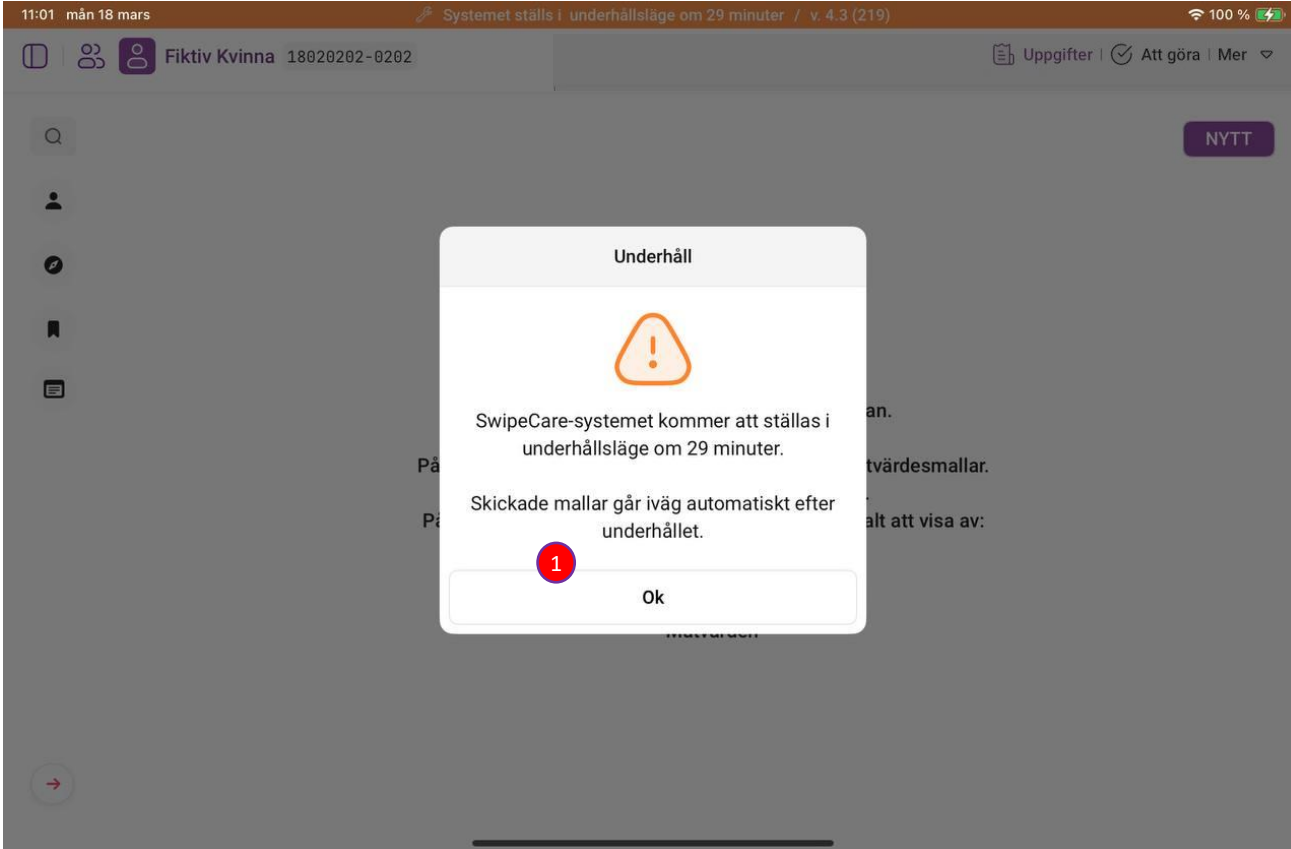

1. Popup med information om kommande underhåll. Klicka på Ok för att stänga.
2. Nedräkning: Systemet kommer att gå för underhåll om 29 minuter.
3. Nedräkning 1 min
4. Nedräkning 0 min
5. Underhållsläge: Du kan fortsatt journalföra med mallarna, skickar du dem till TakeCare så kommer de köas och skickas automatiskt iväg till TakeCare så fort uppdateringen är klar.

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.



16:26 fre 9 feb. 17% Underhåll / 2 väntande åtgärder

Fictiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

NYTT

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
Spara

Formulär

Mätvärden inkl NEWS2
Formulär

IPOS bedömning
Formulär

maintenance

Försök igen

Göm

1. Underhåll / 2 väntande åtgärder: Två mallar är köade och kommer skickas iväg så fort systemet är uppdaterat
2. Mallarna som är köade
3. Försök igen: Den orangea flaggan är borta och appen är uppdaterad. Tryck på Försök igen så laddar du om sidan och ser att mallarna gått iväg.
4. Patient sidan är tom och alla mallar har skickats iväg till TakeCare

16:28 fre 9 feb. 16% Fictiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

NYTT

maintenance

Försök igen

13:28 ons 22 maj v. 4.3 (246) 27% Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter
Senaste uppdatering: 12:34

NYTT

Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din värdenhet har valt att visa av:

- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden

iPad: Offline-läge

Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.



08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Senast hanterade patienter

Namn	Nummer	Senaste uppdatering
Fiktiv *****	18101010-****	2024-02-09
Apptest III ***	19791230-****	2024-02-08
Komma *****	19530416-****	2024-02-04
Fiktiv *****	18040404-****	2024-02-01
Fiktiv *****	18020202-****	2024-02-01
App Testperson *	19440813-****	2023-12-15

08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Sök i patientinfo

- Allmän information
- Adressinformation
- Etiketter
- Notiser

Du har ingen internetanslutning. Anslut din iPad till internet och försök igen.

Försök igen

08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Information

Innehållsförteckning

- Samtycke
- Uppgiftslämnare
- Anamnes
- Aktivitetsanalys
- Bedömning
- Mål/Planering/Åtgärder
- Utvärdering
- Önskemål patient/närstående

Samtycke

Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

-Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

-Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient?

-Ta kontakt med kommun och/eller primärvården för planering av patients utskrivning?

-Får närstående kontaktas?

Uppgiftslämnare

-Uppgifter hämtad från/av

Samtycke

Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

Ja

Nej

Ej gått att efterfråga samtycke



Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient

Mer nedan

1. "SwipeCare är offline": Den röda flaggan indikerar att internet saknas men du kan fortfarande öppna patienter
2. På patientsidan får du information om att du saknas internet. Du kan fortfarande dokumentera i journalmallar.
3. Dokumentera i valfri journal- eller mätvärdesmall och tryck sedan på "Skicka till TakeCare".

iPad: Offline-läge

Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

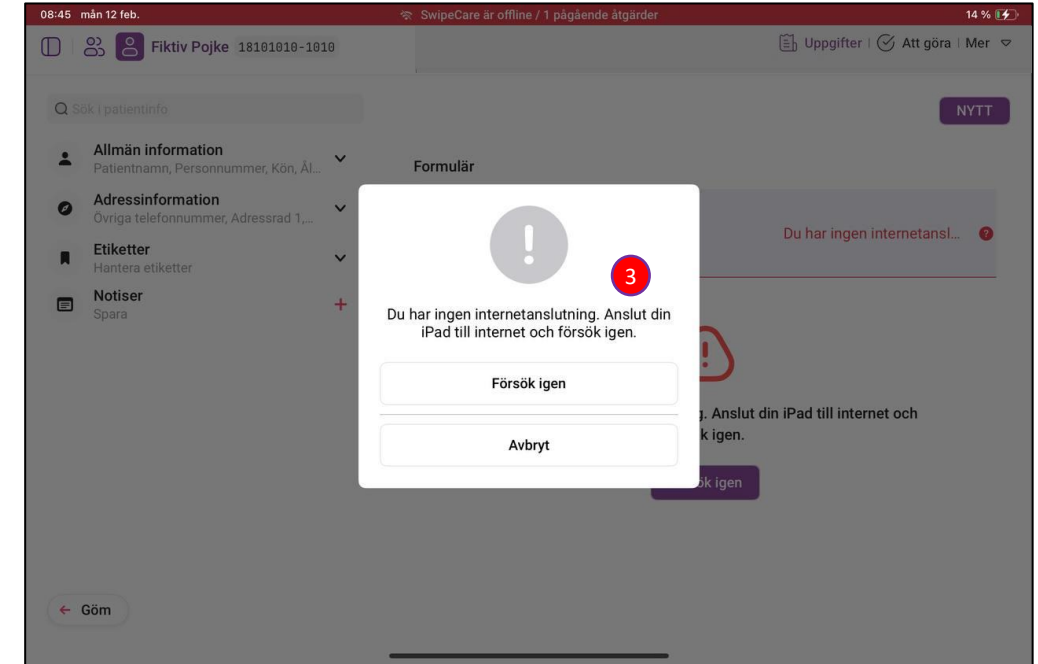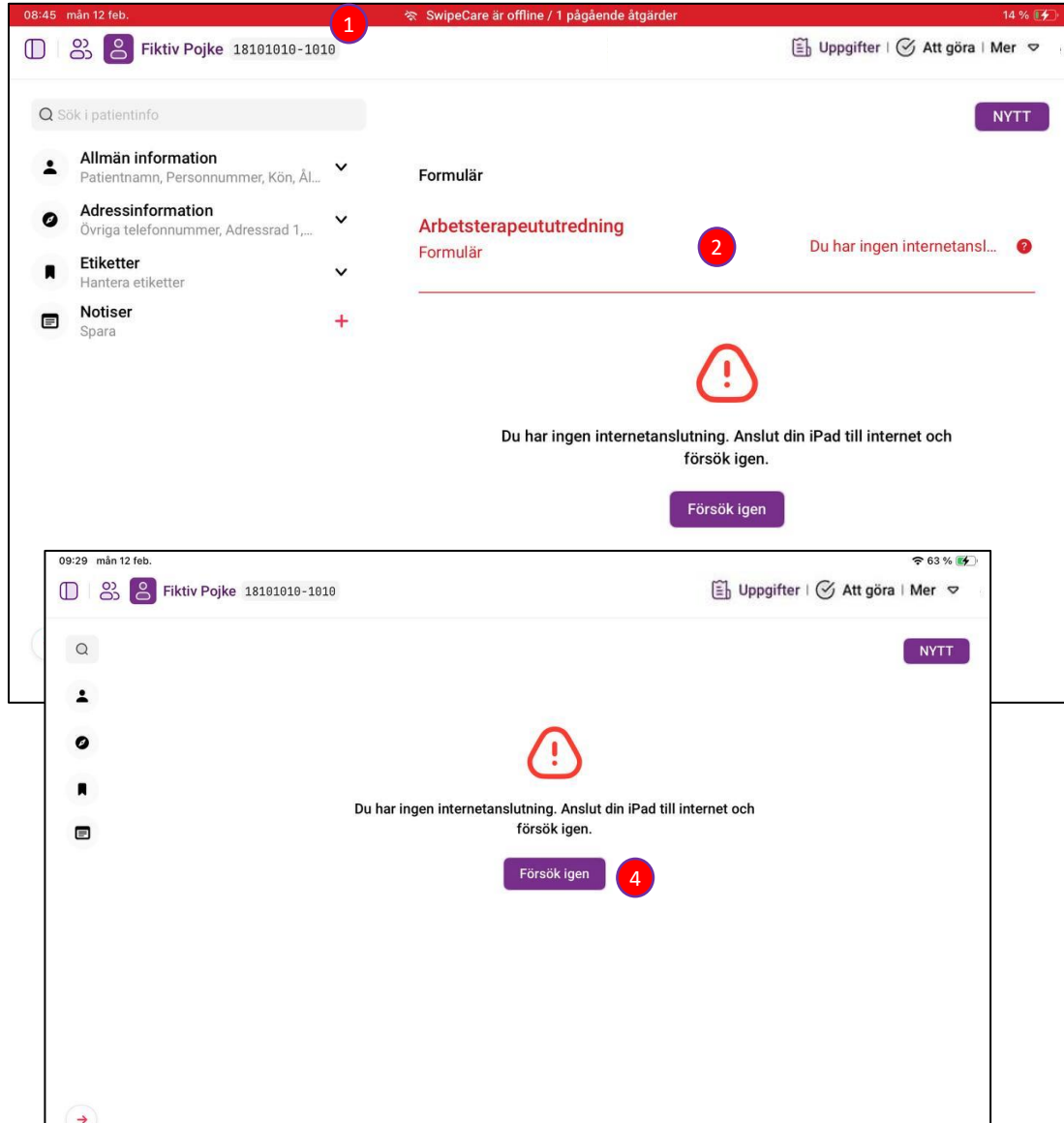

1. "SwipeCare är offline/1 pågående åtgärder": Den röda flaggan indikerar att appen är offline samt att 1 mall väntar på att skickas
2. Här ser du vilken mall som ligger kvar på iPaden. Den skickas automatiskt iväg när internet finns. Klickar du på mallen får du felmeddelandet 3.
3. Felmeddelande som informerar dig om varför mallen inte skickats iväg, i detta fall pga ingen internetuppkoppling.
4. Den röda flaggan är borta och appen har internet. Tryck på försök igen så laddar du om sidan. Mallarna har skickats iväg oavsett om du laddar sidan eller inte.



Felhantering och felmeddelanden

--



Hur hitta formulär/mätvärden som inte gått iväg till TakeCare?

De troligaste vanligaste felen finns som Tasks som syns i användarnas iPads och de kan därmed kan sökas upp i Teamarbetsvyn:

- **Granska anteckning: (mallnamn)**
 - Kommer tex om de fyllt i en mätvärdeskommentar utan att fylla i själva mätvärdet.
 - Denna uppgift måste rättas i SwipeCare portalen, går ej att göra i paddan. Tale med er IT support.
- **Fel vid sändning**
 - Kan bero på en massa orsaker i TakeCare eller SwipeCare.
 - Typiskt kommer vara "Illegal argument!"-fel som kommer från TakeCare:
 - (Failed to write casenote. User inactivated, eller Patient id failed check.)

Översikt Teamarbete Patienter

Byt vårdenhets Ljust tema Svenska Sara Bern

Teamarbete

Vårdflöde: Alla

Typ: Alla

Task filter: Alla

Etiketter: Alla

Ansvar: 1

Förfallodatum: Alla

Rensa alla

Task filter:

Uppgiftstyp	Patientens namn	Personnummer	Flöde	Förfallodatum
manualPlus	Fel vid sändning: NEWS 2	Test Test	181010101010	Mätvärden till TakeCare: NEWS 2
				2023-09-21



För **Fel vid sändning** så är det oftast TakeCare som klagar på fel parametrar:

- Användaren är inaktiverad i TakeCare om detta felmeddelande kommer:
"Illegal argument! (Failed to write casenote. User inactivated:
Om användaren bara loggar in i TakeCare igen så blir användaren aktiverad och anteckningen kan skickas.
- Användaren har skrivit fel personnummer på patient vid detta felmeddelande:
Illegal argument! (Failed to write casenote. Patient id failed check. Fail-code: -4)
Personnummer kan ej justeras i SwipeCare. För över information om patienten manuellt från SwipeCare till TakeCare.
Använd gärna streckkodsläsare-funktion i SwipeCare för att undvika denna typ av problem.
- Användare har inte TakeCare behörighet på denna vårdenhets vid detta felmeddelande:
Unauthorized request! (Failed to write casenote. User has not rights to this ward....

Vid **Kräver åtgärd**: "User is deactivated", så är användaren markerad som Inaktiv i SwipeCare