



Användarmanual

SwipeCare Version 4.2.22 – Automatiserat vårdstöd

iPad

- kräver iOS 16.0 eller senare

2024 10 03

SwipeCare

2023-08-15



EUDAMED-DI: B-SwipeCare4JF



Strikersoft


Isafjordsgatan 39, 164 40 Kista, Sweden

www.strikersoft.com Org. nr. 556661-1637




Efter ny-/ominstallation av SwipeCare 4 app på iPad:

Välj organisation (OBS: Detta kan redan vara gjort av er tekniska support)

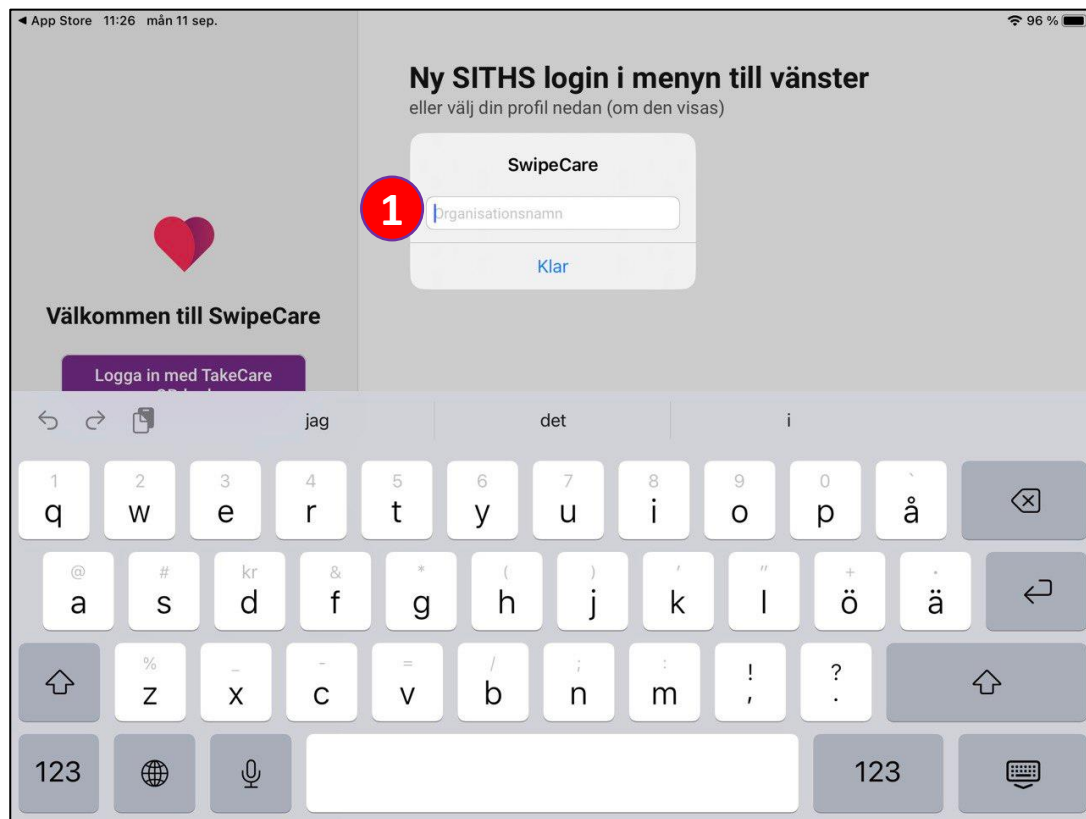


1. Skriv in din organisation: t.ex Aleris, Sophiahemmet, Danderyd
2. OM du har access till flera vårdenheter så får du välja i en lista

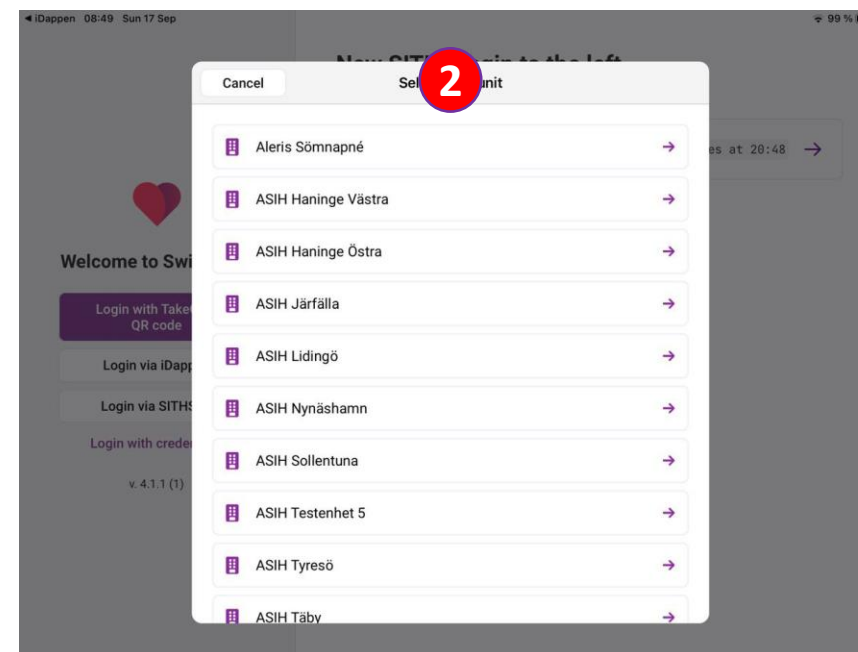



iPad: Logga in

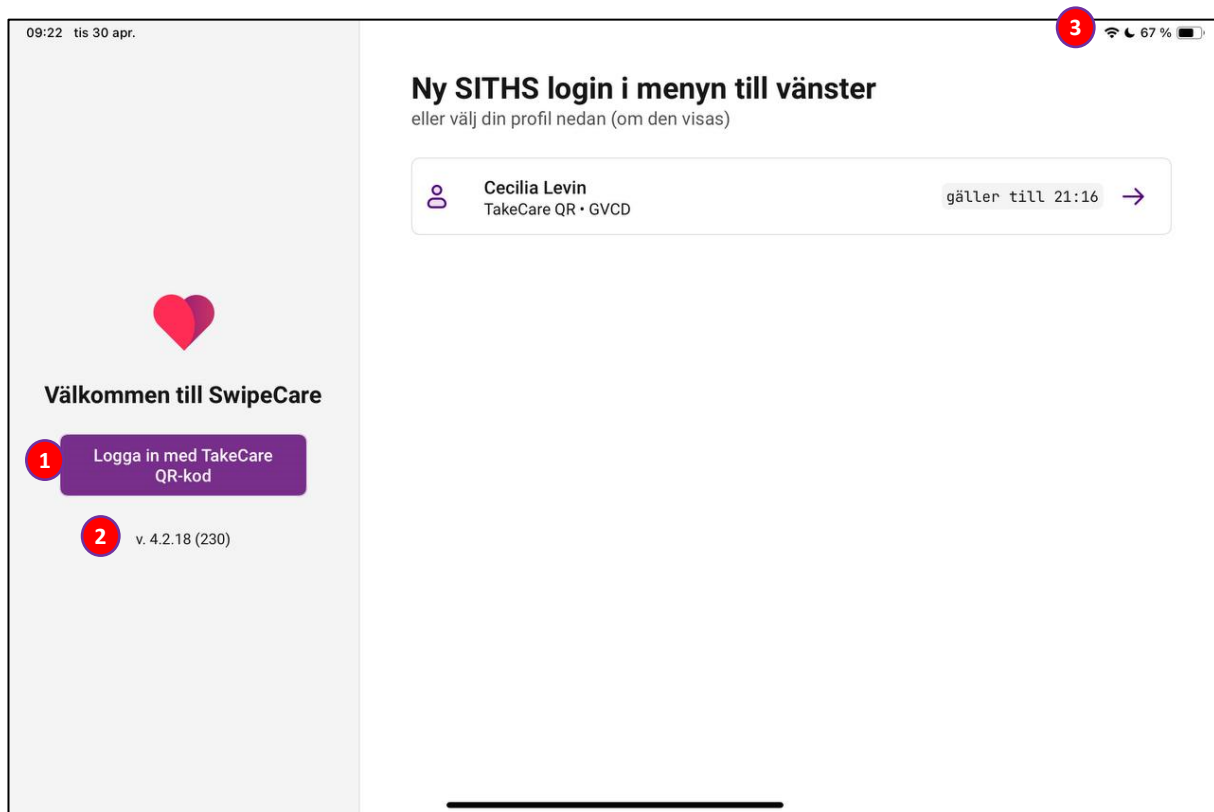


1. Logga in med din QRkod från TakeCare (se nästa sida)
2. Versionsnummer på appen (nu 4.2.21)
3. Ikon för att visa om du är på WIFI (eller mobilnät)
Har du ingen täckning visas en röd ribba överst med texten "SwipeCare är offline"
4. Login profil ("kort login") som visar hur du loggat in (QR kod eller iD appen) och hur länge din profil med personlig PIN är giltig innan du behöver logga in från början på vänster sida




iPad: QR kods login efter du tryckt på

Logga in med TakeCare
QR-kod

Inne i TakeCare på PC:

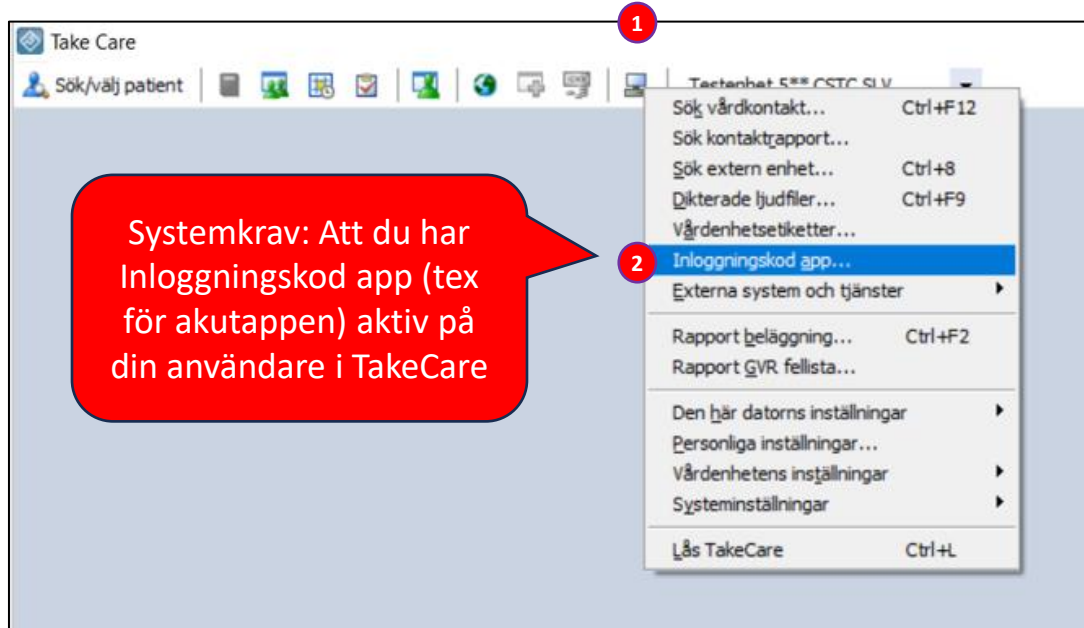

Använd PIN 2 för Underskrift.
På SITHS kortet finns PIN 1 för Inloggning
och PIN 2 för Underskrift

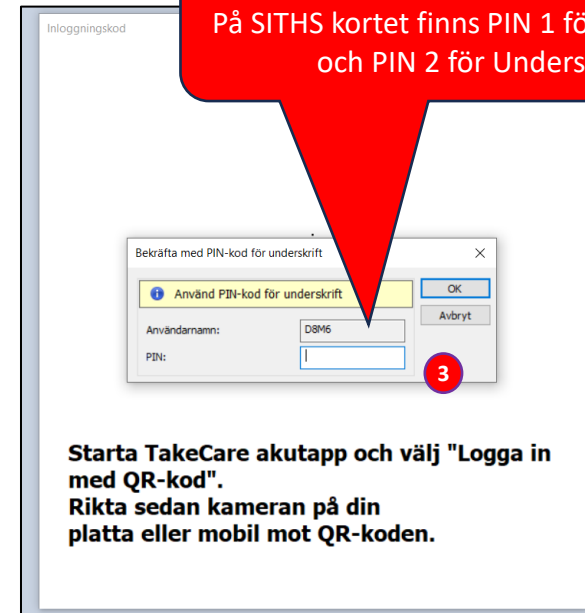


4 Starta TakeCare akutapp och välj "Logga in med QR-kod".
Rikta sedan kameran på din platta eller mobil mot QR-koden.

1. Välj TakeCare Systemmeny (PC ikonen) inne i TakeCare på din egen inloggning
2. Välj Inloggningskod app...
3. Mata in din PIN kod för **signering (=PIN2)**
Notera att du kan välja att ändra din SITHS PIN2 till något du kommer ihåg. Det görs inte inne i SwipeCare.
4. Fota QR koden med SwipeCare iPad
5. VIPS, så är du inne i SwipeCare



iPad: Välj din egen Personliga PIN


Välj och upprepa din personliga PIN

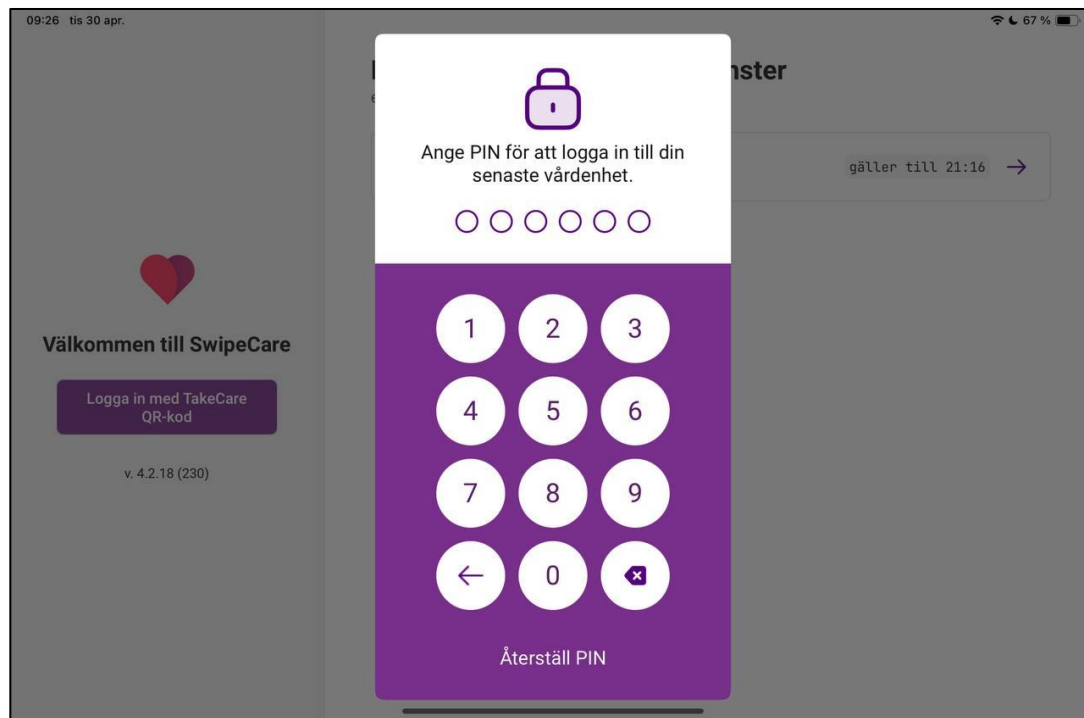

- **VIKTIGT:** Den PIN du väljer ska vara personlig. Den är kopplad till ditt HSA ID som används av SwipeCare för att skriva/läsa mot TakeCare.
- Denna PIN använder du för att låsa upp SwipeCare från standbyläge (under giltig TakeCare session). Er IT kan ha autostandby på en viss tid, varefter PIN måste användas för att fortsätta arbeta.
- Du kan också använda denna PIN för att låsa upp iPaden med din giltiga profil från högersidan på loginsidan.
- Om du har glömt din personliga PIN kan du trycka på "Återställ PIN"
 - Då öppnas automatiskt kameran för att du ska kunna skanna din QR-kod i TakeCare igen. Sen får du välja PIN kod igen.



iPad: Välj vårdenhet

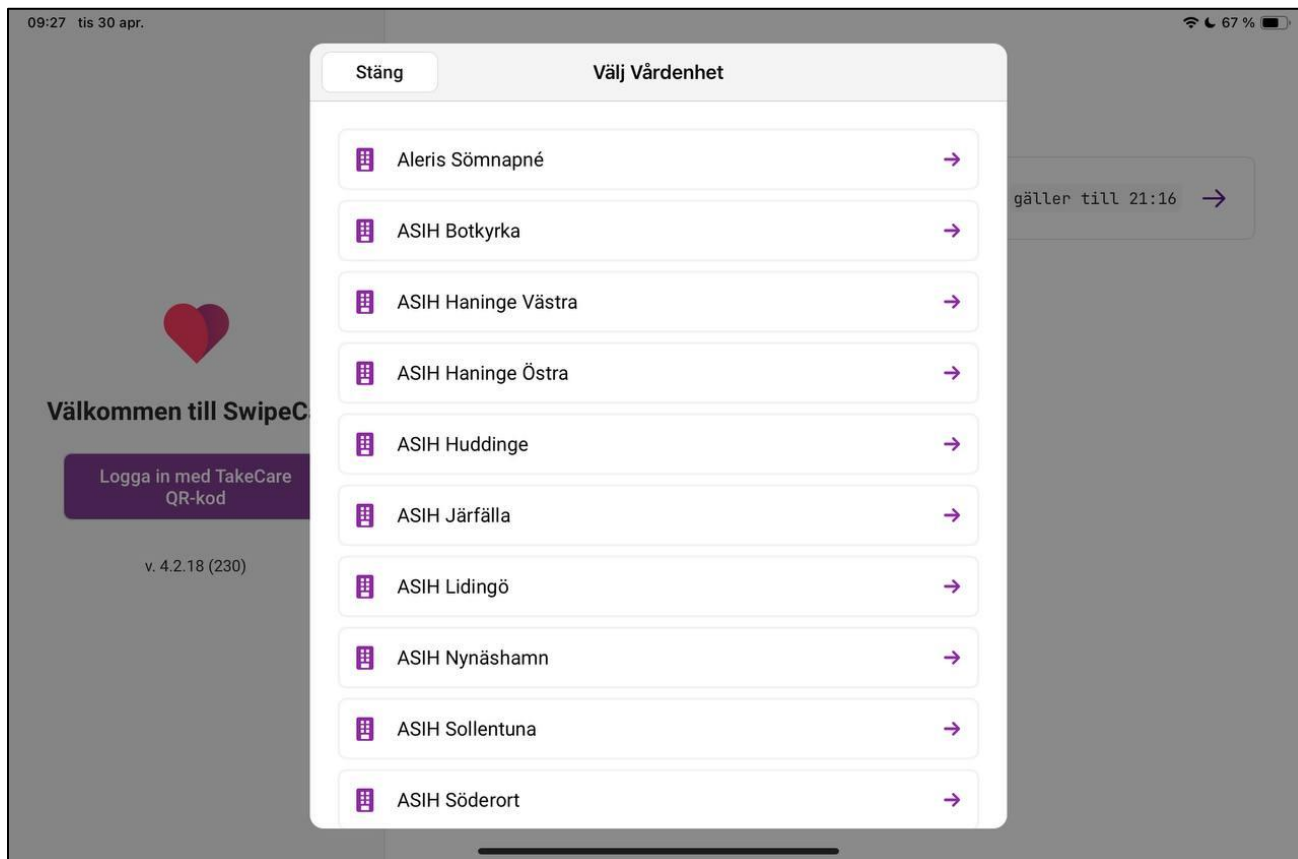

- Om du har access till flera vårdenheter får du välja vårdenhet här

iPad: Vårdenhetens patientlista



4 sista siffror i personnummer maskerade med stjärnor

09:27 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Sök på Namn/Personnr... Visa Skanna Lägg till

	Nummer	Namn
1:2	19121212-****	Tolvan
2	19500505-****	Linda Testsson
3:1	19500505-****	Pelle Svensson
4:2	18101010-****	Fiktiv Pojke Test
5:2	99201857-****	Barn Under 13 Hd
6	19810107-****	Klas Testsson
7:2	18020202-****	Fiktiv Kvinna
8	19791230-****	Apptest Testperson III
K84 sal 1	19530416-****	Karin Komma
Staffans	99200376-****	Kranksson Kalle
	18040404-****	Fiktiv Flicka
	18121212-****	VRM Tolvan

Omaskerade patienter (utan stjärnor)

09:27 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 7 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Sök på Namn/Personnr... Dölj Skanna Lägg till

	Nummer	Namn
1:2	19121212-1212	Tolvan
2	19500505-0546	Linda Testsson
3:1	19500505-0520	Pelle Svensson
4:2	18101010-1010	Fiktiv Pojke Test
5:2	99201857-5395	Barn Under 13 Hd
6	19810107-9294	Klas Testsson
7:2	18020202-0202	Fiktiv Kvinna
8	19791230-9296	Apptest Testperson III
K84 sal 1	19530416-2349	Karin Komma
Staffans	99200376-5399	Kranksson Kalle
	18040404-0404	Fiktiv Flicka
	18121212-1212	VRM Tolvan

1. Plats: Här läses vårdplats ut från TakeCare. Har en patient blivit tilldelad vårdplats i TakeCare syns det här.
2. Patient som antingen är inskriven men inte tilldelad vårdplats eller patient som manuellt lagts till i SwipeCare.
3. Tid för när listan senast uppdaterats. För att uppdatera drar man listan nedåt, svep neråt.
4. Sökruta för att söka efter patienter. Antingen på namn eller personnummer.
5. Genom att trycka på ögat i höger hörn kan du avmaskera personnumret. Standard är att de 4 sista är maskerade.
6. Här kan du skanna t.ex. streckkod på patientens armband och på så sätt lägga till patienten eller öppna patientens profil. (För t.ex. ökad patientsäkerhet)
7. Genom att trycka på denna knapp kan du manuellt lägga till en patient.

SwipeCare har inte tillgång till spärrad patientinformation. Du kommer alltså inte kunna läsa ut eller skicka information till TakeCare på patienter med låst journal.




iPad: Vårdenhetens patientlista



1. Viktigt att kolla på "Senast uppdaterad" där det indikeras om du behöver uppdatera patientlista. Detta gör du genom att svepa patientlistan neråt. Efter 12 timmar blir texten röd för att det ska vara tydligt för användaren att listan bör uppdateras.



iPad: Addera patienter

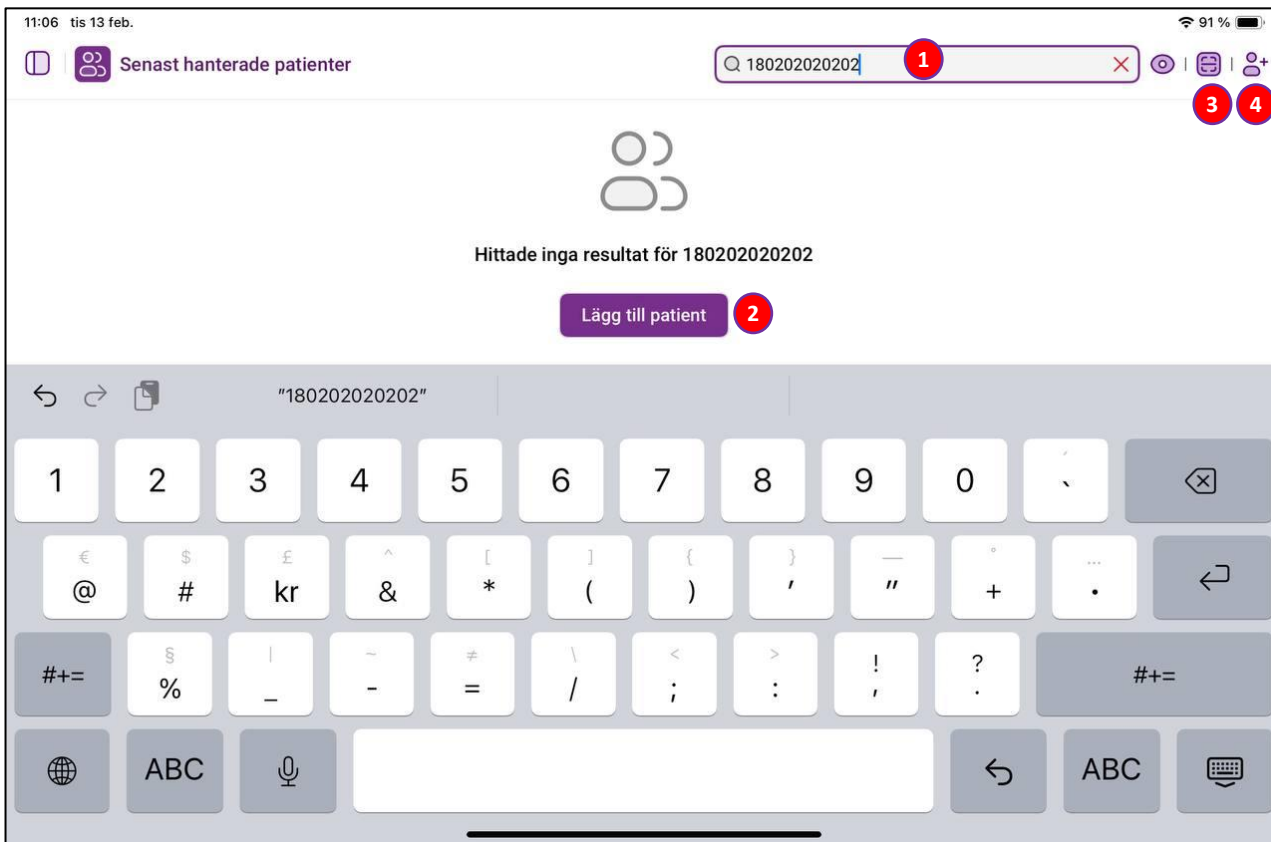

1. Sök patient (i SwipeCare systemet) på personnummer
2. "Lägg till patient": Om SwipeCare inte hittar patienten i sitt system så trycker du på den **lila knappen** för att addera patienten med det nummer du skrev i sökfältet.
3. Addera patient genom att scanna streckkod/QR kod
4. Addera patient manuellt



iPad: Lägg till ny patient

iDappen 17:51 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer T.ex. 1912121212 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn SMS-nummer E-post Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2 Postnummer Stad

Lägg till patient

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer 19750806-8413 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn App Testperson X E-post T.ex. namn.namn@mail.com

Lägg till patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . ' 123

- Patientid och namn är obligatoriska uppgifter.
- Om ni har funktionen SPAR, så läggs namnet till automatiskt
- Vid journalskrivning förs endast patientid över till TakeCare, som lägger till namnet själv.

Personnummer Reservnummer

180404040404

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn Tolvan Tolvansson E-post SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar


Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2 Postnummer Stad

Lägg till patient



iPad: Vårdenhetens patienter

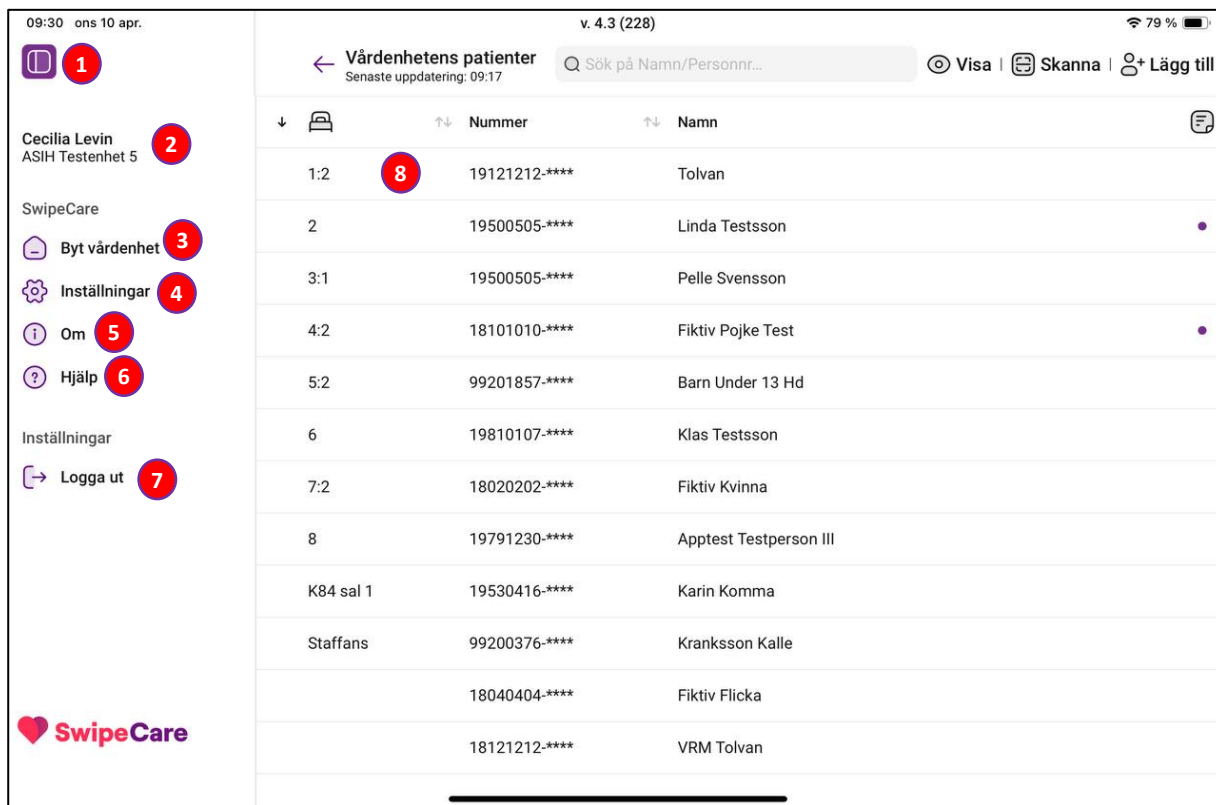

1. Öppna/stäng menyn (kommer in från vänster).
2. Du ser användare och vårdenhet
3. **Byta vårdenhet** (om du har behörighet i SwipeCare till flera)
4. **Inställningar**. Idag finns dessa:
Skicka teknisk information (för felspårning)
Se vilket backend system iPaden är kopplad mot.
5. **Om**, berättar om systemet
6. **Hjälp** leder till hjälpsidan på internet. Du kan nå den sidan från en dator också.
7. **Logga ut**
8. Klicka på en patientrad för att öppna patientens profil



iPad: Arbetslista i patientlistan, Notiser

09:31 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Sök på Namn/Personnr...

Visa Skanna Lägg till

↓	↑↓ Nummer	↑↓ Namn	
1:2	19121212-****	Tolvan	3
2	19500505-****	Linda Testsson	4
00505-****	Pelle Svensson		1 2 Fäst Notiser Ta bort
4:2	18101010-****	Fektiv Pojke Test	
5:2	99201857-****	Barn Under 13 Hd	
6	19810107-****	Klas Testsson	
7:2	18020202-****	Fektiv Kvinna	
8	19791230-****	Apptest Testperson III	
K84 sal 1	19530416-****	Karin Komma	
Staffans	99200376-****	Kranksson Kalle	5 6 7
	18040404-****	Fektiv Flicka	Lösgör Notiser Ta bort
	18121212-****	VRM Tolvan	

Arbetslista - "Fäst" dina patienter högst upp i patientlista

1. Slep patienten åt vänster
2. Välj Fäst
3. Patienten stannar högst upp i din lista, på **denna** iPad.
 - Om du loggar ut och in igen stannar Fästa patienter i din arbetslista
 - Om du tar en annan padda får du skapa din arbetslista på nytt.
4. Notiser. Har patienten en notis, så syns det som en prick.
5. Lösgör: Patienten är inte fäst längre
6. Här kan du också läsa/skapa notiser på patient.
 - OBS: Notiser journalförs inte i TakeCare.
7. Ta bort: Ta bort patienten från patientlistan

iPad: vänster ram innehåller generell information om patienten, den är synkad med web portalen



10:17 fre 4 okt. 47 %

← Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Uppgifter Att göra Mer

Sök i patientinfo

Uppgifter
Senaste uppdatering: 10:16

Nytt mätvärde Ny journalanteckning

Allmän information

Patientnamn
Fiktiv Kvinna

Personnummer Kön Ålder
18020202-0202 Kvinna 222

Email
-

Telefonnummer
-

☐ Tillåt e-post-aviseringar

☒ Tillåt SMS-aviseringar

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Göm
Hantera patientnotiser

Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din vårdenhet har valt att visa av:

- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden

1 2 3 4 5

Telefonnummer

123455789

Avbryt Spara

4

14:41 fre 6 sep. v. 4.3 (279) 34 %

← Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Uppgifter Att göra Mer

Uppgifter
Senaste uppdatering: 14:41

Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din vårdenhet har valt att visa av:

- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden




Journaltext
Diagnoser
Läkemedel
Mätvärden

3 5

1. Kollapsa/expandera informationen med pilen.
2. Skriv en notis på patienten, den journalförs inte.
Notisen kan också ses i patientlistan om du sveper patienten åt vänster.
3. Göm/ta fram sidopanelen med "Göm". Röda horisontella pilen återställer sidopanelen.
4. Radera en patients registrerade telefonnummer om det inte stämmer, raderas bara i SwipeCare-systemet.
5. Kollapsbar meny där man hittar SwipeRead (utläsning från TakeCare).



iPad: Uppgifter - Starta & välj formulär (=mall)

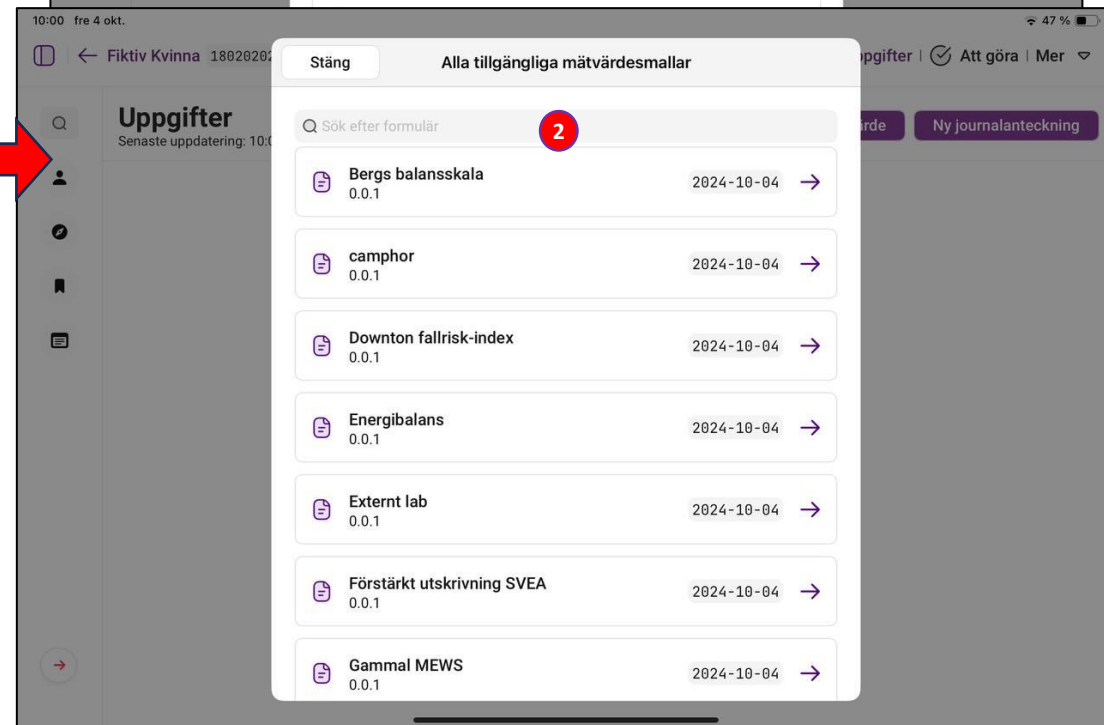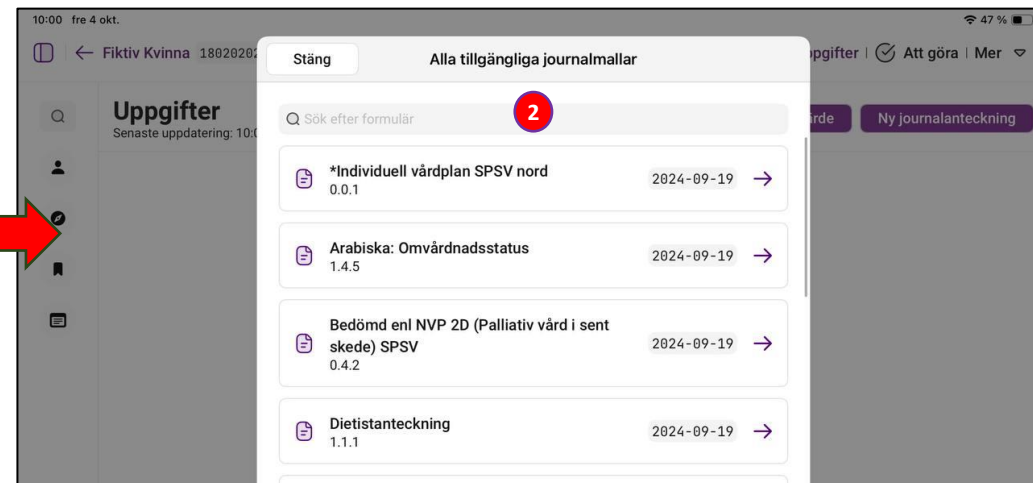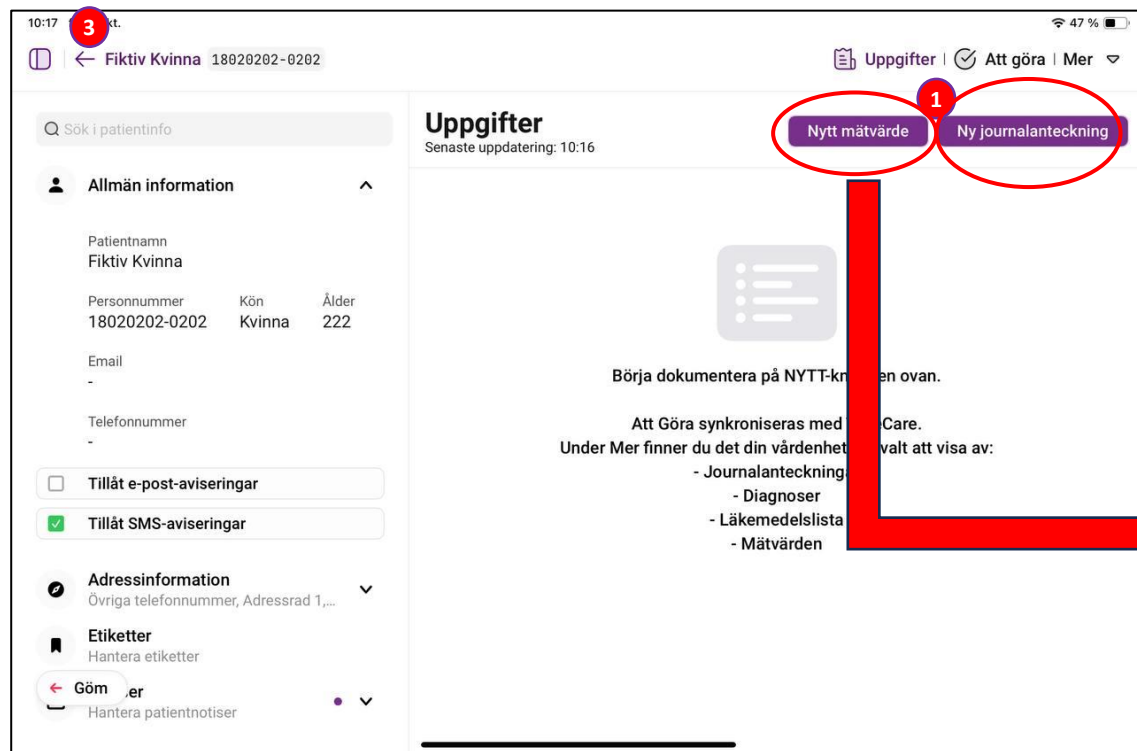

1. Starta en journalmall genom att trycka på "Ny journalanteckning" eller registrera mätvärde på "Nytt mätvärde"
2. Välj eller sök formulär (=Mall)
3. Tryck på tillbakapilen för att komma tillbaka till hela patientlistan



iPad: Uppgifter - Skapa journalanteckning

14:45 fre 6 sep. v. 4.3 (279) 34 %

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter | Att göra | Mer

Information *

Uppgiftslämnare och id-kontroll ✓

Sekretess och samtycke *

Smittspårning (endast SPSV)

MRSA, VRE, ESBLcarba, ESBL *

Värdesaker (endast (SPSV) *)

Anamnes

Status *

Bedömning av ssk

Infanter/...

Inskrivning ssk ASIH/SPSV syd
Fyll i journalanteckning

3 Skicka till TakeCare

1 Information

Uppgiftslämnare och id-kontroll

Vem har lämnat uppgifterna?

☐ Närstående

☒ Uppgifterna har hämtats från journal

☐ Uppgifterna kommer från andra vårdgivare

Kommentar: >

Kontrollerat Id *

☒ Utfört

Kommentar: >

2 Mer nedan

11:05 tis 13 feb. 77 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Jouranteckning

Innehållsförteckning

Jouranteckning

Jouranteckning läk ASIH/SPSV
Fyll i journalanteckning

Skicka till TakeCare

Stäng

SwipeCare

Ja

Skicka in anteckning?
februari 13, 2024 11:01

4

Skicka datum och tid

lör 10 feb.	08	08
sön 11 feb.	09	59
mån 12 feb.	10	00
idag	11	01
ons 14 feb.	12	02
tors 15 feb.	13	03
fre 16 feb.	14	04

Oplanerat hembesök

Telefonkontakt med patient

Telefo Mer nedan patient

1. Fyll i formuläret (=mallen)
2. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
3. Skicka till TakeCare (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka.
4. Välj datum och tid för anteckningen. Automatiskt blir det dagens datum och tid, men du har möjlighet att välja ett tidigare datum och tid. Den tiden du väljer blir det i TakeCare, men den blir signerad med nutid.



iPad: Uppgifter - Registrera mätvärden

15:23 mån 11 mars v. 4.3 (215) 77 %

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter Att göra Mer

Inskrivningsanteckning 0/4

Allmänna uppgifter 0/11

Smittanamnes 0/3

Preoperativ förberedelse 0/16

Omvårdnadstatus 0/10

Andningsfrekvens

1

Kommentar: 2

Pulsfrekvens

Kommentar:

Syremättnad

Kommentar:

Syrgas, NEWS

Mer nedan 3

11:05 tis 13 feb. 77 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter Att göra Mer

Jouranteckning

Innehållsförteckning

Jouranteckning

Jouranteckning läk ASIH/SPSV Fyll i journalanteckning

4 Skicka till TakeCare

Stäng SwipeCare Ja

Skicka in anteckning? februari 13, 2024 11:01 5

Skicka datum och tid

lör 10 feb.	08	00
sön 11 feb.	09	59
mån 12 feb.	10	00
idag	11	01
ons 14 feb.	12	02
tors 15 feb.	13	03
fre 16 feb.	14	04

Oplanerat hembesök



Telefonkontakt med patient

Telefo Mer nedan patient

1. Fyll i formuläret (=mallen). Fält för mätvärde.
2. Om inget mätvärde har fyllts i så kan man inte skriva en kommentar.
3. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
4. Skicka till TakeCare (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka).
5. Välj datum och tid för anteckningen. Automatiskt blir det dagens datum och tid, men du har möjlighet att välja ett tidigare datum och tid. Den tiden du väljer blir det i TakeCare, men den blir signerad med nutid.





iPad: Uppgifter – Bekräftelse på importerad anteckning/mall

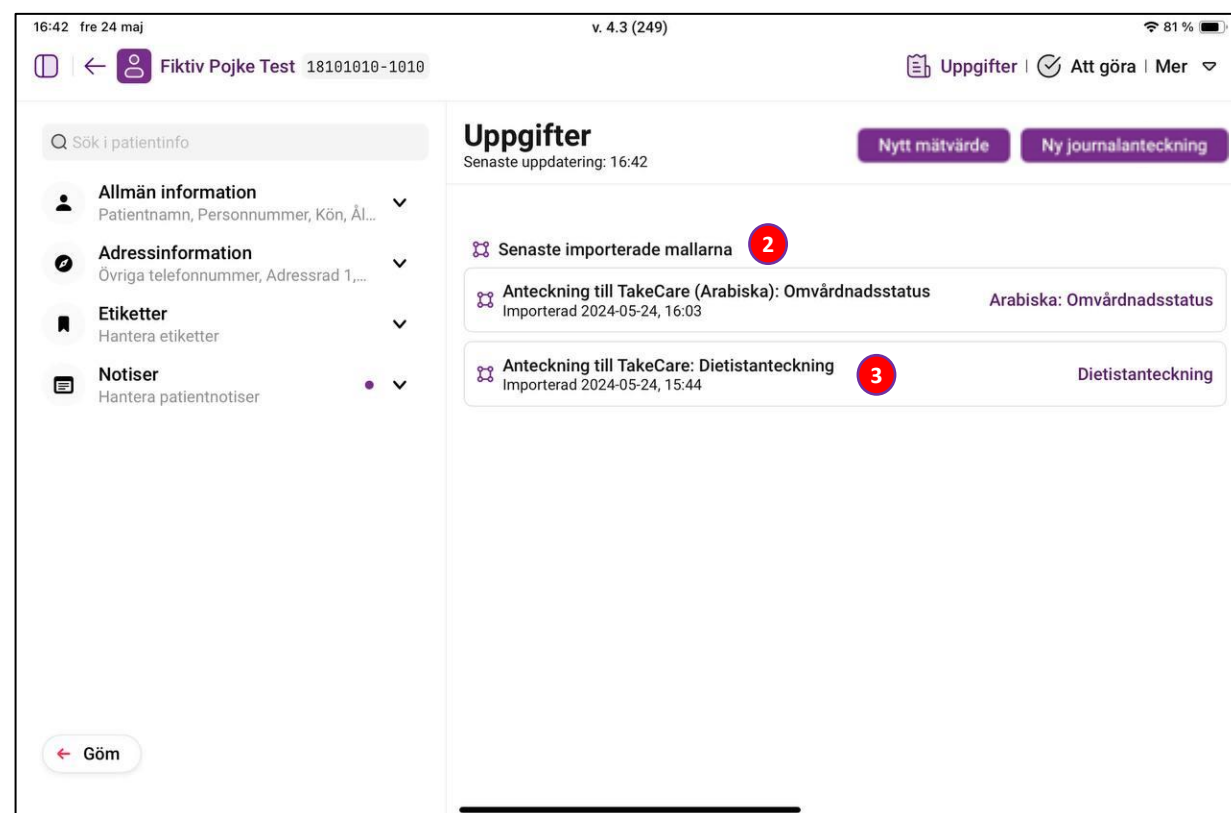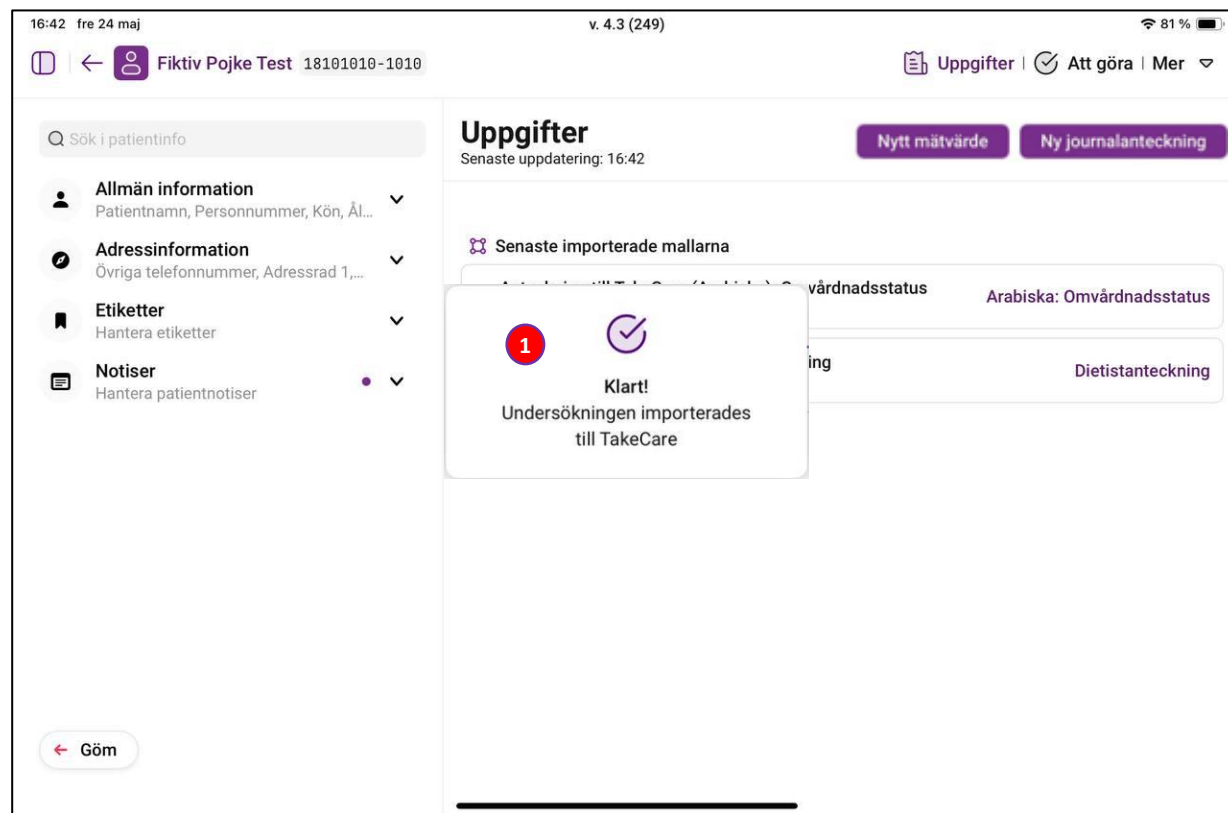

1. När en mall har importerats till TakeCare kommer denna popup upp i ca 5 sekunder. För att stänga den så klickar du på den.
2. Lista på de 10 senast importerade mallarna de senaste 24 timmarna.
3. Namnet på mallen samt information om att mallen har importerats inklusive datum och klockslag.

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)

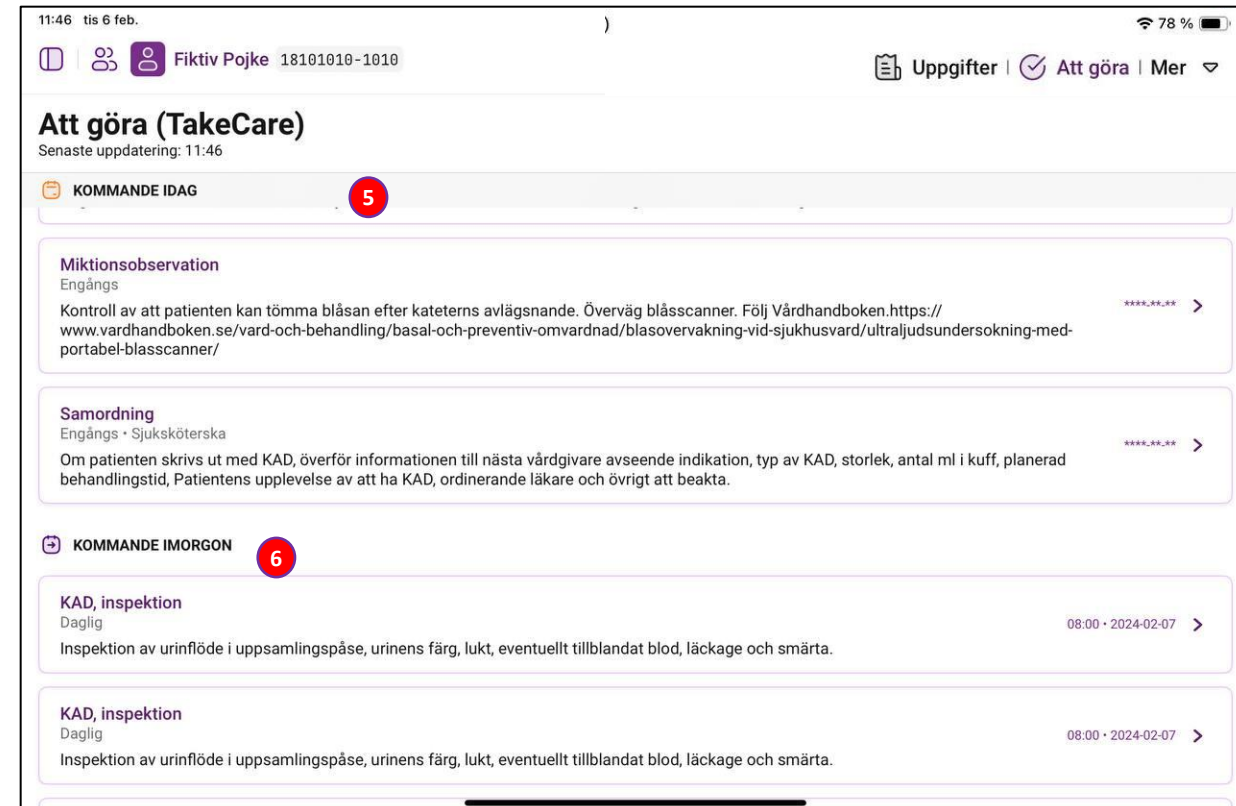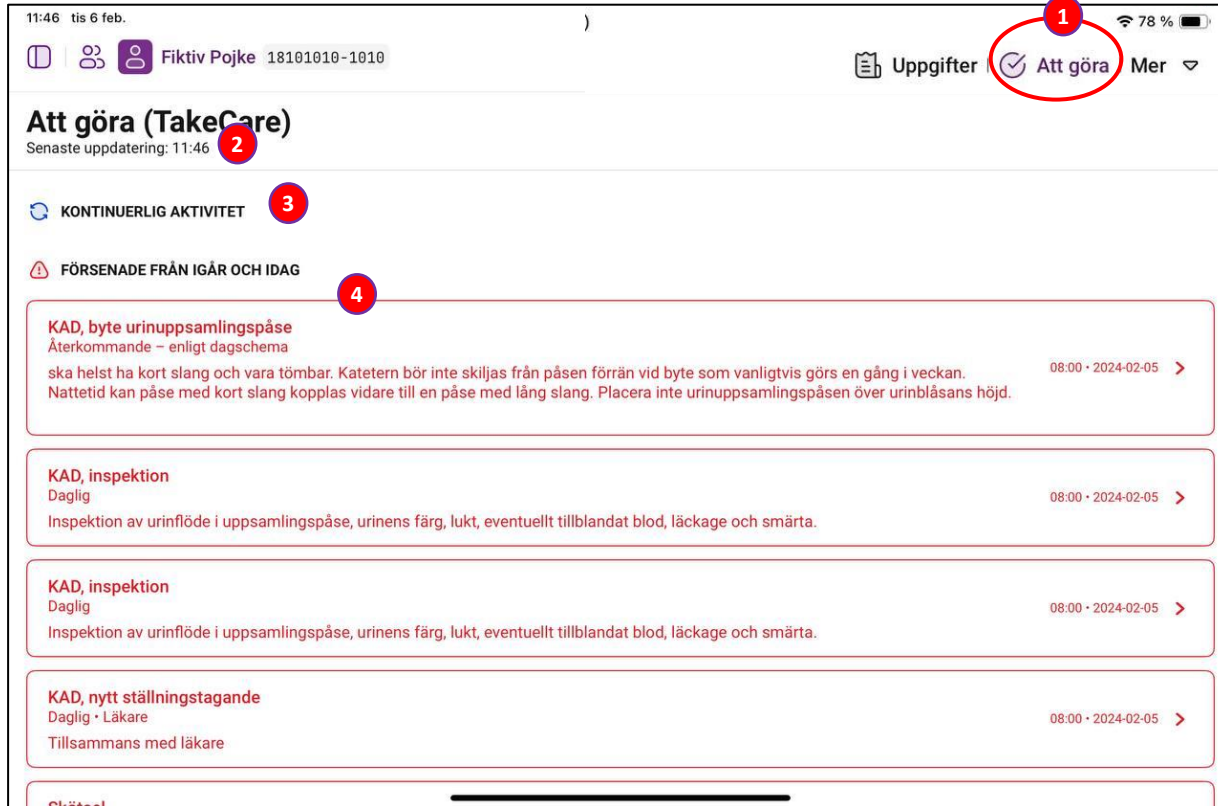

1. Menyval: Att göra
2. Senaste uppdatering.
För att uppdatera utläsningen, svep nedåt
3. Kontinuerliga aktiviteter: klarmarkeras aldrig
4. Försenade från igår och idag: Försenade aktiviteter som har försenad planerad tid i rött
5. Kommande idag: Dagens aktiviteter
6. Kommande imorgon: Morgondagens planerade aktiviteter

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)



11:35 tis 6 feb. 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 11:34

FÖRSENAD

KAD, nytt s
Daglig • Läk
Tillsamman

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdha...

KOMMAN

KAD, inspe
Daglig
Inspektion s

KAD, inspe
Daglig
Inspektion av urinflöde i uppsamlingspåse, urinens färg, lukt, eventuellt tillblandat blod, läckage och smärta.

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdhandboken.

11:34 tis 6 feb. 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 11:34

FÖRSENAD

KAD, nytt s
Daglig • Läk
Tillsamman

Skötsel
Daglig
Om nedsatt

KOMMAN

KAD, inspe
Daglig
Inspektion s

KAD, inspe
Daglig
Inspektion av urinflöde i uppsamlingspåse, urinens färg, lukt, eventuellt tillblandat blod, läckage och smärta.

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdhandboken.

1. Utförd nu: Aktiviteten får nuvarande tid registrerad i TakeCare
2. Utförd tidigare: Om aktiviteten utförts tidigare kommer du till 4:an.
3. Ej utförd: Om aktiviteten ej ska utföras/utförts kommer du till 5:an
4. Välj datum och tid när aktiviteten utförts, klicka sen på Godkänn. Detta datum och tid registreras i TakeCare.
5. Lämna kommentar (vid behov) om varför aktiviteten ej utförts och klicka på godkänn.

11:35 tis 6 feb. 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 11:34

FÖRSENAD

KAD, nytt s
Daglig • Läk
Tillsamman

Skötsel
Daglig
Om nedsatt

KOMMAN

KAD, inspe
Daglig
Inspektion s

KAD, inspe
Daglig
Inspektion av urinflöde i uppsamlingspåse, urinens färg, lukt, eventuellt tillblandat blod, läckage och smärta.

Skötsel
Daglig
Om nedsatt egenvårdförmåga ska rengöring av KAD och urinrörsmynning utföras morgon och kväll samt vid behov. Följ Vårdhandboken.

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)



14:30 tis 6 aug. WS: DISCONNECTED / v. 4.3 (264) 48 %

← Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer ▾

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 14:30

⚠ FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG

NEWS2
Daglig 2024-08-06 14:00 >

NEWS2
Daglig 2024-08-06 14:00 >

📅 KOMMANDE IDAG

✅ Aktivitet utförd **1**

Scanning residualurin
Daglig 2024-08-06 20:00 >

6-minuters gångtest
Engångs ****_**_** >

📅 KOMMANDE IMORGON

NEWS2
Daglig 2024-08-07 08:00 >

14:30 tis 6 aug. v. 4.3 (264) 48 %

← Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer ▾

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 14:30

⚠ FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG

NEWS2
Daglig 2024-08-06 14:00 >

NEWS2
Daglig 2024-08-06 14:00 >

📅 KOMMANDE IDAG

❌ Aktivitet ej utförd **2**

6-minuters gångtest
Engångs ****_**_** >



📅 KOMMANDE IMORGON

NEWS2
Daglig 2024-08-07 08:00 >

Scanning residualurin
Daglig 2024-08-07 08:00 >

1. Aktivitet utförd: Har du utfört aktiviteten blir den grön och försvinner sen av sig själv.
2. Aktivitet ej utförd: Har du valt att ej utföra aktiviteten blir den röd och försvinner sen av sig själv.

Läsa TakeCare

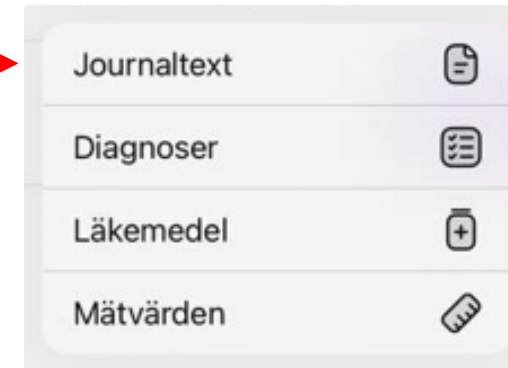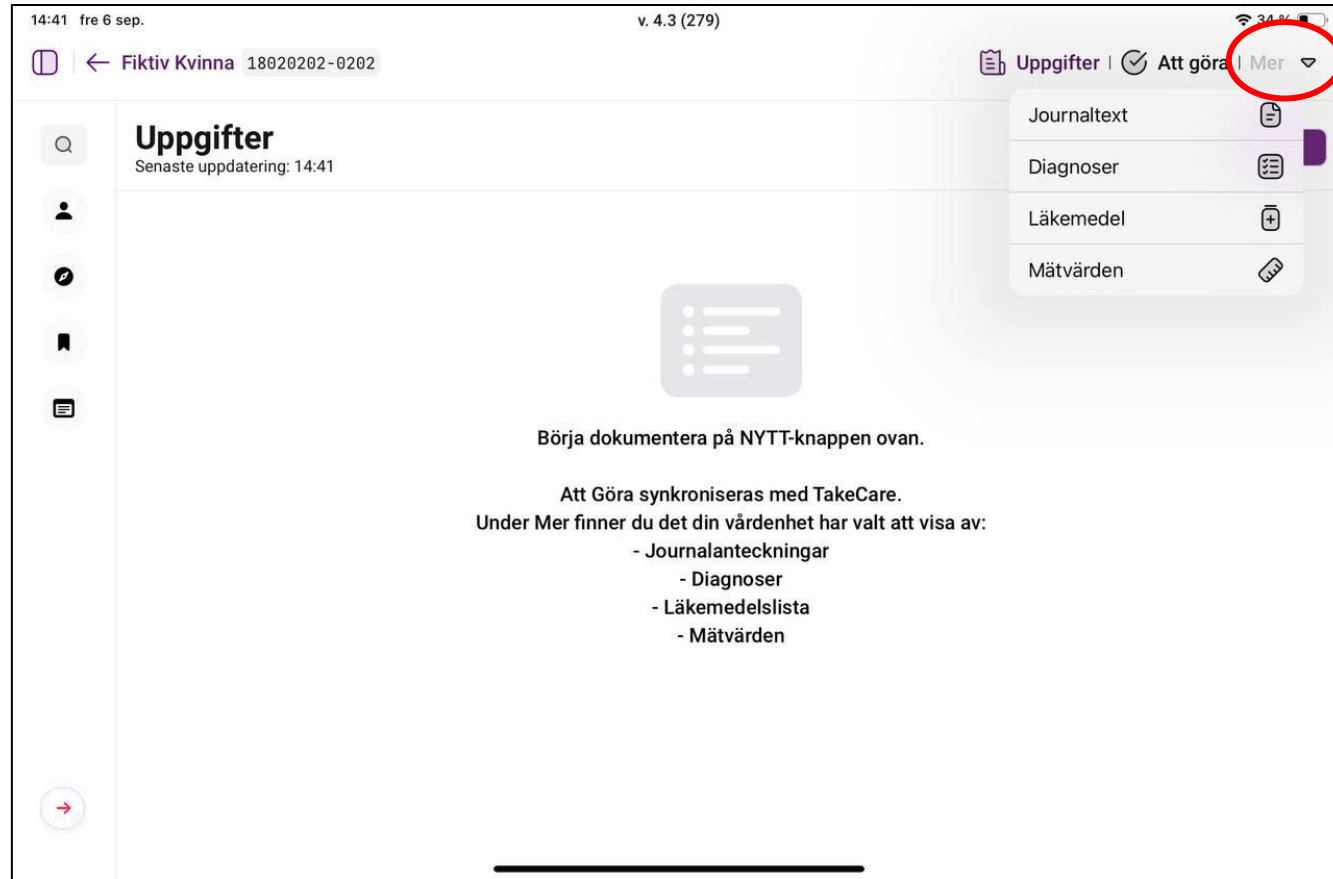

1. "Läsa TakeCare" moduler
 - Dokumentation
 - Diagnoser
 - Läkemedel
 - Mätvärden

iPad: Dokumentation – Välj utläsning från TakeCare



SwipeCare stödjer Journalfilter enligt Sammanhållen journalföring, så du väljer ditt urval. Dessutom tidsperiod för utläsning.

Går du utanför din spärrgrupp får du logga patients medigvande eller Kritisk situation. Läkemedelslistan är undantaget från journalfilter, du ser från alla vårdenheter i hela TakeCare

14:42 fre 6 sep. v. 4.3 (279) 34 %

Uppgifter | Att göra | Journaltext

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" **1** Filter

Dokumentation

Senaste uppdatering: 12:13

Sök dokument på namn Filter

2

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV
Aleris Palliativ avd Handen

Systemförvaltare Mia Hägglöf

Skapad (datum): 2024-02-05 13:14

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV
Aleris Palliativ avd Handen

Systemförvaltare Mia Hägglöf

Skapad (datum): 2024-02-05 12:08

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV
Aleris Palliativ avd Handen

Palliativt vårdbehov

Bedömning

Bedömning var 4:e tim enligt NVP 2D, (Nationell vårdplan för palliativ vård).

Smärta enl IPOS

Måttligt

Påverkat ansiktsuttryck Spänd och orörlig

Smärta

Vidbehovs läkemedel enligt ordination Lägesändring

Andnöd enl IPOS

14:56 fre 6 sep. v. 4.8 (279) 34 %

Uppgifter | Att göra | Journaltext

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Journaltext

Senaste uppdatering: 14:56

Sök dokument på namn Filter

3

Egenvårdsbedömning, Aleris ASIH/SPSV
Aleris ASIH Järfälla

Administrativ personal Cecilia Levin

Skapad (datum): 2024-09-06 10:02

IPOS bedömning, Aleris ASIH/SPSV
Aleris ASIH Botkyrka

Administrativ personal Cecilia Levin

Skapad (datum): 2024-09-05 19:00

Bedömning

Egenvårdsuppgift

Byte av läkemedelsplåster Hantera syrgas Skötsel av stomi Peritonealdialys

Egenvårdsförmåga

Hinder för att patient (eller annan) kan utföra egenvård: hörsel

Egenvårdsbedömning

Egenvård utförs Helg Patient kan själv med stöd av annan person ansvara för säkerheten i egenvården Patient kan själv utföra alla praktiska moment i egenvårdsuppgiften Egenvårdsuppgiften kan utföras på ett säkert sätt av annan person

Egenvård

Egenvård utförs av hemtjänst Samråd har skett med den verksamhet som ska hjälpa till med egenvården Egenvård påbörjas efter beslut om beviljat bistånd Patient har fått instruktion i utförande av egenvård Egenvård utförs på ett säkert sätt av annan person

1. Standard journalfilter utläsning är "Egna spärrgruppen" och tidsperioden är "Senaste månaden". För att ändra journalfilter trycker du på den orangea flaggan.
2. Här ser du journalanteckningar för patienten, scrolla neråt för att se fler. Klicka på kortet för att kunna läsa anteckningen till höger
3. För att uppdatera sidan så drar du vänsterkolumnen neråt.



iPad: Dokumentation – Välj utläsning från TakeCare

1. Vill du ha en annan filtrering klickar du på den orangea flaggan och då får du välja "Journalfilter" i en popup.

2. Väljer du "Alla vårdgivare" måste du registrera patientmedgivande

3. Välj tidsperiod du vill se anteckningar för

4. När du går ifrån filtrering på "Egen spärrgrupp" blir flaggan lila. Här kan du trycka igen för att ändra journalfilter.

5. Här kan du välja och läsa journalanteckningar för patienten





iPad: Dokumentation – Välj patientmedgivande

1. "Registrera patientmedgivande": Behöver du läsa journaler utanför din spärrgrupp behöver du registrera samtycke. Trycker du på "Registrera patientmedgivande" kommer till steg 3.
2. "Kritisk situation": Här klickar du om patienten t.ex. är medvetslös och ej kan ge samtycke men det bedöms vara av ytterst vikt att kunna se journaler från alla vårdgivare. Samtycket gäller endast under det tillfället du läser ut information. Sen kommer du till steg 4.
3. "Välj från kalender": Här behöver du välja hur länge patientsamtycket gäller. Den ställer sig automatiskt 1 månad framåt.
4. "Välj tidsperiod": Här väljer du tidsperiod du vill filtrera på.



iPad: Mätvärden – Välj utläsning från TakeCare

I SwipeCare kan du läsa mätvärden och använda olika Journalfilter, samt även läsa ut mätvärden inskickade via Mätvärdesmallar eller via Journaltext.

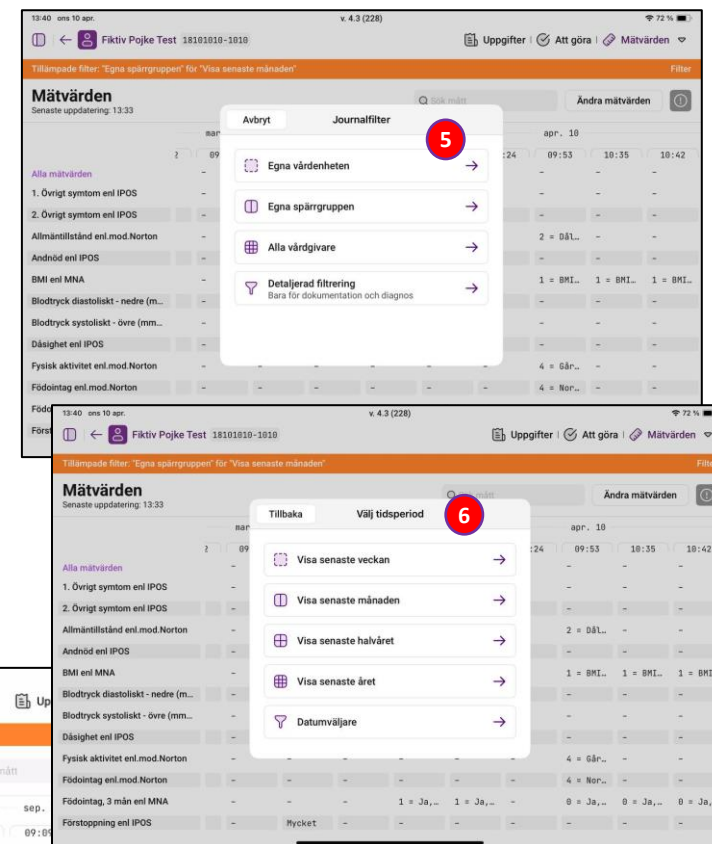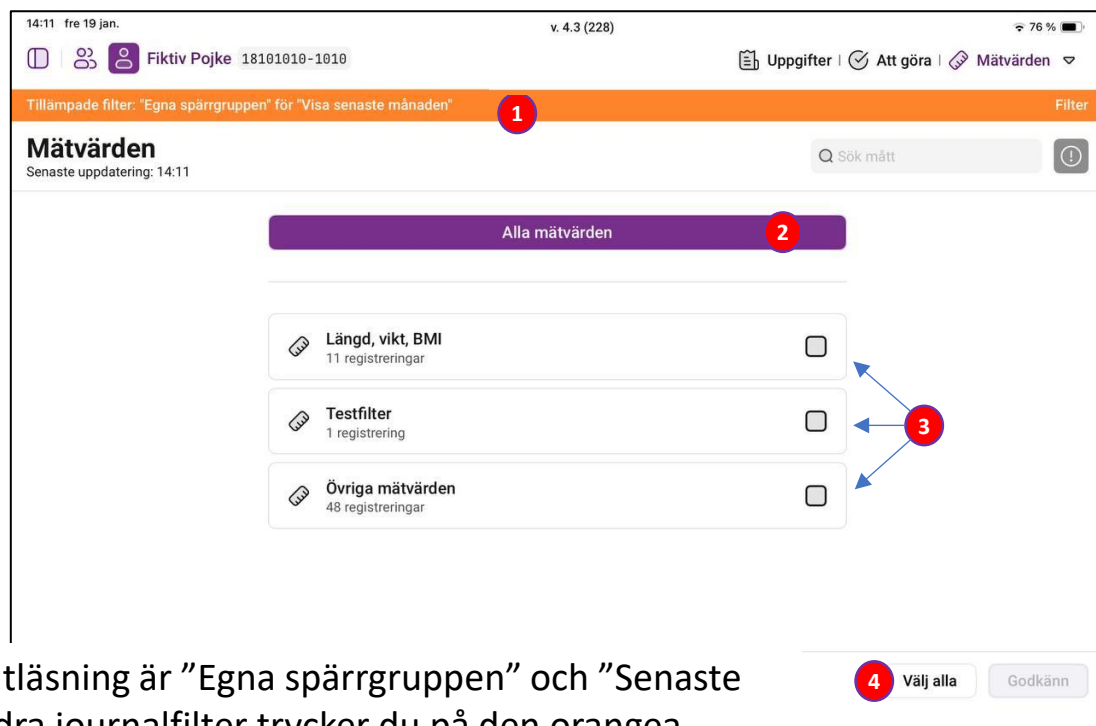

1. Default journalfilter utläsning är "Egna spårgruppen" och "Senaste månaden". För att ändra journalfilter trycker du på den orangea bannern och kommer till steg 5 & 6
2. Alla mätvärden: ofiltrerat, läser ut alla mätvärden i bokstavsordning oavsett filtrerade eller ofiltrerade. Väljer du "Alla mätvärden" kommer du direkt till utläsningen
3. Välj mätvärdesfilter: Specifika filter som enheten har valt att skapa
4. Välja alla: Klickar du här så väljer du alla filter ovan.
5. Journalfilter: Välj journalfilter
6. Välj tidsperiod: Tidsperiod för utläsning
7. För att uppdatera utläsningen så drar du sidan neråt.

	aug. 9	aug. 14	sep. 2	sep. 9	sep. 16	sep. 23	sep. 30
Vitalparametrar inkl NEWS2, vik...	-	-	-	-	-	-	-
Andningsfrekvens (andetag/mi...	50	48	50	50	50	50	50
Syremättnad (%)	89	90	97	96	95	98	99
Syrgas, NEWS	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Syrgasbehandling via	-	Grima	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	160	110	110	120	108	110	108
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	120	108	110	98	80	98	98
Pulsfrekvens (slag/min)	98	78	78	78	80	78	67
Pulsens rytm	-	Regelbu...	Öregelb...	Regelbu...	Öregelb...	Regelbu...	Regelbu...



iPad: Mätvärden – Utläsning av "Alla mätvärden"

SwipeCare läser nu ut mätvärden. Nedan ser du ofiltrerade och filtrerade mätvärden i samma vy.

10:52 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 10:46

Sök mått Ändra mätvärden

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Alla mätvärden	14:09	15:57	15:58	09:46	11:55	15:49
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	-
BMI	-	-	19	-	-	-
BMI enl MNA	-	1 = BMI...	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	-	-	110	-	110	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	-	-	-	-	110	100
Kontakttyp	a...	-	-	-	-	-
Längd (cm)	-	-	158	-	80	-
Läppar enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-
Medvetandegrad, NEWS2	-	-	-	-	-	V = rea...
Midjemått (cm)	-	-	-	-	-	-
Nasogastrisk sond, inspektion	-	-	-	-	-	Komplik...
Protes enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-

11:00 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 10:57

Andn Andn Ändra mätvärden

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	-

	22 feb. 26	mars 7	mars 13
Alla mätvärden	11:30	11:33	15:58
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	45	50	45
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	89	89	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	110	110	110
Kroppstemperatur (°C)	37	37	37
Medvetandegrad, NEWS2	Alert	C = nyt...	Alert
Pulsfrekvens (slag/min)	89	99	89
Smärtintensitet enl NRS	-	-	6
Syremättnad (%)	99	97	99

1. Översikt av Alla mätvärden (ofiltrerade OCH filtrerade i detta fall). Sorterade i bokstavsordning. Senast registrerade mätvärden längst till höger på skärmen.
2. Sökruta för att söka efter specifika värden
3. "Ändra mätvärden": Klicka här för att komma tillbaka till mätvärdesfiltrerna.
4. Klicka här för mer information om utläsningen
5. Du kan "highlighta" ett eller flera mätvärden genom att klicka på dem. För att ta bort markeringen klickar du en gång till på mätvärdet.
6. En popup med information om begränsningar i utläsningen. För att stänga klicka på "Jag förstår".

12:32 tis 13 feb. Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Dokumentation | Diagnoser | Läkemedel | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 12:32

Sök mått

	feb. 3	feb. 5
Alla mätvärden	01:07	12:08
1. Övrigt symtom enl IPOS	-	-
2. Övrigt symtom enl IPOS	-	-
Allmäntillstånd enl.mod.Norton	-	-
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-
Andnöd enl IPOS	-	-
BMI enl MNA	-	-
Begärda bolusdoser, intravenös...	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	-	-
Dåsighet enl IPOS	-	-
Fysisk aktivitet enl.mod.Norton	3 = Gär...	-
Födointag enl.mod.Norton	3 = 3/4...	-

SwipeCare

6 !

Läkemedelslistan får endast användas som komplement vid iordningställande och administrering av läkemedel.

Läkemedel som är spärrade hos annan vårdgivare syns inte på läkemedelslistan.

OBS: SwipeCare visar inte uträknade mätvärden vid dagsläget

Jag förstår



iPad: Mätvärden – Kommentarer

13:09 tis 13 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Faktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden
Senaste uppdatering: 13:09

Sök mått Ändra mätvärden

	12 feb. 13	09:29	08:01	09:06	09:12	09:39	09:46	09:50	10:06	11:00
Begärda bolusdoser, intratekal l...	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
Begärda bolusdoser, intravenös...	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Benomfång	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Benämning enl MoCA (/ 3 poäng)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berättat för närstående om sitt...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Blåsvolym före blåstömning, sc...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blåsvolym vid KAD-behandling,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolusdos. epidural läkemedelso...	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-

2

13:09 tis 13 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Faktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden
Senaste uppdatering: 13:09

Sök mått Ändra mätvärden

	12 feb. 13	09:29	08:01	09:06	09:12	09:39	09:46	09:50	10:06	11:00
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benomfång	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Benämning enl MoCA (/ 3 poäng)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berättat för närstående om sitt...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Blåsvolym före blåstömning, sc...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blåsvolym vid KAD-behandling,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolusdos. epidural läkemedelso...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MÄTVÄRDE: 30
KOMMENTAR: ar

30

3

13:32 ons 22 maj v. 4.3 (246) 27 %

Faktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden
Senaste uppdatering: 13:32

Sök mått Ändra mätvärden

	2 maj 7	08:19	08:19	08:21	08:21	12:53	14:46	14:47	15:00	15:53
Alla mätvärden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andningsfrekvens (andetag/mi...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andnöd enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
CGI - förändring efter behandlin...	-	-	-	2 = "H...	-	-	-	-	-	-
CGI - sjukdomens svårighetsgr...	3 = "Li...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dålig aptit enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inte a...
Illamående enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Måttligt
Kontakttyp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kroppstemperatur (°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Kräkningar enl IPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Värsta...
Medvetandegrad, NEWS2	t...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MÄTVÄRDE: 110
KOMMENTAR: Kommentar för detta mätvärde kan läsas via journaltext.


110

4



1. Lila ifylld cirkel betyder att det finns en kommentar som tillhör mätvärdet inskickat via mätvärdesmall.
2. Tom lila cirkel betyder att det finns en kommentar som tillhör mätvärdes inskickat via journaltext.
3. Klickar du på mätvärde med lila ifylld cirkel kan du läsa kommentar
4. Klickar du på tom lila cirkel kommer du få information om att kommentaren kan läsas i journaltext



iPad Mätvärden – Förinställda filter och ofiltrerade mätvärden

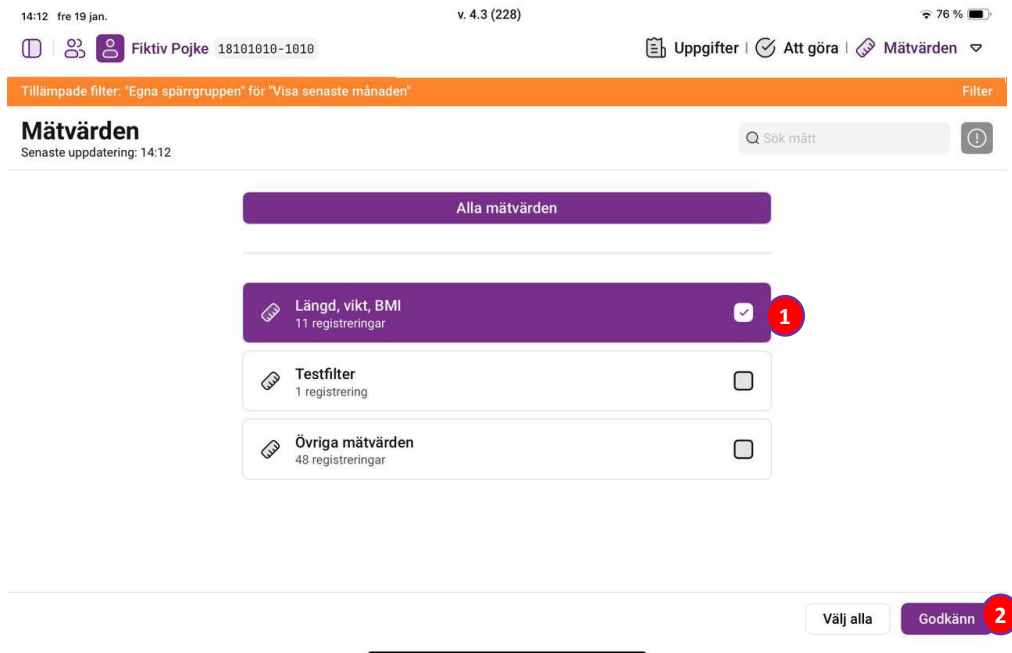

1. "Längd, vikt, BMI": Filter skapat av enheten
2. "Godkänn": DU behöver klicka på denna knapp för utläsning av valda filter
3. Utläsning av filtret "Längd, vikt, BMI"
4. Mätvärden med en prick har en kommentar som man kan öppna
5. "Övriga mätvärden": Ofiltrerade mätvärden

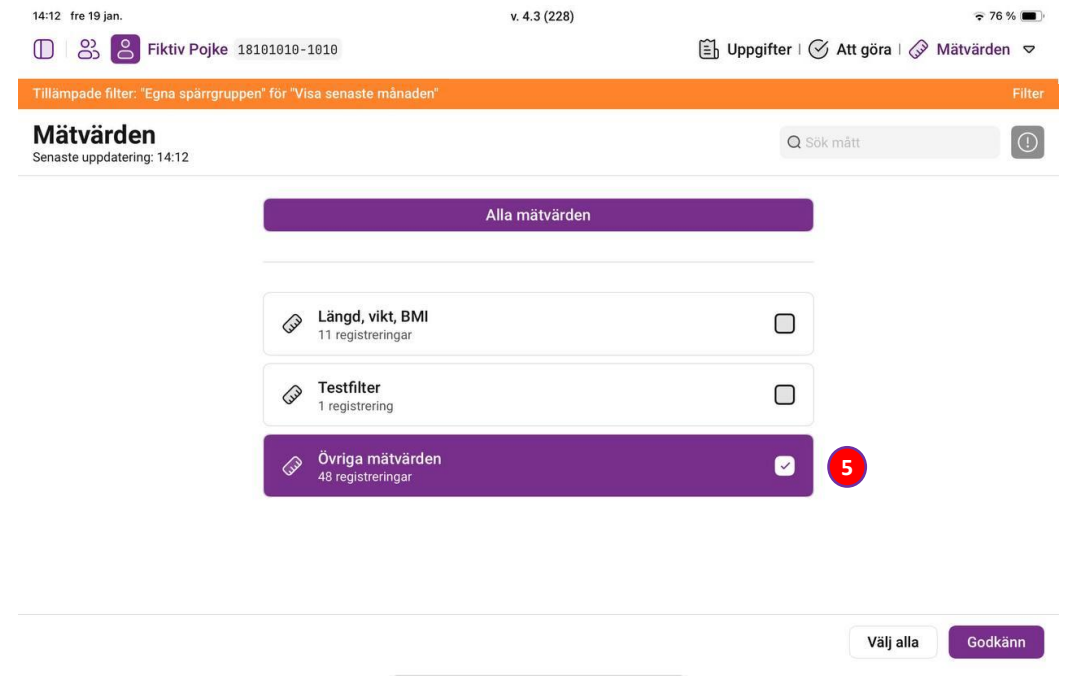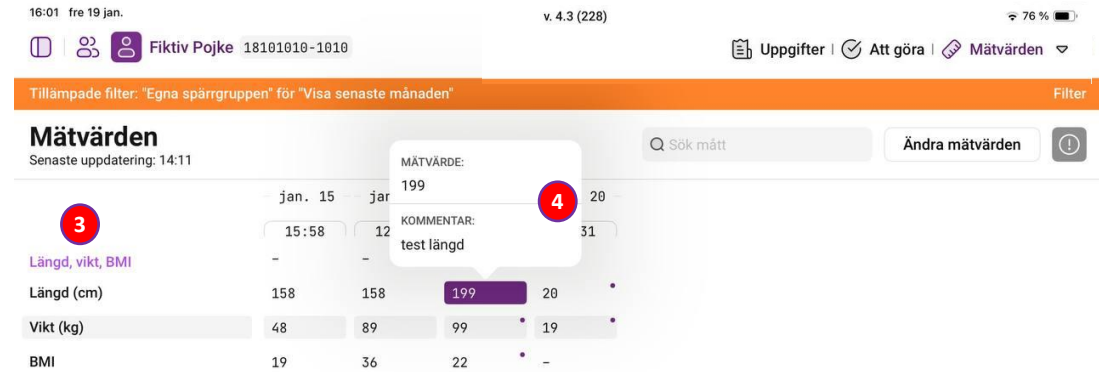



iPad: Diagnoser (Huvuddiagnoser)

19:47 lör 16 sep. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Kvinna 18020202-020

Uppgifter | Att göra | Diagnoser ▾

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "hela tidsperioden" Filter

Diagnoser

Senaste uppdatering: 19:44

Diagnoser	Kod	Registrerad	Senast uppdaterad	Kronisk
Essentiell hypertoni	I109	2023-09-15	2023-09-15	
Misstänkt cannabissyndrom	F129	2023-09-13	2023-09-13	
Akut stressreaktion	F430	2023-09-06	2023-09-06	
Reaktion på svår stress, ospecificerad	F439	2023-09-06	2023-09-06	
Irritabilitet och vrede	R454	2023-09-06	2023-09-06	
Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget	R458	2023-09-06	2023-09-06	
Ångesttillstånd, ospecificerat	F419	2023-09-06	2023-09-06	
Icke-organisk sömnstörning, ospecificerad	F519	2023-09-06	2023-09-06	
Smärta eller värk, ospecificerad	R529	2023-09-06	2023-09-06	
Sömnstörning, ospecificerad	G479	2023-09-06	2023-09-06	



iPad: Läkemedelslistan med ordination

Senast signerad	Vårdenhet	Preparat	Styrka	Adm. väg	Typ	Adm. Inst.	Dagens dosider
2021-12-15	Testenhet 5** CSTC SLV	Madopar Quick mite	50 mg/ 12,5 mg	Oralt	Sch	-	Enl schema
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Morfin Meda	10 mg	Oralt	Vb	+	
2022-05-18	Testenhet 5** CSTC SLV	Waran	2.5 mg	Oralt	Rb	-	20:00 - 3 st
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Losartan Actavis	100 mg	Oralt	Rb	-	?
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Betolvidon	1 mg	Oralt	Rb	-	?

1. Välj attt se aktuella läkemedel på egna/alla vårdenheter eller alla läkemedel inkl. utsatta sådana
2. Se när läkemedlen lästes ut, svep nedåt i fönstret för att uppdatera listan

Klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

Kolumnerna betyder:

3. Senast signerad
4. På vilken vårdenhet är det signerat
5. Läkemedlets namn
6. Styrka
7. Administrationsväg
8. Typ
9. Administrationsinstruktioner
10. Dagens dosider
11. Information om begränsningar
12. Stäng SwipeRead, återgå till patientprofilen



iPad: Läkemedelslistan / Läkemedelsordination

13:50 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 71 %

Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter Att göra Läkemedel

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "Visa senaste månaden" Filter

Läkemedel Senaste uppdatering

Senast signerad 2023-08-28

Avbryt **2** **Alvedon** Period

Utdelningstid	02:00	agens dostider
Dosering	2 st	2:00 - 2 st
Utdelningstid	08:00	8:00 - 2 st
Dosering	2 st	4:00 - 2 st
Utdelningstid	14:00	0:00 - 2 st
Dosering	2 st	
Utdelningstid	20:00	
Dosering	2 st	
Ordinationstyp	kontinuerlig (varje dag)	
Preparatnamn	Alvedon	
Läkemedelsform	Filmdragerad tablett	
Adm. Väg	Oralt	
Ordinationsorsak	1 ↓ Mer nedan	

Adm. Väg

Ordinationsorsak

Behandlingsmål

Adm. Instruktion

Generika (Ersättlig?) Ja

Insatt 2023-08-28 13:21

Förskrivare Mia Hägglöf **3**

Hit kommer du genom att klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

1. Mer nedan betyder att du får svepa nedåt för att komma längst ned i ordinationen
2. Avbryt och stäng fönstret
3. Förskrivande läkare står längst ned.



iPad: Läkemedelslistans begrepp

Vi använder TakeCares xChange API:
Medications.MedicationHistoryGet

De små siffrorna efter begreppen nedan visar på vilket element i TakeCares API som använts för att skapa informationen i SwipeRead.

Framsidan: Läkemedel

- Senast signerad¹⁵
- Vårdenheten¹⁷
- Preparat⁶³
- Styrka⁷¹⁺⁷²
- Adm.väg³⁵ (dvs Administreringsväg)
- Typ²¹ (dvs Ordinationstyp: Vb=Vid Behov, Rb=Regelbundet, Sch=Schema)
- Adm. Inst. (+ tecknet betyder bara att det finns administrationsinstruktioner, klicka på raden och läs Ordinationsdetaljer)
- Dostid: Dosschema⁸⁶⁻⁹⁶_ Dostext¹⁰¹

Ordination (när man klickat på ett läkemedel)



- Ordinationstyp²¹
- Preparatsnamn⁶³
- Administration³⁵⁺³⁷
- Ordinationsorsak³⁸
- Behandlingsmål³⁹
- Administrationsinstruktioner⁴⁰
- Generika (Ersättlig?)⁴⁴
(Ja=får ersättas med generika / Nej=Får ej ersättas med generika)
- Skapad¹¹
- Review Date⁴¹

Administreringstillfälle (ordination)

- Utdelningstid (fr.o.m.)⁵⁰⁻⁵³
- Dostext¹⁰¹

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

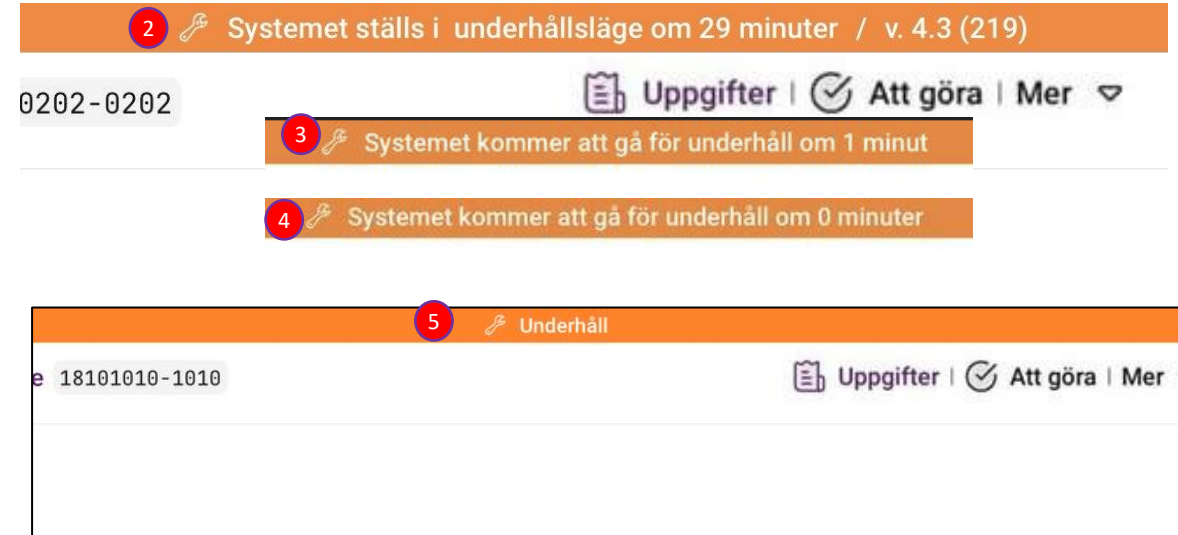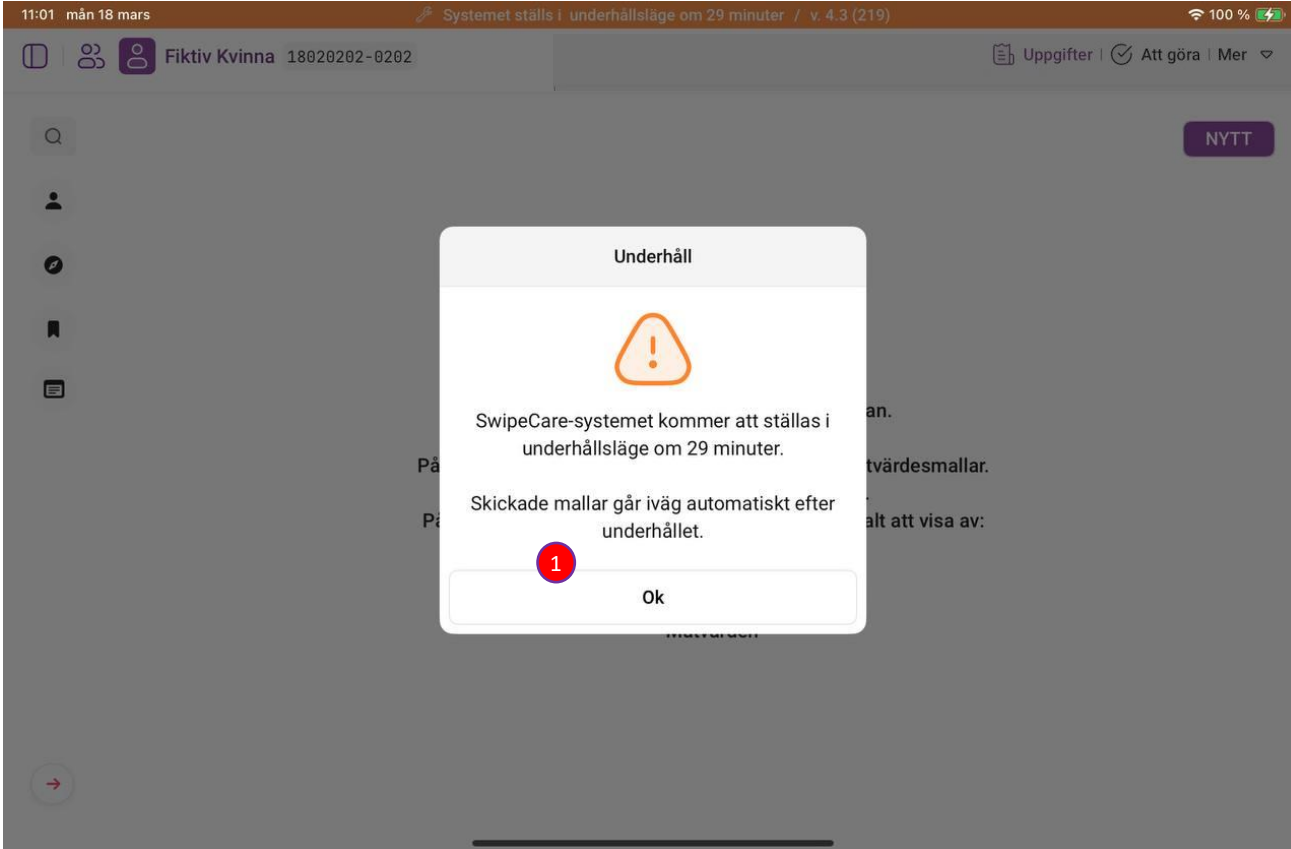

1. Popup med information om kommande underhåll. Klicka på Ok för att stänga.
2. Nedräkning: Systemet kommer att gå för underhåll om 29 minuter.
3. Nedräkning 1 min
4. Nedräkning 0 min
5. Underhållsläge: Du kan fortsatt journalföra med mallarna, skickar du dem till TakeCare så kommer de köas och skickas automatiskt iväg till TakeCare så fort uppdateringen är klar.

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.



16:26 fre 9 feb. 1 Underhåll / 2 väntande åtgärder 17 %

Fictiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo NYTT

Allmän information Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...
Adressinformation Övriga telefonnummer, Adressrad 1, ...
Etiketter Hantera etiketter
Notiser Spara

Formulär

Mätvärden inkl NEWS2 Formulär maintenance
IPOS bedömning Formulär maintenance

maintenance Försök igen

Göm

16:28 fre 9 feb. Fictiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer

NYTT

maintenance Försök igen

13:28 ons 22 maj v. 4.3 (246) Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Uppgifter | Att göra | Mer

Uppgifter Senaste uppdatering: 12:34 NYTT

Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din vårdenhets valt att visa av:
- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden

1. Underhåll / 2 väntande åtgärder: Två mallar är köade och kommer skickas iväg så fort systemet är uppdaterat
2. Mallarna som är köade
3. Försök igen: Den orangea flaggan är borta och appen är uppdaterad. Tryck på Försök igen så laddar du om sidan och ser att mallarna gått iväg.
4. Patient sidan är tom och alla mallar har skickats iväg till TakeCare

iPad: Offline-läge

Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.



Namn	Nummer	Senaste uppdatering
Fiktiv *****	18101010-****	2024-02-09
Apptest III ***	19791230-****	2024-02-08
Komma *****	19530416-****	2024-02-04
Fiktiv *****	18040404-****	2024-02-01
Fiktiv *****	18020202-****	2024-02-01
App Testperson *	19440813-****	2023-12-15

Sök i patientinfo

- Allmän information
- Adressinformation
- Etiketter
- Notiser

Nytt mätvärde Ny journalanteckning

! Du har ingen internetanslutning. Anslut din iPad till internet och försök igen.

Försök igen

Samtycke

-Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?
-Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient?
-Ta kontakt med kommun och/eller primärvården för planering av patients utskrivning?
-Får närstående kontaktas?

Uppgiftslämnare

-Uppgifter hämtad från/av

Samtycke

Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

☒ Ja

☐ Nej

☐ Ej gått att efterfråga samtycke

Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient



Mer nedan

1. "SwipeCare är offline": Den röda flaggan indikerar att internet saknas men du kan fortfarande öppna patienter
2. På patientsidan får du information om att du saknas internet. Du kan fortfarande dokumentera i journalmallar.
3. Dokumentera i valfri journal- eller mätvärdesmall och tryck sedan på "Skicka till TakeCare".

iPad: Offline-läge



Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

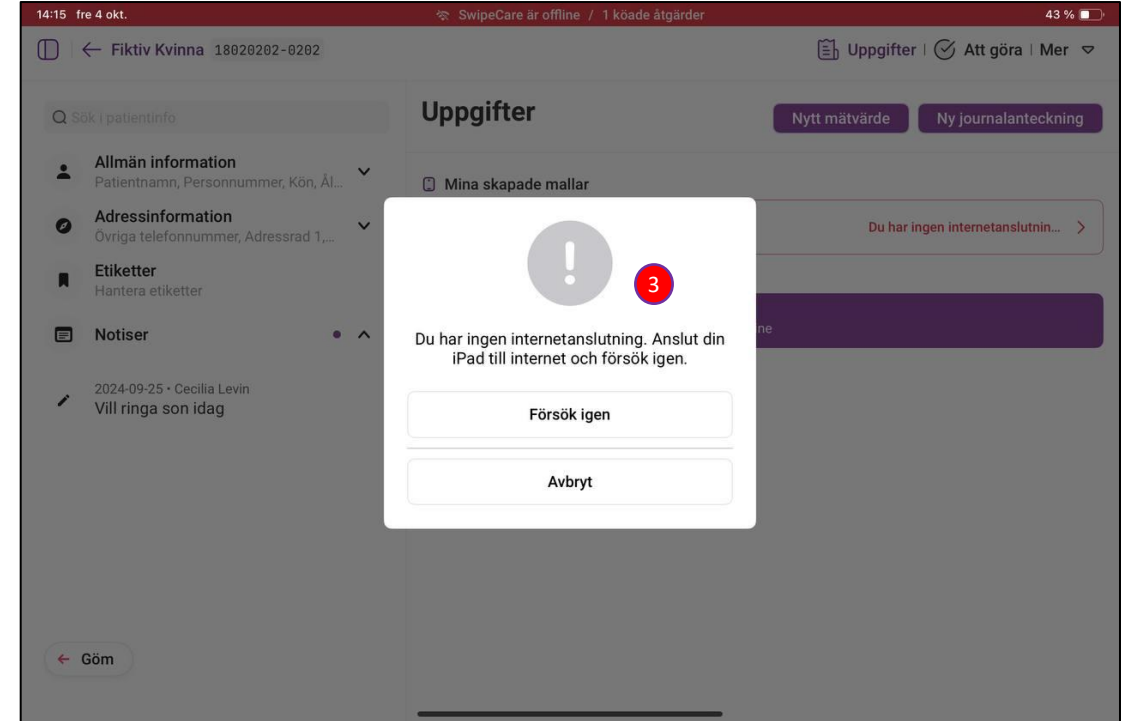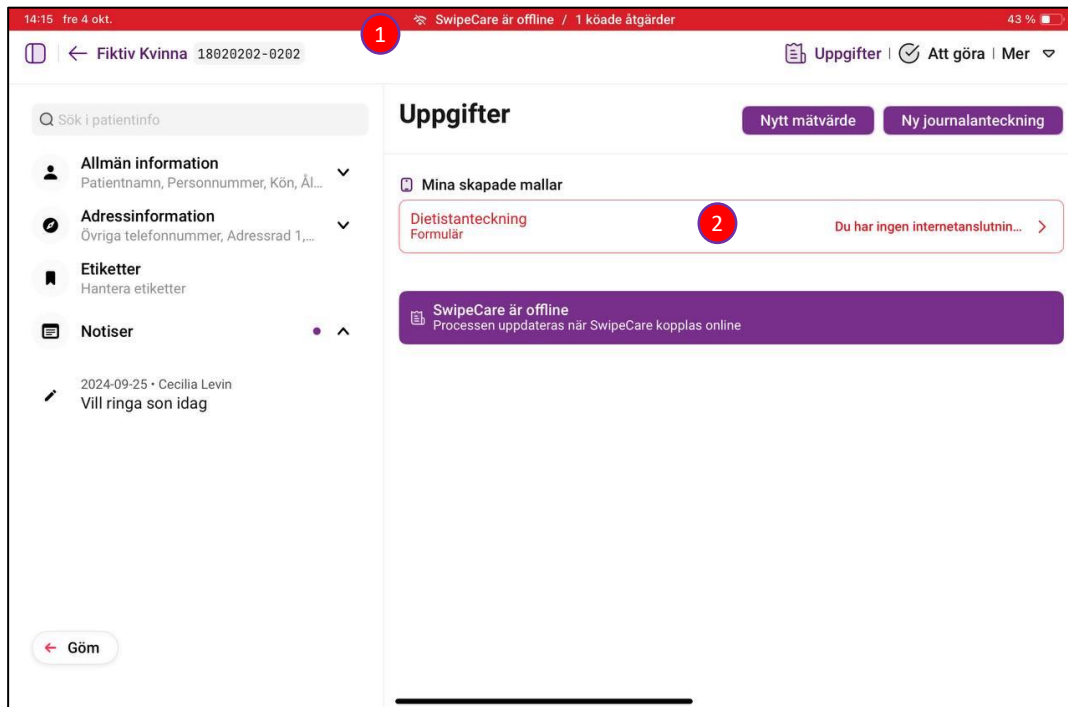

1. "SwipeCare är offline/1 pågående åtgärder": Den röda flaggan indikerar att appen är offline samt att 1 mall väntar på att skickas
2. Här ser du vilken mall som ligger kvar på iPaden. Den skickas automatiskt iväg när internet finns. Klickar du på mallen får du felmeddelandet 3.
3. Felmeddelande som informerar dig om varför mallen inte skickats iväg, i detta fall pga ingen internetuppkoppling.



Felhantering och felmeddelanden

--



Hur hitta formulär/mätvärden som inte gått iväg till TakeCare?

De troligaste vanligaste felen finns som Tasks som syns i användarnas iPads och de kan därmed kan sökas upp i Teamarbetsvyn:

- **Granska anteckning: (mallnamn)**
 - Kommer tex om de fyllt i en mätvärdeskommentar utan att fylla i själva mätvärdet.
 - Denna uppgift måste rättas i SwipeCare portalen, går ej att göra i paddan. Tale med er IT support.
- **Fel vid sändning**
 - Kan bero på en massa orsaker i TakeCare eller SwipeCare.
 - Typiskt kommer vara "Illegal argument!"-fel som kommer från TakeCare:
 - (Failed to write casenote. User inactivated, eller Patient id failed check.)

Översikt Teamarbete Patienter

Byt vårdenhet Ljust tema Svenska Sara Bern

Teamarbete

Vårdflöde: Alla

Typ: Alla

Task filter: Alla

Etiketter: Alla

Ansvar: 1

Förfalldatum: Alla

Rensa alla

Sök på uppgiftsnamn

Task filter:

Uppgiftstyp	Patientens namn	Personnummer	Flöde	Förfalldatum
manualPlus	Fel vid sändning: NEWS 2	Test Test	1810101010	Mätvärden till TakeCare: NEWS 2 2023-09-21



För **Fel vid sändning** så är det oftast TakeCare som klagar på fel parametrar:

- Användaren är inaktiverad i TakeCare om detta felmeddelande kommer:
"Illegal argument! (Failed to write casenote. User inactivated:
Om användaren bara loggar in i TakeCare igen så blir användaren aktiverad och anteckningen kan skickas.
- Användaren har skrivit fel personnummer på patient vid detta felmeddelande:
Illegal argument! (Failed to write casenote. Patient id failed check. Fail-code: -4)
Personnummer kan ej justeras i SwipeCare. För över information om patienten manuellt från SwipeCare till TakeCare.
Använd gärna streckkodsläsare-funktion i SwipeCare för att undvika denna typ av problem.
- Användare har inte TakeCare behörighet på denna vårdenhets vid detta felmeddelande:
Unauthorized request! (Failed to write casenote. User has not rights to this ward....

Vid **Kräver åtgärd**: "User is deactivated", så är användaren markerad som Inaktiv i SwipeCare