



Användarmanual

SwipeCare Version 4.2.30 – Automatiserat vårdstöd

iPad

- kräver iOS 17.0 eller senare

2025 10 17

SwipeCare

2023-08-15



EUDAMED-DI: B-SwipeCare4JF



Strikersoft


Isafjordsgatan 39, 164 40 Kista, Sweden

www.strikersoft.com Org. nr. 556661-1637




Efter ny-/ominstallation av SwipeCare 4 app på iPad:

Välj organisation (OBS: Detta kan redan vara gjort av er tekniska support)

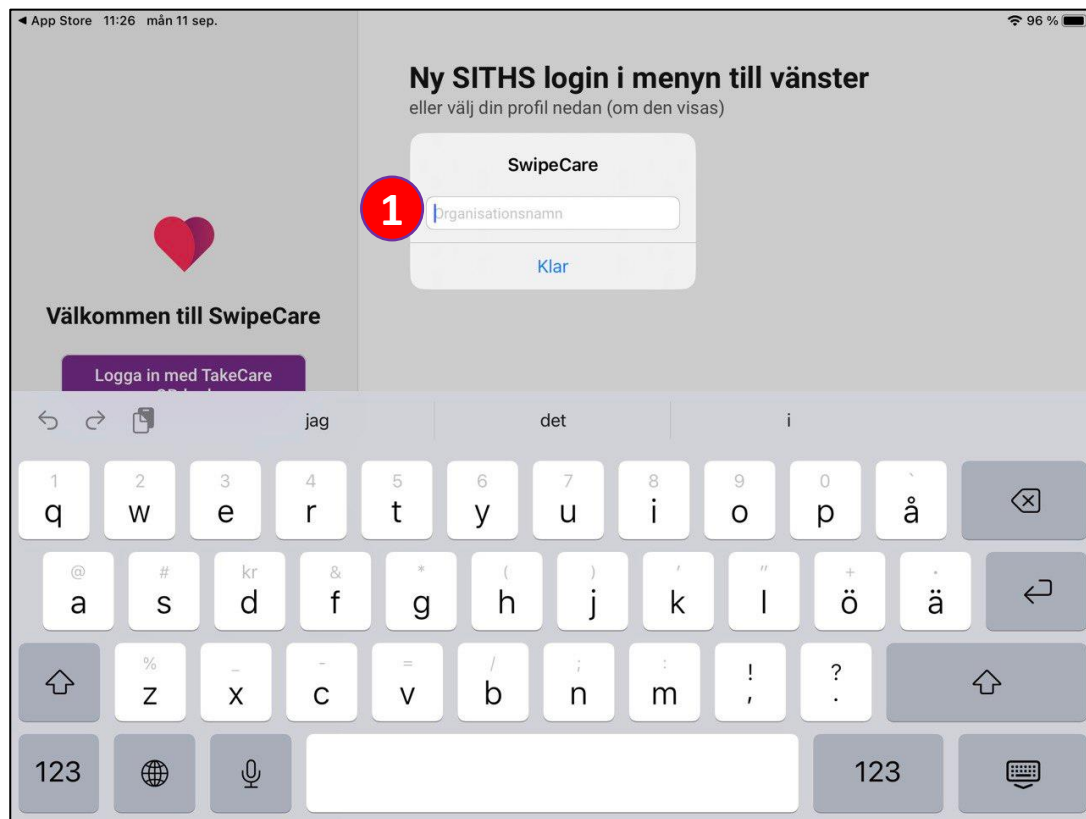


1. Skriv in din organisation: t.ex RegionStockholm, Aleris, Sophiahemmet, Danderyd
2. OM du har access till flera vårdenheter så får du välja i en lista

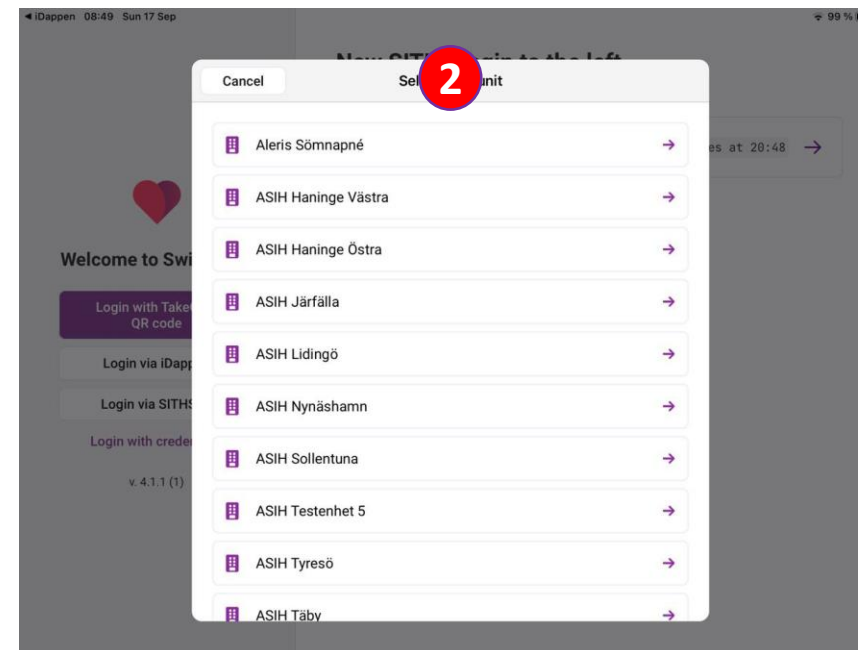



iPad: Logga in

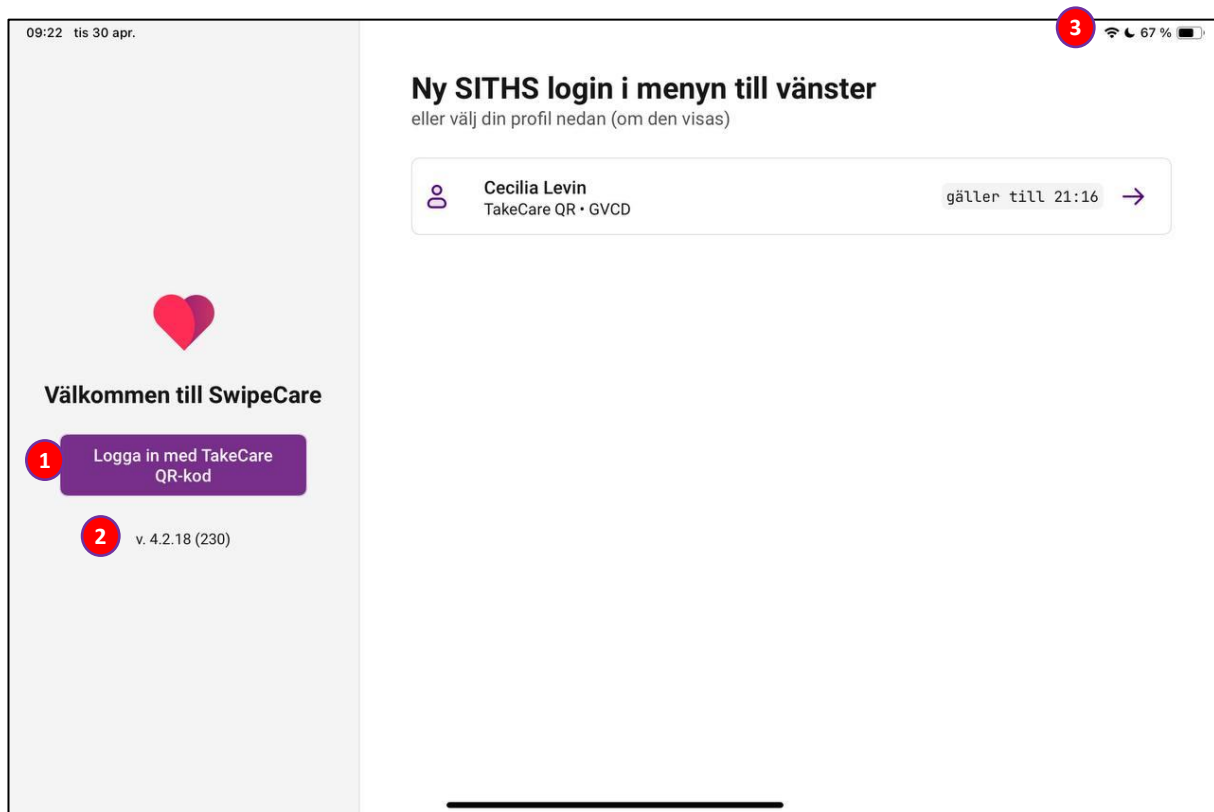


1. Logga in med din QRkod från TakeCare (se nästa sida)
2. Versionsnummer på appen (nu 4.2.21)
3. Ikon för att visa om du är på WIFI (eller mobilnät)
Har du ingen täckning visas en röd ribba överst med texten "SwipeCare är offline"
4. Login profil ("kort login") som visar hur du loggat in och hur länge din profil med personlig PIN är giltig innan du behöver logga in från början på vänster sida




iPad: QR kods login efter du tryckt på

Logga in med TakeCare
QR-kod

Inne i TakeCare på PC:

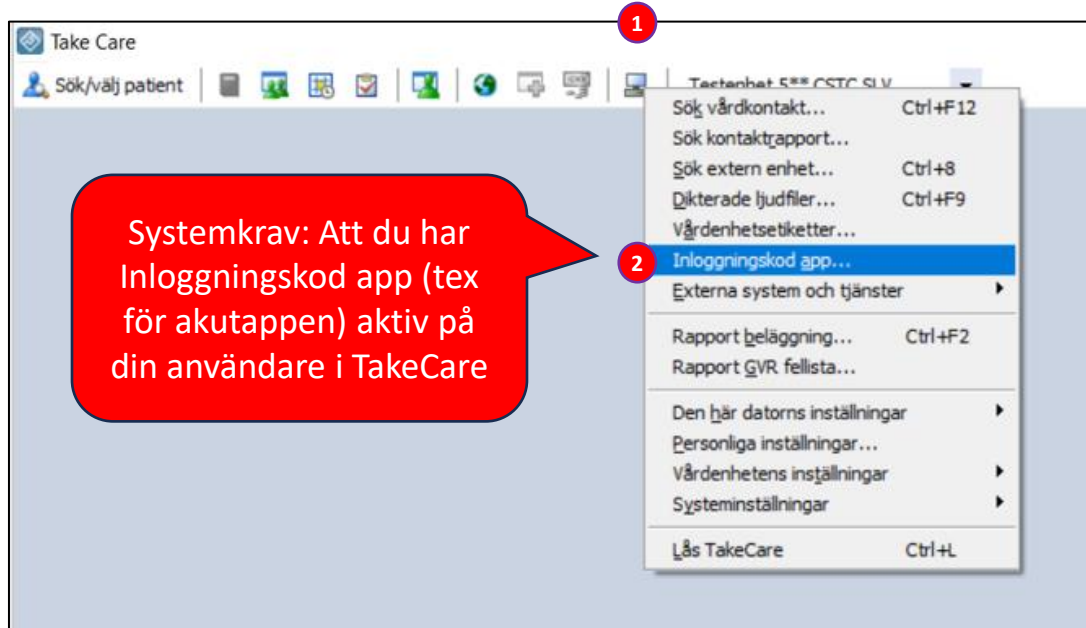

Använd PIN 2 för Underskrift.
På SITHS kortet finns PIN 1 för Inloggning
och PIN 2 för Underskrift

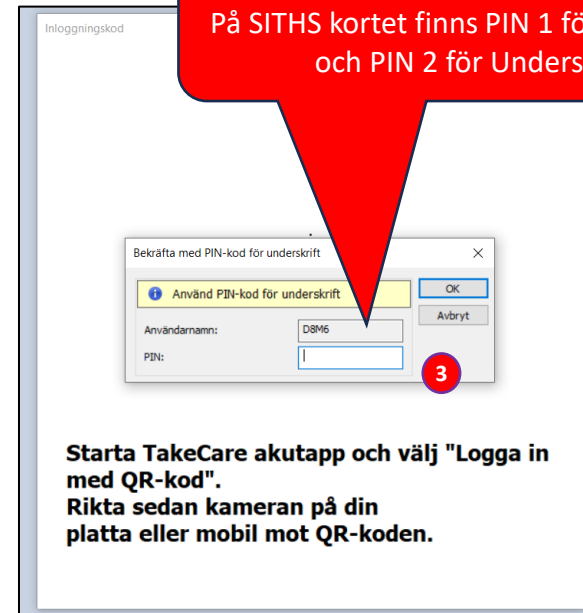


Starta TakeCare akutapp och välj "Logga in med QR-kod".
Rikta sedan kameran på din platta eller mobil mot QR-koden.

1. Välj TakeCare Systemmeny (PC ikonen) inne i TakeCare på din egen inloggning
2. Välj Inloggningskod app...
3. Mata in din PIN kod för **signering (=PIN2)**
Notera att du kan välja att ändra din SITHS PIN2 till något du kommer ihåg. Det görs inte inne i SwipeCare.
4. Fota QR koden med SwipeCare iPad
5. VIPS, så är du inne i SwipeCare



iPad: Välj din egen Personliga PIN


Välj och upprepa din personliga PIN

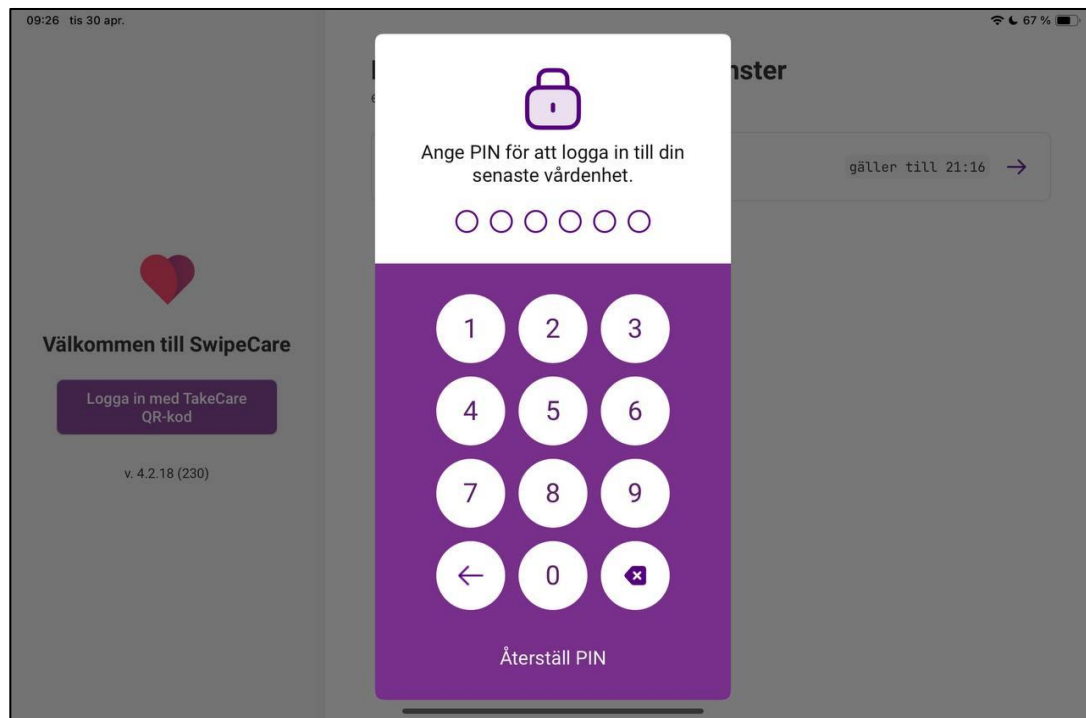

- **VIKTIGT:** Den PIN du väljer ska vara personlig. Den är kopplad till ditt HSA ID som används av SwipeCare för att skriva/läsa mot TakeCare.
- Denna PIN använder du för att låsa upp SwipeCare från standbyläge (under giltig TakeCare session). Er IT kan ha autostandby på en viss tid, varefter PIN måste användas för att fortsätta arbeta.
- Du kan också använda denna PIN för att låsa upp iPaden med din giltiga profil från högersidan på loginsidan.
- Om du har glömt din personliga PIN kan du trycka på "Återställ PIN"
 - Då öppnas automatiskt kameran för att du ska kunna skanna din QR-kod i TakeCare igen. Sen får du välja PIN kod igen.



iPad: Välj vårdenhet

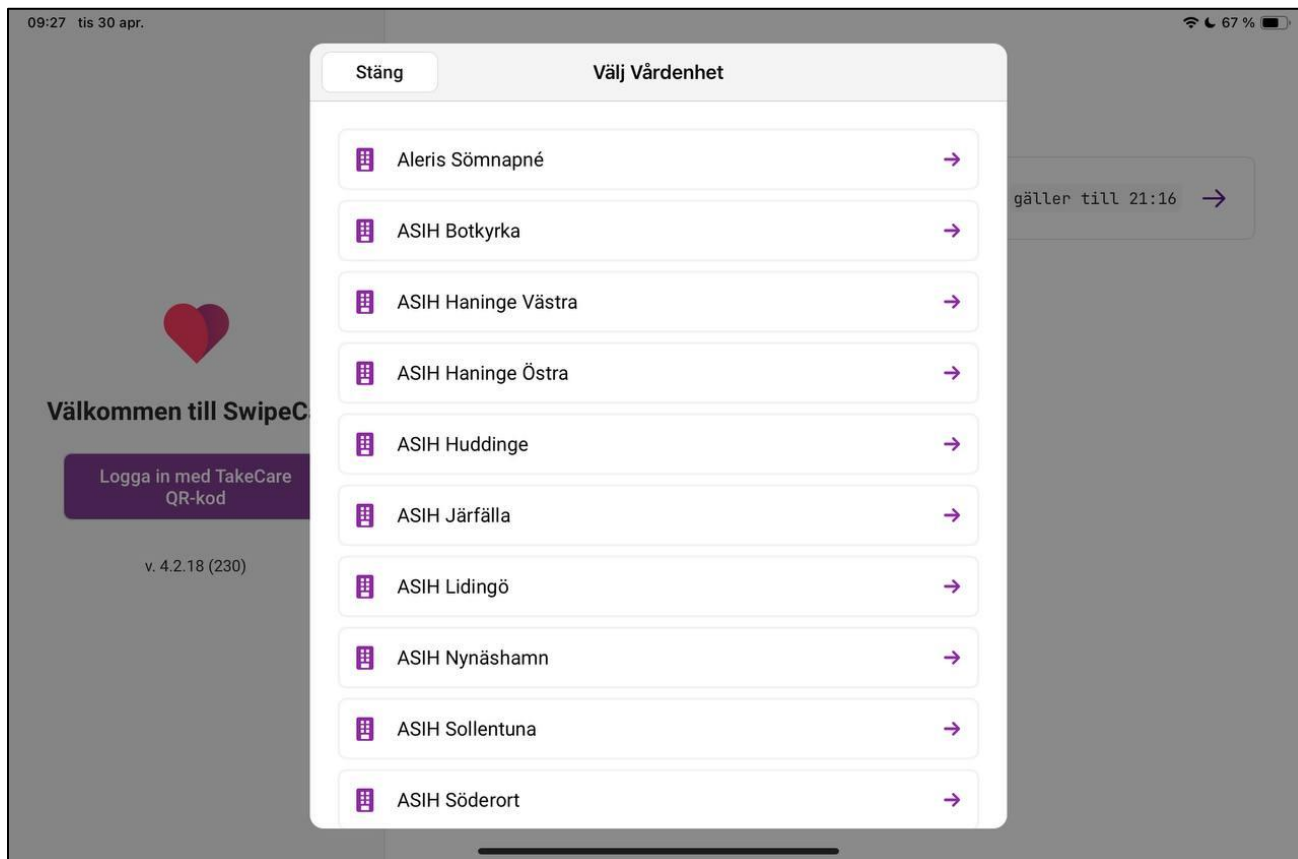

- Om du har access till flera vårdenheter får du välja vårdenhet här

iPad: Vårdenhetens patientlista



4 sista siffror i personnummer maskerade med stjärnor

09:27 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Q Sök på Namn/Personnr... Visa Skanna Lägg till

↓	↑↓	Nummer	↑↓	Namn	
1:2		19121212-****		Tolvan	
2		19500505-****		Linda Testsson	•
3:1		19500505-****		Pelle Svensson	
4:2		18101010-****		Fiktiv Pojke Test	•
5:2		99201857-****		Barn Under 13 Hd	
6		19810107-****		Klas Testsson	
7:2		18020202-****		Fiktiv Kvinna	
8		19791230-****		Apptest Testperson III	
K84 sal 1		19530416-****		Karin Komma	
Staffans		99200376-****		Kranksson Kalle	
		18040404-****		Fiktiv Flicka	
		18121212-****		VRM Tolvan	

Omaskerade patienter (utan stjärnor)

09:27 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Q Sök på Namn/Personnr... Dölj Skanna Lägg till

↓	↑↓	Nummer	↑↓	Namn	
1:2		19121212-1212		Tolvan	
2		19500505-0546		Linda Testsson	•
3:1		19500505-0520		Pelle Svensson	
4:2		18101010-1010		Fiktiv Pojke Test	•
5:2		99201857-5395		Barn Under 13 Hd	
6		19810107-9294		Klas Testsson	
7:2		18020202-0202		Fiktiv Kvinna	
8		19791230-9296		Apptest Testperson III	
K84 sal 1		19530416-2349		Karin Komma	
Staffans		99200376-5399		Kranksson Kalle	
		18040404-0404		Fiktiv Flicka	
		18121212-1212		VRM Tolvan	

1. Plats: Här läses vårdplats ut från TakeCare. Har en patient blivit tilldelad vårdplats i TakeCare syns det här.
2. Patient som antingen är inskriven men inte tilldelad vårdplats eller patient som manuellt lagts till i SwipeCare.
3. Tid för när listan senast uppdaterats. För att uppdatera drar man listan nedåt, svep neråt.
4. Sökruta för att söka efter patienter. Antingen på namn eller personnummer.
5. Genom att trycka på ögat i höger hörn kan du avmaskera personnumret. Standard är att de 4 sista är maskerade.
6. Här kan du skanna t.ex. streckkod på patientens armband och på så sätt lägga till patienten eller öppna patientens profil. (För t.ex. ökad patientsäkerhet)
7. Genom att trycka på denna knapp kan du manuellt lägga till en patient.

SwipeCare har inte tillgång till spärrad patientinformation. Du kommer alltså inte kunna läsa ut eller skicka information till TakeCare på patienter med låst journal.




iPad: Vårdenhetens patientlista



1. Viktigt att kolla på "Senast uppdaterad" där det indikeras om du behöver uppdatera patientlista. Detta gör du genom att svepa patientlistan neråt. Efter 12 timmar blir texten röd för att det ska vara tydligt för användaren att listan bör uppdateras.



iPad: Addera patienter

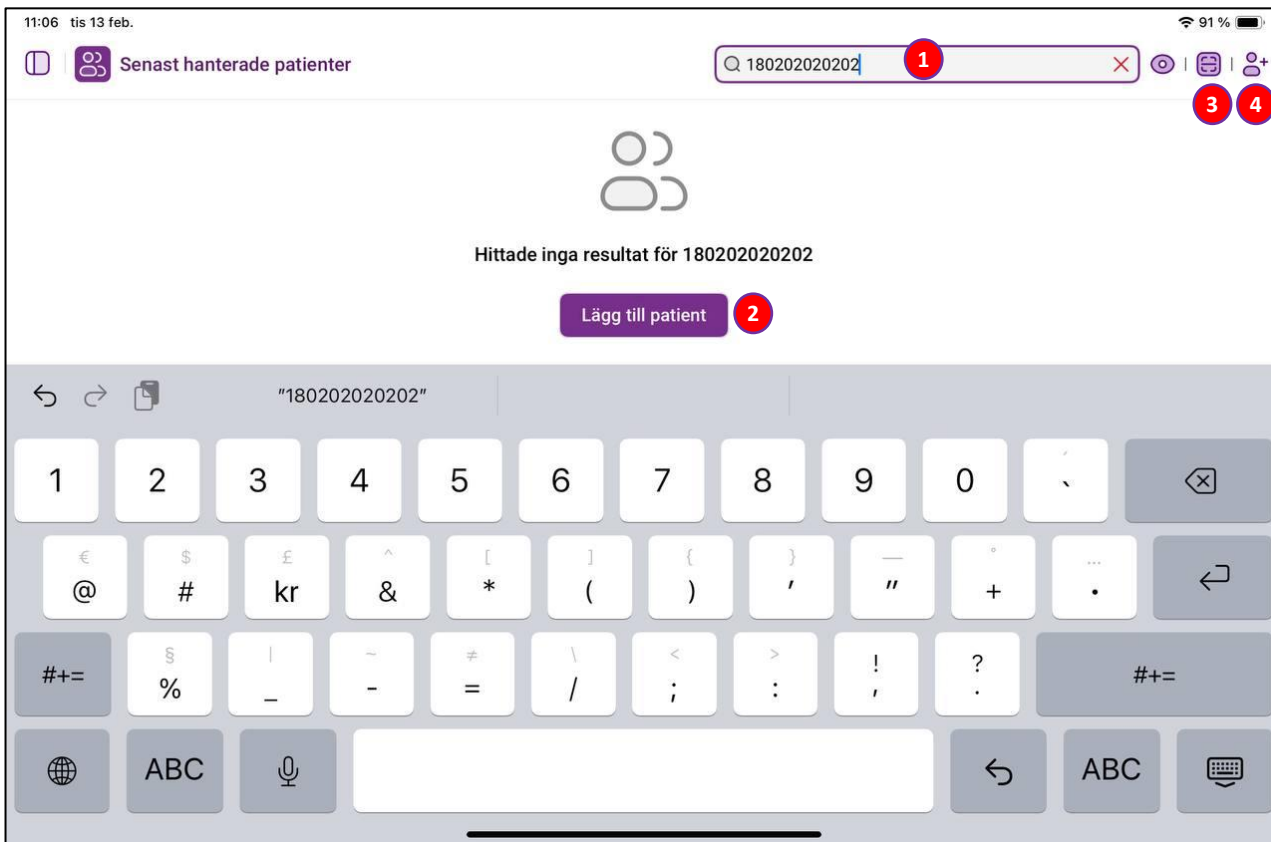

1. Sök patient (i SwipeCare systemet) på personnummer
2. "Lägg till patient": Om SwipeCare inte hittar patienten i sitt system så trycker du på den **lila knappen** för att addera patienten med det nummer du skrev i sökfältet.
3. Addera patient genom att scanna streckkod/QR kod
4. Addera patient manuellt



iPad: Lägg till ny patient

iDappen 17:51 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer T.ex. 1912121212 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn SMS-nummer E-post Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2 Postnummer Stad

Lägg till patient

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer 19750806-8413 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn App Testperson X E-post T.ex. namn.namn@mail.com

Lägg till patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 å

q w e r t y u i o p

@ # kr & * () ' " + .

a s d f g h j k l ö ä

↩ % _ - = / ; : ! ? ↵

123 🌐 🎤 123 📄

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer Reservnummer 180404040404

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn Tolvan TolvanSSon E-post SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster


Adressrad 1 Adressrad 2 Postnummer Stad

Lägg till patient

- Patientid och namn är obligatoriska uppgifter.
- Om ni har funktionen SPAR, så läggs namnet till automatiskt
- Vid journalskrivning förs endast patientid över till TakeCare, som lägger till namnet själv.



iPad: Vårdenhetens patienter

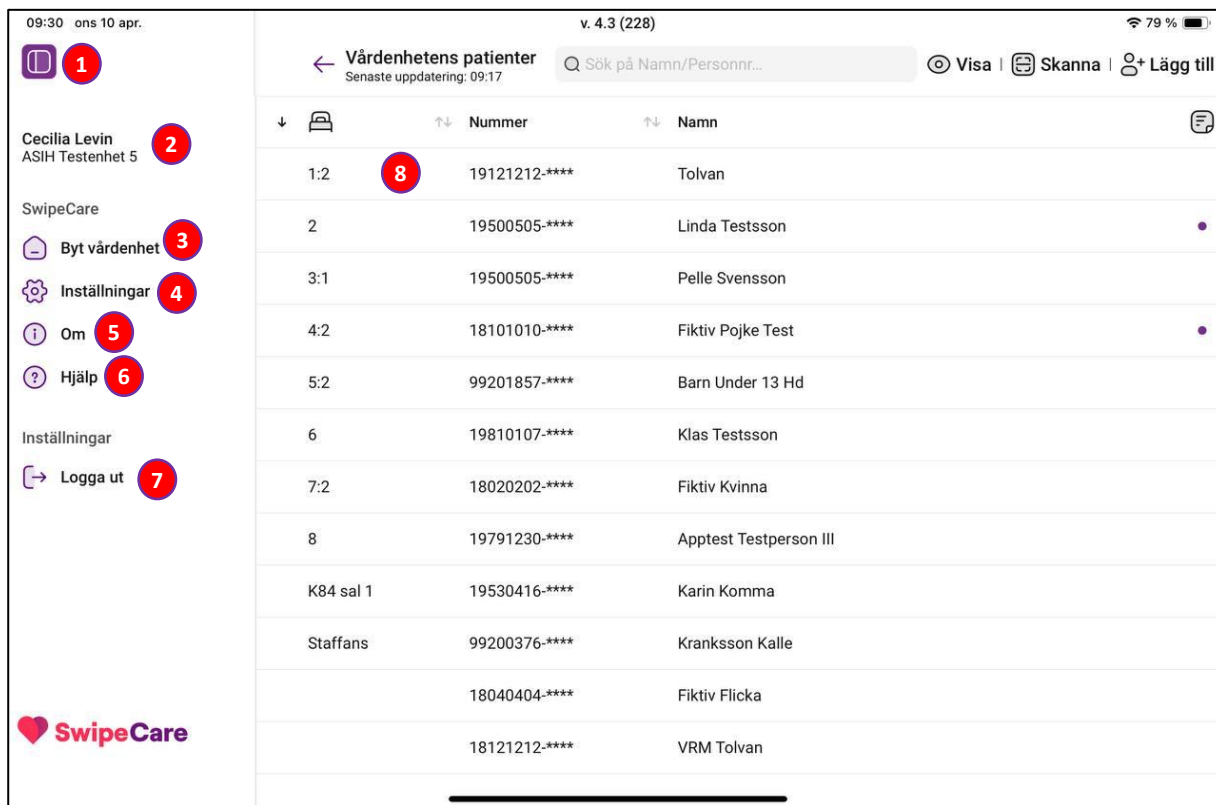



iPad: Arbetslista i patientlistan, Notiser

09:31 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 79 %

Vårdenhetens patienter Senaste uppdatering: 09:17

Sök på Namn/Personnr...

Visa Skanna Lägg till

↓	↑↓ Nummer	↑↓ Namn	
1:2	19121212-****	Tolvan	3
2	19500505-****	Linda Testsson	4
00505-****	Pelle Svensson		1 2 Fäst Notiser Ta bort
4:2	18101010-****	Fektiv Pojke Test	
5:2	99201857-****	Barn Under 13 Hd	
6	19810107-****	Klas Testsson	
7:2	18020202-****	Fektiv Kvinna	
8	19791230-****	Apptest Testperson III	
K84 sal 1	19530416-****	Karin Komma	
Staffans	99200376-****	Kranksson Kalle	5 6 7
	18040404-****	Fektiv Flicka	Lösgör Notiser Ta bort
	18121212-****	VRM Tolvan	

Arbetslista - "Fäst" dina patienter högst upp i patientlista

1. Slep patienten åt vänster
2. Välj Fäst
3. Patienten stannar högst upp i din lista, på **denna** iPad.
 - Om du loggar ut och in igen stannar Fästa patienter i din arbetslista
 - Om du tar en annan padda får du skapa din arbetslista på nytt.
4. Notiser. Har patienten en notis, så syns det som en prick.
5. Lösgör: Patienten är inte fäst längre
6. Här kan du också läsa/skapa notiser på patient.
 - OBS: Notiser journalförs inte i TakeCare.
7. Ta bort: Ta bort patienten från patientlistan

iPad: vänster ram innehåller generell information om patienten, den är synkad med vårdgivarportalen



23:11 sön 21 sep. Costner Testperson 99200061-5217

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

Allmän information

Patientnamn
Costner Testperson

Reservnummer 992000615217

Kön - Ålder -

Email -

Telefonnummer -

Tillåt e-post-aviseringar

Tillåt SMS-aviseringar

Adressinformation

Övriga telefonnummer, Adressr...

Etiketter

Hantera etiketter

Notiser

Spara

Göm

Uppgifter

Senaste uppdatering: 23:11

SBAR

Nytt mätvärde

Ny journalant.

Under MER finner du det din vårdenhet har valt att visa av:
Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista,
Läkemedelsadministration och Mätvärden

ATT GÖRA synkroniseras med TakeCare,
ockå med länkade mätvärdesmallar.

Dokumentera på NYTT-knapparna ovan.

Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så gör de
anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall
och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan
komplettera med Tilläggsmall/- Term i TakeCare.

23:16 sön 21 sep. Costner Testperson 99200061-5217

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök

Uppgifter

Senaste uppdatering: 23:14

SBAR

Nytt mätvärde

Ny journalant.

Under MER finner du det din vårdenhet har valt att visa av:
Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista,
Läkemedelsadministration och Mätvärden

ATT GÖRA synkroniseras med TakeCare,
ockå med länkade mätvärdesmallar.

Dokumentera på NYTT-knapparna ovan.

Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så gör de
anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall
och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan
komplettera med Tilläggsmall/- Term i TakeCare.

1. Kollapsa/expandera informationen med pilen.
2. Skriv en notis på patienten, den journalförs inte.
Notisen kan också ses i patientlistan om du sveper patienten åt vänster.
3. Göm/ta fram sidopanelen med "Göm". Röda horisontella pilen återställer sidopanelen.
4. Hantera patients registrerade telefonnummer, om ni skrivit in det. OBS: synkas ej med TakeCare.
5. MER: Utläsning från TakeCare
6. SBAR: överrapporteringsverktyg (tilläggsfunktion)

0202

Uppgifter | Att göra | Mer

Telefonnummer



123455789

Avbryt

Spara



iPad: Uppgifter - Starta & välj formulär (=mall)

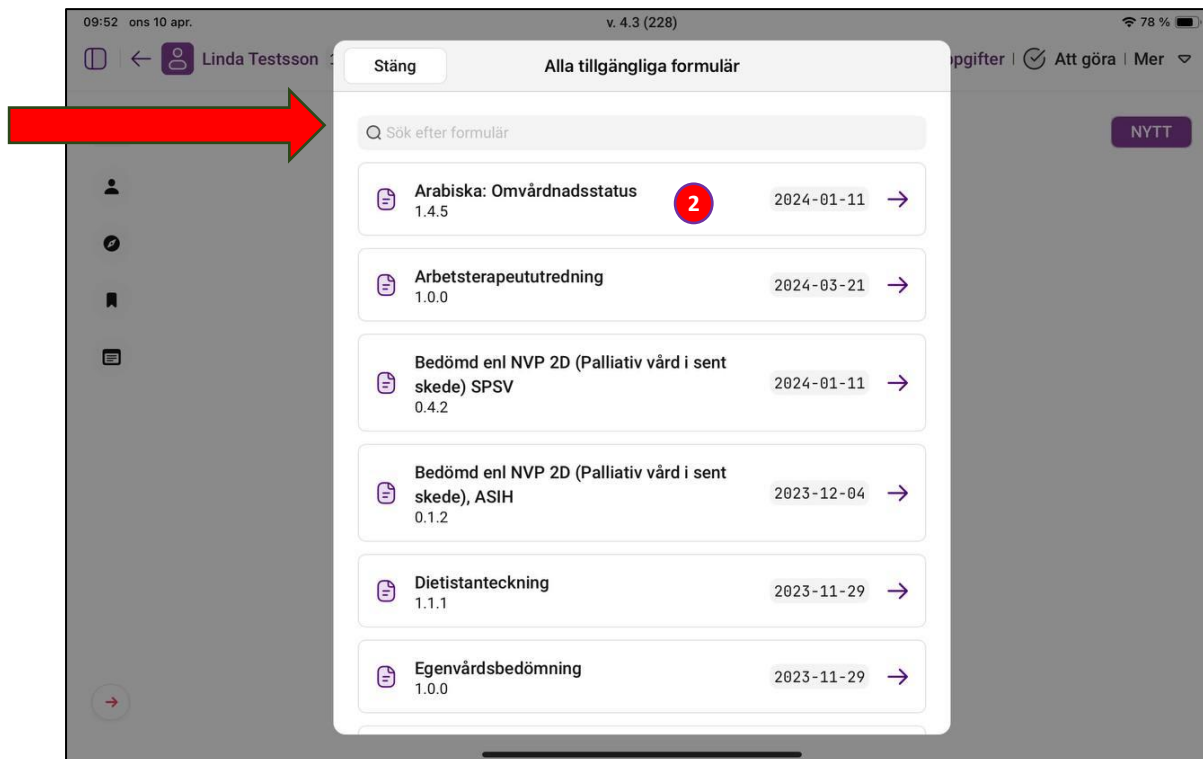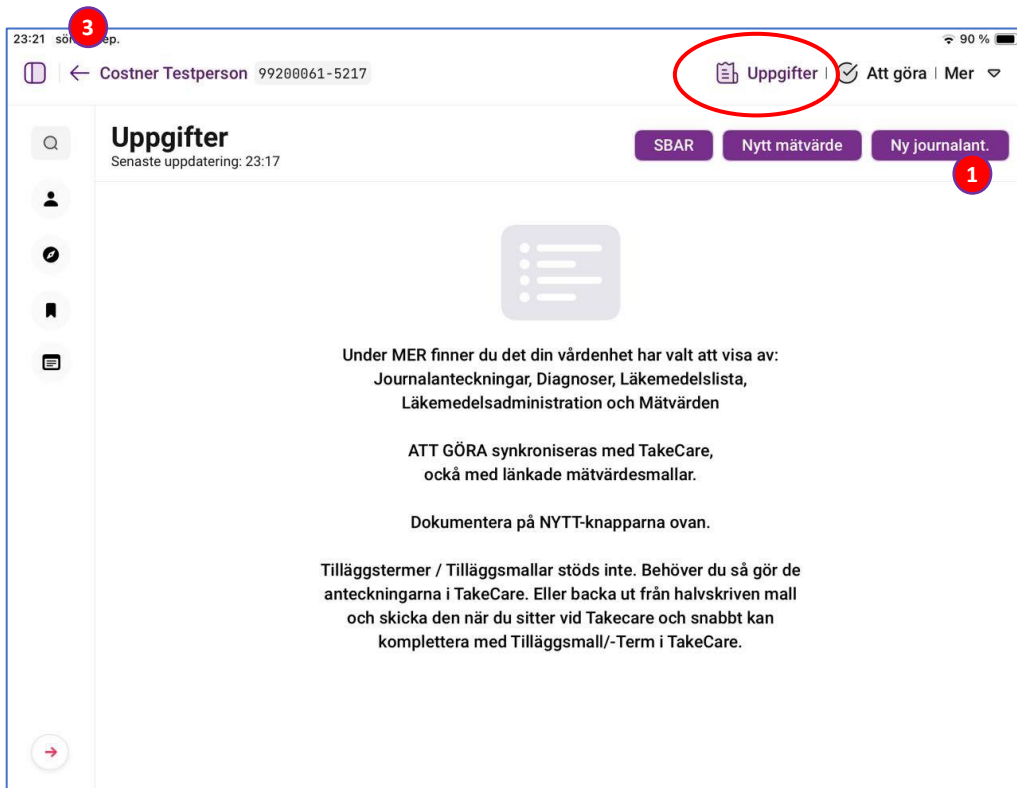

1. Starta en mall på lila knappen "NYTT"
2. Välj eller sök formulär (=Mall)
3. Tryck på tillbakapilen för att komma tillbaka till hela patientlistan



iPad: Uppgifter - Skapa journalanteckning

14:45 fre 6 sep. v. 4.3 (279) 34 %

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter | Att göra | Mer

Information *

Uppgiftslämnare och id-kontroll ✓

Sekretess och samtycke *

Smittspårning (endast SPSV)

MRSA, VRE, ESBLcarba, ESBL *

Värdesaker (endast (SPSV) *)

Anamnes

Status *

Bedömning av ssk

Infanter/...

Inskrivning ssk ASIH/SPSV syd
Fyll i journalanteckning

3 Skicka till TakeCare

1 Information

Uppgiftslämnare och id-kontroll

Vem har lämnat uppgifterna?

☐ Närstående

☒ Uppgifterna har hämtats från journal

☐ Uppgifterna kommer från andra vårdgivare

Kommentar: >

Kontrollerat Id *

☒ Utfört

Kommentar: >

2 Mer nedan

11:05 tis 13 feb. 77 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Jouranteckning

Innehållsförteckning

Jouranteckning

Jouranteckning läk ASIH/SPSV
Fyll i journalanteckning

Skicka till TakeCare

Stäng

SwipeCare

Ja

Skicka in anteckning?
februari 13, 2024 11:01

4

Skicka datum och tid

lör 10 feb.	08	00
sön 11 feb.	09	59
mån 12 feb.	10	00
idag	11	01
ons 14 feb.	12	02
tors 15 feb.	13	03
fre 16 feb.	14	04

Oplanerat hembesök

Telefonkontakt med patient

Telefo Mer nedan patient

1. Fyll i formuläret (=mallen)
2. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
3. Skicka till TakeCare (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka.
4. Välj datum och tid för anteckningen. Automatiskt blir det dagens datum och tid, men du har möjlighet att välja ett tidigare datum och tid. Den tiden du väljer blir det i TakeCare, men den blir signerad med nutid.



iPad: Uppgifter - Registrera mätvärden

15:23 mån 11 mars v. 4.3 (215) 77%

Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Uppgifter Att göra Mer

Inskrivningsanteckning 0/4

Allmänna uppgifter 0/11

Smittanamnes 0/3

Preoperativ förberedelse 0/16

Omvårdnadstatus 0/10

Andningsfrekvens

1

Kommentar: 2

Pulsfrekvens

Kommentar:

Syremättnad

Kommentar:

Syrgas, NEWS

Mer nedan 3

11:05 tis 13 feb. 77%

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter Att göra Mer

Jouranteckning

Innehållsförteckning

Jouranteckning

Jouranteckning läk ASIH/SPSV Fyll i journalanteckning

4 Skicka till TakeCare

Stäng SwipeCare Ja

5 Skicka in anteckning? februari 13, 2024 11:01

Skicka datum och tid

lör 10 feb.	08	00
sön 11 feb.	09	59
mån 12 feb.	10	00
idag	11	01
ons 14 feb.	12	02
tors 15 feb.	13	03
fre 16 feb.	14	04

Oplanerat hembesök



Telefonkontakt med patient

Telefo Mer nedan patient

1. Fyll i formuläret (=mallen). Fält för mätvärde.
2. Om inget mätvärde har fyllts i så kan man inte skriva en kommentar.
3. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
4. Skicka till TakeCare (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka).
5. Välj datum och tid för anteckningen. Automatiskt blir det dagens datum och tid, men du har möjlighet att välja ett tidigare datum och tid. Den tiden du väljer blir det i TakeCare, men den blir signerad med nutid.



iPad: Uppgifter – Bekräftelse på importerad anteckning/mall

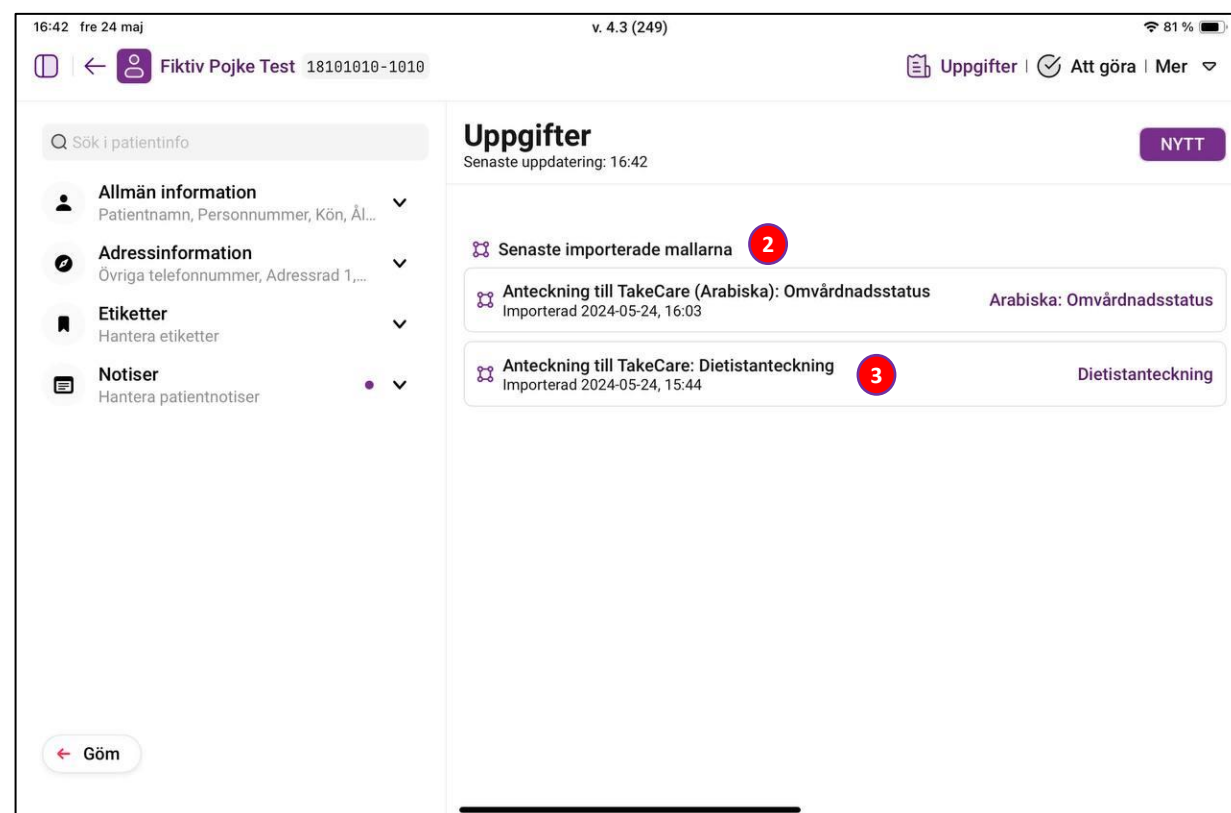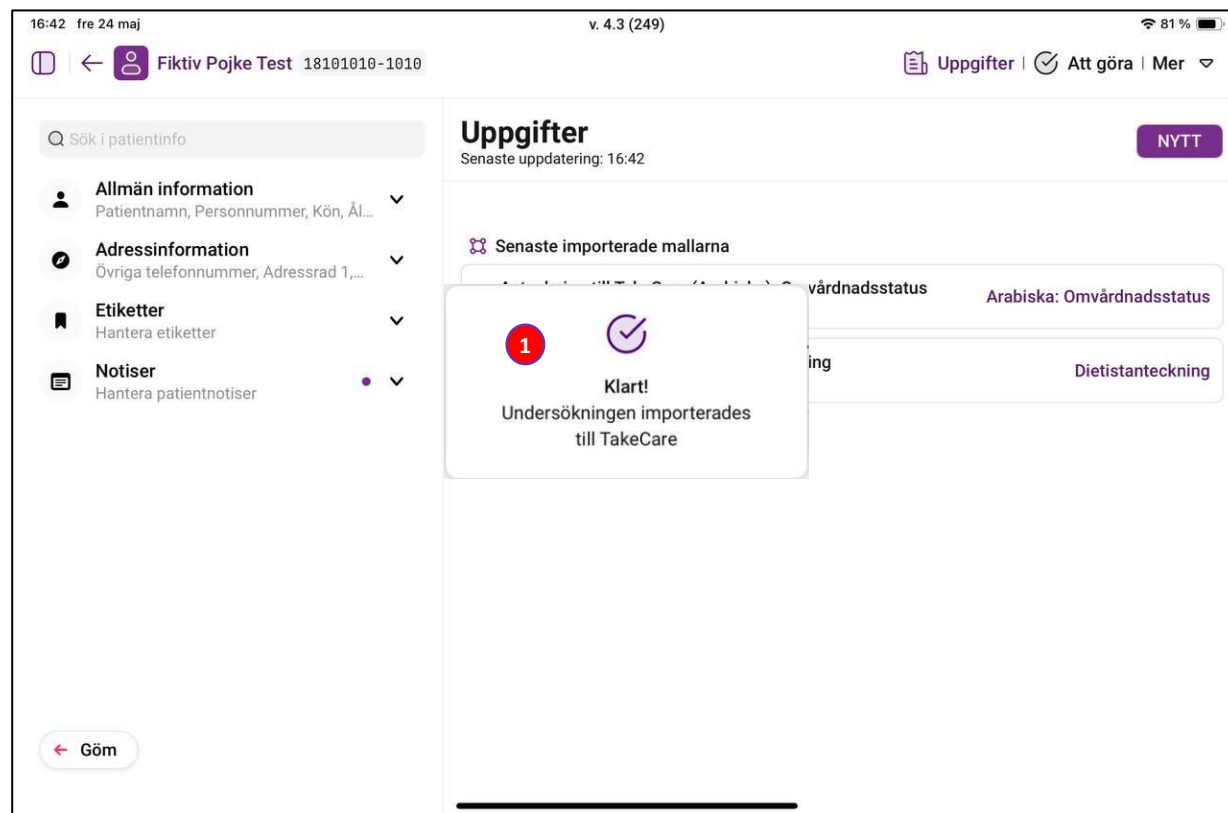

1. När en mall har importerats till TakeCare kommer denna popup upp i ca 5 sekunder. För att stänga den så klickar du på den.
2. Lista på de 10 senast importerade mallarna de senaste 24 timmarna.
3. Namnet på mallen samt information om att mallen har importerats inklusive datum och klockslag.

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)



15:43 fre 17 okt. v. 4.3 (360)

Uppgifter | **Att göra** | Mer

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "igår, idag, imorgon" Filter

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 15:16

3 KONTINUERLIG AKTIVITET

7 Aggregatfilterbyte
Kontinuerlig
test, skapad av Sara på GAVA akut Nu ändrad på H GAVA inflammation

4 ⚠ FÖRSENAD FRÅN IGÅR OCH IDAG

Ögontryck
Daglig
0133 2355
2025-10-16 01:33
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Bedömning
Daglig
Vid palliativ vård:
Utfört munvård och trycksårsprofylax
Kontroll av andning/andnöd, rosslig, illamående/kräkning,
Problem med vattenkastning, tarmfunktion och/eller oro/ängest.
Adekvat medicinering
Kontrollerat ev smärta med Abbey Pain Scale
hm
2025-10-16 02:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd

Bedömning
2025-10-16 02:00

16:17 fre 17 okt. v. 4.3 (360)

Uppgifter | **Att göra** | Mer

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "igår, idag, imorgon" Filter

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 16:17

5 KOMMANDE IDAG

hörselscreening OAE DS Återbesöksmott.
Engångs
Skapad på GAVA akut
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

6 KOMMANDE IMORGON

Saturation
Daglig
Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna
2 liter syrgas (individuellt bedömning) om lägre än 90 % i saturation.
BBBB
2025-10-18 00:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Ögontryck
Daglig
0133 2355
2025-10-18 01:33
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Bedömning
Daglig
Vid palliativ vård:
Utfört munvård och trycksårsprofylax
Kontroll av andning/andnöd, rosslig, illamående/kräkning,
Problem med vattenkastning, tarmfunktion och/eller oro/ängest.
2025-10-18 02:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd

1. Menyval: Att göra
2. Senaste uppdatering. *För att uppdatera utläsningen, svep nedåt*
3. Kontinuerliga aktiviteter: klarmarkeras aldrig
4. Försenade från igår och idag: Rödmmarkerade
5. Kommande idag: Dagens aktiviteter (svart)
6. Kommande imorgon: Morgondagens planerade aktiviteter
7. På vilken vårdenhet Aktiviteten skapades eller senast redigerades



Aktiviteter hämtas för hela spärrgruppen och har nu Filterval

Aktiviteter skapade på egna vårdenheten

Kan visa ev. länkade
mätvärden, om aktiviteten är
skapad på egna vårdenheten

OBS: För Aktiviteter skapade
utanför egna vårdenheten,
visas aktiviteten, men mall för länkade
mätvärden visas inte automatiskt.
Användare kan alla fall registrera
systemgemensamma mallar under "Nytt
Mätvärde" på iPad. Vi planerar att få med
även dessa externa "vid-behovs"-mallar i en
kommande release

Aktiviteter skapade på andra vårdenheter

Saturation

2025-10-17 12:00

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Saturation
Daglig

Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna
2 liter syrgas (individuellt bedömning) om lägre än 90 % i saturation.
BBBB

	13	43
ons 15 okt.	14	44
tors 16 okt.	15	45
idag	16	46
lör 18 okt.	17	47
sön 19 okt.	18	48

1. **Utförd nu:** Aktiviteten får nuvarande tid registrerad i TakeCare
2. **Utförd tidigare:**
 - Välj datum och tid när aktiviteten utförts, klicka sen på Godkänn.
Detta datum och tid registreras i TakeCare.
3. **Ej utförd:** Om aktiviteten utförts /ej ska utföras kan du
 - Lämna kommentar (vid behov) och klicka på godkänn.

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)



Aktivitet utförd: Har du utfört aktiviteten blir den grön och försvinner sen av sig själv, med en popup som säger att den är importerad, och en pling om du har ljudet på. Du kan välja en tidigare utförandetid också.

18:52 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 3 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "igår, idag, imorgon" Filter

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 18:52

⚠ FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG
📅 KOMMANDE IDAG

NEWS2
Daglig

2025-10-17 20:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

Saturation
Daglig

Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna
2 liter syrgas (individuell bedömning) om lägre än 90 % i saturation.
BBBB

2025-10-17 21:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

Bedömning
Daglig - Sjuksköterska

Palliativ bedömning utförs via FRISQ

2025-10-17 22:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

✅ Aktivitet utförd

NEWS2, hjärtfrekvens
Daglig

wdwdwdwdwd

2025-10-17 23:58
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

Aktivitet ej utförd: Har du valt att ej utföra aktiviteten (med eller utan kommentar) så blir den röd och försvinner sen av sig själv på samma sätt.

18:54 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 3 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "igår, idag, imorgon" Filter

Att göra (TakeCare)

Senaste uppdatering: 18:54

⚠ FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG
📅 KOMMANDE IDAG

NEWS2
Daglig

2025-10-17 20:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

Saturation
Daglig

Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna
2 liter syrgas (individuell bedömning) om lägre än 90 % i saturation.
BBBB

2025-10-17 21:00
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

❌ Aktivitet ej utförd

NEWS2, hjärtfrekvens
Daglig

wdwdwdwdwd

2025-10-17 23:58
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

hörselscreening OAE DS Återbesöksmott.
Engångs

Skapad på GAVA akut

2025-10-17 23:58
Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd >

Läsa TakeCare



18:58 fre 17 okt.

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606

Uppgifter | Att göra | Mer

Uppgifter

Senaste uppdatering: 18:58

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration & Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling).

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC. Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så Spara i TC och gör färdigt de anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan komplettera med Tilläggsmall/-Term i TakeCare.

Journaltext	
Diagnoser	
Läkemedel	
Läkemedelsadm.	
Mätvärden (ej provsvar)	



iPad: Läsa mätvärden

23:23 sön 21 sep. 90 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter Att göra Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spärgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 23:23

Sök

Alla mätvärden

-NEWS2
Inga data

☐

Åld 4AT
Inga data

☐

Åld Downton
Inga data

☐

Åld EDA-kontroller
Inga data

☐

Åld ESAS
Inga data

☐

Välj alla Godkänn

23:24 sön 21 sep. 90 %

Fiktiv Äldrekvinna 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spärgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 23:23

Sök Ändra mätvärden

	sep. 7				sep. 9			
	09:07	09:12	10:00	11:26	14:18	14:44	14:50	14:54
-Reviderad oral bedömningsgui...	-	-	-	-	-	12	-	27
-Total poäng, MNA	3	2	3	-	-	10	-	14
Allmäntillstånd enl.mod.Norton	1 = Myc...	-	-	4 = Gott	-	4 = Gott	4 = Gott	2 = Dål...
Andningsfrekvens (andetag/mi...	-	-	-	-	-	-	-	-
Avföring	-	-	-	Ingen a...	Stor av...	-	-	-
Avföringsfrekvens, dygn (ggr)	-	-	-	-	2	-	-	-
Avföringskonsistens	-	-	-	-	Typ 7:...	-	-	-
BMI enl MNA	3 = BMI...	2 = BMI...	3 = BMI...	-	-	3 = BMI...	-	3 = BMI...
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-
Downton fallrisk index (poäng)	0	0	0	11	-	10	-	11
Fysisk aktivitet enl.mod.Norton	1 = Sän...	-	-	4 = Går...	-	1 = Sän...	4 = Går...	2 = Ru...
Födointag enl.mod.Norton	1 = Min...	-	-	4 = Nor...	-	3 = 3/4...	4 = Nor...	2 = Ha...
Födointag, 3 mån enl MNA	0 = Ja, ...	0 = Ja, ...	0 = Ja, ...	-	-	1 = Ja, ...	-	2 = Nej...

- **Filter byggs på efterhand:** Välj Alla mätvärden om du inte hittar ditt favoritfilter.
- **Kommentarer:** En ofylld prick betyder att mätvärdet skrevs in via journaltext, där kommentaren står att läsa.
- **Provsvär** (Labvärden) stöds ej, utveckling pågår.
- **Genererade (beräknade) mätvärden** markeras med ett minustecken före namnet (i filter och i mätvärdeslistan)
- **Funktionerna:** E-SOFA, KATZ/NYKATZ kommer senare, utveckling pågår.

iPad: Dokumentation – Välj utläsning från TakeCare



SwipeCare stödjer Journalfilter enligt Sammanhållen journalföring, så du väljer ditt urval. Dessutom tidsperiod för utläsning.

Går du utanför din spärrgrupp får du logga patients medigvande eller Kritisk situation. Läkemedelslistan är undantaget från journalfilter, du ser från alla vårdenheter i hela TakeCare. OBS: Spärrad patientinformation lämnas aldrig till externa system, måste läsas i TakeCare.

14:42 fre 6 sep. v. 4.3 (279) 34 %

Uppgifter | Att göra | Journaltext

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" **1** Filter

Dokumentation

Senaste uppdatering: 12:13

Sök dokument på namn **Filter**

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV **2**
Aleris Palliativ avd Handen
Systemförvaltare Mia Hägglöf
Skapad (datum): 2024-02-05 13:14

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV
Aleris Palliativ avd Handen
Systemförvaltare Mia Hägglöf
Skapad (datum): 2024-02-05 12:08

NVP 2D - Palliativ vårdplan, Aleris SPSV
Aleris Palliativ avd Handen

Palliativt vårdbehov

Bedömning
Bedömning var 4:e tim enligt NVP 2D, (Nationell vårdplan för palliativ vård).

Smärta enl IPOS
Måttligt

Påverkat ansiktsuttryck Spänd och orörlig

Smärta
Vidbehovs läkemedel enligt ordination Lägesändring

Andnöd enl IPOS

14:56 fre 6 sep. v. 4.8 (279) 34 %

Uppgifter | Att göra | Journaltext

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" **3** Filter

Journaltext

Senaste uppdatering: 14:56

Sök dokument på namn **Filter**

Egenvårdsbedömning, Aleris ASIH/SPSV
Aleris ASIH Järfälla
Administrativ personal Cecilia Levin
Skapad (datum): 2024-09-06 10:02

IPOS bedömning, Aleris ASIH/SPSV
Aleris ASIH Botkyrka
Administrativ personal Cecilia Levin
Skapad (datum): 2024-09-05 19:00

Bedömning

Egenvårdsuppgift
Byte av läkemedelsplåster Hantera syrgas Skötsel av stomi Peritonealdialys

Egenvårdsförmåga
Hinder för att patient (eller annan) kan utföra egenvård: hörsel

Egenvårdsbedömning
Egenvård utförs Helg Patient kan själv med stöd av annan person ansvara för säkerheten i egenvården Patient kan själv utföra alla praktiska moment i egenvårdsuppgiften Egenvårdsuppgiften kan utföras på ett säkert sätt av annan person

Egenvård
Egenvård utförs av hemtjänst Samråd har skett med den verksamhet som ska hjälpa till med egenvården Egenvård påbörjas efter beslut om beviljat bistånd Patient har fått instruktion i utförande av egenvård Egenvård utförs på ett säkert sätt av annan person

1. Standard journalfilter utläsning är "Egna spärrgruppen" och tidsperioden är "Senaste månaden". För att ändra journalfilter trycker du på den orangea flaggan.
2. Här ser du journalanteckningar för patienten, scrolla neråt för att se fler. Klicka på kortet för att kunna läsa anteckningen till höger
3. För att uppdatera sidan så drar du vänsterkolumnen neråt.



iPad: Dokumentation – Välj utläsning från TakeCare

1. Vill du ha en annan filtrering klickar du på den orangea flaggan och då får du välja "Journalfilter" i en popup.

2. Väljer du "Alla vårdgivare" måste du registrera patientmedgivande.

3. Välj tidsperiod du vill se anteckningar för.

4. När du går ifrån filtrering på "Egen spärrgrupp" blir flaggan lila. Här kan du trycka igen för att ändra journalfilter.

5. Här kan du välja och läsa journalanteckningar för patienten.

6. Fritextsök för filtrering av journalanteckningar. Söket markeras i ant.

7. Filtrera utläsningen på författare eller typ av anteckning






iPad: Dokumentation – Välj patientmedgivande

1. "Registrera patientmedgivande": Behöver du läsa journaler utanför din spärrgrupp behöver du registrera samtycke. Trycker du på "Registrera patientmedgivande" kommer till steg 3.
2. "Kritisk situation": Här klickar du om patienten t.ex. är medvetslös och ej kan ge samtycke men det bedöms vara av ytterst vikt att kunna se journaler från alla vårdgivare. Samtycket gäller endast under det tillfället du läser ut information. Sen kommer du till steg 4.
3. "Välj från kalender": Här behöver du välja hur länge patientsamtycket gäller. Den ställer sig automatiskt 1 månad framåt.
4. "Välj tidsperiod": Här väljer du tidsperiod du vill filtrera på.



iPad: Mätvärden – Välj utläsning från TakeCare

I SwipeCare kan du läsa mätvärden och använda olika Journalfilter, samt även läsa ut mätvärden inskickade via Mätvärdesmallar eller via Journaltext.

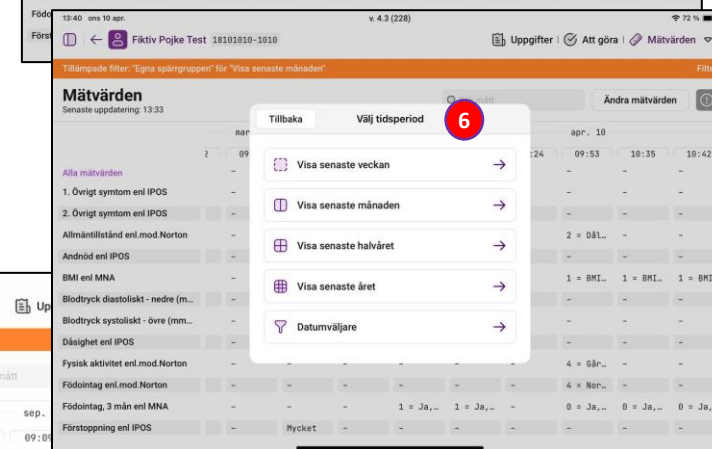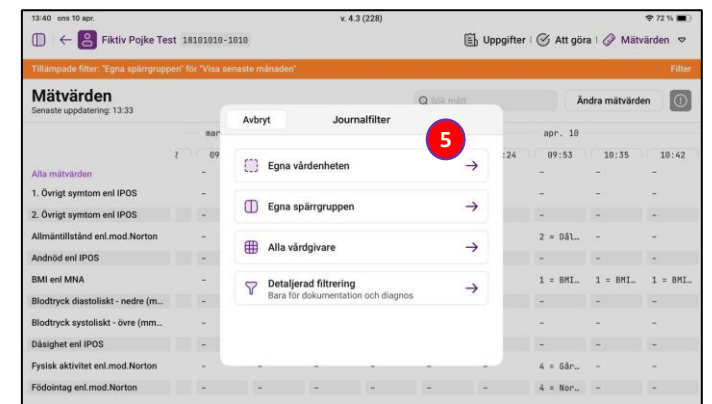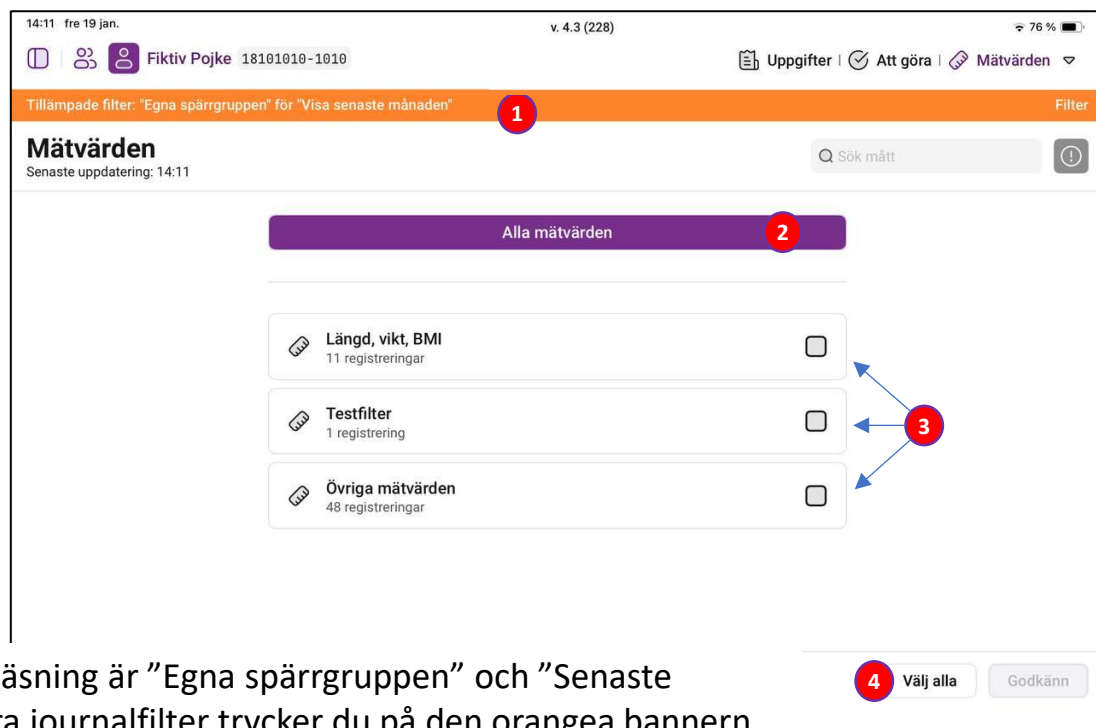

1. Default journalfilter utläsning är "Egna spårgruppen" och "Senaste månaden". För att ändra journalfilter trycker du på den orangea bannern och kommer till steg 5 & 6
2. Alla mätvärden: ofiltrerat, läser ut alla mätvärden i bokstavsordning oavsett filtrerade eller ofiltrerade. Väljer du "Alla mätvärden" kommer du direkt till utläsningen. Genererade (beräknade) mätvärden markeras med "-" föe namnet.
3. Välj mätvärdesfilter: Specifika filter som enheten har valt att skapa
4. Välja alla: Klickar du här så väljer du alla filter ovan.
5. Journalfilter: Välj journalfilter
6. Välj tidsperiod: Tidsperiod för utläsning
7. För att uppdatera utläsningen så drar du sidan neråt.

	aug. 9	aug. 14	sep. 2	sep. 9	sep. 16	sep. 23	sep. 30
Vitalparametrar inkl NEWS2, vik...	-	-	-	-	-	-	-
Andningsfrekvens (andetag/mi...	50	48	50	50	50	50	50
Syremättnad (%)	89	90	97	96	95	98	99
Syrgas, NEWS	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Syrgasbehandling via	-	Grima	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	160	110	110	120	108	110	108
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	120	108	110	98	80	98	98
Pulsfrekvens (slag/min)	98	78	78	78	80	78	67
Pulsens rytm	-	Regelbu...	Öregelbu...	Regelbu...	Öregelbu...	Regelbu...	Regelbu...



iPad: Mätvärden – Utläsning av "Alla mätvärden"

SwipeCare läser nu ut mätvärden. Nedan ser du ofiltrerade och filtrerade mätvärden i samma vy.

10:52 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden 1

Senaste uppdatering: 10:46

Sök mått Ändra mätvärden 6

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Alla mätvärden	14:09	15:57	15:58	09:46	11:55	15:49
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	12
BMI	-	-	19	-	-	-
BMI enl MNA	-	1 = BMI...	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	-	-	-	110	110	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	-	-	-	-	110	100
Kontakttyp	8...	-	-	-	-	-
Längd (cm)	-	-	158	80	-	-
Läppar enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-
Medvetandegrad, NEWS2	-	-	-	-	-	V = rea...
Midjemått (cm)	-	-	-	-	-	-
Nasogastrisk sond, inspektion	-	-	-	-	-	Komplik...
Protes enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-

11:00 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden 2

Senaste uppdatering: 10:57

Andn 3 Ändra mätvärden 4

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	14:09	15:57	15:58	09:46	11:55	15:49
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	12

	22 feb. 26	mars 7	mars 13
Alla mätvärden	11:30	11:33	15:58
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	45	50	45
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	89	89	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	110	110	110
Kroppstemperatur (°C)	37	37	37
Medvetandegrad, NEWS2	t... Alert	C = nyt...	Alert
Pulsfrekvens (slag/min)	89	99	89
Smärtintensitet enl NRS	-	-	6
Syremättnad (%)	99	97	99

1. Översikt av Alla mätvärden. Sorterade i bokstavsordning. Senast registrerade mätvärden längst till höger på skärmen.
2. Sökruta för att söka efter specifika värden
3. "Ändra mätvärden": Klicka här för att komma tillbaka till mätvärdesfiltrena.
4. Klicka här för mer information om utläsningen
5. Du kan "highlighta" ett eller flera mätvärden genom att klicka på dem. För att ta bort markeringen klickar du en gång till på mätvärdet.
6. En popup med information om begränsningar i utläsningen.

iPad: Mätvärden – Kommentarer



13:09 tis 13 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Faktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter

Att göra

Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 13:09

Sök mått

Ändra mätvärden

	12	feb. 13								
	3	09:29	08:01	09:06	09:12	09:39	09:46	09:50	10:06	11:00
Begärda bolusdoser, intratekal l...	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
Begärda bolusdoser, intravenös...	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Benomfång	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Benämning enl MoCA (/ 3 poäng)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berättat för närstående om sitt...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Blåsvolym före blåstömning, sc...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blåsvolym vid KAD-behandling,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolusdos. epidural läkemedelsp...	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-

13:09 tis 13 feb. v. 4.3 (228) 76 % 34 %

Faktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter

Att göra

Mätvärden

len

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden

Senaste uppdatering: 13:09

Sök mått

Ändra mätvärden

3

MÄTVÄRDE: 30


KOMMENTAR: ar

	12	feb. 13								
	3	09:29	08:01	09:06	09:12	09:39	09:46	09:50	10:06	11:00
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begärda bolusdoser, subkutan l...	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Benomfång	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Benämning enl MoCA (/ 3 poäng)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berättat för närstående om sitt...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodtryck systoliskt - övre (mm...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Blåsvolym före blåstömning, sc...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blåsvolym vid KAD-behandling,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolusdos, epidural läkemedelsp...	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
Bolusdos, intratekal läkemedel...	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
Bolusdos, intravenös läkemedel...	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-



1. Lila ifylld cirkel betyder att det finns en kommentar som tillhör mätvärdet inskickat via mätvärdesmall.
2. Tom lila cirkel betyder att det finns en kommentar som tillhör mätvärdet inskickat via journaltext, där den får läsas.
3. Klickar du på mätvärde med lila ifylld cirkel kan du läsa kommentar direkt



iPad Mätvärden – Förinställda filter och ofiltrerade mätvärden

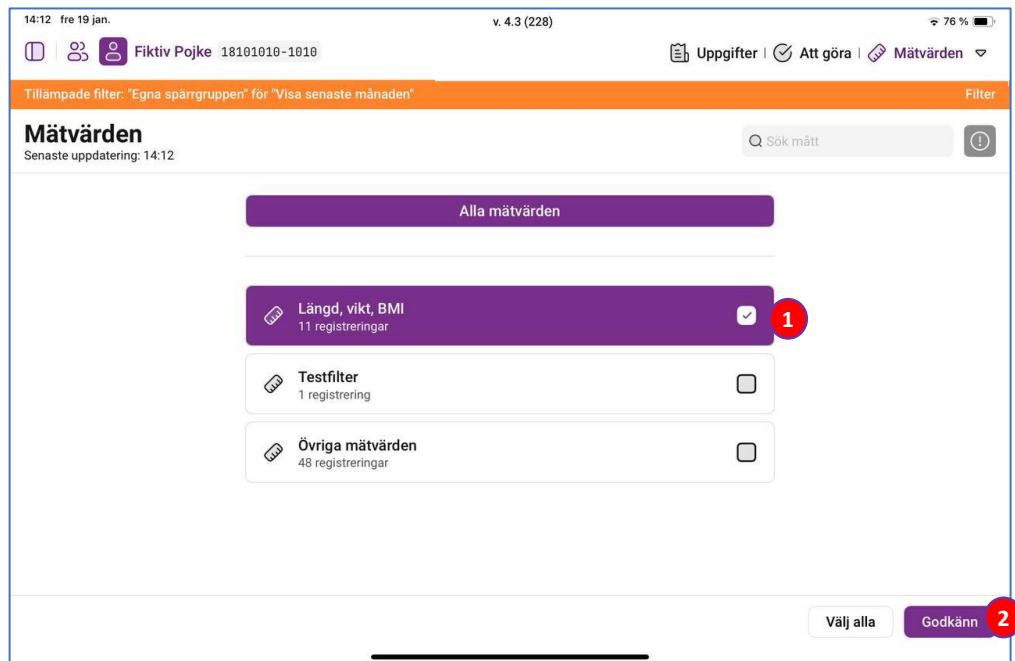

1. "Längd, vikt, BMI": Filter skapat av enheten
2. "Godkänn": DU behöver klicka på denna knapp för utläsning av valda filter
3. Utläsning av filtret "Längd, vikt, BMI"
4. "Övriga mätvärden": Ofiltrerade mätvärden

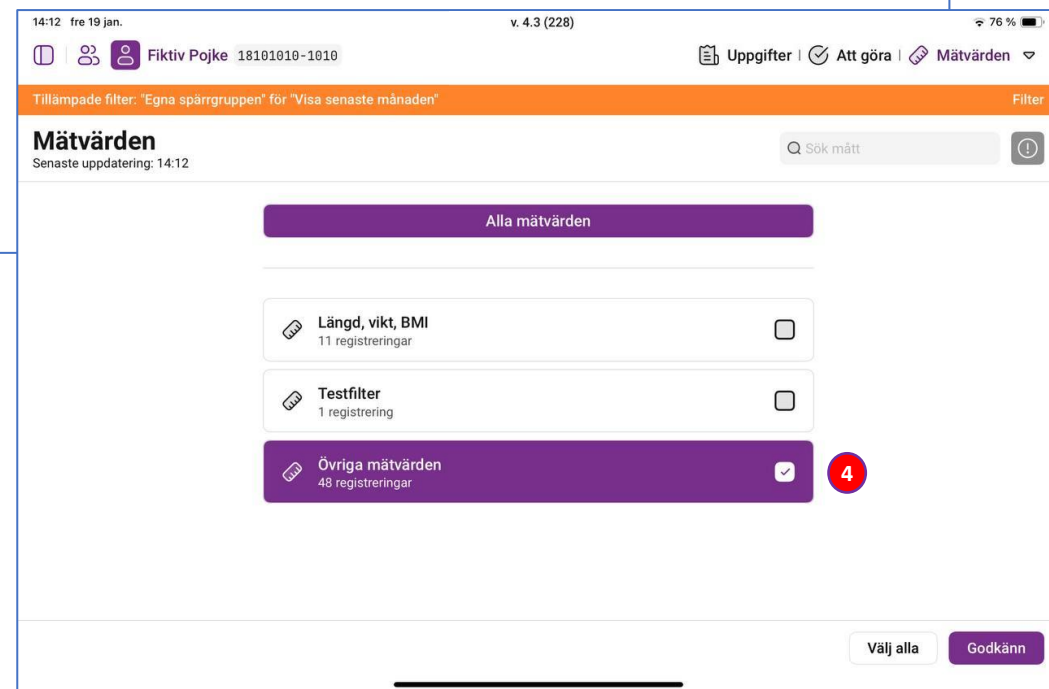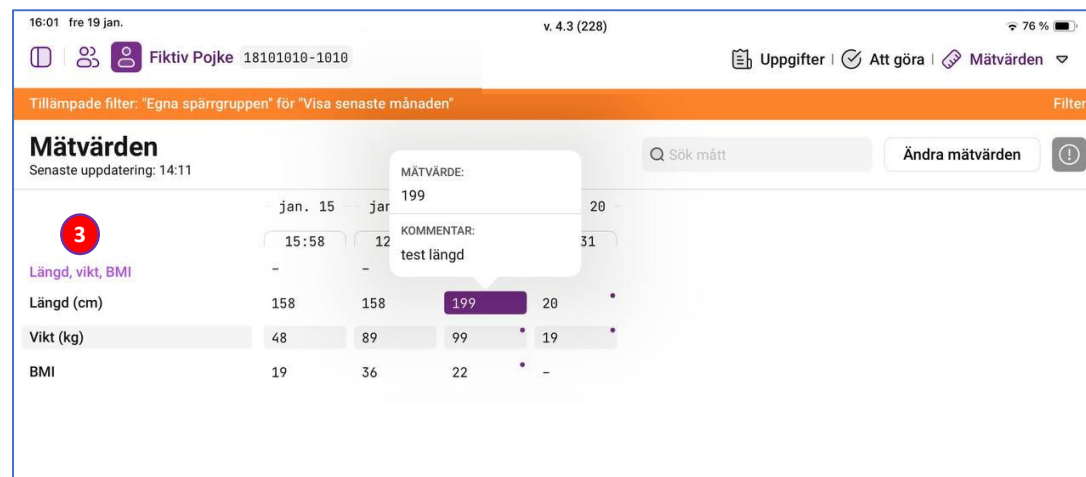



iPad: Diagnoser (Huvuddiagnoser)

19:47 lör 16 sep. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Kvinna 18020202-020

Uppgifter | Att göra | Diagnoser ▾

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "hela tidsperioden" Filter

Diagnoser

Senaste uppdatering: 19:44

Diagnoser	Kod	Registrerad	Senast uppdaterad	Kronisk
Essentiell hypertoni	I109	2023-09-15	2023-09-15	
Misstänkt cannabissyndrom	F129	2023-09-13	2023-09-13	
Akut stressreaktion	F430	2023-09-06	2023-09-06	
Reaktion på svår stress, ospecificerad	F439	2023-09-06	2023-09-06	
Irritabilitet och vrede	R454	2023-09-06	2023-09-06	
Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget	R458	2023-09-06	2023-09-06	
Ångesttillstånd, ospecificerat	F419	2023-09-06	2023-09-06	
Icke-organisk sömnstörning, ospecificerad	F519	2023-09-06	2023-09-06	
Smärta eller värk, ospecificerad	R529	2023-09-06	2023-09-06	
Sömnstörning, ospecificerad	G479	2023-09-06	2023-09-06	



iPad: Läkemedelslistan med ordination

Senast signerad	Vårdenhet	Preparat	Styrka	Adm. väg	Typ	Adm. Inst.	Dagens dosider
2021-12-15	Testenhet 5** CSTC SLV	Madopar Quick mite	50 mg/ 12,5 mg	Oralt	Sch	-	Enl schema
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Morfin Meda	10 mg	Oralt	Vb	+	
2022-05-18	Testenhet 5** CSTC SLV	Waran	2.5 mg	Oralt	Rb	-	20:00 - 3 st
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Losartan Actavis	100 mg	Oralt	Rb	-	?
2021-12-08	Testenhet 5** CSTC SLV	Betolvidon	1 mg	Oralt	Rb	-	?

1. Välj att se aktuella läkemedel på egna/alla vårdenheter eller alla läkemedel inkl. utsatta sådana
2. Se när läkemedlen lästes ut, svep nedåt i fönstret för att uppdatera listan

Klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

Kolumnerna betyder:

3. Senast signerad
4. På vilken vårdenhet är det signerat
5. Läkemedlets namn
6. Styrka
7. Administrationsväg
8. Typ
9. Administrationsinstruktioner
10. Dagens dosider
11. Information om begränsningar
12. Stäng SwipeRead, återgå till patientprofilen



iPad: Läkemedelslistan / Läkemedelsordination

13:50 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 71 %

Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter Att göra Läkemedel

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "Visa senaste månaden" Filter

Läkemedel Senaste uppdatering

Senast signerad 2023-08-28

Avbryt **2** **Alvedon** Period

Utdelningstid	02:00	agens dostider
Dosering	2 st	2:00 - 2 st
Utdelningstid	08:00	8:00 - 2 st
Dosering	2 st	4:00 - 2 st
Utdelningstid	14:00	0:00 - 2 st
Dosering	2 st	
Utdelningstid	20:00	
Dosering	2 st	
Ordinationstyp	kontinuerlig (varje dag)	
Preparatnamn	Alvedon	
Läkemedelsform	Filmdragerad tablett	
Adm. Väg	Oralt	
Ordinationsorsak	1 ↓ Mer nedan	

Adm. Väg

Ordinationsorsak

Behandlingsmål

Adm. Instruktion

Generika (Ersättlig?) Ja

Insatt 2023-08-28 13:21

3 Förskrivare Mia Hägglöf

Hit kommer du genom att klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

1. Mer nedan betyder att du får svepa nedåt för att komma längst ned i ordinationen
2. Avbryt och stäng fönstret
3. Förskrivande läkare står längst ned.



iPad: Läkemedelslistans begrepp

Vi använder TakeCares xChange API:
Medications.MedicationHistoryGet

De små siffrorna efter begreppen nedan visar på vilket element i TakeCares API som använts för att skapa informationen i SwipeRead.

Framsidan: Läkemedel

- Senast signerad¹⁵
- Vårdenheten¹⁷
- Preparat⁶³
- Styrka⁷¹⁺⁷²
- Adm.väg³⁵ (dvs Administreringsväg)
- Typ²¹ (dvs Ordinationstyp: Vb=Vid Behov, Rb=Regelbundet, Sch=Schema)
- Adm. Inst. (+ tecknet betyder bara att det finns administrationsinstruktioner, klicka på raden och läs Ordinationsdetaljer)
- Dostid: Dosschema⁸⁶⁻⁹⁶_ Dostext¹⁰¹

Ordination (när man klickat på ett läkemedel)



- Ordinationstyp²¹
- Preparatsnamn⁶³
- Administration³⁵⁺³⁷
- Ordinationsorsak³⁸
- Behandlingsmål³⁹
- Administrationsinstruktioner⁴⁰
- Generika (Ersättlig?)⁴⁴
(Ja=får ersättas med generika / Nej=Får ej ersättas med generika)
- Skapad¹¹
- Review Date⁴¹

Administreringstillfälle (ordination)

- Utdelningstid (fr.o.m.)⁵⁰⁻⁵³
- Dostext¹⁰¹

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

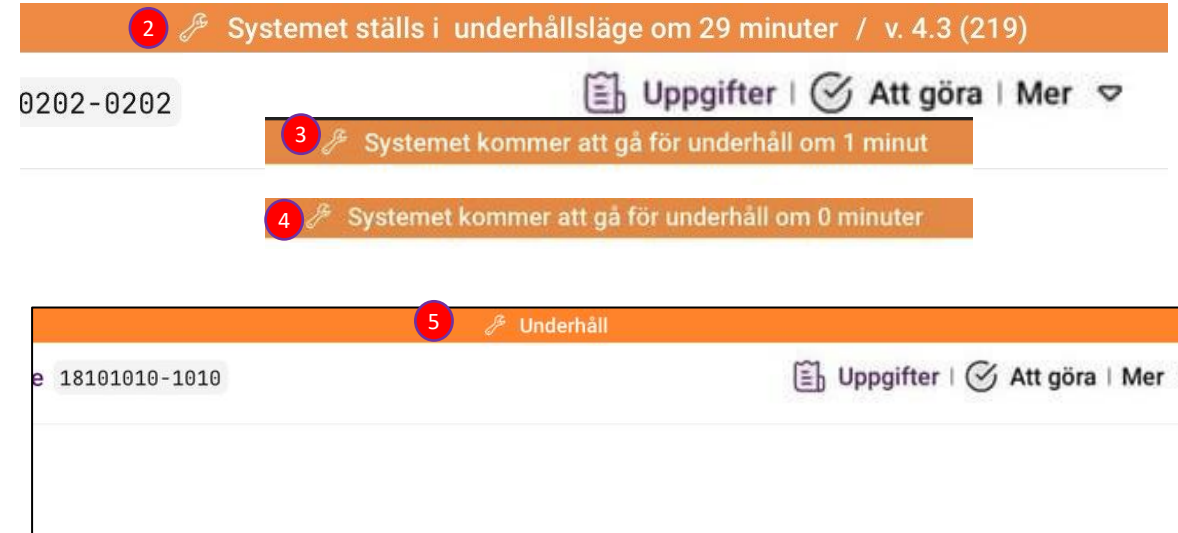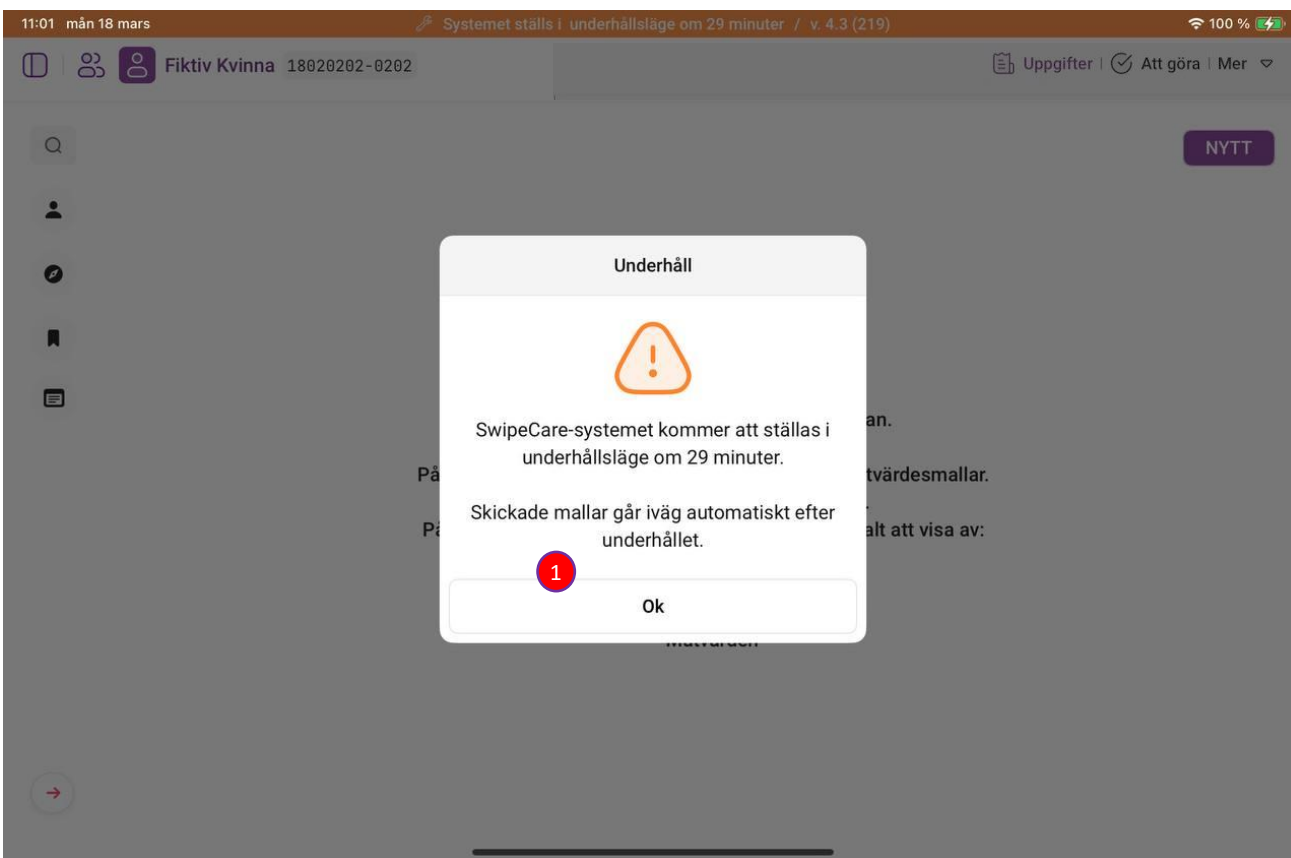

1. Popup med information om kommande underhåll. Klicka på Ok för att stänga.
2. Nedräkning: Systemet kommer att gå för underhåll om 29 minuter.
3. Nedräkning 1 min
4. Nedräkning 0 min
5. Underhållsläge: Du kan fortsatt journalföra med mallarna, skickar du dem till TakeCare så kommer de köas och skickas automatiskt iväg till TakeCare så fort uppdateringen är klar.

iPad: Läkemedelsadministration – klicka på raden för administrering



TestFlight 23:48 sön 21 sep. v. 4.3 (345) 85%

Demitris Demosson 19500812-1856 Uppgifter Att göra Läkemedelsadm.

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Läkemedelsadm.
Senaste uppdatering: 23:48

Alla (22) 1 3 Alla enheter Signerade egen enhet

Info	Ord. tid	Adm. tid	Preparat	Styrka	Form	Ord. dos	Adm. dos	Signerad
!	20:00		Allopurinol Orion	300 mg	Tablett	1 st		2025-08-25 5
!	20:00		Amoxicillin Ebb	750 mg	Filmdragerad tablett	1 st		2025-08-25
	Bhs		Mirtazapin Orion	15 mg	Munsönderfallande tablett	se bhs		2025-08-25
	Vb		Folsyra Vitabalans	1 mg	Tablett	1 st		2025-08-25
	Vb		Omeprazol Apofri	20 mg	Enterokapsel, hård	1 st		2025-08-25
?	Vb		Calcitugg	500 mg	Tuggtablett	?		2025-08-25
!			Furosemid Accord	10 mg/ml	Injektions-/infusionsvätska, lösning	2 ml		2025-08-25

23:48 sön 21 sep. v. 4.3 (345) 85%

Demitris Demosson 19500812-1856 Uppgifter Att göra Läkemedelsadm.

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Läkemedelsadm.
Senaste uppdatering: 23:48

Alla (22) 3 Alla enheter Signerade egen enhet

Info	Ord. tid	Adm. tid	Preparat	Styrka	Form	Ord. dos	Adm. dos	Signerad
!	08:00	+	Escitalopram Accord	5 mg	Filmdragerad tablett	3 st		2025-08-25 5
Adm. tf	Adm. väg	lor. inst	Adm. instruktion	Adm. kommentar		Adm. av	Nytt ställn.	Signerad på
Dialys	Oralt		000000000011 111111112222 222222333333 333344444444 445555555555 666666666677 777777778888 888888999999 999900000000 00					LS Medicin Avd
!	11:30		Morfin Abcur Addens-Natriumklorid B. Braun	2 mg/ml	Injektionsvätska, lösning Koncentrat till infusionsvätska, lösning	10 ml		2025-08-25
!	14:00		Allopurinol Orion	300 mg	Tablett	1 st		2025-08-25
!	14:00		Amoxicillin Ebb	750 mg	ad tablett	1 st		2025-08-25

Mer nedan

Klicka på raden för att få upp en administreringsruta.

1. Filtrera översikten på tid.
2. Filtrera på Igår/Idag/Imorgon
3. Filtera på signeringsenhet
4. Avgränsning
5. Expandera översiktsrad för mer information



iPad: Läkemedelsadministration

Singeldos med ett preparat:

00:02 mån 22 sep. 82 %

Stäng Bekräfta administration: Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Administrera

Tidigare administreringar inte utförda!

måndag 2025-09-22 20:00

FASS	PREPARAT	STYRKA	FORM	ORD. DOS	ADM. DOS
4		Waran	2.5	Tablett	1.5 st (= 3.75 mg) 1 15 *

Administreringsväg

Oralt

Adm. Metod

Annat

Adm. Tillfälle

Adm. Instruktion

Substitution tillåten?

Tillåten

Behandlingsorsak

Behandlingsmål

Administreras av

Förskrivare

Ingrid Dunder

Administrering datum/tid

2 2025-09-22 20:00

3 Kommentar

↓ Mer nedan

Sigvard, R. Testenhet 5** CSTC SLV

Singeldos med flera preparat:

00:14 mån 22 sep. 79 %

Stäng Bekräfta administration: Demitris Demosson 19500812-1856 Administrera

Tidigare administreringar inte utförda! Vill du göra detta?

söndag 2025-09-21 03:30

FASS	Lösning med flera preparat	Form	Styrka	Mängd
	Morfin Abcur	Injektionsvätska, lösning	10 mg/ml	2 ml
	Addens-Natriumklorid B. Braun	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	4 mmol/ml	8 ml

Adm. väg

Intravenöst

Adm. metod

Injektion

5 Styrka bruksfärdig lösning

2 mg/ml

Adm. tillfälle

Adm. instruktion

Substitution tillåten?

Tillåten

Behandlingsorsak

↓ Mer nedan

ORDINERAD DOS AV BRUKSFÄRDIG LÖSNING

Ordinerad Dos	Aktiv substans	Administrerad dos
10 ml	20 mg	1 10 *

Administrering datum/tid

2 2025-09-21 03:30

3 Kommentar

1. Välj Administrerad dos (förifylld från ordination)
2. Välj Datum och Tid
3. Addera kommentar v.b.
4. FASS länk (ePed om patienten är <18 år)
5. Styrka bruksfärdig lösning
6. Mer nedan visar att det finns mer information att läsa. Svep med fingret i den rutan

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.



16:26 fre 9 feb. 17% Underhåll / 2 väntande åtgärder

Fictiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

NYTT

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
Spara

Formulär

Mätvärden inkl NEWS2
Formulär

IPOS bedömning
Formulär

maintenance

Försök igen

Göm

16:28 fre 9 feb. 16%

Fictiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

NYTT

maintenance

Försök igen

1. Underhåll / 2 väntande åtgärder: Två mallar är köade och kommer skickas iväg så fort systemet är uppdaterat
2. Mallarna som är köade
3. Försök igen: Den orangea flaggan är borta och appen är uppdaterad. Tryck på Försök igen så laddar du om sidan och ser att mallarna gått iväg.
4. Patient sidan är tom och alla mallar har skickats iväg till TakeCare

13:28 ons 22 maj v. 4.3 (246) 27%

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter | Att göra | Mer

Uppgifter
Senaste uppdatering: 12:34

NYTT


Börja dokumentera på NYTT-knappen ovan.

Att Göra synkroniseras med TakeCare.
Under Mer finner du det din värdenhet har valt att visa av:

- Journalanteckningar
- Diagnoser
- Läkemedelslista
- Mätvärden

iPad: Offline-läge

Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

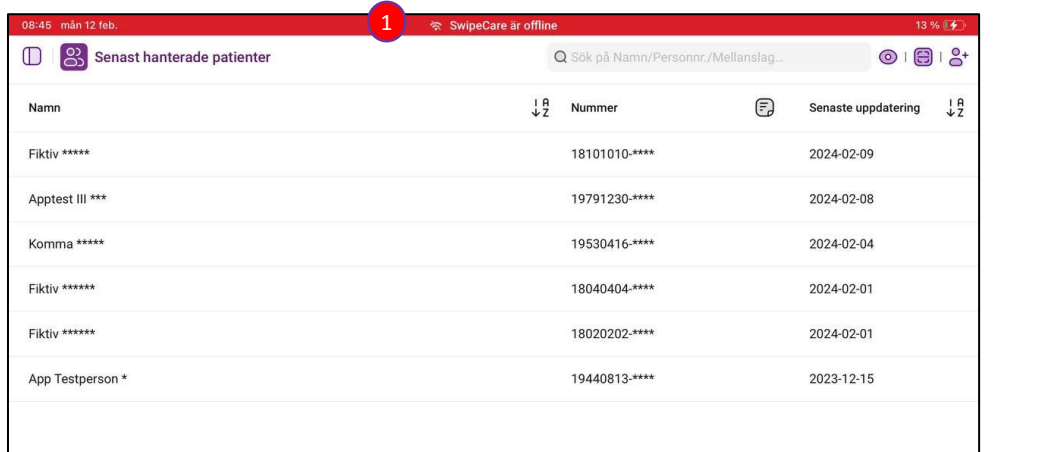


08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Senast hanterade patienter

Namn	Nummer	Senaste uppdatering
Fiktiv *****	18101010-****	2024-02-09
Apptest III ***	19791230-****	2024-02-08
Komma *****	19530416-****	2024-02-04
Fiktiv *****	18040404-****	2024-02-01
Fiktiv *****	18020202-****	2024-02-01
App Testperson *	19440813-****	2023-12-15

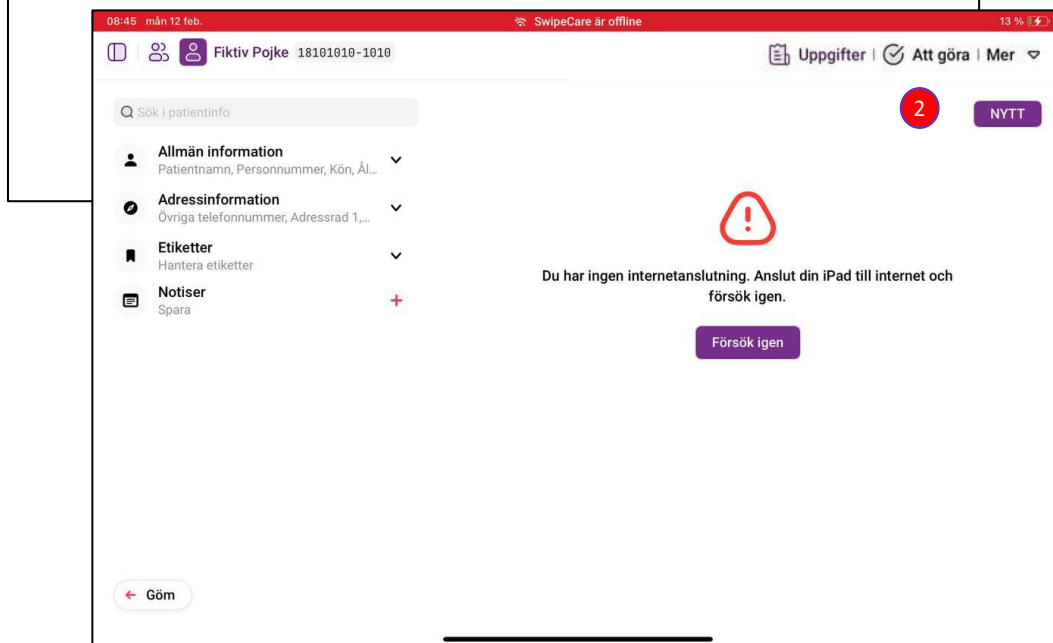

08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline


Fiktiv Pojke 18101010-1010

Sök i patientinfo

- Allmän information
- Adressinformation
- Etiketter
- Notiser

Du har ingen internetanslutning. Anslut din iPad till internet och försök igen.

Försök igen

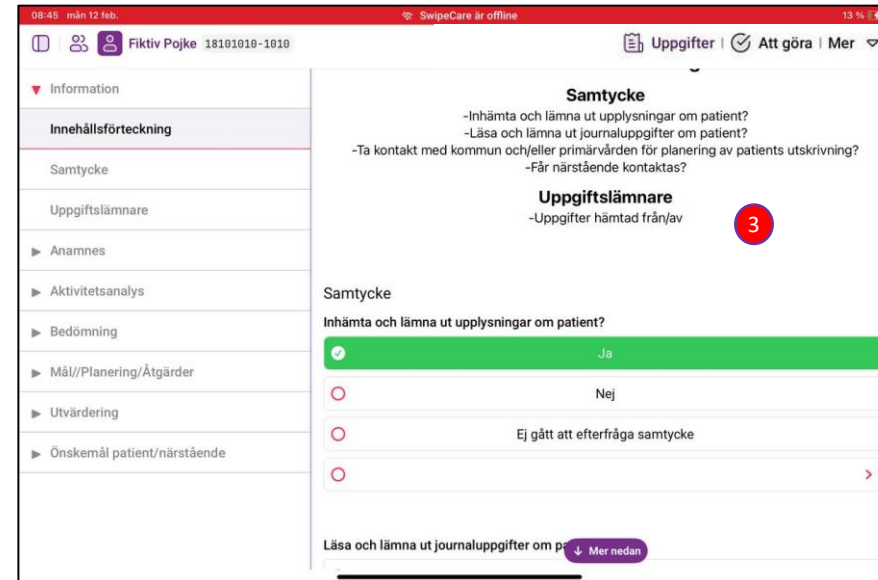

08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Information

Innehållsförteckning

- Samtycke
- Uppgiftslämnare
- Anamnes
- Aktivitetsanalys
- Bedömning
- Mål/Planering/Åtgärder
- Utvärdering
- Önskemål patient/närstående

Samtycke

Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

-Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

-Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient?

-Ta kontakt med kommun och/eller primärvården för planering av patients utskrivning?

-Får närstående kontaktas?

Uppgiftslämnare

-Uppgifter hämtad från/av

Samtycke

Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

Ja

Nej

Ej gått att efterfråga samtycke



Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient

Mer nedan

1. "SwipeCare är offline": Den röda flaggan indikerar att internet saknas men du kan fortfarande öppna patienter
2. På patientsidan får du information om att du saknas internet. Du kan fortfarande dokumentera i journalmallar.
3. Dokumentera i valfri journal- eller mätvärdesmall och tryck sedan på "Skicka till TakeCare".

iPad: Offline-läge

Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

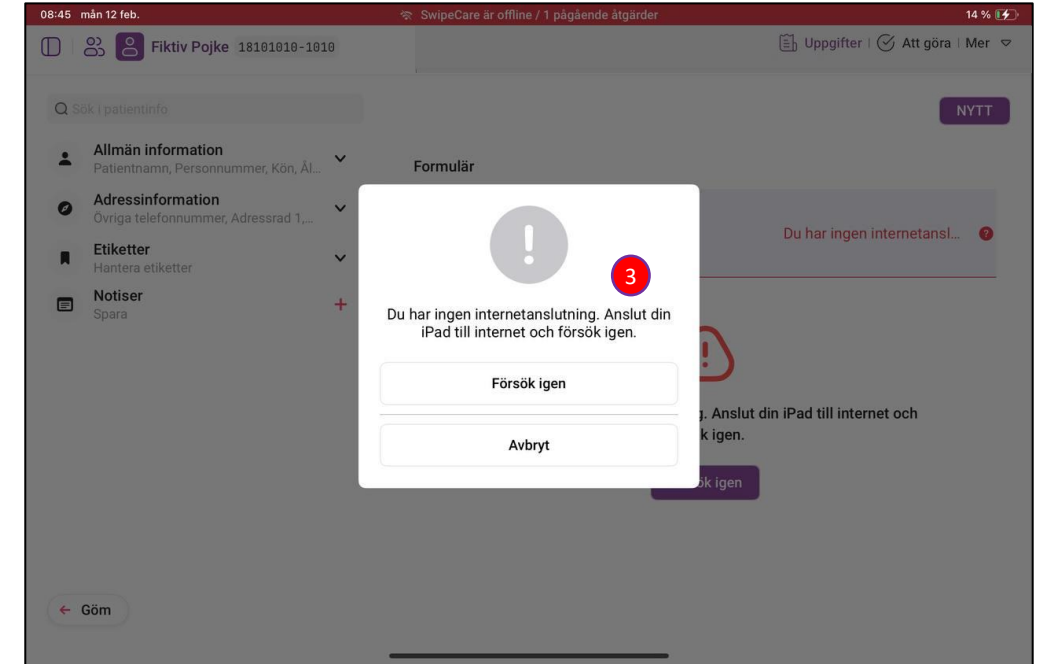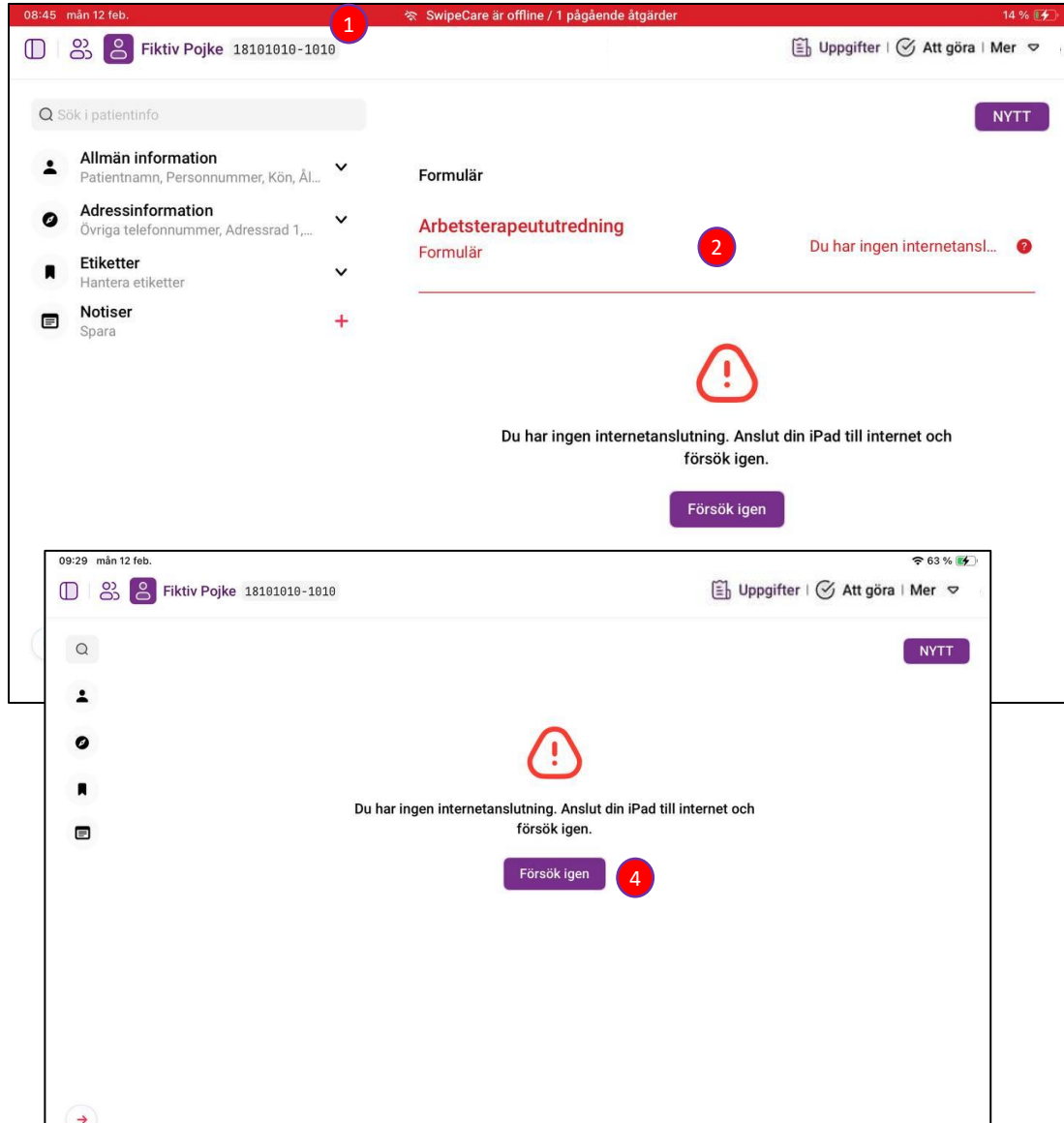

1. "SwipeCare är offline/1 pågående åtgärder": Den röda flaggan indikerar att appen är offline samt att 1 mall väntar på att skickas
2. Här ser du vilken mall som ligger kvar på iPaden. Den skickas automatiskt iväg när internet finns. Klickar du på mallen får du felmeddelandet 3.
3. Felmeddelande som informerar dig om varför mallen inte skickats iväg, i detta fall pga ingen internetuppkoppling.
4. Den röda flaggan är borta och appen har internet. Tryck på försök igen så laddar du om sidan. Mallarna har skickats iväg oavsett om du laddar sidan eller inte.



Felhantering och felmeddelanden

--



Hur hitta formulär/mätvärden som inte gått iväg till TakeCare?

De troligaste vanligaste felen finns som Tasks som syns i användarnas iPads och de kan därmed kan sökas upp i Teamarbetsvyn:

- **Granska anteckning: (mallnamn)**
 - Kommer tex om de fyllt i en mätvärdeskommentar utan att fylla i själva mätvärdet.
 - Denna uppgift måste rättas i SwipeCare portalen, går ej att göra i paddan. Tale med er IT support.
- **Fel vid sändning**
 - Kan bero på en massa orsaker i TakeCare eller SwipeCare.
 - Typiskt kommer vara "Illegal argument!"-fel som kommer från TakeCare:
 - (Failed to write casenote. User inactivated, eller Patient id failed check.)

Översikt Teamarbete Patienter

Byt vårdenhet Ljust tema Svenska Sara Bern

Teamarbete

Vårdflöde: Alla Typ: Alla Task filter: Alla Etiketter: Alla Ansvar: 1 Förfalldatum: Alla Rensa alla

Task filter:

Uppgiftstyp	Patientens namn	Personnummer	Flöde	Förfalldatum
manualPlus	Fel vid sändning: NEWS 2	Test Test	1810101010	Mätvärden till TakeCare: NEWS 2 2023-09-21



För **Fel vid sändning** så är det oftast TakeCare som klagar på fel parametrar:

- Användaren är inaktiverad i TakeCare om detta felmeddelande kommer:
"Illegal argument! (Failed to write casenote. User inactivated:
Om användaren bara loggar in i TakeCare igen så blir användaren aktiverad och anteckningen kan skickas.
- Användaren har skrivit fel personnummer på patient vid detta felmeddelande:
Illegal argument! (Failed to write casenote. Patient id failed check. Fail-code: -4)
Personnummer kan ej justeras i SwipeCare. För över information om patienten manuellt från SwipeCare till TakeCare.
Använd gärna streckkodsläsare-funktion i SwipeCare för att undvika denna typ av problem.
- Användare har inte TakeCare behörighet på denna vårdenhets vid detta felmeddelande:
Unauthorized request! (Failed to write casenote. User has not rights to this ward....

Vid **Kräver åtgärd**: "User is deactivated", så är användaren markerad som Inaktiv i SwipeCare.
Händer aldrig vid QR kods inloggning via TakeCare då den aktiverar användaren.