



Användarmanual

SwipeCare Version 4.2.34 – Mobilt vårdstöd

iPad

- kräver iOS 18.0 eller senare

2025 12 19

SwipeCare

2023-08-15



EUDAMED-DI: B-SwipeCare4JF




Strikersoft


Isafjordsgatan 39, 164 40 Kista, Sweden

www.strikersoft.com Org. nr. 556661-1637

Efter ny-/ominstallation av SwipeCare 4 app på iPad: Välj organisation.

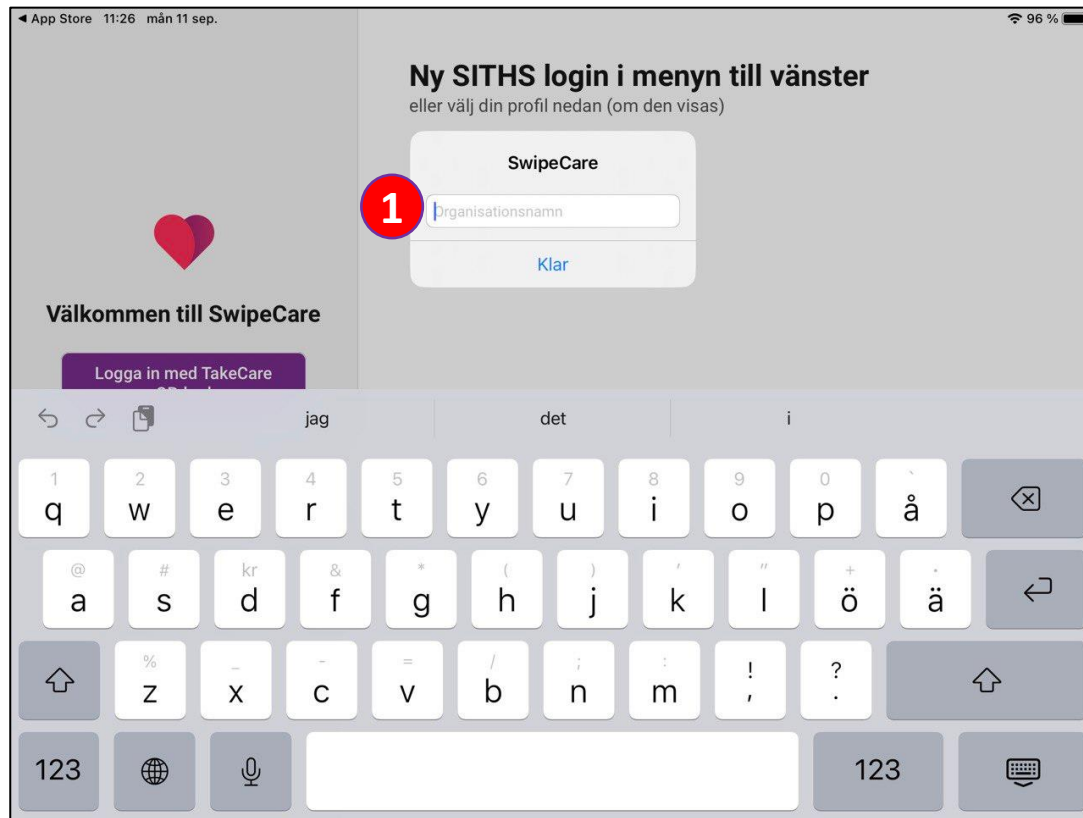


1. Skriv in din organisation: t.ex RegionStockholm, Aleris, Sophiahemmet, Danderyd
2. OM du har access till flera vårdenheter så får du välja i en lista

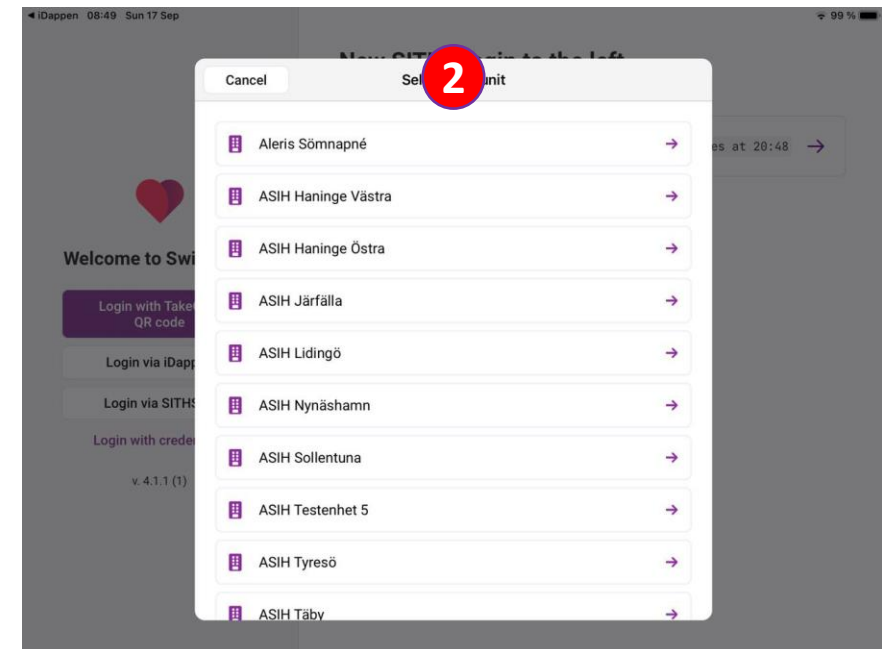




iPad: Logga in

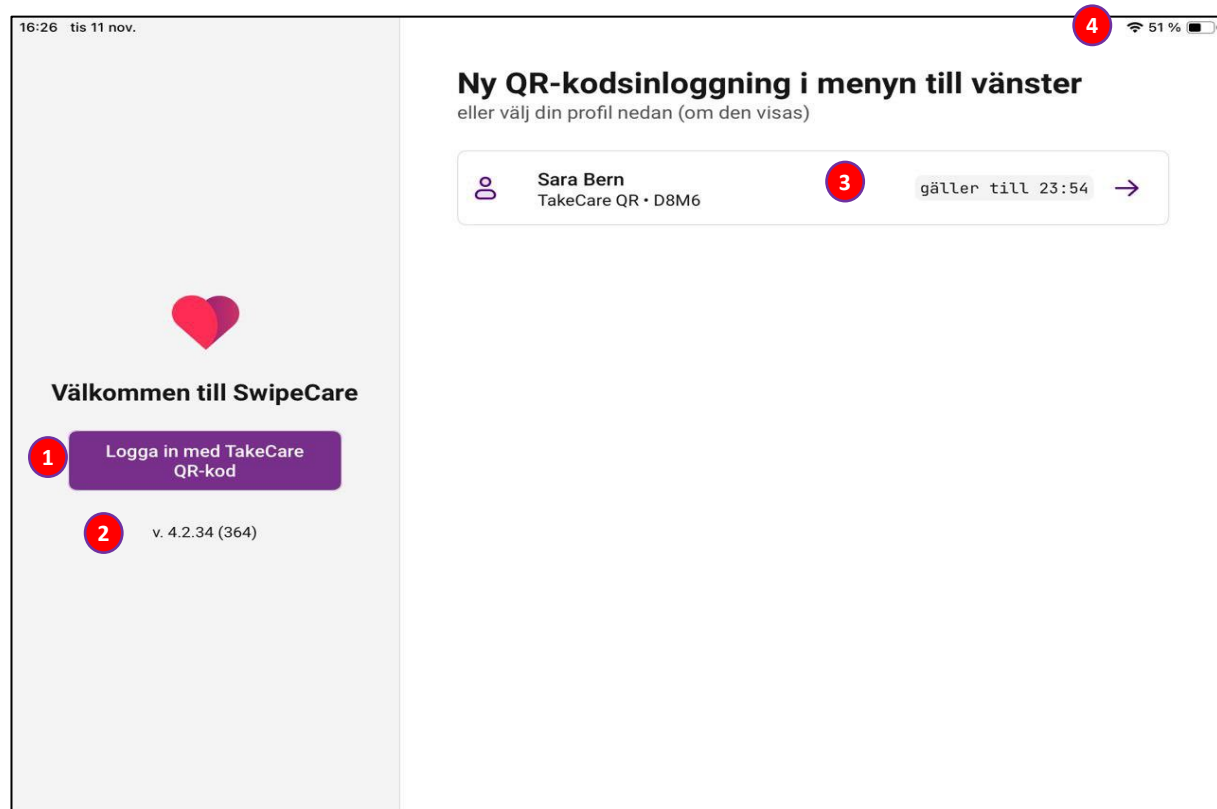

1. Logga in med din QRkod från TakeCare där du har loggat in med SITHS redan (se nästa sida)
2. Versionsnummer på appen
3. Login-kort som visar vem som loggat in och hur länge din profil med personlig PIN är giltig innan du behöver logga in från början med SITHS kort.
4. Ikon för att visa om du har tillgång till internet (WIFI eller mobilnät)
Har du ingen internet-täckning visas en röd ribba enligt nedan.

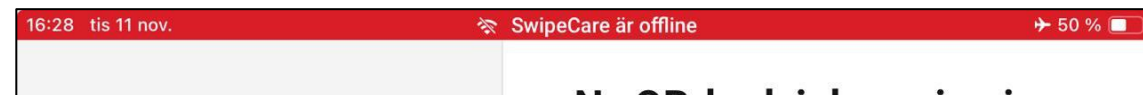


Du kan fortfarande påbörja journalmallar och mätvärden.
De står på kö i din padda tills användaren har internet igen (på sidan Uppgifter).


iPad: QR kods login efter du tryckt på

Logga in med TakeCare
QR-kod

Inne i TakeCare på PC:

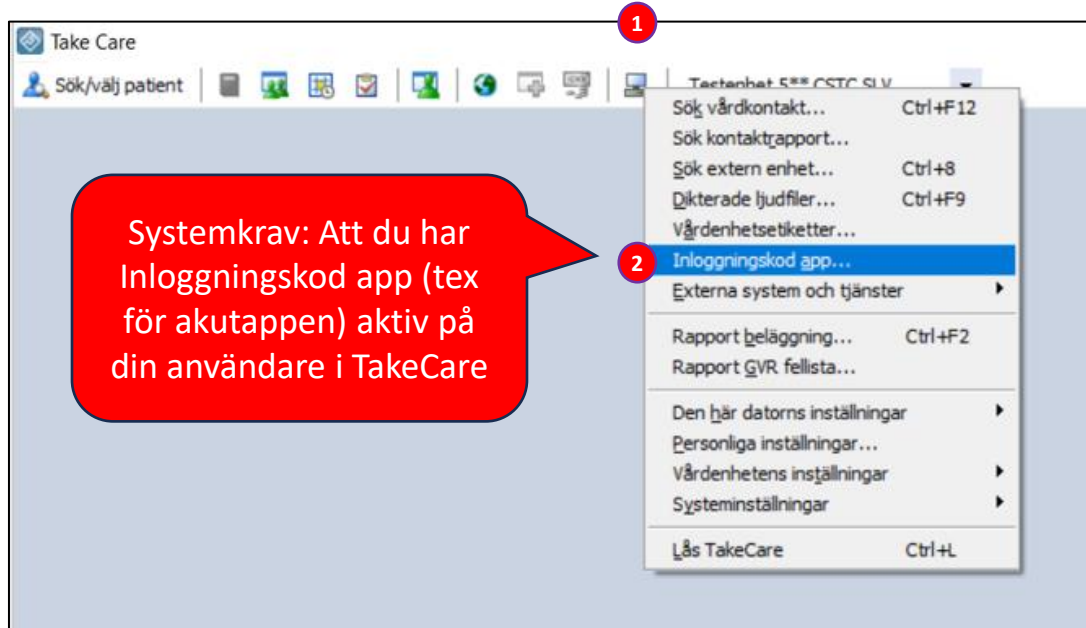

Använd PIN 2 för Underskrift.
På SITHS kortet finns PIN 1 för Inloggning
och PIN 2 för Underskrift

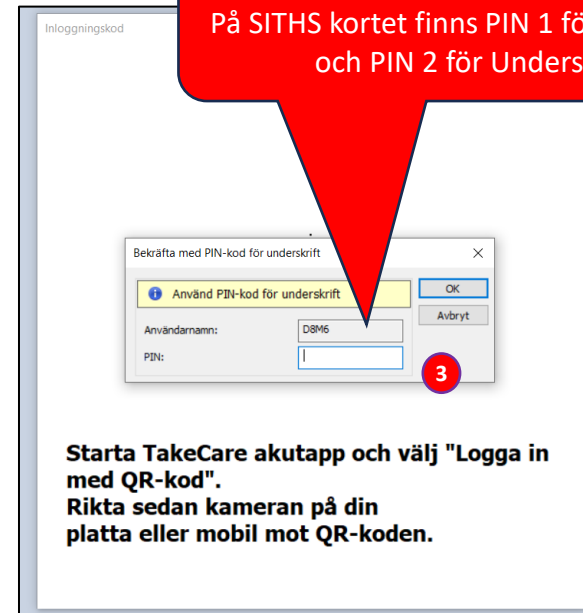


4. Starta TakeCare akutapp och välj "Logga in med QR-kod".
Rikta sedan kameran på din platta eller mobil mot QR-koden.

1. Välj TakeCare Systemmeny (PC ikonen) inne i TakeCare på din egen inloggning
2. Välj Inloggningskod app...
3. Mata in din PIN kod för **signering (=PIN2)**
Notera att du kan välja att ändra din SITHS PIN2 till något du kommer ihåg. Det görs inte inne i SwipeCare.
4. Fota QR koden med SwipeCare iPad
5. Välj PIN kod för din SwipeCare session (gääller 12 timmar)
6. VIPS, så är du inne i SwipeCare



iPad: Välj din egen Personliga PIN (giltig 12 timmar)

Välj och upprepa din personliga PIN

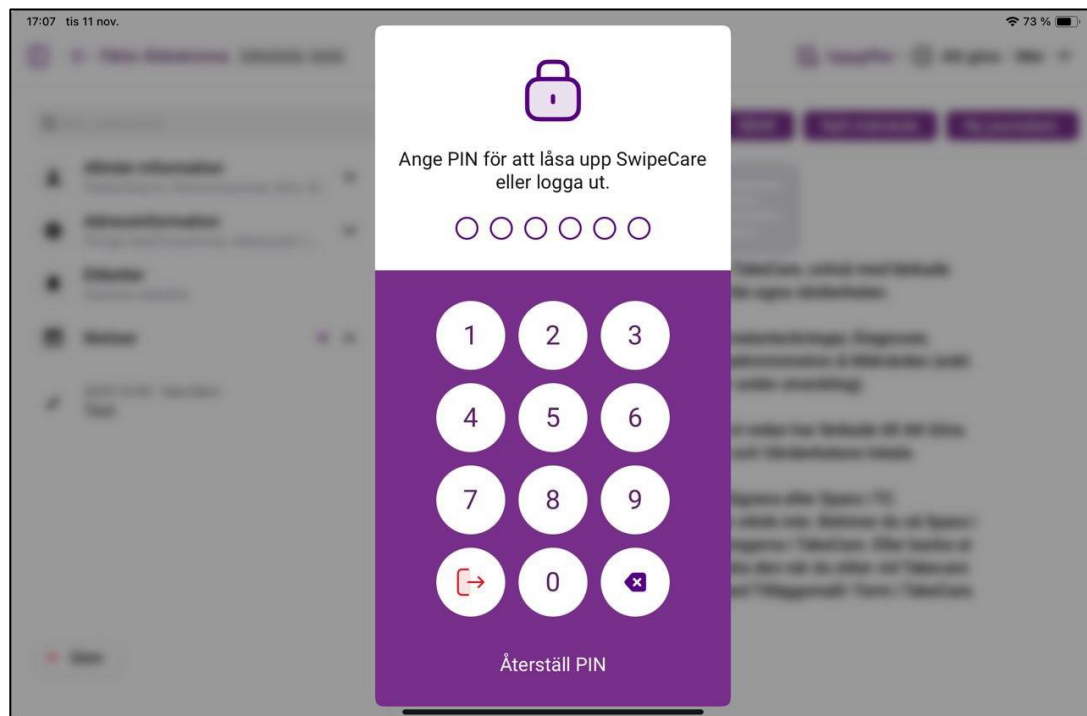


- **VIKTIGT:** Den PIN du väljer ska vara personlig. Den är kopplad till ditt HSA ID som används av SwipeCare för att skriva/läsa mot TakeCare.
- PIN används:
 - För kort login
 - Efter autolås
 - Efter vänteläge (standby)
 - När du växlar mellan appar på paddan
- Om du har glömt din personliga PIN kan du trycka på "Återställ PIN"
 - Då öppnas automatiskt kameran för att du ska kunna skanna din QR-kod i TakeCare igen.
 - Sen får du välja PIN kod igen.
- Logga ut ur SwipeCare på den röda knappen längst ned till vänster:





iPad: Välj vårdenhet

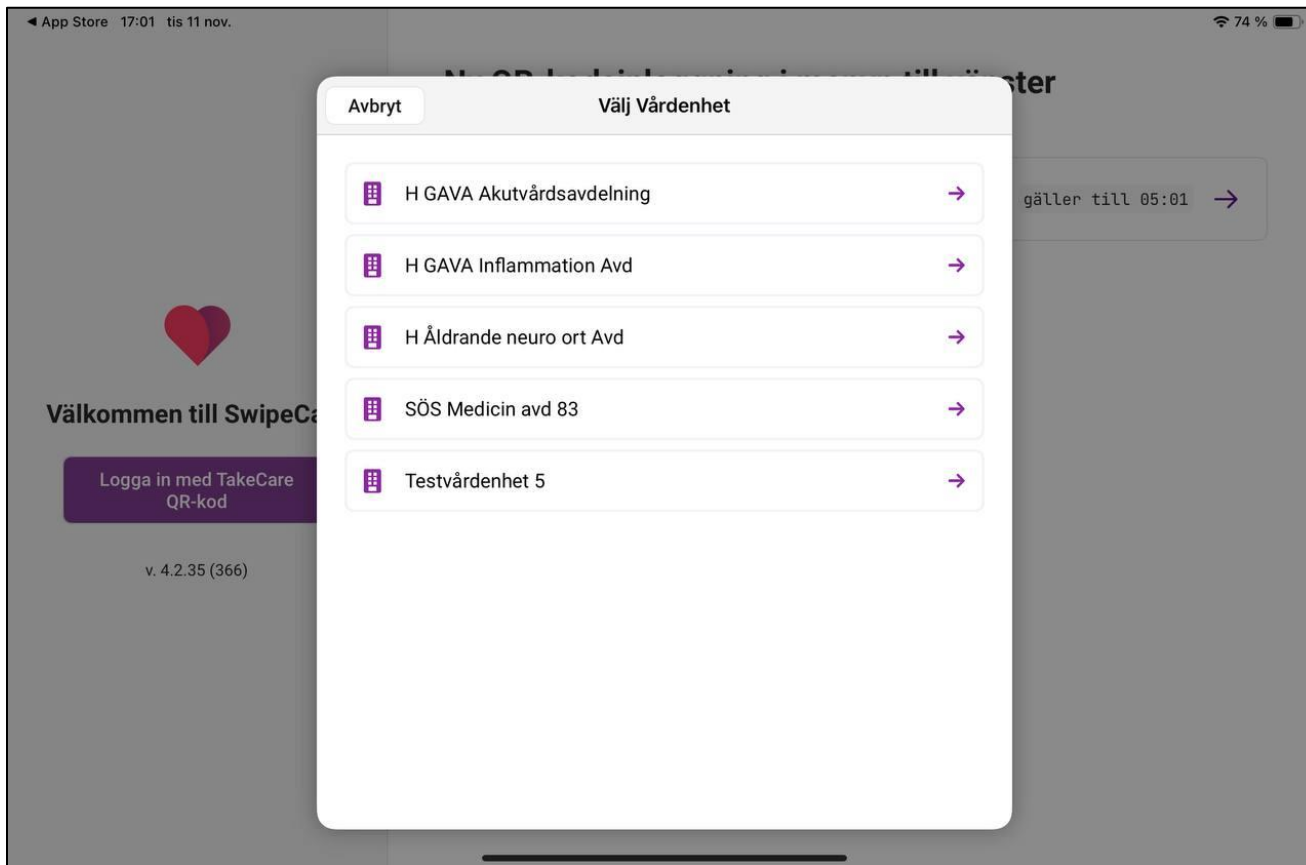

- Om du har access till flera vårdenheter får du välja vårdenhet här annars kommer du rakt in till Patientlistan

iPad: Vårdenhetens patientlista



4 sista siffror i personnummer maskerade med stjärnor

20:16 tis 11 nov. 67 %

Testvårdenhet 5 Senaste uppdatering: 19:36

Sök på Namn/Personnr

Visa Skanna Lägg till

	Nummer	Namn
	18060606-****	Fiktiv Äldrekvinna
1:1	99200103-****	Källström Kjell
4:2	18111111-****	Fiktiv Man
5:1	19530416-****	Komma Karin
6	99201857-****	Barn Under 13 Hd
	18020202-****	Fiktiv Kvinna

Omaskade patienter (utan stjärnor)

20:22 tis 11 nov. 67 %

Testvårdenhet 5 Senaste uppdatering: 19:36

Sök på Namn/Personnr...

Dölj Skanna Lägg till

	Nummer	Namn
	18060606-0606	Fiktiv Äldrekvinna
1:1	99200103-2156	Källström Kjell
4:2	18111111-1116	Fiktiv Man
5:1	19530416-2349	Komma Karin
6	99201857-5395	Barn Under 13 Hd
7:2	18020202-0202	Fiktiv Kvinna


1. Plats: Här läses vårdplats ut från TakeCare. Har en patient blivit tilldelad vårdplats i TakeCare syns det här.
Tomt för patient som antingen är inskriven men inte tilldelad vårdplats eller patient som manuellt lagts till i SwipeCare.
2. Tid för när listan senast uppdaterats. För att uppdatera drar man listan nedåt, svep neråt. Texten blir röd efter 12 timmar.
3. Sökruta för att söka efter patienter. Antingen på namn eller personnummer.
4. Genom att trycka på ögat i höger hörn kan du avmaskera personnumret. Standard är att de 4 sista är maskerade.
5. Här kan du skanna t.ex. streckkod på patientens armband och på så sätt lägga till patienten eller öppna patientens profil. (För t.ex. ökad patientsäkerhet)
6. Genom att trycka på denna knapp kan du manuellt lägga till en patient.

SwipeCare har inte tillgång till spärrad patientinformation.

Du kommer alltså inte kunna läsa ut eller skicka information till TakeCare på patienter med låst journal.



iPad: Addera patienter

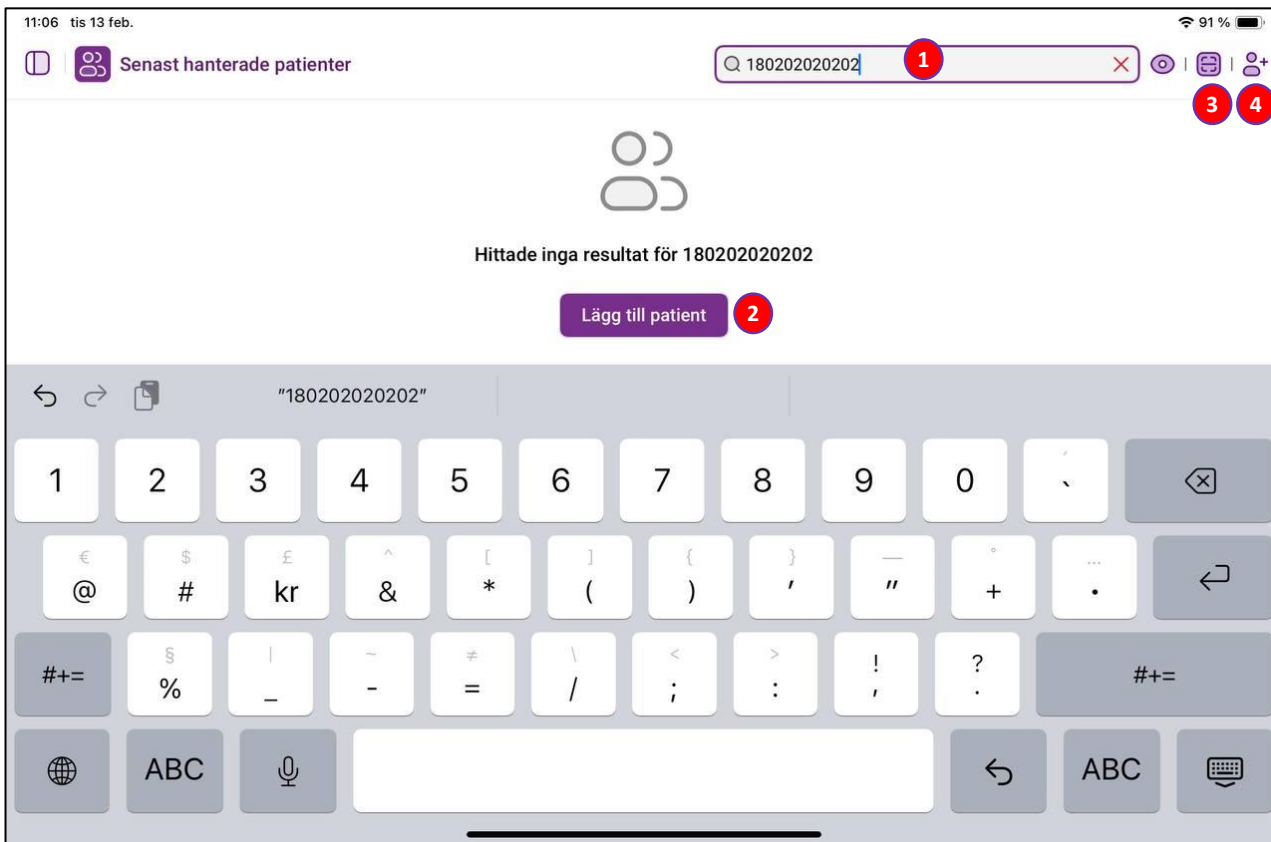

1. Sök patient (i SwipeCare systemet) på personnummer
2. "Lägg till patient": Om SwipeCare inte hittar patienten i sitt system så trycker du på den **lila knappen** för att addera patienten med det nummer du skrev i sökfältet.
3. Addera patient genom att scanna streckkod/QR kod
4. Addera patient manuellt



iPad: Lägg till ny patient

iDappen 17:51 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer T.ex. 1912121212 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn E-post

SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2

Postnummer Stad

Lägg till patient

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer 19750806-8413 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn App Testperson X E-post T.ex. namn.namn@mail.com

Lägg till patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 å

q w e r t y u i o p

@ # kr & * () ' " + .

a s d f g h j k l ö ä

↩ % _ - = / ; : ! ? ↵

123 🌐 🎤 123 📄

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer Reservnummer 1804040404

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn Tolvan Tolvanesson E-post

SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2


Postnummer Stad

Lägg till patient

- Patientid och namn är obligatoriska uppgifter.
- Om ni har funktionen SPAR, så läggs namnet till automatiskt
- Vid journalskrivning förs endast patientid över till TakeCare, som lägger till namnet själv.



iPad: Vårdenhetens patienter

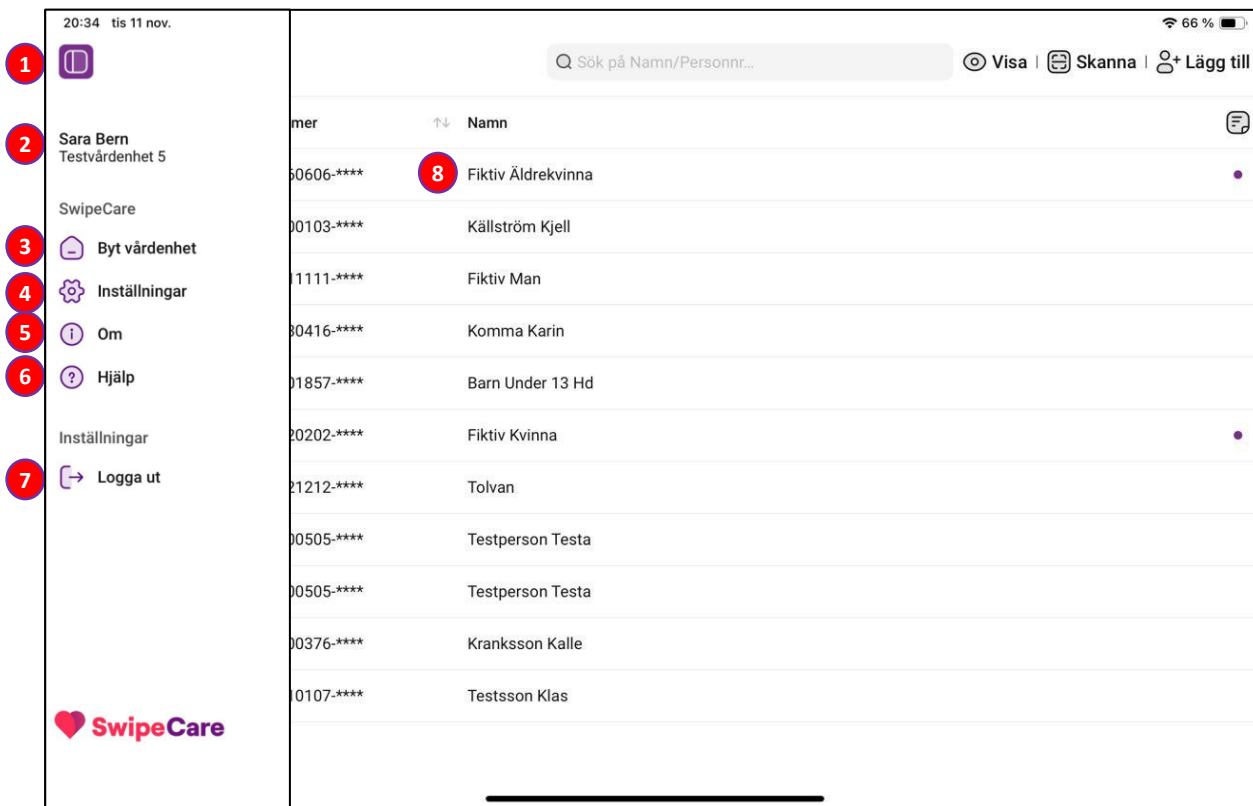

1. Öppna/stäng menyn (kommer in från vänster).
2. Du ser användare och vårdenhet
3. **Byta vårdenhet** (om du har behörighet i SwipeCare till flera)
4. **Inställningar**. Idag finns dessa:
 - Skicka teknisk information (för felspårning)
 - Se vilket backend system iPaden är kopplad mot.
5. **Om**, berättar om systemet
6. **Hjälp** leder till hjälpsidan på internet. Du kan nå den sidan från en dator också.
7. **Logga ut**
8. Klicka var som helst på en patientrad för att öppna patientens profil



iPad: Arbetslista i patientlistan, Notiser

20:17 tis 11 nov. 67 %

Testvårdenhet 5 Senaste uppdatering: 19:36

Sök på Namn/Personnr...

Visa Skanna Lägg till

↓	↕	Nummer	↕	Namn	
		18060606-****	3	Fiktiv Äldrekvinna	4
00103-****		Källström Kjell	1		2 Fäst Notiser Ta bort
4:2		18111111-****		Fiktiv Man	
5:1		19530416-****		Komma Karin	
6		99201857-****		Barn Under 13 Hd	
7:2		18020202-****		Fiktiv Kvinna	

Arbetslista - "Fäst" dina patienter högst upp i patientlista

1. Slep patienten åt vänster
2. Välj Fäst
3. Patienten stannar högst upp i din lista, på **denna** iPad.
Om du loggar ut och in igen stannar Fästa patienter i din arbetslista på denna iPad. Om du tar en annan padda får du skapa din arbetslista på nytt.
4. Notiser. Har patienten en notis, så syns det som en prick.
5. Lösgör: Patienten är inte fäst längre
6. Här kan du också läsa/skapa notiser på patient.
OBS: Notiser journalförs inte i TakeCare.
7. Ta bort: Ta bort patienten från patientlistan



iPad: vänster ram innehåller generell information om patienten. Adress/tel är inte synkad med vårdgivarportalen



23:11 sön 21 sep. 93 %

Costner Testperson 99200061-5217

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

Allmän information

Patientnamn
Costner Testperson

Reservnummer 992000615217 Kön - Ålder -

Email -

Telefonnummer -

Tillåt e-post-aviseringar

Tillåt SMS-aviseringar

Adressinformation

Övriga telefonnummer, Adressr...

Etiketter

Hantera etiketter

Notiser

Spara

Göm

Uppgifter

Senaste uppdatering: 23:11

SBAR Nytt mätvärde Ny journalant.

Under MER finner du det din vårdenhet har valt att visa av:
Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista,
Läkemedelsadministration och Mätvärden

ATT GÖRA synkroniseras med TakeCare,
ockå med länkade mätvärdesmallar.

Dokumentera på NYTT-knapparna ovan.

Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så gör de
anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall
och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan
komplettera med Tilläggsmall/- Term i TakeCare.

10:58 ons 12 nov. 93 %

Fiktiv Äldrekvinna 18060606-0606

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

Allmän information

Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation

Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter

Hantera etiketter

Notiser

Spara

Göm

Uppgifter

Senaste uppdatering: 10:58

Mina påbörjade journalanteckningar/mätvärden

- Vätskemätning
Formulär

Senast skickad information




Mätvärde till TakeCare
Importerad till journalsystemet 2025-11-12, 10:36 Smärtintensitet enl NRS

Mätvärde till TakeCare
Importerad till journalsystemet 2025-11-11, 22:26 CVK, byte av kran/injektionsventil

1. Kollapsa/expandera informationen med pilen.
2. Skriv en notis på patienten, den journalförs inte.
Notisen kan också ses i patientlistan om du sveper patienten åt vänster.
3. Göm/ta fram sidopanelen med "Göm". Röda horisontella pilen återställer sidopanelen.
4. Hantera patients registrerade telefonnummer, om ni skrivit in det. OBS: synkas ej med TakeCare.

5. MER: Utläsning från TakeCare, och HJÄLP-sida med instruktionsfilmer
6. SBAR: Överrapporteringsverktyg (tilläggsfunktion)
7. Påbörjade mallar som kan editeras. Svej åt vänster för att radera den
8. Senaste informationen som skickats från iPad till TakeCare med status

iPad: Uppgifter - Starta & välj mall

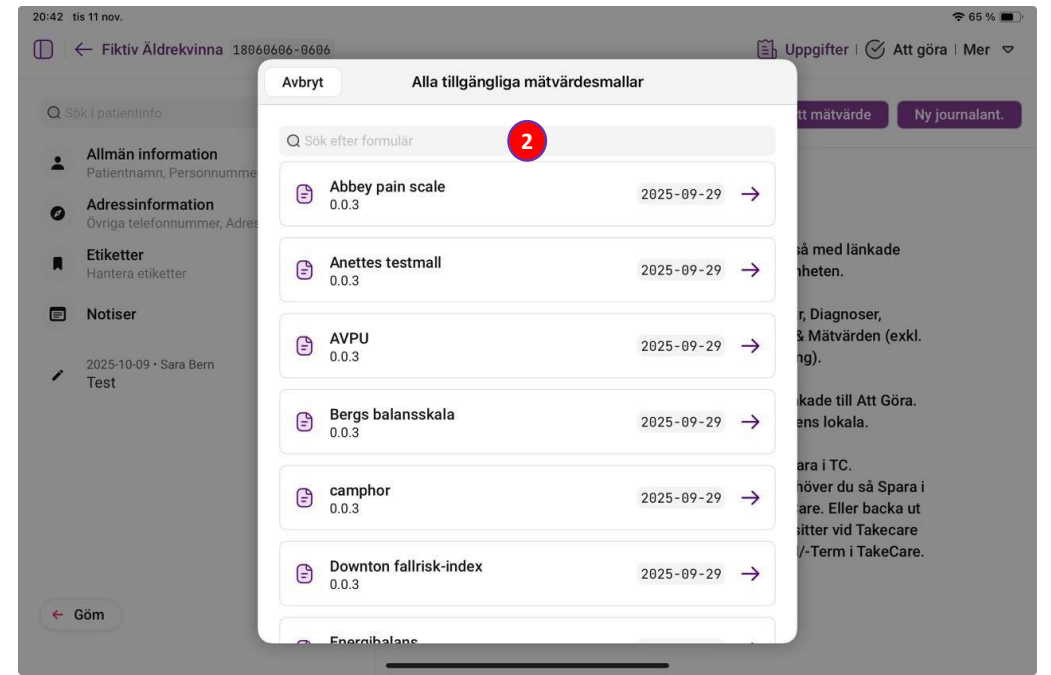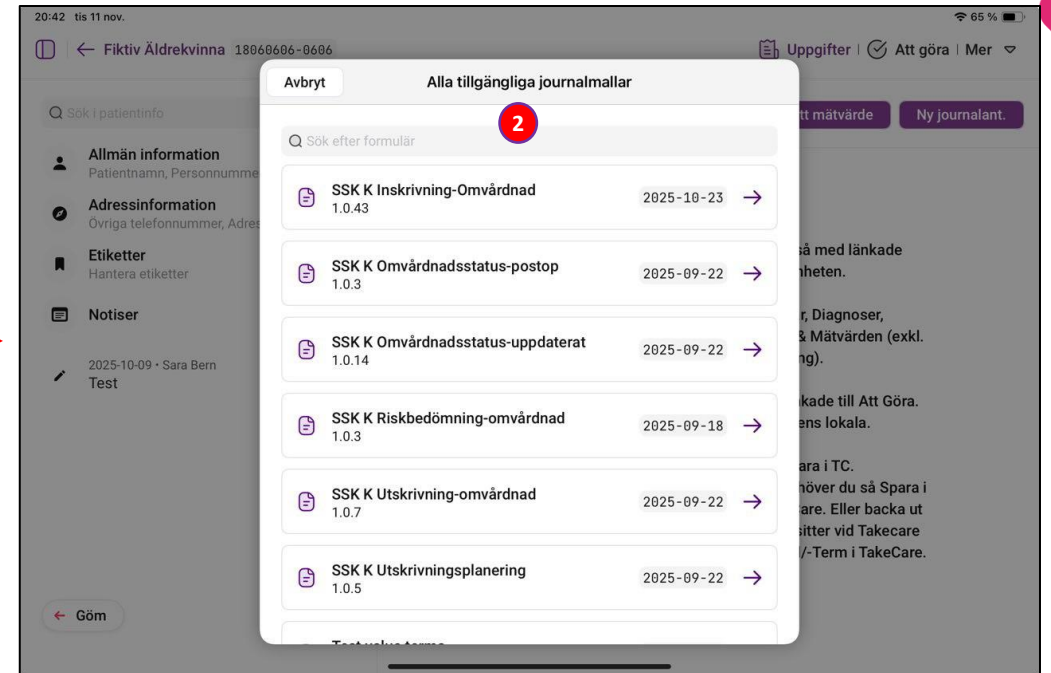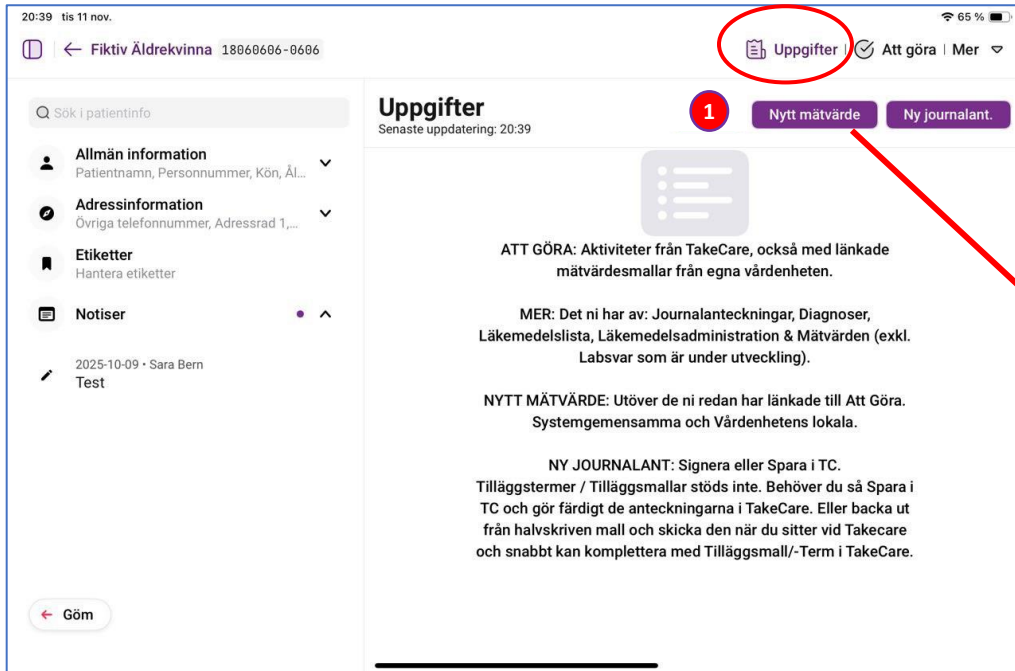

1. Starta en mall på lila knapp:
Nytt mätvärde eller **Ny journalanteckning**.
SwipeCaremallens versionsnummer och skapandedatum står angivet.
2. Välj eller sök mall.
 - Mätvärdesmallarna hämtas ut automatiskt från Vårdenheten.
 - Journalanteckningsmallarna som visas här är manuellt konfigurerade mot TakeCaremallen



iPad: Uppgifter - Skapa journalanteckning

20:53 tis 11 nov. 64 %

← Fiktiv Äldrevinna 18860606-0606

Uppgifter | Att göra | Mer

> Allmänna uppgifter *

▼ Omvårdnadsanamnes *

Kontaktersak

Hälsohistoria / vårderfarenhet *

Pågående vård, överkänslighet

Socialt

Berörda minderåriga barn

Inskrivningsmeddelande skickat

Levnadsvanor

> Omvårdnadsstatus *

SSK K Inskrivning-Omvårdnad 1

Fyll i dokumentet

3 Spara i TC Signera

Berörda minderåriga barn

Oklart Ja

Nej Uppgift saknas

Kommentar:

Information om berörda minderåriga barn

Tilltals-namn	Födelseår (årtal)	Kön	Vistas i patientens hus-håll	Vårdnadshavare	Patientens relation till barnet	Annan viktig person för barnet	Insatser	Kommentar
Wilma	2023	Flicka	Dagligen	Patienten, enskild vårdnad	Morförälder		Ja, insatser har erbjudits	

+ Lägg till en rad

2 ↓ Mer nedan

Avbryt SwipeCare Ja

Signera?
november 11, 2025 20:59

Skicka datum och tid 4

för 8 nov.	17	56
sön 9 nov.	18	57
mån 10 nov.	19	58
idag	20	59
ons 12 nov.	21	00
tors 13 nov.	22	01
fre 14 nov.	23	02

Uppgifter | Att göra | Mer

Uppgifter

Senaste uppdatering: 21:04

Nytt mätvärde Ny journalant.

Senast skickad information

Journalanteckning till TakeCare
Importerad till journalsystemet 2025-11-11, 21:04

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

5 Klart!
Informationen är importerad till TakeCare

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

Egenskaper 6

Allmänt Sokord

Skapad: 2025-11-11 20:55

Mallnamn: K Inskrivning-omvårdnad

Yrkesgrupp: Administrativ personal

Händelsetid: 2025-11-11 19:00

Tillhör arbetsplats: H GAVA Inflammation Avd

Skapad av: Swipecare Strikersoft

Version skapad: 2025-11-11 20:55:41

Version skapad av: Swipecare Strikersoft /stelpa

Signeringsansvarig: Sara Bern, Adm

Kontrasigneringsansvarig:

Signerad av: Swipecare Strikersoft

Signerad: 2025-11-11 20:55

OK Avbryt

1. Mallnamn
2. Mer nedan = Malleen är längre. Scrolla ned!
3. Spara i TC eller Signera (Vårdenheten kan välja per mall om ena/båda knapparna ska synas). Om dessa lila knappar försvinner, så dra fingret uppåt så kommer den tillbaka.
4. Välj datum och Händelsetid för anteckningen. Signerad med nutid.
5. När information har importerats till TakeCare kommer denna popup upp med ett ljud i ca 5 sekunder. För att stänga den så klickar du på den.
6. Så här ser antckningens egenskaper ut i TakeCare, om jag ändrade Händelsetiden till 19:00



iPad: Uppgifter - Registrera mätvärden

21:30 tis 11 nov. 59%

← Fiktiv Äldrekvinnas 18060606-0606

Uppgifter Att göra Mer

Energibalans

Energibalans

Energibalans

Energibehov (kcal/dygn) *

Kommentar:

Energiintag per os (kcal/dygn)

Kommentar:

Energiintag enteral nutrition (kcal/dygn)

Mer nedan

1 2 3 4

Skicka till TakeCare

Avbryt SwipeCare Ja

Skicka in anteckning?
november 11, 2025 21:12




Skicka datum och tid

lör 8 nov.	18	09
sön 9 nov.	19	10
mån 10 nov.	20	11
idag	21	12
ons 12 nov.	22	13
tors 13 nov.	23	14
fre 14 nov.	00	15

1. Tryck på pil för att fylla mätvärde.
2. Om inget mätvärde har fyllts i så kan man inte skriva en kommentar.
3. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
4. Skicka till TakeCare för att signera mätvärdet (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka).
5. Välj Händelsedatum och tid för mätvärdet. Signeringsdatum blir aktuell nutid.



iPad: Uppgifter – Bekräftelse på importerad anteckning/mätvärde

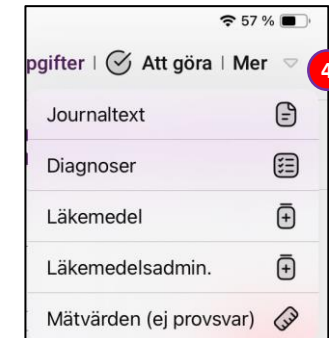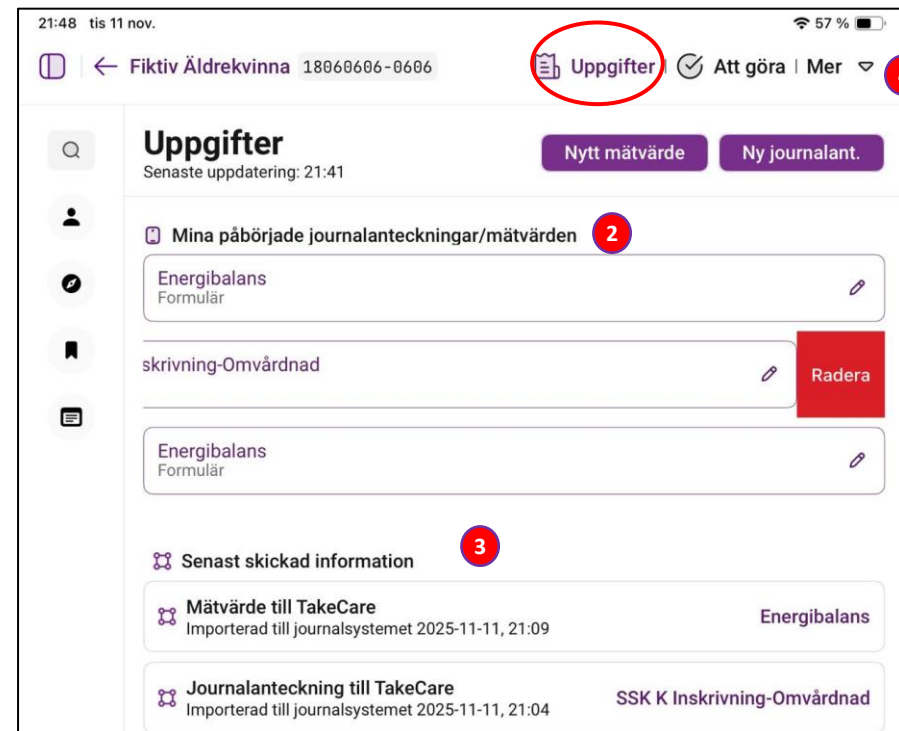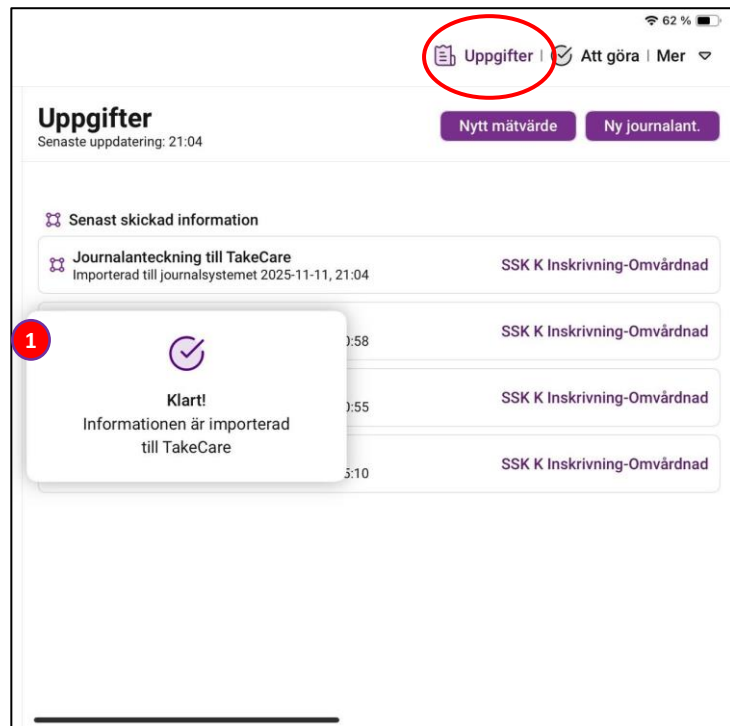

1. När information har importerats till TakeCare kommer denna popup i ca 5 sekunder. För att stänga den så klickar du på den.
2. Påbörjade anteckningar/mätvärden som du kan fortsätta editera innan du skickar till TakCare. Dra åt vänster för att radera den.
3. Namnet på de 10 senast skickade informationerna senaste dygnet, inklusive datum och klockslag.
4. För att läsa vad du har skickat får du läsa ut från TakeCare under Mer

iPad: Att Göra listan (Aktiviteter synkroniserade med TakeCare)




15:16 fre 19 dec. 37 %
Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mer
Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "igår, idag, imorgon" Journalfilter
Aktivitetshanteraren (Välj Journalfilter: t.ex. Egen vårdgivare)
Senaste uppdatering: 13:38
KONTINUERLIG AKTIVITET
Personstöd vid förflyttning
Kontinuerlig Skapad/ändrad på: H Åldrande neuro ort Avd
2 pers
Träning - ändra kroppsställning
Kontinuerlig Skapad/ändrad på: H Åldrande neuro ort Avd
Instrueras/tränas i att självständigt ändra kroppsställning.
Vätskemätning
Kontinuerlig Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd
FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG
Cirkulation, kontroll
Daglig Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd
Utför distalstatus - funktion, känsel, cirkulation

15:15 fre 19 dec. 37 %
Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mer
Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "igår, idag, imorgon" Journalfilter
Aktivitetshanteraren (Välj Journalfilter: t.ex. Egen vårdgivare)
Senaste uppdatering: 13:38
KOMMANDE IDAG
hörselscreening OAE DS Återbesöksmott.
Engångs Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd
Skapad på GAVA akut
KOMMANDE IMORGON
Saturation
Daglig Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd
Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna
2 liter syrgas (individuellt bedömning) om lägre än 90 % i saturation.
BBBB
Ögontryck
Daglig Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd
0133 2355
Bedömning
Daglig Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd
Vid palliativ vård:
Utfört munvård och trycksårsprofylax
Kontroll av andning/andnöd, rosslig, illamående/kräkning,
Problem med vattenkastning, tarmfunktion och/eller oro/ängest.

1. Filtrering: Egna spärrgruppens aktiviteter läses ut automatiskt (igår, idag, imorgon).
OBS: Tryck på "Journalfilter" för att ändra utläsning, tex till de kopplade spärrgrupper du har satt som standard i TC.
2. Senaste uppdatering. *För att uppdatera utläsningen med senaste, svep nedåt*
3. Kontinuerliga aktiviteter: klarmarkeras aldrig. Länkas inte med måtvärden ännu.
4. Försenade från igår och idag är **rödmarkerade**
5. På vilken vårdenhet Aktiviteten skapades eller senast redigerades
6. Kommande idag: Dagens aktiviteter (svart)
7. Kommande imorgon: Morgondagens planerade aktiviteter



Aktiviteter hämtas för hela spärrgruppen och har nu Filterval

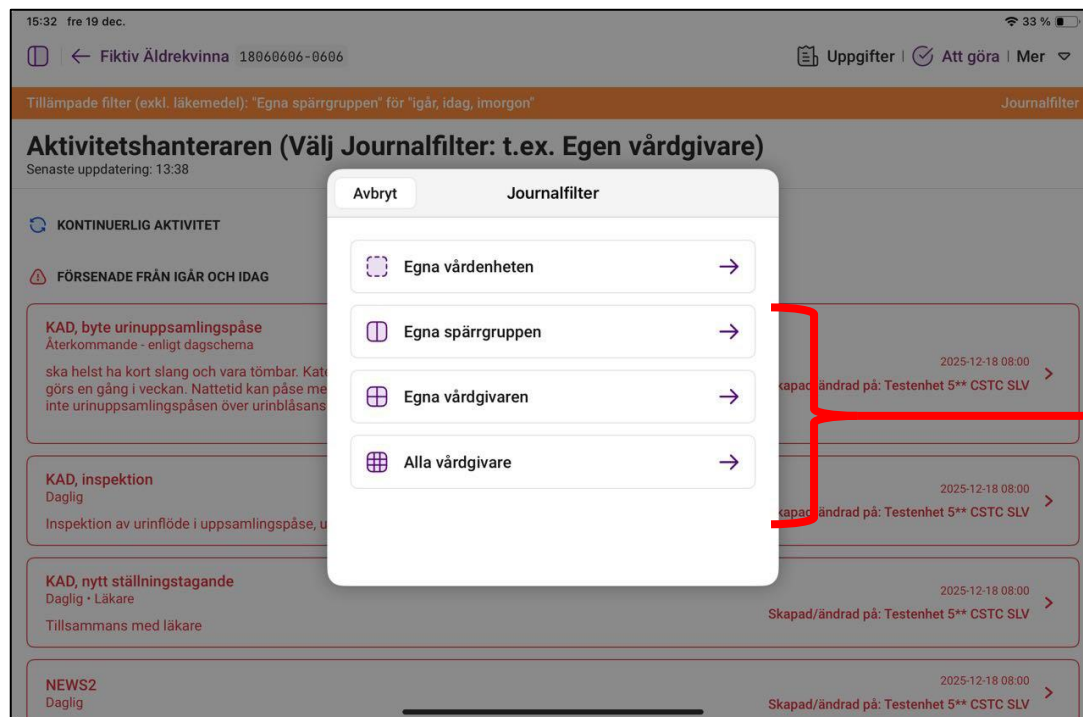

OBS:

- För Aktiviteter skapade utanför egna vårdenheten så visas länkade systemgemensamma mätvärdesmallar automatiskt.
- Lokala mätvärdesmallar från annan vårdenhet kan inte hämtas automatiskt (precis som i TakeCare). Då visas en förklarande text i popup.

iPad: Att Göra listan (Aktiviteter synkroniserade med TakeCare)



16:02 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 46 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade

Att göra

Senaste uppd.

KOMMA

Daglig

Uppmuntr som patie null time

Saturation

Daglig

Mätning a 2 liter syrg BBBB

NEWS2

Daglig

Utförd nu 1

Utförd tidigare 2

Ej utförd 3

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

16:46 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 28 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade

Att göra

Senaste uppd.

FÖRSEN

Uppmuntr som patie null time

Saturation

Daglig

Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna

2 liter syrgas (individuell bedömning) om lägre än 90 % i saturation.

BBBB

	13	43
ons 15 okt.	14	44
tors 16 okt.	15	45
idag	16	46
lör 16 okt.	17	47
sön 16 okt.	18	48
mån 17 okt.	19	49

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Godkänn

1. **Utförd nu:** Aktiviteten får nuvarande tid registrerad i TakeCare
2. **Utförd tidigare:** Välj datum och tid när aktiviteten utförts, klicka sen på Godkänn för att registreras i TakeCare som Utförd.
3. **Ej utförd:** Om aktiviteten utförts /ej ska utföras kan du lämna kommentar (vid behov) och klicka på godkänn.

16:41 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 30 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade

Att göra

Senaste uppd.

FÖRSEN

KOMMA

Daglig

Uppmuntr som patie null time

Saturation

Daglig

Mätning a 2 liter syrg BBBB

NEWS2

Daglig

Saturation

Daglig

Mätning a 2 liter syrg BBBB

NEWS2

Daglig

Saturation

Daglig

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Godkänn

Kommentar, ej utförd aktivitet

Kommentar

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)



Aktivitet utförd/utförd tidigare:

Rutan blir grön och försvinner sen av sig själv.

15:16 fre 19 dec. 37 %

Faktiv Äldrekvinnor 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mer

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Igår, idag, imorgon" Journalfilter

Aktivitetshanteraren (Välj Journalfilter: t.ex. Egen vårdgivare)
Senaste uppdatering: 13:38

FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG

Cirkulation, kontroll
Daglig 2025-11-10 08:00
Utför distalstatus - funktion, känsel, cirkulation Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd

Gånghjälpmedel
Daglig 2025-11-10 08:00
[precisera] Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd

Aktivitet utförd

Kontinuerlig tillsyn
Daglig

Aktivitet ej utförd: Har du valt att ej utföra aktiviteten (med eller utan kommentar) så blir rutan röd och försvinner sen av sig själv.

15:16 fre 19 dec. 37 %

Faktiv Äldrekvinnor 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mer

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Igår, idag, imorgon" Journalfilter

Aktivitetshanteraren (Välj Journalfilter: t.ex. Egen vårdgivare)
Senaste uppdatering: 13:38

FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG

Gånghjälpmedel
Daglig 2025-11-10 08:00
[precisera] Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd

Aktivitet ej utförd



Klart!
Informationen är importerad
till TakeCare

Hade aktiviteten en mätvärdesmall länkad till sig visas en popup som säger att informationen är importerad, och en pling om du har ljudet på.

Läsa TakeCare



23:08 tis 11 nov. 47 %

Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter | Att göra | Mer

Uppgifter
Senaste uppdatering: 23:07

NYTT MÄTVÄRDE Ny journalant.

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration & Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling).

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC. Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så Spara i TC och gör färdigt de anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan komplettera med Tilläggsmall/-Term i TakeCare.

Journaltext	
Diagnoser	
Läkemedel	
Läkemedelsadmin.	
Mätvärden (ej provsvar)	
Hjälp	

1. Manualer 2. Tekniska problem 3. Nyheter/Driftsinformation 4. Driftsättningsinfo

1. Manualer

iPad SwipeCare 4

Korta filmer




Filmerna är stöd till användande. De uppdateras inte lika ofta som användarmanualen nedanför.

1. SITHS login med QR kod från TakeCare (0:41 min)
2. Logga in aktiv session (0:40 min) version. 4.2.19
3. Patientlistan (0:44 min) version. 4.2.19
4. Addera patient, sök patient, byt vårdenhet (0:52 min) version. 4.2.19
5. Patientprofilen_Uppgifter (2:15 min) version. 4.2.35
6. Skriv journalanteckning, också med containertermer (2:47 minuter) Version 4.2.35
7. Mätvärdesmallar och -filter (2:45 minuter) Version 4.2.35
8. Att Göra listan Aktiviteter från TakeCare Aktivitetshanterare (2:24 min) version. 4.2.35
9. Läsa patientens journalanteckningar (1:10 min) version. 4.2.19
10. Läsa patientens diagnoser (0:25 min) version. 4.2.19
11. Läsa läkemedell (Ordination) (1:01 min) version. 4.2.19
12. Läkemedelsadministration (4 min) version 4.2.38 (inte aktiverad ännu)
13. Mätvärdeslistan (Ej provsvar) (2:30 min) version. 4.2.35


För SÖS Vatskemötningspilot på Avd 83 Internmedicin:
Summeringsfunktionen funkar för alla användare, exemplen i filmerna är delvis beroende på Vårdenhetsspecifika mallar, se dem som inspiration.
+ Summeringsfunktion för tex Vatskemätning per pass (2:19 min) version 4.2.37
+ Registrera Nutrition och Vatskebalans (24h) (2:54 min) version 4.2.37.
Om man vill dygnsregistrera både Nutrition och Vatskebalans i SwipeCare, så rekommenderas att man registrerar Energin först i mallen, innan man registrerar Vatska med hjälp av summeringsfunktionen. Det är så lätt att man glömmer bort Energibiten som står på papper annars. Vi hoppas att Regionen tillsätter termer för löpande energimätning snart.



iPad: Journaltext – Välj utläsning från TakeCare

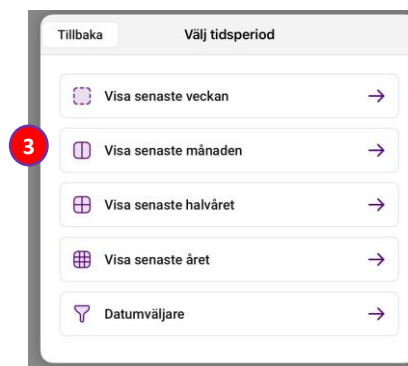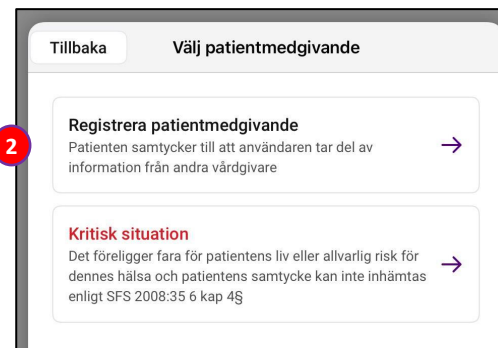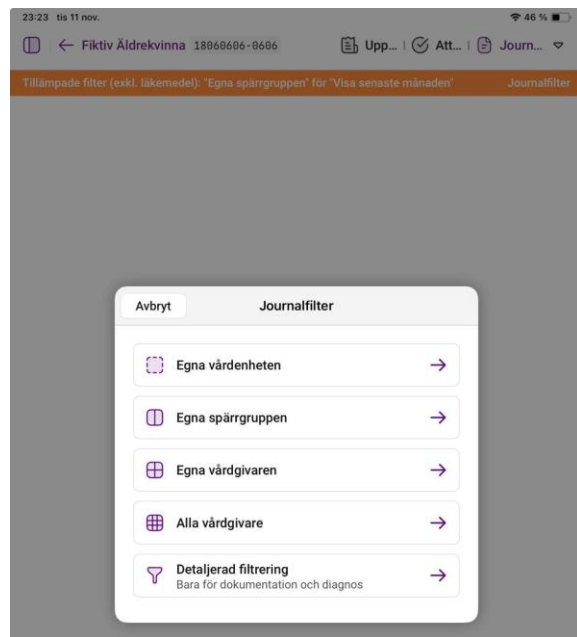


1. Standard för Egna spärrgruppen, senaste månaden. Vill du ha en annan filtrering klickar du på Journalfilter.
2. Går du utanför Egna vårdgivaren måste patientmedgivande, eller nödsituation registreras i SwipeCare registreras (syns ej med TakeCare)
3. Välj tidsperiod du vill se anteckningar för.
4. Tryck på Journalfilter för att ändra utläsningen.
5. Här kan du välja och läsa journalanteckningar för patienten.
6. Fritextsök för filtrering av journalanteckningar. Sökbegreppet markeras i anteckningen med rött
7. Filtrera utläsningen på författare eller typ av anteckning

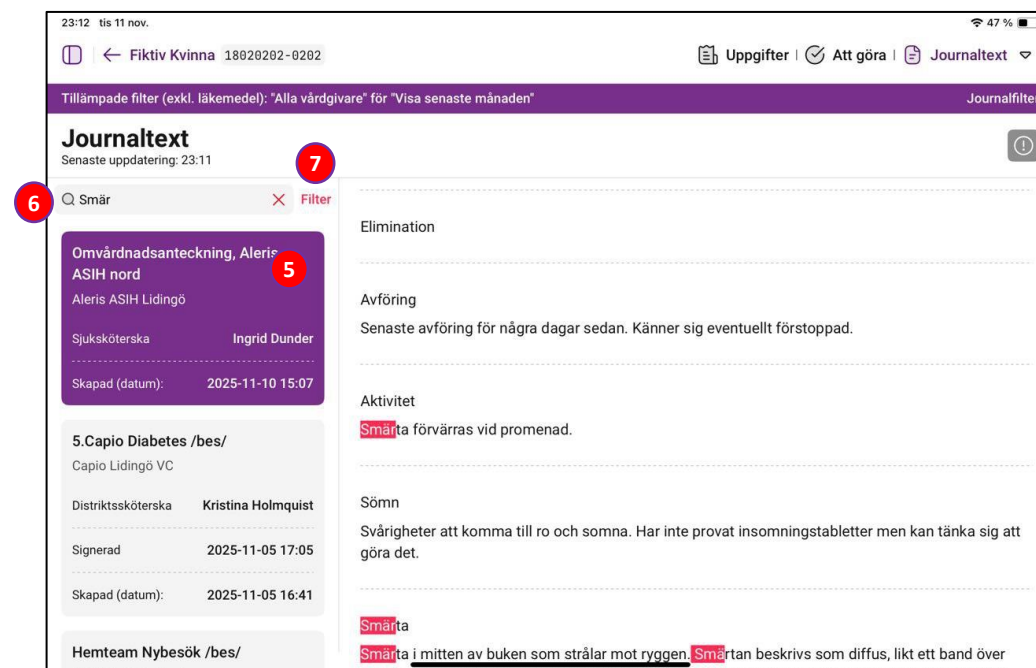



iPad: Journaltext – Välj patientmedgivande

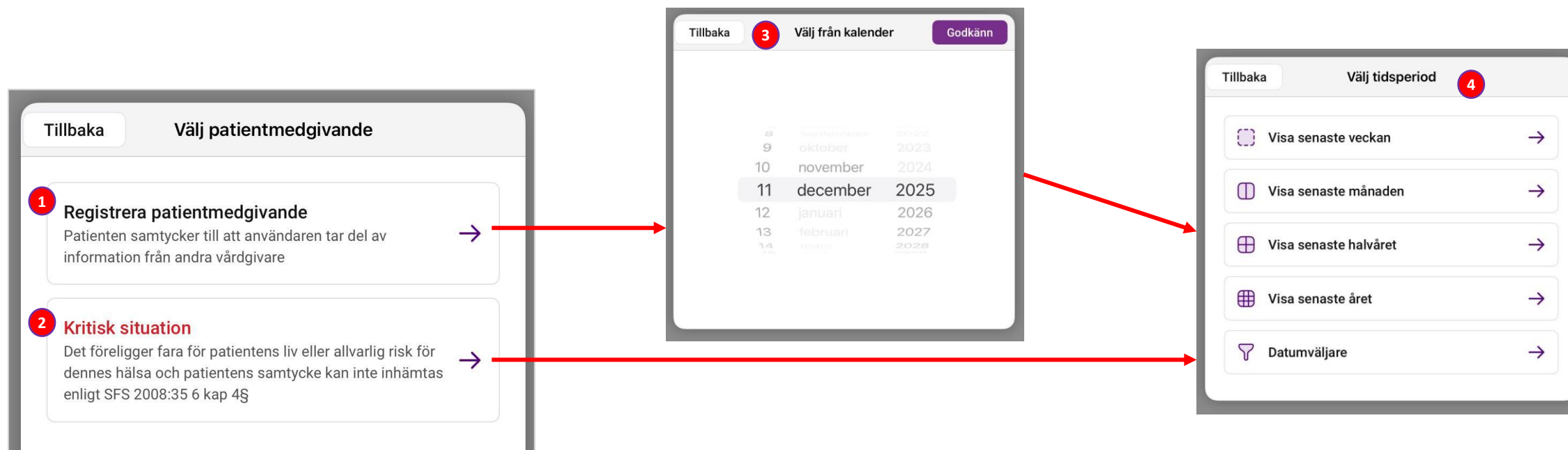

1. **"Registrera patientmedgivande"**: För läsning utanför din vårdgivare. Trycker du på "Registrera patientmedgivande" kommer du till steg 3.
2. **"Kritisk situation"**: Här klickar du om patienten t.ex. är medvetslös och ej kan ge samtycke men det bedöms vara av ytterst vikt att kunna se journaler från alla vårdgivare. Samtycket gäller endast under det tillfället du läser ut information. Sen kommer du till steg 4.
3. **"Välj från kalender"**: Här behöver du välja hur länge patientsamtycket gäller (Standard en månad fram)
4. **"Välj tidsperiod"**: Här väljer du tidsperiod du vill läsa ut journaltext från.

iPad: Läsa mätvärden

21:59 tis 11 nov. 56 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mätvärden (ej provsvar)

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 21:59

Q Sök

Alla mätvärden

- 1 --NEWS2 1 registrering
- In- och utfarter förekomst Inga data
- In- och utfarter med åtgärder Inga data

Övriga mätvärden (utanför SwipeCare filtren ovan) 7 registreringar

Välj alla Godkänn

00:08 ons 12 nov. 41 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mätvärden (ej provsvar)

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 23:59

Q Sök 3 Välj mätvärdesfilter

nov. 4 nov. 12

14:23 14:35 14:38 17:18 17:47 20:00 20:01 14:03 14:08 19:06

-Energibalans

Vikt (kg)	45	45	56	-	-	-	-	-	-
Energibehov (kcal/dygn)	-	-	-	5	3 599	5 699	-	-	4 000
Energiintag per os (kcal/dygn)	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Energiintag enteral nutrition (kcal/dygn)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Energiintag parenteral nutrition (kcal/dygn)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
-Totalt energiintag	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-Energibalans	-	-	-	8	-3 599	-5 699	-	-	-4 000

-Längd/vikt/BMI

Längd (cm)	123	123	154	-	-	-	-	-	-
Vikt (kg)	45	45	56	-	-	-	-	-	-
-BMI (Kg/M²)	29,74	29,74	23,61	-	-	-	-	-	-

MÄTVÄRDE: 5 699

KOMMENTAR: 4

- Mätvärdesfilter byggs manuellt:** Välj Alla mätvärden om du inte hittar ditt favoritfilter. Patients mätvärden som av olika skäl inte kunnat fångas i ett filter hittas på Övriga knappen längst ned i listan
Genererade (beräknade) mätvärden markeras med ett minustecken före namnet
Kan SwipeCare inte beräkna värdet med angiven formel, står det "Se TC" i värdesfältet.
Funktionerna: E-SOFA, KATZ/NYKATZ planeras senare, utveckling pågår.
- Tid för utläsning från TakeCare.** Slep ned för att uppdatera.
- Sök mätvärdesfiler/Beräknade mätvärden**
- Kommentarer:** Visas med prick vid värdet. En ofylld prick betyder att mätvärdet skrevs in via journaltext, där kommentaren finns att läsa.



iPad: Mätvärden – Utläsning av "Alla mätvärden"

SwipeCare läser nu ut mätvärden. Nedan ser du ofiltrerade och filtrerade mätvärden i samma vy.

10:52 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter Att göra Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden 1

Senaste uppdatering: 10:46

Sök mått Ändra mätvärden 6

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Alla mätvärden	14:09	15:57	15:58	09:46	11:55	15:49
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	12
BMI	-	-	19	-	-	-
BMI enl MNA	-	1 = BMI...	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	-	-	-	110	110	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	-	-	-	-	110	100
Kontakttyp	8...	-	-	-	-	-
Längd (cm)	-	-	158	80	-	-
Läppar enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-
Medvetandegrad, NEWS2	-	-	-	-	-	V = rea...
Midjemått (cm)	-	-	-	-	-	-
Nasogastrisk sond, inspektion	-	-	-	-	-	Komplik...
Protes enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-

11:00 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter Att göra Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spårgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden 2

Senaste uppdatering: 10:57

Andn 3 Ändra mätvärden 4

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	14:09	15:57	15:58	09:46	11:55	15:49
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	12

	22 feb. 26	mars 7	mars 13
Alla mätvärden	11:30	11:33	15:58
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	45	50	45
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	89	89	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	110	110	110
Kroppstemperatur (°C)	37	37	37
Medvetandegrad, NEWS2	Alert	C = nyt...	Alert
Pulsfrekvens (slag/min)	89	99	89
Smärtintensitet enl NRS	-	-	6
Syremättnad (%)	99	97	99

1. Översikt av Alla mätvärden. Sorterade i bokstavsordning. Senast registrerade mätvärden längst till höger på skärmen.
2. Sökruta för att söka efter specifika värden
3. "Ändra mätvärden": Klicka här för att komma tillbaka till mätvärdesfiltrena.
4. Klicka här för mer information om utläsningen
5. Du kan "highlighta" ett eller flera mätvärden genom att klicka på dem. För att ta bort markeringen klickar du en gång till på mätvärdet.
6. En popup med information om begränsningar i utläsningen.

iPad: Mätvärden – Summeringsfunktion



1. Tryck på summaknappen för att aktivera funktionen
2. Klicka på de värden du vill summera
3. Klicka på summa-knappen igen för att kopiera summan till Urklipp
4. Du kan sedan gå till något inmatningsfält, tex en mätvärdesmall och klicka nånstans i fältet så kommer "Klistra in" upp. Tryck på den så klistras värdet in.

15:50 fre 19 dec. 28 %

Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden (ej provsvar)

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 15:50

Σ

Sök

Välj mätvärdesfilter

dec. 8 dec. 9 dec. 15 dec. 16

29 15:03 15:30 16:55 15:30 09:20

-Vätskemätning manuell balans

Vätskeintag per os, ml (mL)	-	450	200	1 350	-
Enteral vätska (mL)	-	-	-	-	-
Summa vätska in (mL)	1 170	-	-	-	1 170
Kräkning (mL)	-	90	75	-	-
U-Volym, kastad (mL)	-	300	350	-	-
U-Volym, KAD (mL)	-	-	-	-	-
Summa vätska ut (mL)	1 900	-	-	-	1 900

15:55 fre 19 dec. 28 %

Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden (ej provsvar)

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 15:50

Σ = 815

Sök

Välj mätvärdesfilter

dec. 8 dec. 9 dec. 15 dec. 16

29 15:03 15:30 16:55 15:30 09:20 22:01 12:22 14:34 14:39

-Vätskemätning manuell balans

Vätskeintag per os, ml (mL)	-	450	200	1 350	-	34	31	76	700
Enteral vätska (mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa vätska in (mL)	1 170	-	-	-	1 170	-	-	-	-
Kräkning (mL)	-	90	75	-	-	-	-	-	-
U-Volym, kastad (mL)	-	300	350	-	-	-	-	-	-
U-Volym, KAD (mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa vätska ut (mL)	1 900	-	-	-	1 900	-	-	-	1 500

18:42 fre 19 dec.

Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden (ej provsvar)

Summa vätska ut (mL)

Klistra in Autofyll Klar

- Summa vätska per pass

- Summa vätska per pass



iPad: Diagnoser (Huvuddiagnoser)

Standardutläsning är Egna spärrgruppen, hela tidsperioden

00:16 ons 12 nov.		40 %		
← Fiktiv Äldrekvinnas 18060606-0606		Uppgifter Att göra Diagnoser		
Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "hela tidsperioden"				Journalfilter
Diagnoser				
Senaste uppdatering: 00:12				
Diagnoser	Kod	Registrerad	Senast uppdaterad	Kronisk
Yrsel och svindel	R429	2025-11-11	2025-11-11	
Hosta UNS	R059	2025-10-30	2025-10-30	
Blandade ångest- och depressionstillstånd	F412	2025-10-29	2025-10-29	
Medelsvår depressiv episod	F321	2025-10-27	2025-10-27	
Angiodysplasi i tunntarmen	K553	2025-10-23	2025-10-23	
Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut	F001	2025-10-14	2025-10-14	
Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	J069	2025-10-13	2025-10-17	
Överkänslighet mot penicillin i den egna sjukhistorien	Z880	2025-10-13	2025-10-17	



iPad: Läkemedelslistan med ordination

00:21 ons 12 nov. Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Läkemedel

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Alla vårdgivare" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Läkemedel
Senaste uppdatering: 00:18

1 Aktuella läkemedel på din vår... 1 Aktuella läkemedel 1 Alla läkemedel under Period 11

Senast signerad	Vårdenheten	Preparat	Styrka	Adm. väg	Typ	Adm. Inst.	Dagens dostider
2025-11-04	SLSO- Tumba VC	Nystatin Abacus Medicine	100000 IE/ml	Oralt	Rb	-	02:00 - 1 ml 08:00 - 1 ml 14:00 - 1 ml 20:00 - 1 ml
2025-10-31	Ataraxia Vårdcentral	Orlistat STADA	120 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 1 st
2025-10-30	SLSO- Närakut Handen	Alvedon	500 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 1 st 20:00 - 1 st
2025-10-22	Ersta Geriatrik avd 1	Cefotaxim Navamedic	1 gram	Intravenöst	Rb	+	
		Sterilt vatten Braun	5 milliliter				
2025-10-22	Ersta Geriatrik avd 2	Meronem	500 mg	Intravenöst	Rb	+	
		Sterilt vatten Braun	10 milliliter				
2025-10-02	JakobsbergsGer Mott	Alvedon	500 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 1 st 14:00 - 1 st 20:00 - 1 st
2025-10-20	PSS-Aff mott Södermalm	Concerta	18 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 20 st
2025-06-27	TH - Vårdavdelning 1	TH Diben 1,5 kcal HP	1.3	Enteral	Rb	+	08:00 - 500 ml 14:00 - 500 ml 20:00 - 500 ml

1. Välj att se aktuella läkemedel på egna/alla vårdenheter eller alla läkemedel inkl. utsatta sådana
2. Se när läkemedlen lästes ut, svep nedåt i fönstret för att uppdatera listan

Klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

Kolumnerna betyder:

3. Senast signerad
4. På vilken vårdenhet är det signerat
5. Läkemedlets namn
6. Styrka
7. Administrationsväg
8. Typ
9. Administrationsinstruktioner
10. Dagens dostider
11. Information om begränsningar
12. Stäng SwipeRead, återgå till patientprofilen



iPad: Läkemedelslistan / Läkemedelsordination

13:50 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 71 %

Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter Att göra Läkemedel

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "Visa senaste månaden" Filter

Läkemedel Senaste uppdatering

Senast signerad 2023-08-28

Avbryt **2** **Alvedon** Period

Utdelningstid	02:00	agens dostider
Dosering	2 st	2:00 - 2 st
Utdelningstid	08:00	8:00 - 2 st
Dosering	2 st	4:00 - 2 st
Utdelningstid	14:00	0:00 - 2 st
Dosering	2 st	
Utdelningstid	20:00	
Dosering	2 st	
Ordinationstyp	kontinuerlig (varje dag)	
Preparatnamn	Alvedon	
Läkemedelsform	Filmdragerad tablett	
Adm. Väg	Oralt	
Ordinationsorsak	1 ↓ Mer nedan	

Adm. Väg

Ordinationsorsak

Behandlingsmål

Adm. Instruktion

Generika (Ersättlig?) Ja

Insatt 2023-08-28 13:21

Förskrivare Mia Hägglöf **3**

Hit kommer du genom att klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

1. Mer nedan betyder att du får svepa nedåt för att komma längst ned i ordinationen
2. Avbryt och stäng fönstret
3. Förskrivande läkare står längst ned.



iPad: Läkemedelslistans begrepp

Vi använder TakeCares xChange API:
Medications.MedicationHistoryGet

De små siffrorna efter begreppen nedan visar på vilket element i TakeCares API som använts för att skapa informationen i SwipeRead.

Framsidan: Läkemedel

- Senast signerad¹⁵
- Vårdenheten¹⁷
- Preparat⁶³
- Styrka⁷¹⁺⁷²
- Adm.väg³⁵ (dvs Administreringsväg)
- Typ²¹ (dvs Ordinationstyp: Vb=Vid Behov, Rb=Regelbundet, Sch=Schema)
- Adm. Inst. (+ tecknet betyder bara att det finns administrationsinstruktioner, klicka på raden och läs Ordinationsdetaljer)
- Dostid: Dosschema⁸⁶⁻⁹⁶_ Dostext¹⁰¹

Ordination (när man klickat på ett läkemedel)

- Ordinationstyp²¹
- Preparatsnamn⁶³
- Administration³⁵⁺³⁷
- Ordinationsorsak³⁸
- Behandlingsmål³⁹
- Administrationsinstruktioner⁴⁰
- Generika (Ersättlig?)⁴⁴
(Ja=får ersättas med generika / Nej=Får ej ersättas med generika)
- Skapad¹¹
- Review Date⁴¹

Administreringstillfälle (ordination)

- Utdelningstid (fr.o.m.)⁵⁰⁻⁵³
- Dostext¹⁰¹



iPad: Läkemedelsadministration – klicka på raden för administrering

Administration av Enkeldos stöds än så länge. Man kan läsa Blandningar, ej administrera.

00:25 ons 12 nov. 39 %

Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Läkemedelsadmin.

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Läkemedelsadmin.
Senaste uppdatering: 1

Alla (16) 2 Igår 2025-11-11 Idag 2025-11-12 Imorgon 2025-11-13 3

Alla enheter Aktuella egen enhet

Info	Ord. tid	Adm. tid	Preparat	Styrka	Form	Ord. dos	Adm. dos	Signerad
ADM	02:00	02:00	Addens-Natriumklorid B. Braun Morfin Abcur	3 mg/ml	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	5 ml	7 ml	2025-09-30
!	02:00		Iprensa	400 mg	Kapsel, mjuk	1 st		
	08:00		Addens-Natriumklorid B. Braun Morfin Abcur	3 mg/ml	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	5 ml		2025-09-30
?	08:00		Alvedon	500 mg	Filmragerad tablett	?		2025-10-29
?	08:00		Abacavir/lamivudine Accord	600 mg/300 mg	Filmragerad tablett	?		2025-11-04
!	08:00		Iprensa	400 mg	Kapsel, mjuk	1 st		
	14:00		Addens-Natriumklorid B. Braun Morfin Abcur	3 mg/ml	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	5 ml		2025-09-30

Mer nedan

23:48 sön 21 sep. v. 4.3 (345) 85 %

Demitris Demosson 1950812-1856 Uppgifter Att göra Läkemedelsadm.

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Igår, idag, imorgon" Journalfilter

Läkemedelsadm.
Senaste uppdatering: 23:48

Igår 2025-09-20 Idag 2025-09-21 Imorgon 2025-09-22

Alla (22) Alla enheter Signerade egen enhet

Info	Ord. tid	Adm. tid	Preparat	Styrka	Form	Ord. dos	Adm. dos	Signerad
!	08:00	+	Escitalopram Accord	5 mg	Filmragerad tablett	3 st		2025-08-25
Adm. tf	Adm. väg	lor. inst	Adm. instruktion	Adm. kommentar		Adm. av	Nytt ställn.	Signerad på
Dialys	Oralt		000000000011 111111112222 222222333333 333344444444 445555555555 666666666677 777777778888 888888999999 999900000000 00					LS Medicin Avd
!	11:30		Morfin Abcur Addens-Natriumklorid B. Braun	2 mg/ml	Injektionsvätska, lösning	10 ml		2025-08-25
!	14:00		Allopurinol Orion	300 mg	Tablett	1 st		2025-08-25
!	14:00		Amoxicillin Ebb	750 mg	Tablett	1 st		2025-08-25

Mer nedan

Klicka på raden för att få upp en administreringsruta.

1. Senaste uppdatering från TakeCare. Uppdatera genom att svepa nedåt.
2. Filtrera på Igår/Idag/Imorgon.
3. Filtera på signeringsenhet vid behov.
4. Avvikelse i Administrerad dos eller Administrerad tid markeras med gult.
5. Pil nedåt i högerkanten expanderar översiktsrad för mer information. Här hittar du tex mer information om koppling till behandlingstillfälle, de gånger det inte får plats i INFO på huvudraden mer än som blå färg.



iPad: Läkemedelsadministration

Enkeldos med ett preparat:

00:02 mån 22 sep. 82 %

Stäng Bekräfta administration: Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Administrera

Tidigare administreringar inte utförda!

måndag 2025-09-22 20:00

FASS	PREPARAT	STYRKA	FORM	ORD. DOS	ADM. DOS
4		Waran	2.5	Tablett	1.5 st (= 3.75 mg) 1 15 *

Administreringsväg

Oralt

Adm. Metod

Annat

Adm. Tillfälle

Adm. Instruktion

Substitution tillåten?

Tillåten

Behandlingsorsak

Behandlingsmål

Administreras av

Förskrivare

Ingrid Dunder

↓ Mer nedan

Administrering datum/tid

2 2025-09-22 20:00

3 Kommentar

Enkeldos med flera preparat:

00:14 mån 22 sep. 79 %

Stäng Bekräfta administration: Demetris Demosson 19500812-1856 Administrera

Tidigare administreringar inte utförda! Vill du göra detta?

söndag 2025-09-21 03:30

FASS	Lösning med flera preparat	Form	Styrka	Mängd
	Morfin Abcur	Injektionsvätska, lösning	10 mg/ml	2 ml
	Addens-Natriumklorid B. Braun	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	4 mmol/ml	8 ml

Adm. väg

Intravenöst

Adm. metod

Injektion

5 Styrka bruksfärdig lösning

2 mg/ml

Adm. tillfälle

Adm. instruktion

Substitution tillåten?

Tillåten

Behandlingsorsak

↓ Mer nedan

ORDINERAD DOS AV BRUKSFÄRDIG LÖSNING

Ordinerad Dos	Aktiv substans	Administrerad dos
10 ml	20 mg	1 10 *

Administrering datum/tid



2 2025-09-21 03:30

3 Kommentar

1. Välj Administrerad dos (förifylld från ordination)
2. Välj Datum och Tid
3. Addera administrationskommentar
4. FASS länk (ePed om patienten är <18 år)
5. Styrka bruksfärdig lösning
6. "Mer nedan" visar att det finns mer information att läsa. Svep med fingret i den rutan

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

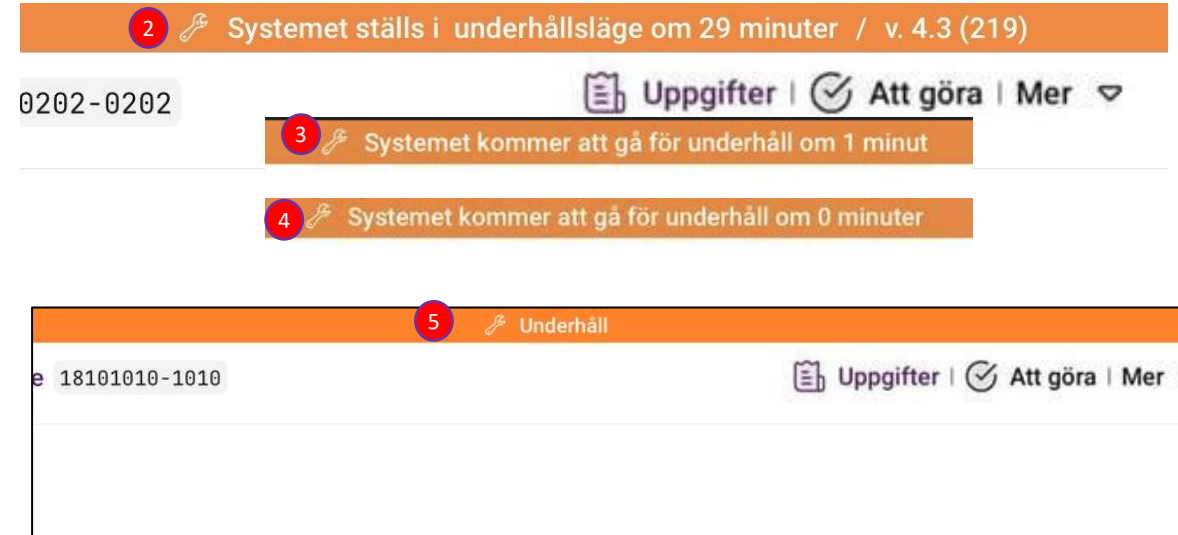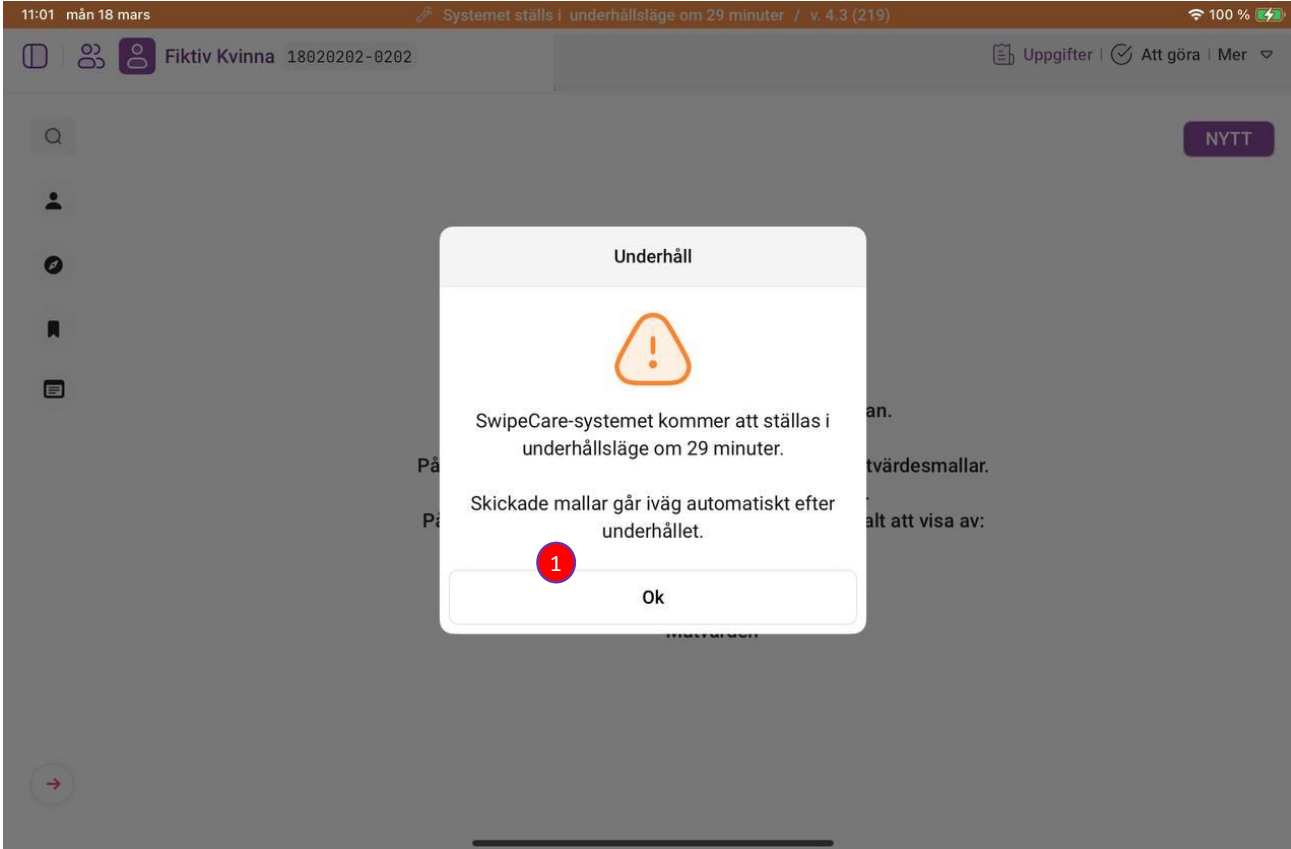

1. Popup med information om kommande underhåll. Klicka på Ok för att stänga.
2. Nedräkning: Systemet kommer att gå för underhåll om 29 minuter.
3. Nedräkning 1 min
4. Nedräkning 0 min
5. Underhållsläge: Du kan fortsatt journalföra med mallarna, skickar du dem till TakeCare så kommer de köas och skickas automatiskt iväg till TakeCare så fort uppdateringen är klar.

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.



16:26 fre 9 feb. Underhåll / 2 väntande åtgärder 17 %

Fictiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo NYTT

Allmän information Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...
Adressinformation Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...
Etiketter Hantera etiketter
Notiser Spara

Formulär

Mätvärden inkl NEWS2 Formulär maintenance ?
IPOS bedömning Formulär maintenance ?

maintenance
Försök igen

Göm

16:28 fre 9 feb. Uppgifter | Att göra | Mer

Fictiv Pojke 18101010-1010

NYTT

maintenance
Försök igen

20:39 tis 11 nov. Uppgifter | Att göra | Mer

Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606

Sök i patientinfo

Allmän information Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...
Adressinformation Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...
Etiketter Hantera etiketter
Notiser 2025-10-09 • Sara Bern Test

Uppgifter Senaste uppdatering: 20:39

SBAR Nytt mätvärde Ny journalant.

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration & Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling).

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC. Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så Spara i TC och gör färdigt de anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan komplettera med Tilläggsmall/-Term i TakeCare.

Göm

1. Underhåll / 2 väntande åtgärder: Två mallar är köade och kommer skickas iväg så fort systemet är uppdaterat
2. Mallarna som är köade
3. Försök igen: Den orangea flaggan är borta och appen är uppdaterad. Tryck på Försök igen så laddar du om sidan och ser att mallarna gått iväg.
4. Patient sidan är tom och alla mallar har skickats iväg till TakeCare

iPad: Offline-läge





Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalanteckningar och mätvärdesmallar och skicka dem till TakeCare. De kommer då att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare när användaren är inloggad på denna iPad.

1. "SwipeCare är offline": Den röda flaggan längst upp visar att internet saknas men du kan fortfarande öppna patienter
2. På patientsidan får du information om att du saknar internet. Du kan fortfarande dokumentera i journalmallar och mätvärdesmallar.
3. Dokumentera som vanligt och tryck sedan på "Signera", "Skicka till TakeCare" etc.

iPad: Offline-läge

Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare.

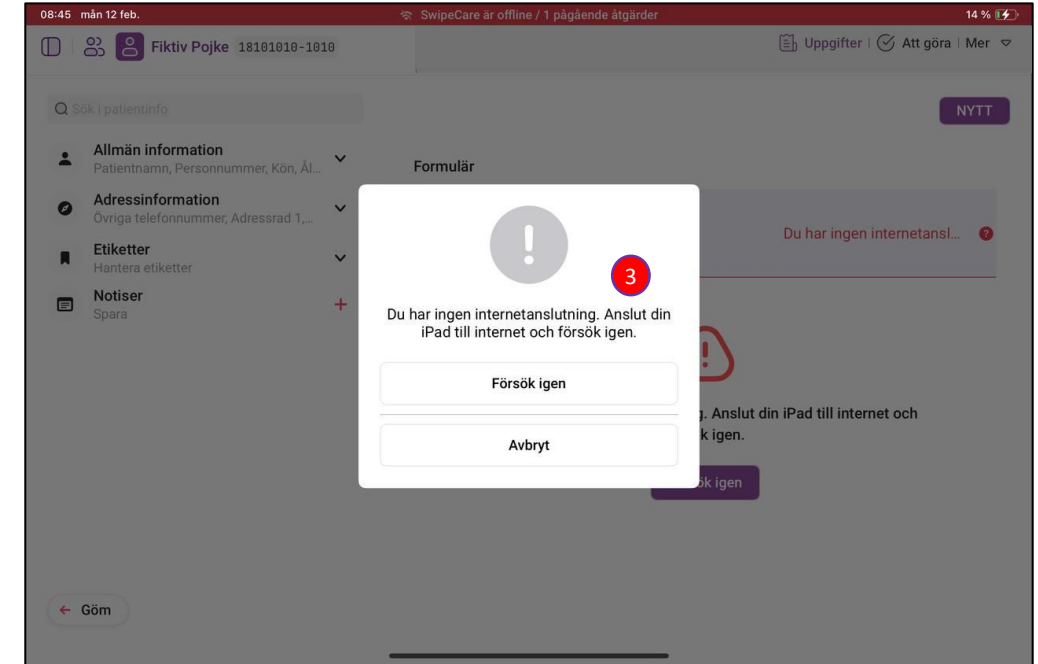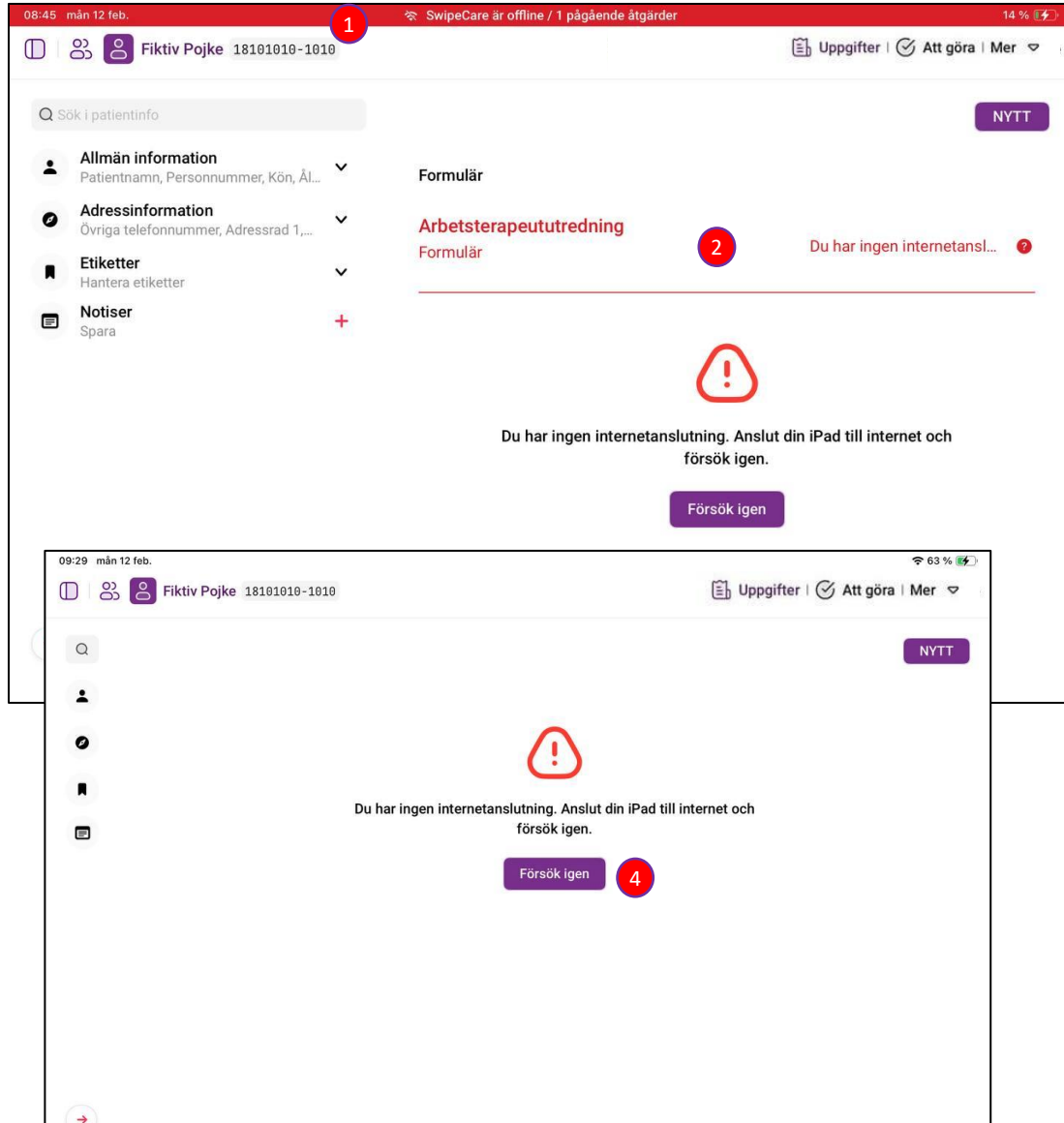

1. "SwipeCare är offline/1 pågående åtgärder": Den röda flaggan indikerar att appen är offline samt att 1 mall väntar på att skickas
2. Här ser du vilken mall som ligger kvar på iPaden. Den skickas automatiskt iväg när internet finns. Klickar du på mallen får du felmeddelandet 3.
3. Felmeddelande som informerar dig om varför mallen inte skickats iväg, i detta fall pga ingen internetuppkoppling.
4. Den röda flaggan är borta och appen har internet. Tryck på försök igen så laddar du om sidan. Mallarna har skickats iväg oavsett om du laddar sidan eller inte.



Felhantering och felmeddelanden

--



Hur hitta formulär/mätvärden som inte gått iväg till TakeCare?

De troligaste vanligaste felen finns som Tasks som syns i användarnas iPads och de kan därmed kan sökas upp i Teamarbetsvyn:

- **Granska anteckning: (mallnamn)**
 - Kommer tex om de fyllt i en mätvärdeskommentar utan att fylla i själva mätvärdet.
 - Denna uppgift måste rättas i SwipeCare portalen, går ej att göra i paddan. Tale med er IT support.
- **Fel vid sändning**
 - Kan bero på en massa orsaker i TakeCare eller SwipeCare.
 - Typiskt kommer vara "Illegal argument!"-fel som kommer från TakeCare:
 - (Failed to write casenote. User inactivated, eller Patient id failed check.)

Översikt Teamarbete Patienter

Byt vårdenhet Ljust tema Svenska Sara Bern

Teamarbete

Vårdflöde: Alla

Typ: Alla

Task filter: Alla

Etiketter: Alla

Ansvar: 1

Förfalldatum: Alla

Rensa alla

Task filter:

Uppgiftstyp	Patientens namn	Personnummer	Flöde	Förfalldatum
manualPlus	Fel vid sändning: NEWS 2	Test Test	1810101010	Mätvärden till TakeCare: NEWS 2 2023-09-21



För **Fel vid sändning** så är det oftast TakeCare som klagar på fel parametrar:

- Användaren är inaktiverad i TakeCare om detta felmeddelande kommer:
"Illegal argument! (Failed to write casenote. User inactivated:
Om användaren bara loggar in i TakeCare igen så blir användaren aktiverad och anteckningen kan skickas.
- Användaren har skrivit fel personnummer på patient vid detta felmeddelande:
Illegal argument! (Failed to write casenote. Patient id failed check. Fail-code: -4)
Personnummer kan ej justeras i SwipeCare. För över information om patienten manuellt från SwipeCare till TakeCare.
Använd gärna streckkodsläsare-funktion i SwipeCare för att undvika denna typ av problem.
- Användare har inte TakeCare behörighet på denna vårdenhets vid detta felmeddelande:
Unauthorized request! (Failed to write casenote. User has not rights to this ward....

Vid **Kräver åtgärd**: "User is deactivated", så är användaren markerad som Inaktiv i SwipeCare.
Händer aldrig vid QR kods inloggning via TakeCare då den aktiverar användaren.