



Användarmanual

SwipeCare Version 4.2.43 – Mobilt vårdstöd

iPad

- kräver iPadOS 18.0/26.0 eller senare

2026 06 24

SwipeCare 4.2

2023-08-15



EUDAMED-DI: B-SwipeCare4JF




Strikersoft

Isafjordsgatan 39, 164 40 Kista, Sweden

www.strikersoft.com Org. nr. 556661-1637




Bara efter ny-/ominstallation av SwipeCare 4 app på iPad: Välj organisation.

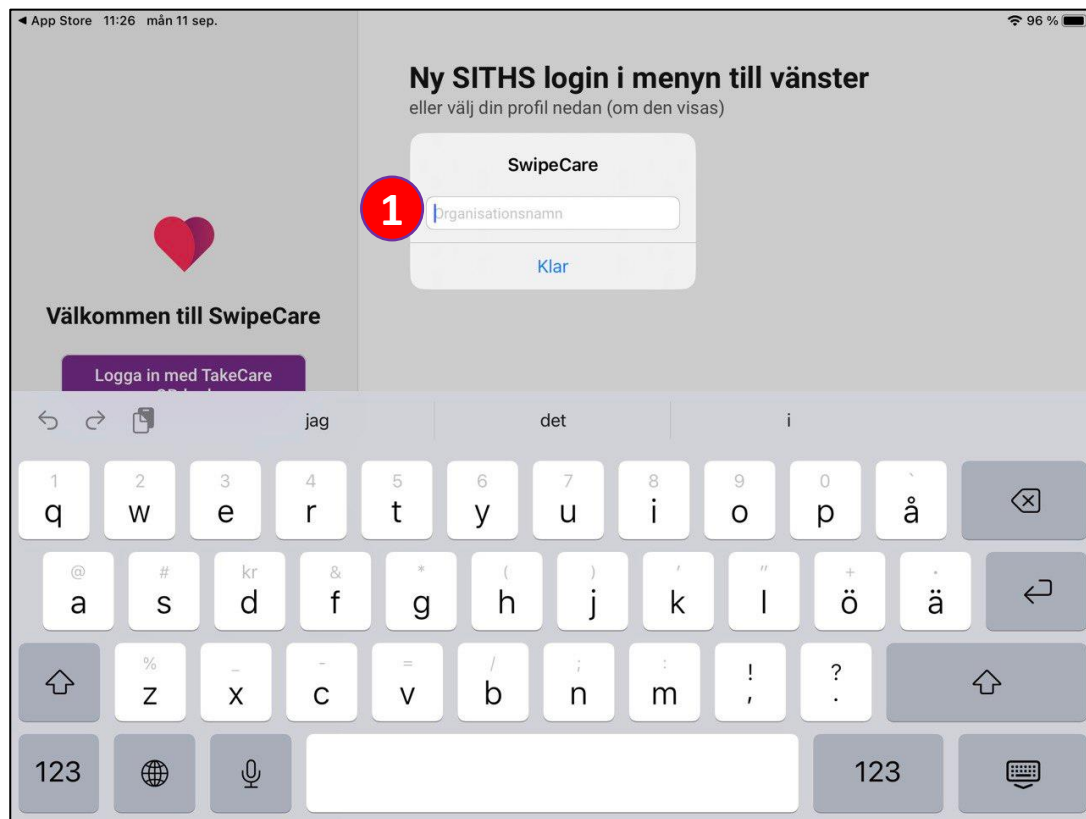


1. Skriv in din organisation: t.ex RegionStockholm, Aleris, Sophiahemmet, Danderyd
Om du har access till flera vårdenheter så får du efter login välja vårdenhet i en lista



iPad: Logga in

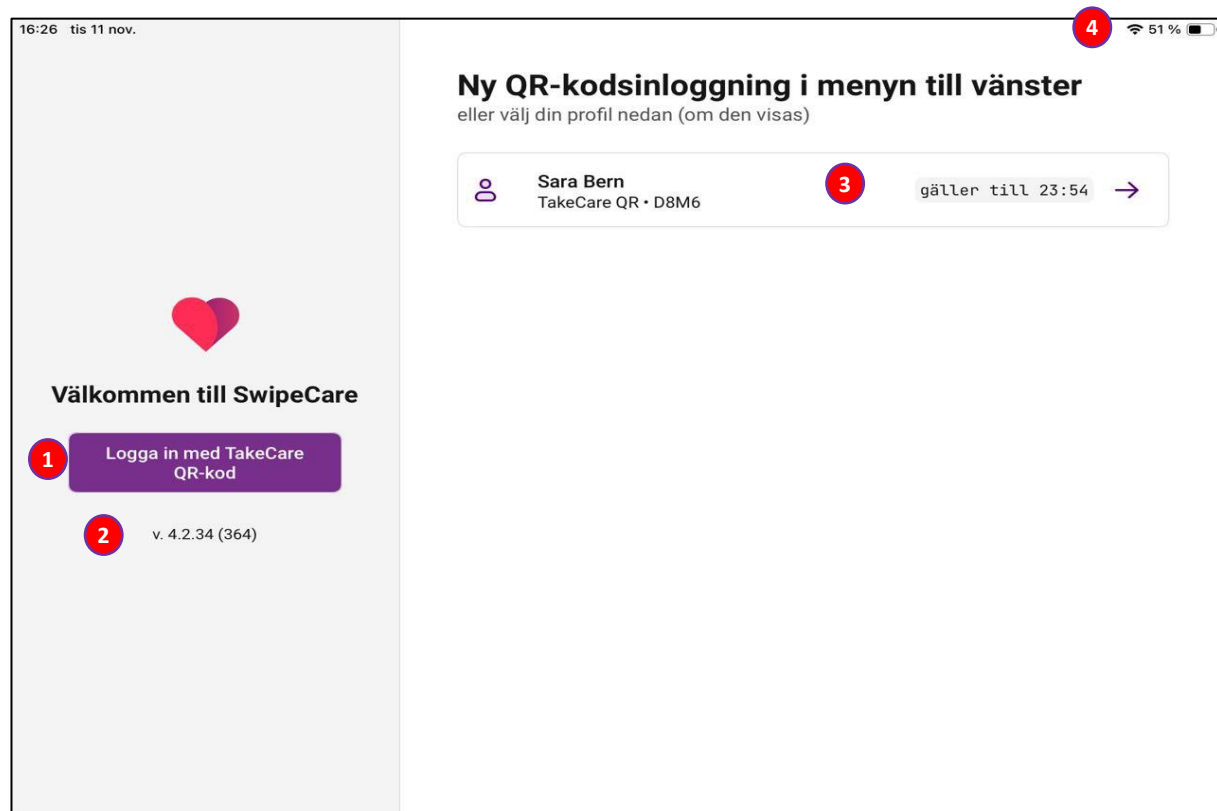

1. Logga in med din QRkod från TakeCare där du har loggat in med SITHS redan (se nästa sida)
2. Versionsnummer på appen
3. Login-kort som visar vem som loggat in och hur länge din profil med personlig PIN är giltig innan du behöver logga in från början med SITHS kort.
4. Ikon för att visa om du har tillgång till internet (WIFI eller mobilnät)
Har du ingen internet-täckning visas en röd ribba enligt nedan.

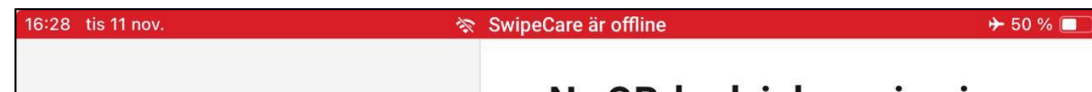


Du kan fortfarande påbörja journalmallar och mätvärden. De står på kö i denna iPad tills användaren har internet igen. Offline access till mätvärden och journalmallar finns på sidan "Uppgifter".


iPad: QR kods login efter du tryckt på

Logga in med TakeCare
QR-kod

Inne i TakeCare på PC:

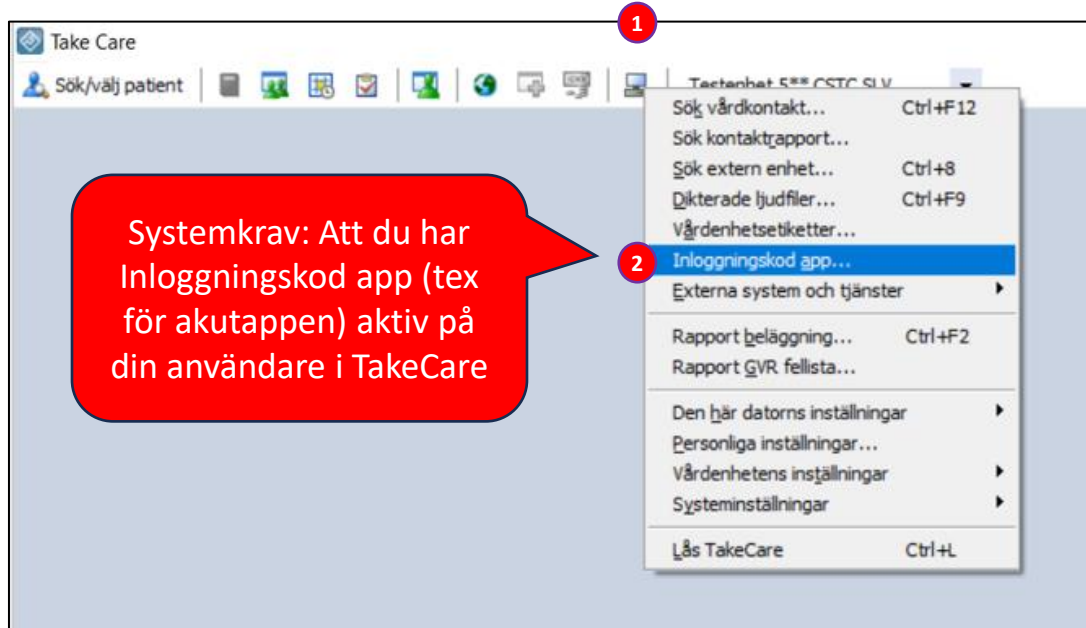

Använd PIN 2 för Underskrift.
På SITHS kortet finns PIN 1 för Inloggning
och PIN 2 för Underskrift

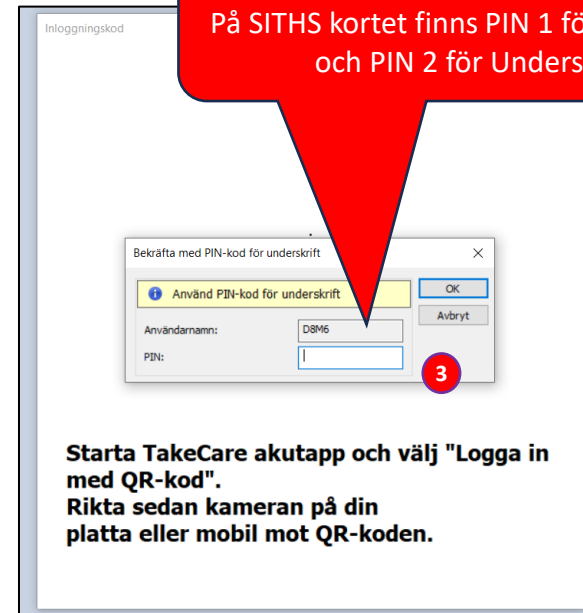


4. Starta TakeCare akutapp och välj "Logga in med QR-kod".
Rikta sedan kameran på din platta eller mobil mot QR-koden.

1. Välj TakeCare Systemmeny (PC ikonen) inne i TakeCare på din egen inloggning
2. Välj Inloggningskod app...
3. Mata in din PIN kod för **signering (=PIN2)**
Notera att du kan välja att ändra din SITHS PIN2 till något du kommer ihåg. Det görs inte inne i SwipeCare.
4. Fota QR koden med SwipeCare iPad
5. Välj PIN kod för din SwipeCare session (gääller 12 timmar)
6. VIPS, så är du inne i SwipeCare



iPad: Välj din egen Personliga PIN (giltig 12 timmar)

Välj och upprepa din personliga PIN

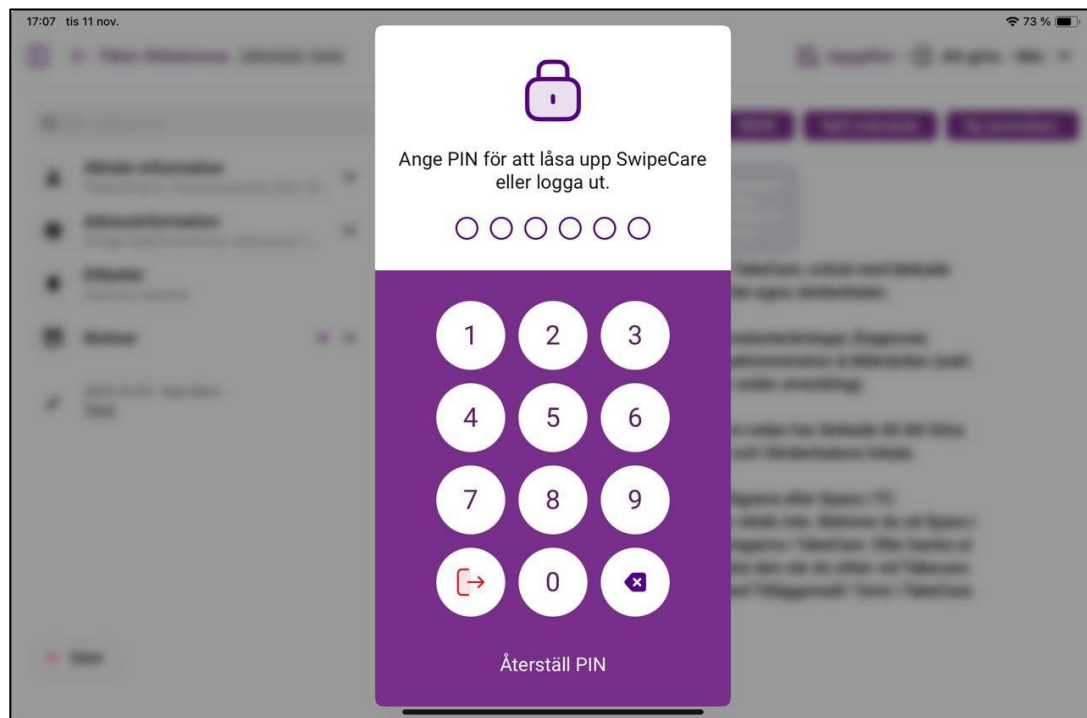


- **VIKTIGT:** Den PIN du väljer ska vara personlig. Den är kopplad till ditt HSA ID som används av SwipeCare för att skriva/läsa mot TakeCare.
- PIN används:
 - För kort login
 - Efter autolås
 - Efter vänteläge (standby)
 - När du växlar mellan appar på paddan
- Om du har glömt din personliga PIN kan du trycka på **"Återställ PIN"**
 - Då öppnas automatiskt kameran för att du ska kunna skanna din QR-kod i TakeCare igen.
 - Sen får du välja PIN kod igen.
- Logga ut ur SwipeCare på den röda knappen längst ned till vänster:





iPad: Välj vårdenhet

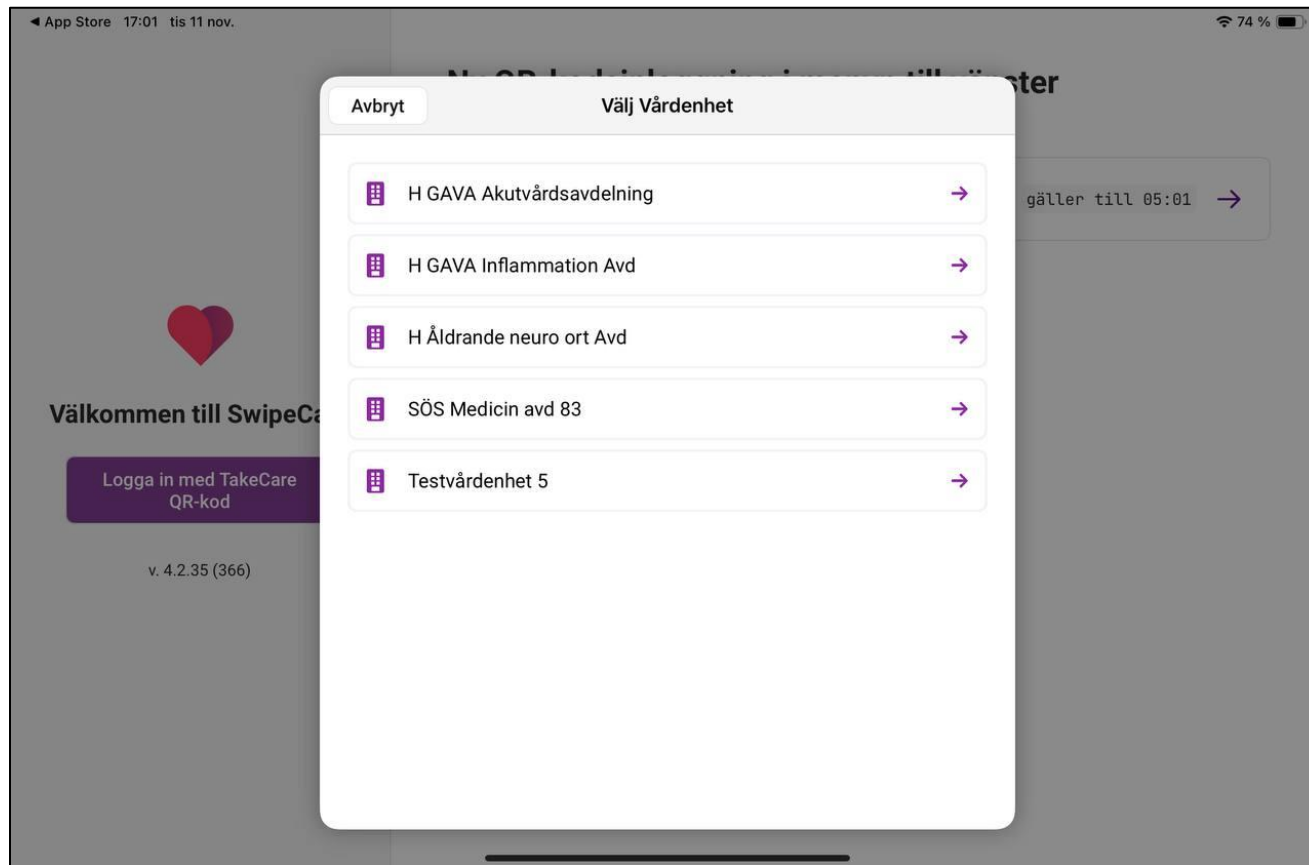

- Om du har access till flera vårdenheter får du välja vårdenhet här, annars kommer du rakt in till Patientlistan

iPad: Vårdenhetens patientlista



4 sista siffror i personnummer maskerade med stjärnor

20:16 tis 11 nov. 67 %

Testvårdenhet 5

Senaste uppdatering: 19:36

Sök på Namn/Personnr

Visa

Skanna

Lägg till

1	2	3	4	
	Nummer	Namn	Upplysning	
	18060606-****	 Fiktiv Äldrekvinna	Nej	
1:1	99200103-****	Källström Kjell	Ja	
4:2	18111111-****	Fiktiv Man	Ja	
5:1	19530416-****	Komma Karin	Ja	
6	99201857-****	Barn Under 13 Hd	Ja	
	18020202-****	Fiktiv Kvinna	Ja	

Omaskade patienter (utan stjärnor)

20:22 tis 11 nov. 67 %

Testvårdenhet 5

Senaste uppdatering: 19:36

Sök på Namn/Personnr...

Dölj

5

Skanna

6

Lägg till

7

	Nummer	Namn	Upplysning	
	18060606-0606	Fiktiv Äldrekvinna	Nej	
1:1	99200103-2156	Källström Kjell	Ja	
4:2	18111111-1116	Fiktiv Man	Ja	
5:1	19530416-2349	Komma Karin	Ja	
6	99201857-5395	Barn Under 13 Hd	Ja	
7:2	18020202-0202	Fiktiv Kvinna	Ja	

1. Plats: Här läses vårdplats ut från TakeCare. Har en patient blivit tilldelad vårdplats i TakeCare syns det här.
Tomt för patient som antingen är inskriven men inte tilldelad vårdplats eller patient som manuellt lagts till i SwipeCare.
2. Tid för när listan senast uppdaterats. För att uppdatera drar man listan nedåt, svep neråt. Texten blir röd efter 12 timmar.
3. Sökruta för att söka efter patienter. Antingen på namn eller personnummer.
4. Om Upplysning får lämnas ut när någon frågar om patienten
5. Visa/Dölj: Genom att trycka på ögat i höger hörn kan du avmaskera personnumret. Standard är att de 4 sista är maskerade.
6. Här kan du skanna t.ex. streckkod på patientens armband och på så sätt lägga till patienten eller öppna patientens profil. (För t.ex. ökad patientsäkerhet)
7. Genom att trycka på denna knapp kan du manuellt lägga till en patient.

SwipeCare har inte tillgång till spärrad patientinformation.

Du kommer alltså inte kunna läsa ut eller skicka information till TakeCare på patienter med låst journal.



Patientprofilen: Uppllysning får (inte) lämnas ut

Uppllysning får INTE lämnas ut

14:11 fre 20 mars v. 4.3 (395) 100 %

← Karlsson Dema 19490616-2682 Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

Uppllysning: får ej lämnas ut
Inskriven patient

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
Spara

Uppgifter
Senaste uppdatering: 14:11

SBAR Nytt mätvärde Ny journalant.

Mina påbörjade journalanteckningar/mätvärden

NEWS2 + BMI
Formulär

Senast skickad information

Mätvärde till TakeCare
Importerad 2026-03-20, 10:59 NEWS2 + BMI

Göm

Uppllysning **FÅR** lämnas ut

14:11 fre 20 mars v. 4.3 (395) 100 %

← Lafton Liana 20210502-2392 Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

Uppllysning: får lämnas ut
Inskriven patient

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
Spara

Uppgifter
Senaste uppdatering: 14:11

SBAR Nytt mätvärde Ny journalant.

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration, Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling) & Hjälp.

SBAR: Sparar i SwipeCare. För alla på avdelningen.

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC. Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du dem så Spara i TC och lägg till dem i TakeCare (Hot och Våld måste skötas helt i TC).

Göm



Patientprofilen: Telefonnummer och –kontakter läses ut från TakeCare

Telefonnummer kan editeras

12:14 ons 27 maj

Testsson Test 19700123-9297

Sök i patientinfo

Uppgifter Senaste uppdatering: 12:12

SBAR Nytt mätvärde Ny journalant.

Upplysning: okänd
Patienten är inte inskriven på avd

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ålder

Telefonnummer (TakeCare)

Telefon, bostad
+46567811111

Telefon, arbete
+37411111111

Telefon, annan
+93567811111

SMS-aviseringsnummer
+4600000001

Mobiltelefon
5678

Kontakter
Göm alla kontakter

Adressinformation
Adressrad 1, Adressrad 2, Postnummer...

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration, Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling) & Hjälp.

SBAR: Sparar i SwipeCare. För alla på avdelningen.

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC. Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du dem så Spara i TC och lägg till dem i TakeCare (Hot och Våld måste skötas helt i TC).

Kontakter kan läsas ut

12:12 ons 27 maj

Testsson Test 19700123-9297

Sök i patientinfo

Uppgifter Senaste uppdatering: 12:12

SBAR Nytt mätvärde Ny journalant.

Upplysning: okänd
Patienten är inte inskriven på avd

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ålder

Telefonnummer (TakeCare)
Hantera telefonnummer

Kontakter

Lars Test
God man

pelle dd
Arbetssterapeut

Adressinformation
Adressrad 1, Adressrad 2, Postnummer...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
till en ny notis eller se tidigare n...

Göm

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration, Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling) & Hjälp.


SBAR: Sparar i SwipeCare. För alla på avdelningen.

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC. Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du dem så Spara i TC och lägg till dem i TakeCare (Hot och Våld måste skötas helt i TC).



iPad: Addera patienter

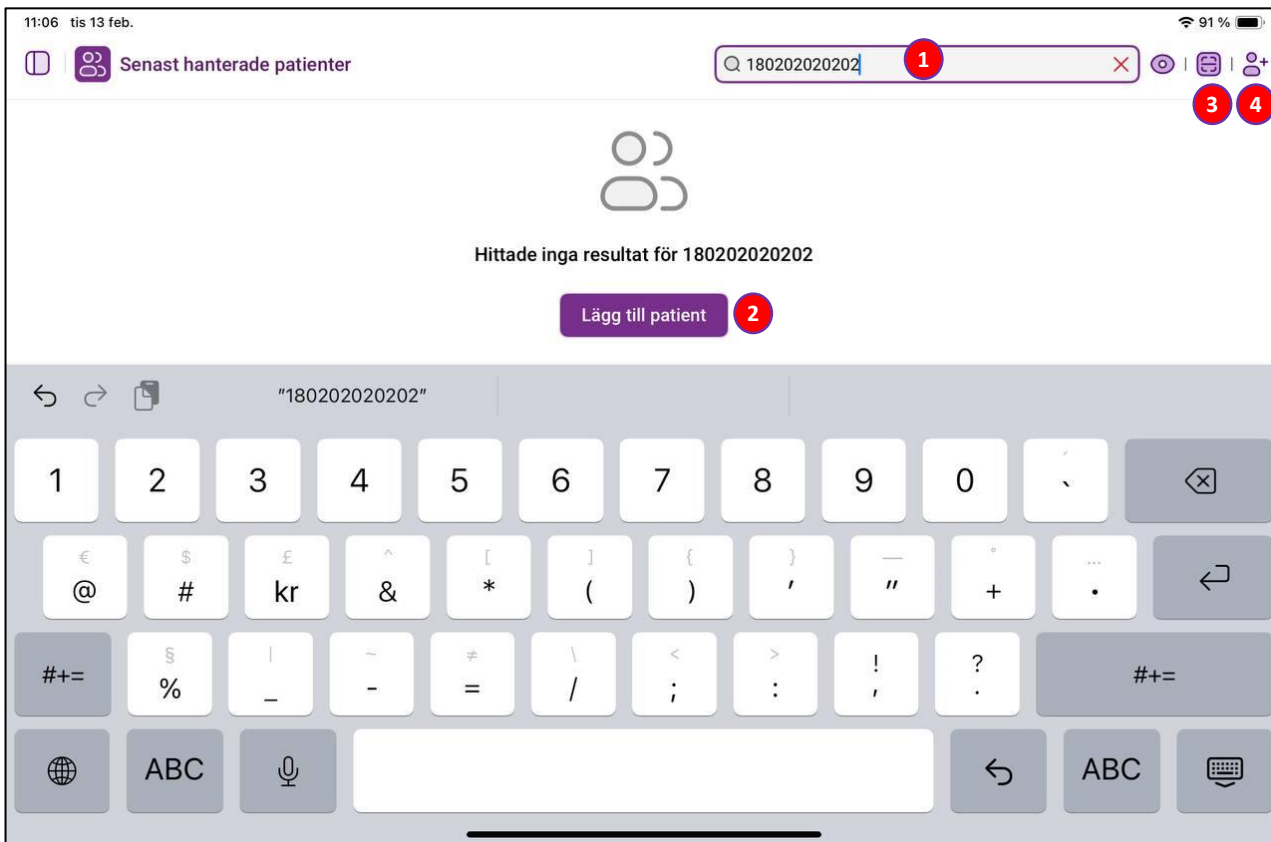

1. Sök patient (i SwipeCare systemet) på personnummer
2. "Lägg till patient": Om SwipeCare inte hittar patienten i sitt system så trycker du på den **lila knappen** för att addera patienten med det nummer du skrev i sökfältet.
3. Addera patient genom att scanna streckkod/QR kod
4. Addera patient manuellt



iPad: Lägg till ny patient

iDappen 17:51 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer T.ex. 1912121212 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn E-post

SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster

Adressrad 1 Adressrad 2

Postnummer Stad

Lägg till patient

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer 19750806-8413 Reservnummer T.ex. 9912121212

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn App Testperson X E-post T.ex. namn.namn@mail.com

Lägg till patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 å

q w e r t y u i o p

@ # kr & * () ' " + .

a s d f g h j k l ö ä

⬅ ➡

% _ - = / ; : ! ?

z x c v b n m , .

123 123

- Patientid och namn är obligatoriska uppgifter.
- Om ni har funktionen SPAR, så läggs namnet till automatiskt
- Vid journalskrivning förs endast patientid över till TakeCare, som lägger till namnet själv.

iDappen 17:52 lör 2 sep. 64 %

✕ Lägg till patient

Patient ID
Vänligen ange korrekt ID-nummer

Personnummer 180404040404 Reservnummer

Kontaktinformation
Används för att ta kontakt med patient

Namn Tolvan TolvanSSon E-post

SMS-nummer Övriga telefonnummer

Notifieringsinformation
Inställningar för utskick

☐ Tillåt SMS-aviseringar ☐ Tillåt e-post-aviseringar

Adressinformation
Används för brev och andra tjänster


Adressrad 1 Adressrad 2

Postnummer Stad

Lägg till patient



iPad: Vårdenhetens patienter - sidomenyn

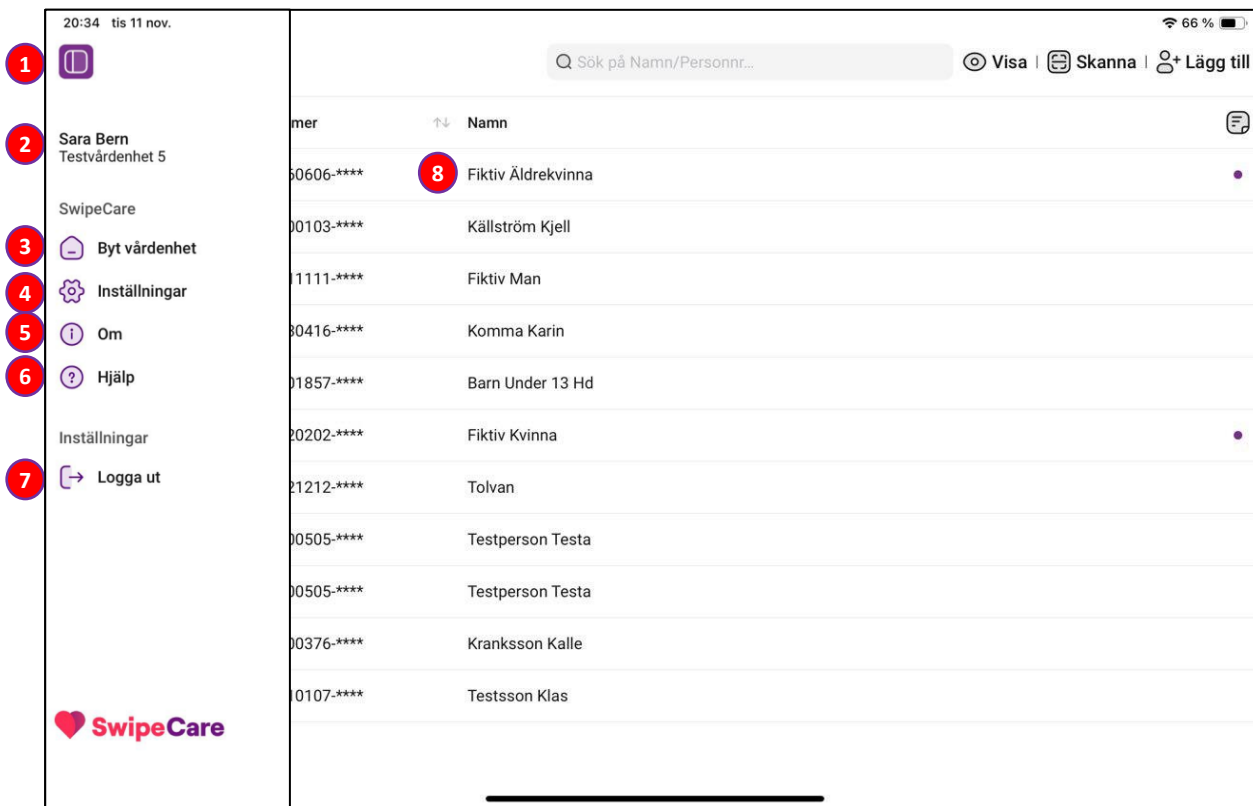

1. Öppna/stäng sidomenyn. Den kommer in från vänster.
2. Du ser användare och vårdenhet
3. **Byta vårdenhet** (om du har behörighet i SwipeCare till flera)
4. **Inställningar**. Idag finns dessa:
 - Skicka teknisk information (för felspårning)
 - Se vilket backend system iPaden är kopplad mot.
5. **Om**, berättar om systemet
6. **Hjälp** leder till hjälpsidan på internet. Du kan nå den sidan från patientprofilen och ute på internet också.
7. **Logga ut**
8. Klicka var som helst på en patientrad för att öppna patientens profil



iPad: Arbetslista i patientlistan, Notiser

20:17 tis 11 nov. 67 %

Testvårdenhet 5 Senaste uppdatering: 19:36

Sök på Namn/Personnr...

Visa Skanna Lägg till

	Nummer	Namn	
	18060606-****	Fiktiv Äldrekvinna	
00103-****	Källström Kjell		Fäst Notiser Ta bort
4:2	18111111-****	Fiktiv Man	
5:1	19530416-****	Komma Karin	
6	99201857-****	Barn Under 13 Hd	
7:2	18020202-****	Fiktiv Kvinna	

Arbetslista - "Fäst" dina patienter högst upp i patientlista

1. Slep patienten åt vänster
2. Välj Fäst
3. Patienten stannar högst upp i din lista, på **denna** iPad.
Om du loggar ut och in igen stannar Fästa patienter i din arbetslista på denna iPad. Om du tar en annan padda får du skapa din arbetslista på nytt.
4. Notiser. Har patienten en notis, så syns det som en prick.
5. Lösgör: Patienten är inte fäst längre
6. Här kan du också läsa/skapa notiser på patient.
OBS: Notiser journalförs inte i TakeCare.
7. Ta bort: Ta bort patienten från patientlistan





iPad: vänster ram innehåller generell information om patienten

23:11 sön 21 sep. 93 %

Costner Testperson 99200061-5217

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

Allmän information

Patientnamn
Costner Testperson

Reservnummer 992000615217 Kön - Ålder -

Email -

Telefonnummer

Tillåt e-post-aviseringar

Tillåt SMS-aviseringar

Adressinformation

Etiketter

Notiser

Göm

Uppgifter

Senaste uppdatering: 23:11

SBAR Nytt mätvärde Ny journalant.

Under MER finner du det din vårdenhet har valt att visa av:
Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista,
Läkemedelsadministration och Mätvärden

ATT GÖRA synkroniseras med TakeCare,
ockå med länkade mätvärdesmallar.

Dokumentera på NYTT-knapparna ovan.

Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så gör de
anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall
och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan
komplettera med Tilläggsmall/- Term i TakeCare.

10:58 ons 12 nov. 93 %

Fiktiv Äldrekvinna 18060606-0606

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

Allmän information

Adressinformation

Etiketter

Notiser

Göm

Uppgifter

Senaste uppdatering: 10:58

Mina påbörjade journalanteckningar/mätvärden

Senast skickad information

Mätvärde till TakeCare

Mätvärde till TakeCare

Journaltext

Diagnoser

Läkemedel

Läkemedelsadmin.



Mätvärden (ej provsvar)

Hjälp


1. Kollapsa/expandera informationen med pilen.
2. Skriv en notis på patienten, den journalförs inte.
Notisen kan också ses i patientlistan om du sveper patienten åt vänster.
3. Göm/ta fram sidopanelen med "Göm". Röda horisontella pilen återställer sidopanelen.
4. Hantera patients registrerade telefonnummer, om ni skrivit in det. OBS: synkas ej med TakeCare.

5. MER: Utläsning från TakeCare, och HJÄLP-sida med instruktionsfilmer
6. SBAR: Överrapporteringsverktyg (tilläggsfunktion)
7. Påbörjade mallar som kan editeras. Svejpa åt vänster för att radera den
8. Senaste informationen som skickats från iPad till TakeCare med status
9. HJÄLP: Direktlänk till manualer och korta instruktionsfilmer

iPad: Uppgifter - Starta & välj mall

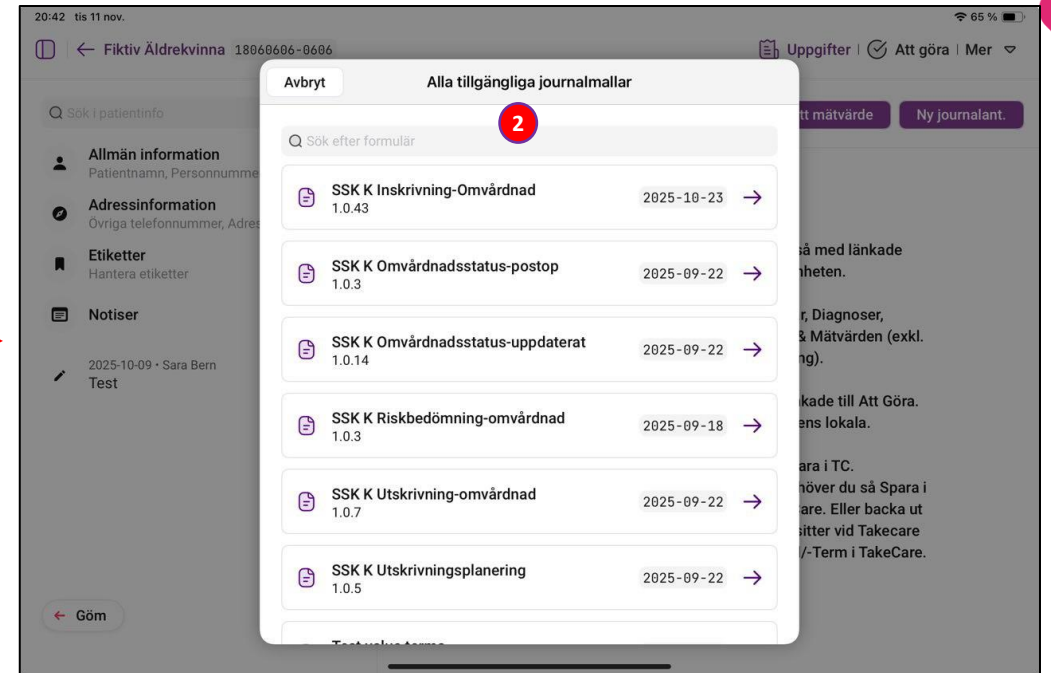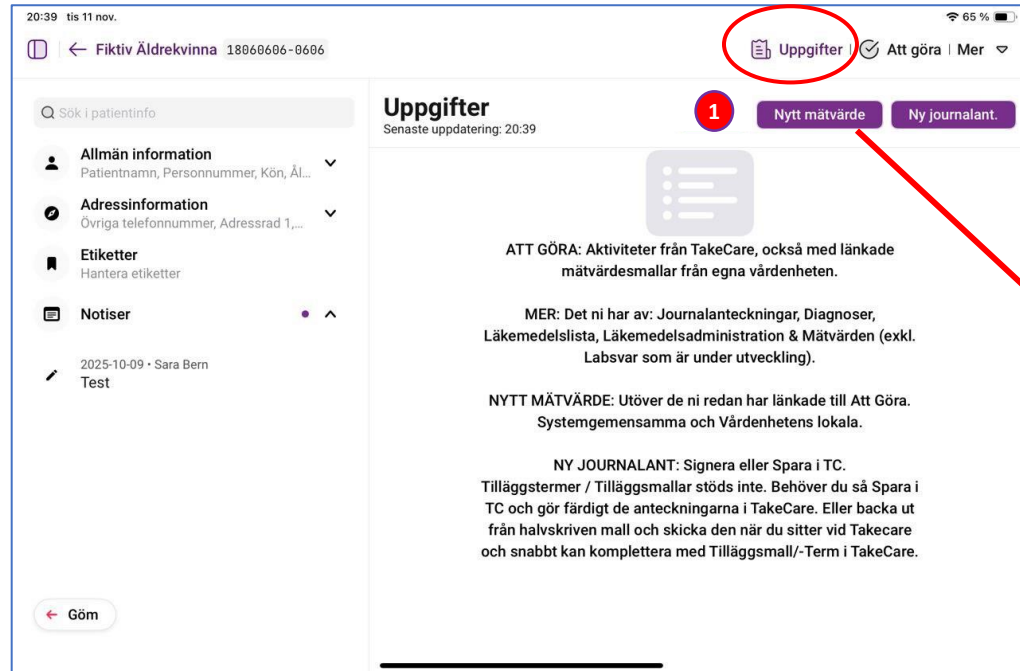

1. Starta en mall på lila knapp:
Nytt mätvärde eller **Ny journalanteckning**.
Swipecaremallens versionsnummer och skapandedatum står angivet.
2. Välj eller sök mall.
 - Mätvärdesmallarna hämtas ut automatiskt från Vårdenheten.
 - Journalanteckningsmallarna som visas här är manuellt konfigurerade mot TakeCaremallen

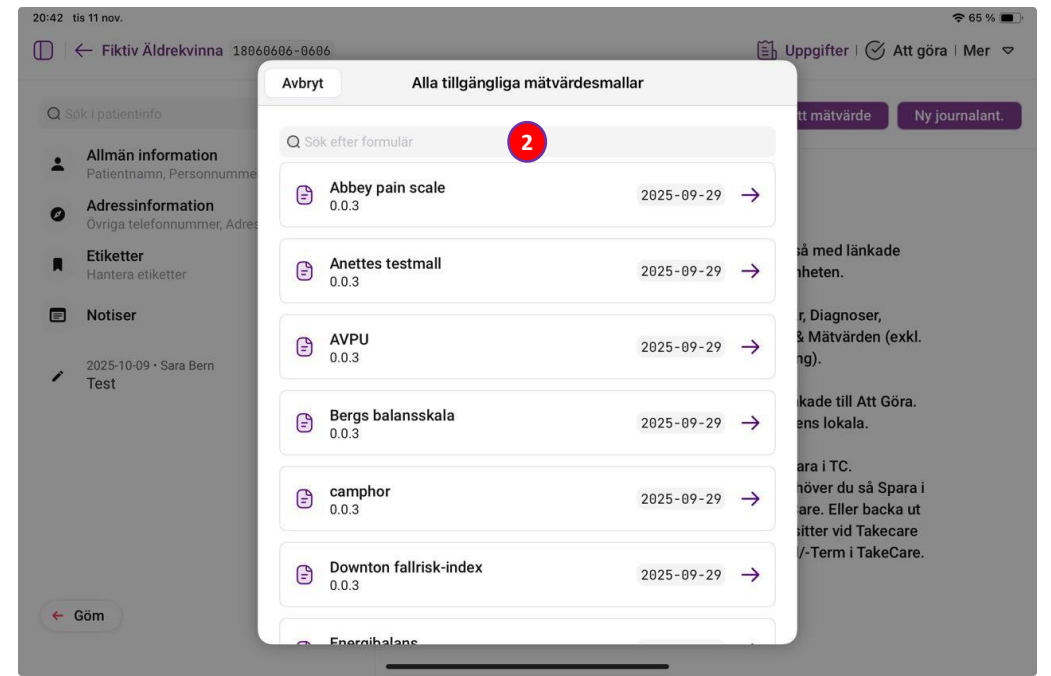



iPad: Uppgifter - Skapa journalanteckning

20:53 tis 11 nov. 64 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18860606-0606

Uppgifter | Att göra | Mer

SSK K Inskrivning-Omvårdnad 1

Fyll i dokumentet

Berörda minderåriga barn

Oklart Ja 3

Nej Uppgift saknas

Kommentar:

Information om berörda minderåriga barn

Tilltals-namn	Födelseår (årtal)	Kön	Vistas i patientens hus-håll	Vårdnadshavare	Patientens relation till barnet	Annan viktig person för barnet	Insatser	Kommentar
Wilma	2023	Flicka	Dagligen	Patienten, enskild vårdnad	Morförälder		Ja, insatser har erbjudits	

+ Lägg till en rad

2 ↓ Mer nedan

Spara i TC Signera

Avbryt SwipeCare Ja

Signera?
november 11, 2025 20:59

Skicka datum och tid 4

för 8 nov.	17	56
sön 9 nov.	18	57
mån 10 nov.	19	58
idag	20	59
ons 12 nov.	21	00
tors 13 nov.	22	01
fre 14 nov.	23	02

Uppgifter | Att göra | Mer

Uppgifter

Senaste uppdatering: 21:04

Nytt mätvärde Ny journalant.

Senast skickad information

Journalanteckning till TakeCare
Importerad till journalsystemet 2025-11-11, 21:04

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

5 Klart!
Informationen är importerad till TakeCare

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

SSK K Inskrivning-Omvårdnad

Egenskaper 6

Allmänt Sokord

Skapad: 2025-11-11 20:55

Mallnamn: K Inskrivning-omvårdnad

Yrkesgrupp: Administrativ personal

Händelsetid: 2025-11-11 19:00

Tillhör arbetsplats: H GAVA Inflammation Avd

Skapad av: Swipecare Strikersoft

Version skapad: 2025-11-11 20:55:41

Version skapad av: Swipecare Strikersoft /stelpa

Signeringsansvarig: Sara Bern, Adm

Kontrasigneringsansvarig:

Signerad av: Swipecare Strikersoft

Signerad: 2025-11-11 20:55

OK Avbryt

1. Mallnamn
2. Mer nedan = Malleen är längre. Scrolla ned!
3. Spara i TC eller Signera (Vårdenheten kan välja per mall om ena/båda knapparna ska synas). Om dessa lila knappar försvinner, så dra fingret uppåt så kommer den tillbaka.
4. Välj datum och Händelsetid för anteckningen. Signerad med nutid.
5. När information har importerats till TakeCare kommer denna popup upp med ett ljud i ca 5 sekunder. För att stänga den så klickar du på den.
6. Så här ser antckningens egenskaper ut i TakeCare, om jag ändrade Händelsetiden till 19:00



iPad: Uppgifter - Registrera mätvärden

21:30 tis 11 nov. 59%

← Fiktiv Äldrekvinnas 18060606-0606

Uppgifter Att göra Mer

✓ Energibalans *

Energibalans *

Energibalans
Fyll i dokumentet

Skicka till TakeCare

Energibalans

Energibehov (kcal/dygn) *

1

2 Kommentar:

Energiintag per os (kcal/dygn)

Kommentar:

Energiintag enteral nutrition (kcal/dygn)

↓ Mer nedan 3

Avbryt SwipeCare Ja

Skicka in anteckning?
november 11, 2025 21:12

Skicka datum och tid 5

lör 8 nov.	18	09
sön 9 nov.	19	10
mån 10 nov.	20	11
idag	21	12
ons 12 nov.	22	13
tors 13 nov.	23	14
fre 14 nov.	00	15

1. Tryck på pil för att fylla mätvärde.
2. Om inget mätvärde har fyllts i så kan man inte skriva en kommentar.
3. Se till att du fyller i hela formuläret ända ned till botten
4. Skicka till TakeCare för att signera mätvärdet (försvinner denna knapp, så dra fingret uppåt, så kommer den tillbaka).
5. Välj Händelsedatum och tid för mätvärdet. Signeringsdatum blir aktuell nutid.






iPad: Uppgifter – Se och Registrera NEWS2 mätvärden

The screenshot shows the iPad interface for the NEWS2 form. At the top, the status bar displays the time (13:21), date (tis 24 mars), version (v. 4.8(896)), and battery level (63%). The app header includes a back arrow, patient name (Fiktiv Man), and ID (18111111-1116). The main header shows 'Uppgifter', 'Att göra', and 'Mer'. A sidebar on the left has a 'NEWS2' section with a 'NEWS2' button. The main content area is titled 'NEWS2' with a subtitle 'Fyll i dokumentet' and a 'Skicka till TakeCare' button. The form contains three sections: 'NEWS2 Totalpoäng (genererat värde)' with a 'Tidigare värde: 4' and an info icon; 'Andningsfrekvens (andetag/min.)' with a 'Tidigare värde: 15' and an info icon, followed by a text input field and a 'Kommentar:' field; and 'Syremättnad (%)' with a 'Tidigare värde: 99', a 'Mer nedan' button, and a text input field. Each section has a right-pointing arrow.

- Vårdenheten kan välja att visa föregående NEWS2 i mätvärdesmallen medan du fyller i aktuella vitalparametrar.
- På detta sätt slipper du gå in i mätvärdesmodulen innan du registrerar nya vitalparametrar.



iPad: Uppgifter – Bekräftelse på importerad anteckning/mätvärde

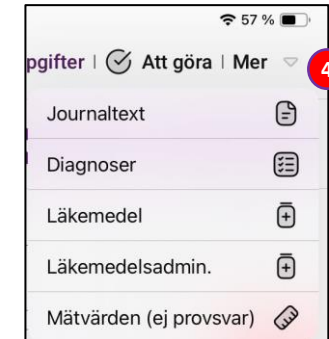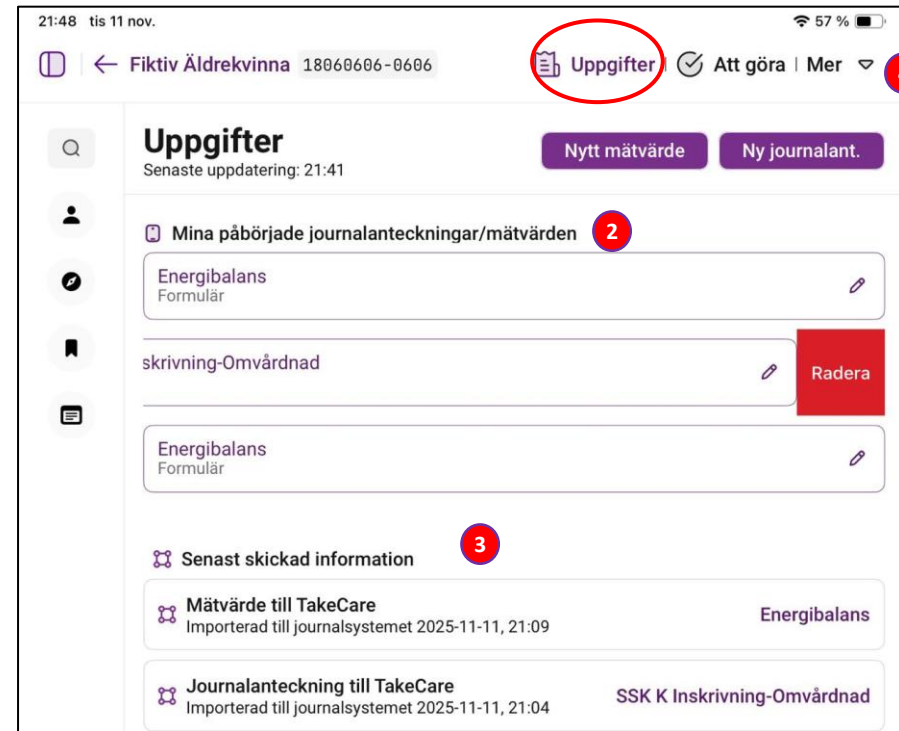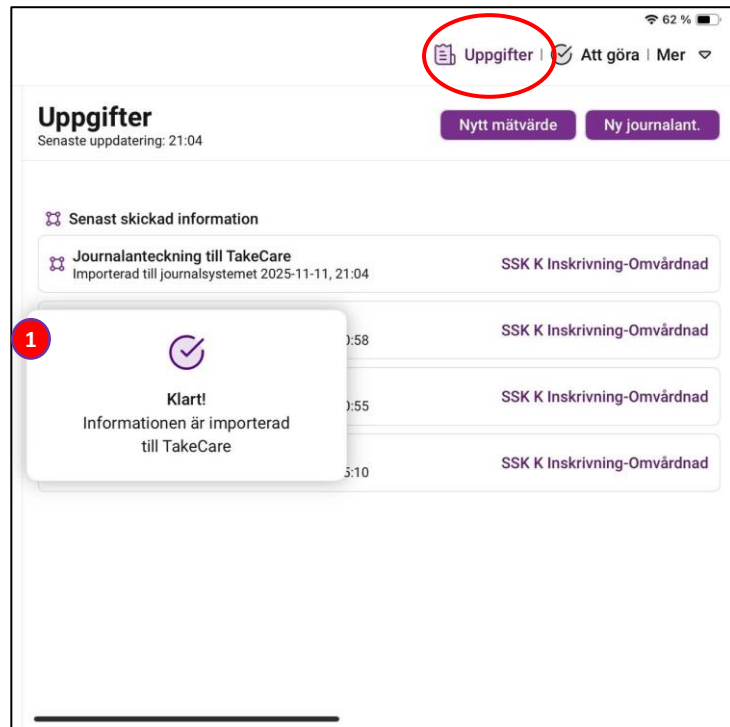

1. När information har importerats till TakeCare kommer denna popup i ca 5 sekunder. För att stänga den så klickar du på den.
2. Påbörjade anteckningar/mätvärden som du kan fortsätta editera innan du skickar till TakCare. Dra åt vänster för att radera den.
3. Namnet på de 10 senast skickade informationerna senaste dygnet, inklusive datum och klockslag.
4. För att läsa vad du har skickat får du läsa ut från TakeCare under Mer

iPad: Att Göra listan (Aktiviteter synkroniserade med TakeCare)



Tryck på korten för att Utföra med eller utan länkat mätvärde:

13:58 tors 19 feb. v. 4.3 (388) 54 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mer

2 Journalfilter: Förvalt (som i TakeCare) 9

Aktivitetshanteraren

3 Senaste uppdatering: 13:57

4 KONTINUERLIG AKTIVITET

NEWS2
Kontinuerlig
kont news2

8 Skapad/ändrad på: SÖS Medicin avd 83

Samordning
Kontinuerlig • Sjuksköterska
Om patienten ska gå hem med CVK, överför information till nästa vårdgivare. (senaste omläggning/kranbyte mm)

Skapad/ändrad på: SÖS Medicin avd 16

5 FÖRSENADE

GCS-bedömning
Daglig

2026-02-19 01:00
Skapad/ändrad på: SÖS Medicin avd 83

6 KOMMANDE IDAG

CVK, inspektion
Daglig • Sjuksköterska
CVK Inspektion - insticksställe, omgivande hud, kateterns läge och förband. Om förbandet lossnat, är fuktigt eller...

2026-02-19 16:00
Skapad/ändrad på: SÖS Medicin avd 83

Mat- och vätskeregistrering
Daglig
på kalorilista. Stäm av kalori- och vätskeintag vid varje pass. Dygnsregistrering i mätvärden kl 06. Utvärdera om fortsatt mätning.

2026-02-19 16:00
Skapad/ändrad på: SÖS Medicin avd 83

7 KOMMANDE IMORGON

1. Filtrering: Aktiviteter från Att Göra i TakeCare läses ut automatiskt (igår, idag, imorgon).
2. Tryck på "Journalfilter" för att ändra utläsning,
3. Senaste uppdatering. Svep nedåt för att uppdatera. Kontinuerliga aktiviteter: klarmarkeras aldrig. Länkas inte med mätvärden ännu.
4. Försenade aktiviteter är **rödmarkerade**
5. Kommande idag: Dagens aktiviteter (svart)
6. Kommande imorgon: Morgondagens planerade aktiviteter har flyttats från denna vy till en egen flik. Så den rubriken är tom på denna sidan
7. På vilken vårdenhet Aktiviteten skapades eller senast redigerades
8. Ändra Journalfilter. Detaljerad filtrering adderar enheter.

14:15 tors 19 feb.

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606

9

Egna vårdenheten

Egna spärrgruppen

Förvalt (som i TakeCare)

Egna vårdgivaren


Alla vårdgivare

Detaljerad filtrering

Aktiviteter hämtas för dina vanliga vårdenheter men du kan välja annat Journalfilter också



Tryck på orange ribban:

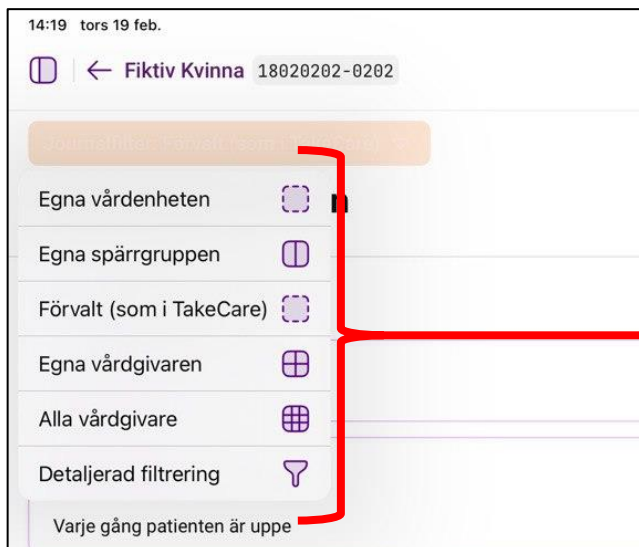

OBS:

- För Aktiviteter skapade utanför egna vårdenheten så visas länkade systemgemensamma mätvärdesmallar automatiskt.
- Lokala mätvärdesmallar från annan vårdenhet kan inte hämtas automatiskt (precis som i TakeCare). Då visas en förklarande text i popup.

iPad: Att Göra listan (Aktiviteter synkroniserade med TakeCare)



16:02 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 46 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade

Att göra

Senaste uppd.

KOMMA

Daglig

Uppmuntr som patie null time

Saturat

Daglig

Mätning a 2 liter syrg BBBB

NEWS2

Daglig

Saturat

Daglig

Mätning a 2 liter syrg BBBB

Bedömn

Daglig • Sjukvår

Palliativ bedömning utförs via FRISQ

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Tillbaka

NEWS2

2025-10-17 20:00

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

Utförd nu

Utförd tidigare

Ej utförd

16:46 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 28 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade

Att göra

Senaste uppd.

FÖRSEN

Uppmuntr som patie null time

Saturat

Daglig

Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna

2 liter syrgas (individuell bedömning) om lägre än 90 % i saturation.

BBBB

Godkänn

	13	43
ons 15 okt.	14	44
tors 16 okt.	15	45
idag	16	46
lör 16 okt.	17	47
sön 16 okt.	18	48
mån 17 okt.	19	49

Bedömn

Daglig • Sjukvår

Palliativ b

Mobiliser

Daglig

Uppmuntr som patie null time

NEWS2

Daglig

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

1. **Utförd nu:** Aktiviteten får nuvarande tid registrerad i TakeCare
2. **Utförd tidigare:** Välj datum och tid när aktiviteten utförts, klicka sen på Godkänn för att registreras i TakeCare som Utförd.
3. **Ej utförd:** Om aktiviteten utförts /ej ska utföras kan du lämna kommentar (vid behov) och klicka på godkänn.

16:41 fre 17 okt. v. 4.3 (360) 30 %

Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade

Att göra

Senaste uppd.

FÖRSEN

Uppmuntr som patie null time

Saturat

Daglig

Mätning av saturation var 3:e timma de första 48 timmarna

2 liter syrgas (individuell bedömning) om lägre än 90 % i saturation.

BBBB

Godkänn

Kommentar, ej utförd aktivitet

Kommentar

Bedömn

Daglig • Sjukvår

Palliativ b

Mobiliser

Daglig

Uppmuntr som patie null time

NEWS2

Daglig

Saturat

Daglig

Skapad/ändrad på: H GAVA Akutvårdsavd

iPad: Att Göra listan (synkroniserad med TakeCare)



Aktivitet utförd/utförd tidigare:

Rutan blir grön och försvinner sen av sig själv.

15:16 fre 19 dec. 37 %

← Fiktiv Äldrekvinnas 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "igår, idag, imorgon" Journalfilter

Aktivitetshanteraren (Välj Journalfilter: t.ex. Egen vårdgivare)
Senaste uppdatering: 13:38

⚠ FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG

Cirkulation, kontroll
Daglig 2025-11-10 08:00
Utför distalstatus - funktion, känsel, cirkulation Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd >

Gånghjälpmedel
Daglig 2025-11-10 08:00
[precisera] Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd >

✅ Aktivitet utförd

Kontinuerlig tillsyn
Daglig

Aktivitet ej utförd: Har du valt att ej utföra aktiviteten (med eller utan kommentar) så blir rutan röd och försvinner sen av sig själv.

15:16 fre 19 dec. 37 %

← Fiktiv Äldrekvinnas 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mer

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "igår, idag, imorgon" Journalfilter

Aktivitetshanteraren (Välj Journalfilter: t.ex. Egen vårdgivare)
Senaste uppdatering: 13:38

⚠ FÖRSENADE FRÅN IGÅR OCH IDAG

Gånghjälpmedel
Daglig 2025-11-10 08:00
[precisera] Skapad/ändrad på: H GAVA Inflammation Avd >

❌ Aktivitet ej utförd



Klart!
Informationen är importerad
till TakeCare

Hade aktiviteten en mätvärdesmall länkad till sig visas en popup som säger att informationen är importerad, och en pling om du har ljudet på.

Läsa TakeCare



23:08 tis 11 nov.

← Fiktiv Kvinna 18020202-0202

Uppgifter | Att göra | Mer

Uppgifter

Senaste uppdatering: 23:07

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration & Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling).

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC. Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så Spara i TC och gör färdigt de anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan komplettera med Tilläggsmall/-Term i TakeCare.

Journaltext	
Diagnoser	
Läkemedel	
Läkemedelsadmin.	
Mätvärden (ej provsvar)	
Hjälp	

1. Manualer2. Tekniska problem3. Nyheter/Driftsinformation4. Driftsstättningsinfo

1. Manualer

iPad SwipeCare 4

Korta filmer

Filmerna är stöd till användande. De uppdateras inte lika ofta som användarmanualen nedanför.

1. SITHS login med QR kod från TakeCare (0:41 min)

2. Logga in aktiv session (0:40 min) version. 4.2.19

3. Patientlistan (0:44 min) version. 4.2.19

4. Addera patient, sök patient, byt vårdenhet (0:52 min) version. 4.2.19

5. Patientprofilen_Uppgifter (2:15 min) version. 4.2.35

6. Skriva journalanteckning, också med containertermer (2:47 minuter) Version 4.2.35

7. Mätvärdesmallar och -filter (2:45 minuter) Version 4.2.35

8. Att Göra listan Aktiviteter från TakeCare Aktivitetshanterare (2:24 min) version. 4.2.35

9. Läsa patientens journalanteckningar (1:10 min) version. 4.2.19

10. Läsa patientens diagnoser (0:25 min) version. 4.2.19

11. Läsa läkemedell (Ordination) (1:01 min) version. 4.2.19

12. Läkemedelsadministration (4 min) version 4.2.38 (inte aktiverad ännu)

13. Mätvärdeslistan (Ej provsvar) (2:30 min) version. 4.2.35

För SÖS Vatskemötningspilot på Avd 83 Internmedicin:

Summeringsfunktionen funkar för alla användare, exemplen i filmerna är delvis beroende på Vårdenhetsspecifika mallar, se dem som inspiration.




+ Summeringsfunktion för tex Vatskemätning per pass (2:19 min) version 4.2.37

+ Registrera Nutrition och Vatskebalans (24h) (2:54 min) version 4.2.37.


Om man vill dygnsregistrera både Nutrition och Vatskebalans i SwipeCare, så rekommenderas att man registrerar Energin först i mallen, innan man registrerar Vatska med hjälp av summeringsfunktionen. Det är så lätt att man glömmer bort Energibiten som står på papper annars. Vi hoppas att Regionen tillsätter termer för löpande energimätning snart.




iPad: Journaltext – Välj utläsning från TakeCare

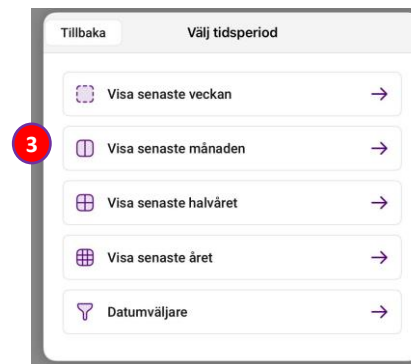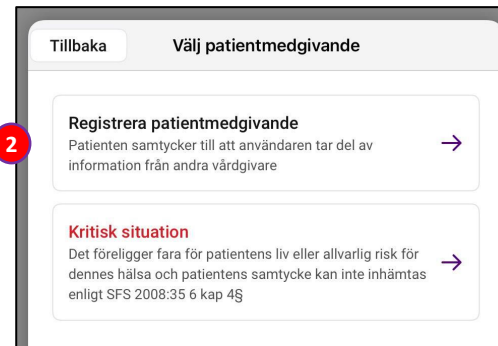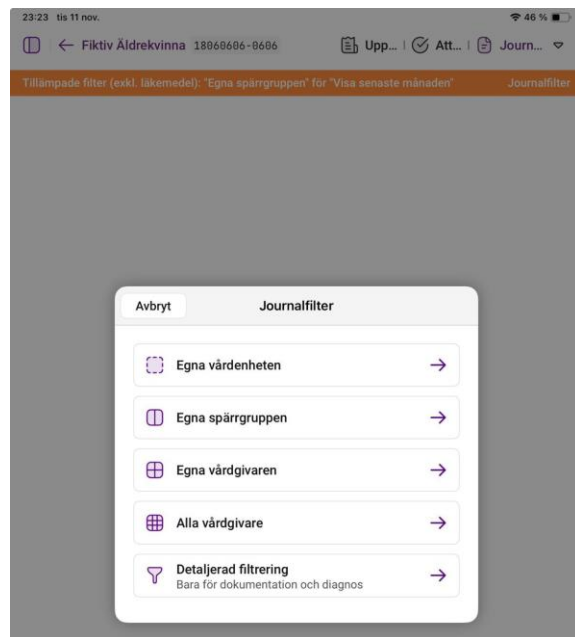

1. Standard för Egna spärrgruppen, senaste månaden. Vill du ha en annan filtrering klickar du på Journalfilter.
2. Går du utanför Egna vårdgivaren måste patientmedgivande, eller nödsituation registreras i SwipeCare registreras (synkas ej med TakeCare)
3. Välj tidsperiod du vill se anteckningar för.
4. Tryck på Journalfilter för att ändra utläsningen.
5. Här kan du välja och läsa journalanteckningar för patienten.
6. Fritextsök för filtrering av journalanteckningar. Sökbegreppet markeras i anteckningen med rött
7. Filtrera utläsningen på författare eller typ av anteckning

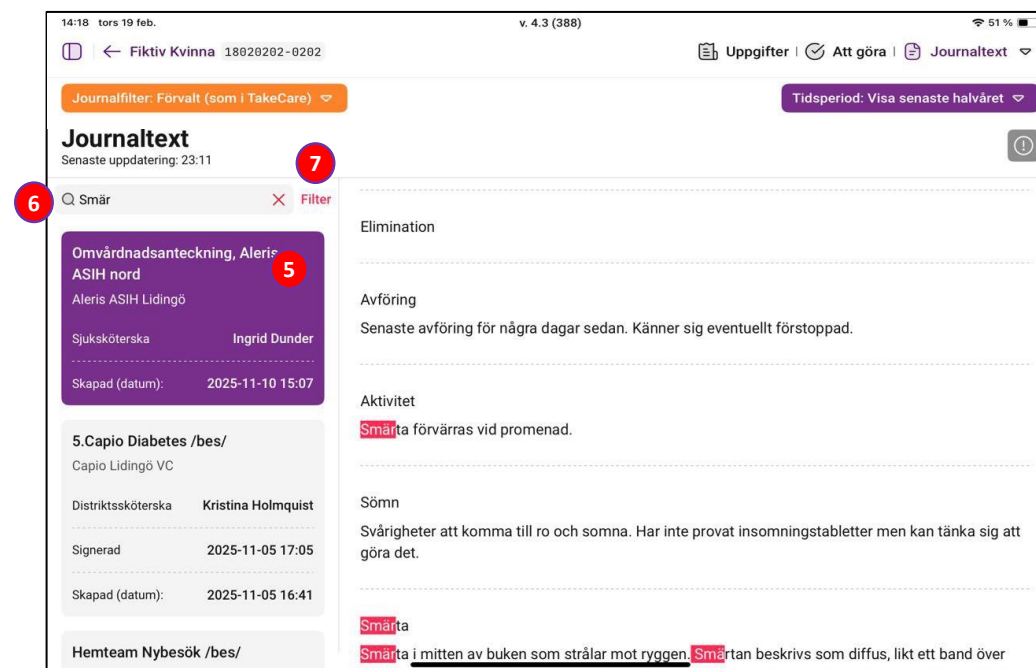

iPad: Journaltext – Välj patientmedgivande

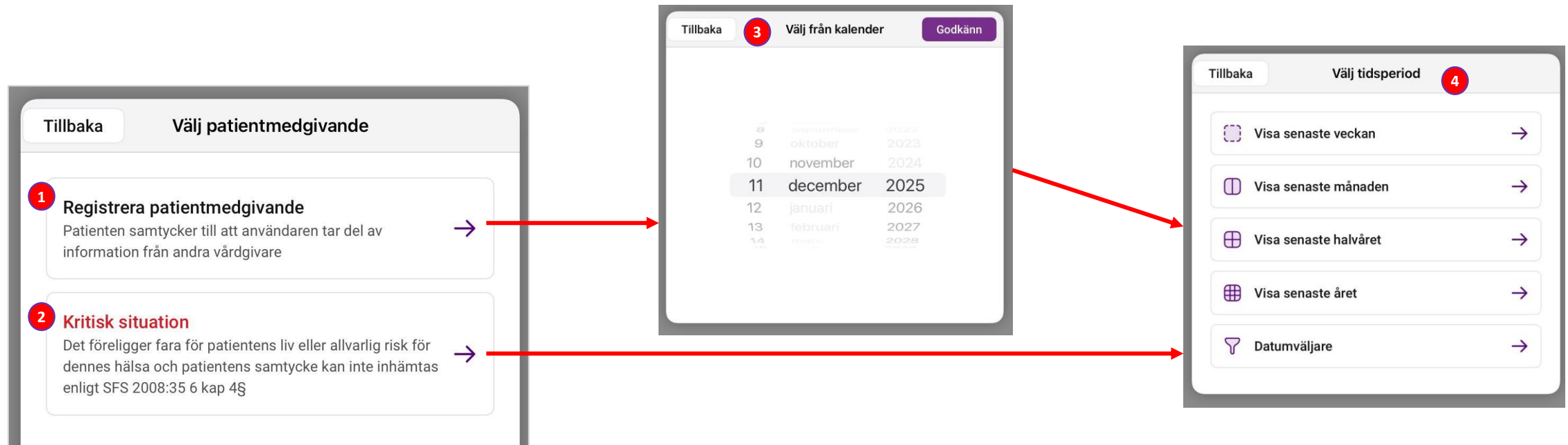

1. **"Registrera patientmedgivande"**: För läsning utanför din vårdgivare. Trycker du på "Registrera patientmedgivande" kommer du till steg 3.
2. **"Kritisk situation"**: Här klickar du om patienten t.ex. är medvetslös och ej kan ge samtycke men det bedöms vara av ytterst vikt att kunna se journaler från alla vårdgivare. Samtycket gäller endast under det tillfället du läser ut information. Sen kommer du till steg 4.
3. **"Välj från kalender"**: Här behöver du välja hur länge patientsamtycket gäller (Standard en månad fram)
4. **"Välj tidsperiod"**: Här väljer du tidsperiod du vill läsa ut journaltext från.

iPad: Läsa mätvärden

14:26 tors 19 feb. v. 4.3 (388) 50 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mätvärden (ej provsvar)

Journalfilter: Förvalt (som i TakeCare) Tidsperiod: Visa senaste månaden

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 14:26

Q Sök

Alla mätvärden

- 1 NEWS2 1 registrering
- In- och utfarter förekomst Inga data
- In- och utfarter med åtgärder Inga data

Övriga mätvärden (utanför SwipeCare filtren ovan) 7 registreringar

Välj alla Godkänn

14:26 tors 19 feb. v. 4.3 (388) 50 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Mätvärden (ej provsvar)

Journalfilter: Förvalt (som i TakeCare) Tidsperiod: Visa senaste månaden

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 14:26

Q Sök

nov. 4 nov. 1

14:23 14:35 14:38 17:18 17:47 20:00 20:01 14:03 14:08 19:06

-Energibalans

Vikt (kg)		45	45	56	-	-	-	-	-	-
Energibehov (kcal/dygn)		-	-	-	5	3 599	5 699	-	-	4 000
Energiintag per os (kcal/dygn)		-	-	-	5	-	-	-	-	-
Energiintag enteral nutrition (kcal/dygn)		-	-	-	4	-	-	-	-	-
Energiintag parenteral nutrition (kcal/dygn)		-	-	-	4	-	-	-	-	-
-Totalt energiintag		-	-	-	13	-	-	-	-	-
-Energibalans		-	-	-	8	-3 599	-5 699	-	-	-4 000

MÄTVÄRDE:
5 699

KOMMENTAR:

-Längd/vikt/BMI

Längd (cm)	123	123	154	-	-	-	-	-	-
Vikt (kg)	45	45	56	-	-	-	-	-	-
-BMI (Kg/M²)	29,74	29,74	23,61	-	-	-	-	-	-

- Mätvärdesfilter byggs manuellt:** Välj Alla mätvärden om du inte hittar ditt favoritfilter. Patients mätvärden som av olika skäl inte kunnat fångas i ett filter hittas på Övriga knappen längst ned i listan
Genererade (beräknade) mätvärden markeras med ett minustecken före namnet
Kan SwipeCare inte beräkna värdet med angiven formel, står det "Se TC" i värdesfältet.
Funktionerna: E-SOFA, KATZ/NYKATZ planeras senare, utveckling pågår.
- Tid för utläsning från TakeCare.** Slep ned för att uppdatera.
- Sök mätvärdesfiler/Beräknade mätvärden**
- Kommentarer:** Visas med prick vid värdet. En ofylld prick betyder att mätvärdet skrevs in via journaltext, där kommentaren finns att läsa.



iPad: Mätvärden – Utläsning av "Alla mätvärden"

10:52 tis 6 feb. v. 4.3 (228) 76 %

Fiktiv Pojke 18101010-1010 Uppgifter Att göra Mätvärden

Tillämpade filter: "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Filter

Mätvärden 1

Senaste uppdatering: 10:46

Sök mått Ändra mätvärden 6

	jan. 12	jan. 15	jan. 16	jan. 22	jan. 23	jan. 31
Alla mätvärden	14:09	15:57	15:58	09:46	11:55	15:49
Andningsfrekvens (andetag/mi...)	-	-	-	-	-	-
BMI	-	-	19	-	-	-
BMI enl MNA	-	1 = BMI...	-	-	-	-
Blodtryck diastoliskt - nedre (m...)	-	-	-	110	110	90
Blodtryck systoliskt - övre (mm...)	-	-	-	-	110	100
Kontakttyp	a...	-	-	-	-	-
Längd (cm)	-	-	158	-	80	-
Läppar enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-
Medvetandegrad, NEWS2	-	-	-	-	-	V = rea...
Midjemått (cm)	-	-	-	-	-	-
Nasogastrisk sond, inspektion	-	-	-	-	-	Komplik...
Protes enl ROAG - NY	-	-	-	-	-	-

14:35 tors 19 feb. v. 4.3 (388) 48 %

Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden (ej provsvar)

Journalfilter: Förvalt (som i TakeCare) Tidsperiod: Visa senaste månaden

Mätvärden (ej provsvar) 5

Senaste uppdatering: 14:34

Σ = 190 2 3 Välj mätvärdesfilter 4

	feb. 18	feb. 19
Smartint. öppnandning enl NRS	16:46	16:46
Smärtint. rörelse enl. NRS	-	-
Smärtint. vila enl. NRS	-	-
Sond, ml in (mL)	-	-
Steril teknik	Tilläm...	-
Syremättnad (%)	-	98
Syrgas, NEWS	-	Nej
Syrgasbehandling via	-	Högflö...
Typ av central venaccess	Standa...	-
U-Volym, kastad (mL)	-	120
Ultraljud vid inläggning av central venaccess	Både före o...	-
Vikt (kg)	-	67
Vätskeintag per os, ml (mL)	120 5	70 5

1. Översikt av Alla mätvärden. Sorterade i bokstavsordning.
Senast registrerade mätvärden längst till höger på skärmen.
2. Sökruta för att söka efter specifika värden
3. "Ändra mätvärden": Klicka här för att komma tillbaka till mätvärdesfiltrena.
4. Klicka här för mer information om utläsningen
5. Du kan summera ett eller flera mätvärden genom att klicka på summasymbolen och sedan på de värden du vill summera. De markeras med grön ram, och summan syns vid summatecknet.
Valde du fel värde så klickar igen.

iPad: Mätvärden – Summeringsfunktion



1. Tryck på summaknappen för att aktivera funktionen
2. Klicka på de värden du vill summera
3. Klicka på summa-knappen igen för att kopiera summan till Urklipp
4. Du kan sedan gå till något inmatningsfält, tex en mätvärdesmall och klicka nånstans i fältet så kommer "Klistra in" upp. Tryck på den så klistras värdet in.

15:50 fre 19 dec. 28 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden (ej provsvar)

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 15:50

Σ

Sök

Välj mätvärdesfilter

dec. 8 dec. 9 dec. 15 dec. 16

29 15:03 15:30 16:55 15:30 09:20

-Vätskemätning manuell balans

Vätskeintag per os, ml (mL)	-	450	200	1 350	-
Enteral vätska (mL)	-	-	-	-	-
Summa vätska in (mL)	1 170	-	-	-	1 170
Kräkning (mL)	-	90	75	-	-
U-Volym, kastad (mL)	-	300	350	-	-
U-Volym, KAD (mL)	-	-	-	-	-
Summa vätska ut (mL)	1 900	-	-	-	1 900

14:41 tors 19 feb. v. 4.3 (388) 47 %

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden (ej provsvar)

Journalfilter: Förvalt (som i TakeCare) Tidsperiod: Visa senaste månaden

Mätvärden (ej provsvar)

Senaste uppdatering: 15:50

Σ = 815

Sök

Välj mätvärdesfilter

dec. 8 dec. 9 dec. 15 dec. 16

29 15:03 15:30 16:55 15:30 09:20 22:01 12:22 14:34 14:39

-Vätskemätning manuell balans

Vätskeintag per os, ml (mL)	-	450	200	1 350	-	34	31	76	700
Enteral vätska (mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa vätska in (mL)	1 170	-	-	-	1 170	-	-	-	-
Kräkning (mL)	-	90	75	-	-	-	-	-	-
U-Volym, kastad (mL)	-	300	350	-	-	-	-	-	-
U-Volym, KAD (mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa vätska ut (mL)	1 900	-	-	-	1 900	-	-	-	1 500

18:42 fre 19 dec.

← Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Mätvärden (ej provsvar)

Σ = 815

Sök

Välj mätvärdesfilter

dec. 8 dec. 9 dec. 15 dec. 16

29 15:03 15:30 16:55 15:30 09:20 22:01 12:22 14:34 14:39

-Vätskemätning manuell balans

Vätskeintag per os, ml (mL)	-	450	200	1 350	-	34	31	76	700
Enteral vätska (mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa vätska in (mL)	1 170	-	-	-	1 170	-	-	-	-
Kräkning (mL)	-	90	75	-	-	-	-	-	-
U-Volym, kastad (mL)	-	300	350	-	-	-	-	-	-
U-Volym, KAD (mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa vätska ut (mL)	1 900	-	-	-	1 900	-	-	-	1 500

Summa vätska ut (mL)

Klistra in Autofyll

Klar



iPad: Diagnoser (Huvuddiagnoser)

Standardutläsning är Egna spärrgruppen, hela tidsperioden

14:42 tors 19 feb.		v. 4.3 (388)		47 %	
Fiktiv Äldrekvinna 18060606-0606		Uppgifter		Att göra	
Journalfilter: Förvalt (som i TakeCare)		Tidsperiod: hela tidsperioden		Diagnoser	
Diagnoser				Senaste uppdatering: 00:12	
Diagnoser	Kod	Registrerad	Senast uppdaterad	Kronisk	
Yrsel och svindel	R429	2025-11-11	2025-11-11		
Hosta UNS	R059	2025-10-30	2025-10-30		
Blandade ångest- och depressionstillstånd	F412	2025-10-29	2025-10-29		
Medelsvår depressiv episod	F321	2025-10-27	2025-10-27		
Angiodysplasi i tunntarmen	K553	2025-10-23	2025-10-23		
Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut	F001	2025-10-14	2025-10-14		
Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	J069	2025-10-13	2025-10-17		
Överkänslighet mot penicillin i den egna sjukhistorien	Z880	2025-10-13	2025-10-17		



iPad: Läkemedelslistan med ordination

00:21 ons 12 nov. Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606 Uppgifter Att göra Läkemedel

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Alla vårdgivare" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Läkemedel
Senaste uppdatering: 00:18

1 Aktuella läkemedel på din vår... 1 Aktuella läkemedel 1 Alla läkemedel under Period 11

Senast signerad	Vårdenheten	Preparat	Styrka	Adm. väg	Typ	Adm. Inst.	Dagens dostider
2025-11-04	SLSO- Tumba VC	Nystatin Abacus Medicine	100000 IE/ml	Oralt	Rb	-	02:00 - 1 ml 08:00 - 1 ml 14:00 - 1 ml 20:00 - 1 ml
2025-10-31	Ataraxia Vårdcentral	Orlistat STADA	120 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 1 st
2025-10-30	SLSO- Närakut Handen	Alvedon	500 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 1 st 20:00 - 1 st
2025-10-22	Ersta Geriatrik avd 1	Cefotaxim Navamedic	1 gram	Intravenöst	Rb	+	
		Sterilt vatten Braun	5 milliliter				
2025-10-22	Ersta Geriatrik avd 2	Meronem	500 mg	Intravenöst	Rb	+	
		Sterilt vatten Braun	10 milliliter				
2025-10-02	JakobsbergsGer Mott	Alvedon	500 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 1 st 14:00 - 1 st 20:00 - 1 st
2025-10-20	PSS-Aff mott Södermalm	Concerta	18 mg	Oralt	Rb	-	08:00 - 20 st
2025-06-27	TH - Vårdavdelning 1	TH Diben 1,5 kcal HP	1.3	Enteral	Rb	+	08:00 - 500 ml 14:00 - 500 ml 20:00 - 500 ml

1. Välj att se aktuella läkemedel på egna/alla vårdenheter eller alla läkemedel inkl. utsatta sådana
2. Se när läkemedlen lästes ut, svep nedåt i fönstret för att uppdatera listan

Klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

Kolumnerna betyder:

3. Senast signerad
4. På vilken vårdenhet är det signerat
5. Läkemedlets namn
6. Styrka
7. Administrationsväg
8. Typ
9. Administrationsinstruktioner
10. Dagens dostider
11. Information om begränsningar
12. Stäng SwipeRead, återgå till patientprofilen



iPad: Läkemedelslistan / Läkemedelsordination

13:50 ons 10 apr. v. 4.3 (228) 71 %

Fiktiv Pojke Test 18101010-1010 Uppgifter Att göra Läkemedel

Tillämpade filter: "Alla vårdgivare" för "Visa senaste månaden" Filter

Läkemedel Senaste uppdatering

Senast signerad 2023-08-28

Avbryt **2** **Alvedon** Period

Utdelningstid	02:00	agens dostider
Dosering	2 st	2:00 - 2 st
Utdelningstid	08:00	8:00 - 2 st
Dosering	2 st	4:00 - 2 st
Utdelningstid	14:00	0:00 - 2 st
Dosering	2 st	
Utdelningstid	20:00	
Dosering	2 st	
Ordinationstyp	kontinuerlig (varje dag)	
Preparatnamn	Alvedon	
Läkemedelsform	Filmdragerad tablett	
Adm. Väg	Oralt	
Ordinationsorsak	1 ↓ Mer nedan	

Adm. Väg

Ordinationsorsak

Behandlingsmål

Adm. Instruktion

Generika (Ersättlig?) Ja

Insatt 2023-08-28 13:21

Förskrivare Mia Hägglöf **3**

Hit kommer du genom att klicka på läkemedelsraden för ytterligare information om ordination.

1. Mer nedan betyder att du får svepa nedåt för att komma längst ned i ordinationen
2. Avbryt och stäng fönstret
3. Förskrivande läkare står längst ned.



iPad: Läkemedelslistans begrepp

Vi använder TakeCares xChange API:
Medications.MedicationHistoryGet

De små siffrorna efter begreppen nedan visar på vilket element i TakeCares API som använts för att skapa informationen i SwipeRead.

Framsidan: Läkemedel

- Senast signerad¹⁵
- Vårdenheten¹⁷
- Preparat⁶³
- Styrka⁷¹⁺⁷²
- Adm.väg³⁵ (dvs Administreringsväg)
- Typ²¹ (dvs Ordinationstyp: Vb=Vid Behov, Rb=Regelbundet, Sch=Schema)
- Adm. Inst. (+ tecknet betyder bara att det finns administrationsinstruktioner, klicka på raden och läs Ordinationsdetaljer)
- Dostid: Dosschema⁸⁶⁻⁹⁶_ Dostext¹⁰¹

Ordination (när man klickat på ett läkemedel)

- Ordinationstyp²¹
- Preparatsnamn⁶³
- Administration³⁵⁺³⁷
- Ordinationsorsak³⁸
- Behandlingsmål³⁹
- Administrationsinstruktioner⁴⁰
- Generika (Ersättlig?)⁴⁴
(Ja=får ersättas med generika / Nej=Får ej ersättas med generika)
- Skapad¹¹
- Review Date⁴¹

Administreringstillfälle (ordination)

- Utdelningstid (fr.o.m.)⁵⁰⁻⁵³
- Dostext¹⁰¹



iPad: Läkemedelsadministration – klicka på raden för administrering

Administration av Enkeldos stöds än så länge. Man kan läsa Blandningar, ej administrera.

00:25 ons 12 nov. 18060606-0606 Uppgifter | Att göra | Läkemedelsadmin.

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Visa senaste månaden" Journalfilter

Läkemedelsadmin.
Senaste uppdatering: 1

Alla (16) 2 Igår 2025-11-11 Idag 2025-11-12 Imorgon 2025-11-13 3

Alla enheter Aktuella egen enhet

Info	Ord. tid	Adm. tid	Preparat	Styrka	Form	Ord. dos	Adm. dos	Signerad
ADM	02:00	02:00	Addens-Natriumklorid B. Braun Morfin Abcur	3 mg/ml	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	5 ml 7 ml 4		2025-09-30
!	02:00		Iprensa	400 mg	Kapsel, mjuk	1 st		
	08:00		Addens-Natriumklorid B. Braun Morfin Abcur	3 mg/ml	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	5 ml		2025-09-30
?	08:00		Alvedon	500 mg	Filmragerad tablett	?		2025-10-29
?	08:00		Abacavir/lamivudine Accord	600 mg/300 mg	Filmragerad tablett	?		2025-11-04
!	08:00		Iprensa	400 mg	Kapsel, mjuk	1 st		
	14:00		Addens-Natriumklorid B. Braun Morfin Abcur	3 mg/ml	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	5 ml		2025-09-30

Mer nedan

23:48 sön 21 sep. v. 4.3 (345) 1950812-1856 Uppgifter | Att göra | Läkemedelsadm.

Tillämpade filter (exkl. läkemedel): "Egna spärrgruppen" för "Igår, idag, imorgon" Journalfilter

Läkemedelsadm.
Senaste uppdatering: 23:48

Igår 2025-09-20 Idag 2025-09-21 Imorgon 2025-09-22

Alla (22) Alla enheter Signerade egen enhet

Info	Ord. tid	Adm. tid	Preparat	Styrka	Form	Ord. dos	Adm. dos	Signerad
!	08:00	+	Escitalopram Accord	5 mg	Filmragerad tablett	3 st		2025-08-25
Adm. tf	Adm. väg	lor. inst	Adm. instruktion	Adm. kommentar		Adm. av	Nytt ställn.	Signerad på
Dialys	Oralt		000000000011 111111112222 222222333333 333344444444 445555555555 666666666677 777777778888 888888999999 999900000000 00					LS Medicin Avd
!	11:30		Morfin Abcur Addens-Natriumklorid B. Braun	2 mg/ml	Injektionsvätska, lösning	10 ml		2025-08-25
!	14:00		Allopurinol Orion	300 mg	Tablett	1 st		2025-08-25
!	14:00		Amoxicillin Ebb	750 mg	Tablett	1 st		2025-08-25

Mer nedan

Klicka på raden för att få upp en administreringsruta.

1. Senaste uppdatering från TakeCare. Uppdatera genom att svepa nedåt.
2. Filtrera på Igår/Idag/Imorgon.
3. Filtera på signeringsenhet vid behov.
4. Avvikelse i Administrerad dos eller Administrerad tid markeras med gult.
5. Pil nedåt i högerkanten expanderar översiktsrad för mer information. Här hittar du tex mer information om koppling till behandlingstillfälle, de gånger det inte får plats i INFO på huvudraden mer än som blå färg.



iPad: Läkemedelsadministration

Enkeldos med ett preparat:

00:02 mån 22 sep. Bekräfta administration: Fiktiv Kvinna 18020202-0202 Administrera

Tidigare administreringar inte utförda!

måndag 2025-09-22 20:00

FASS	PREPARAT	STYRKA	FORM	ORD. DOS	ADM. DOS
4		Waran	2.5	Tablett	1.5 st (= 3.75 mg) 1 15 *

Administreringsväg

Oralt

Adm. Metod

Annat

Adm. Tillfälle

Adm. Instruktion

Substitution tillåten?

Tillåten

Behandlingsorsak

Behandlingsmål

Administreras av

Förskrivare

Ingrid Dunder

↓ Mer nedan

Administrering datum/tid

2 2025-09-22 20:00

3 Kommentar

Enkeldos med flera preparat:

00:14 mån 22 sep. Bekräfta administration: Demetris Demosson 19500812-1856 Administrera

Tidigare administreringar inte utförda! Vill du göra detta?

söndag 2025-09-21 03:30

FASS	Lösning med flera preparat	Form	Styrka	Mängd
	Morfin Abcur	Injektionsvätska, lösning	10 mg/ml	2 ml
	Addens-Natriumklorid B. Braun	Koncentrat till infusionsvätska, lösning	4 mmol/ml	8 ml

Adm. väg

Intravenöst

Adm. metod

Injektion

5 Styrka bruksfärdig lösning

2 mg/ml

Adm. tillfälle

Adm. instruktion

Substitution tillåten?

Tillåten

Behandlingsorsak

↓ Mer nedan

ORDINERAD DOS AV BRUKSFÄRDIG LÖSNING

Ordinerad Dos	Aktiv substans	Administrerad dos
10 ml	20 mg	1 10 *

Administrering datum/tid



2 2025-09-21 03:30

3 Kommentar

1. Välj Administrerad dos (förifylld från ordination)
2. Välj Datum och Tid
3. Addera administrationskommentar
4. FASS länk (ePed om patienten är <18 år)
5. Styrka bruksfärdig lösning
6. "Mer nedan" visar att det finns mer information att läsa. Svep med fingret i den rutan

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa anteckningar kommer att stanna kvar på iPaden tills underhållet är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare när användaren är inloggad.

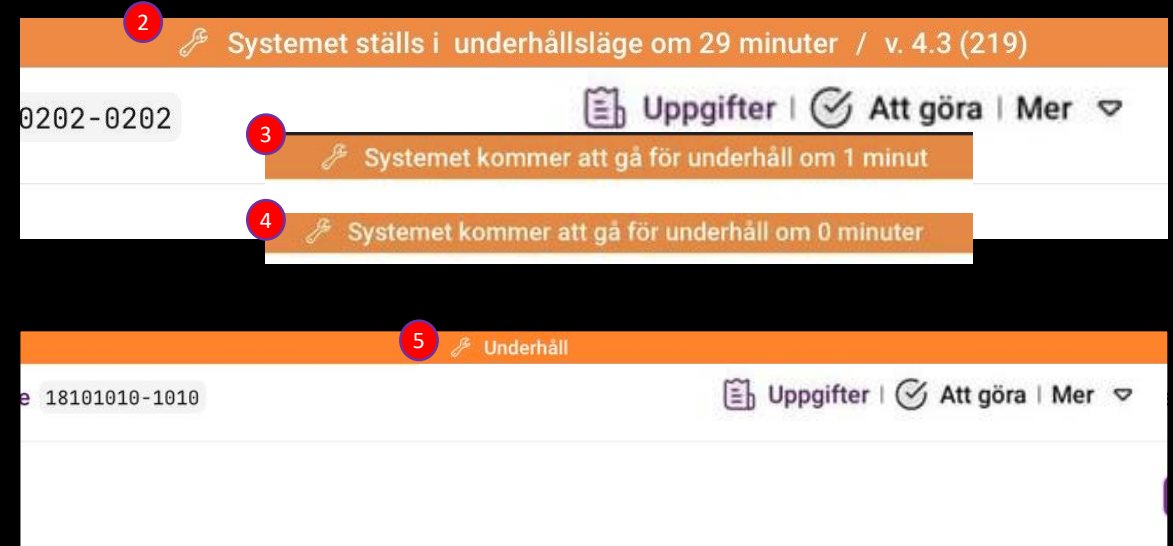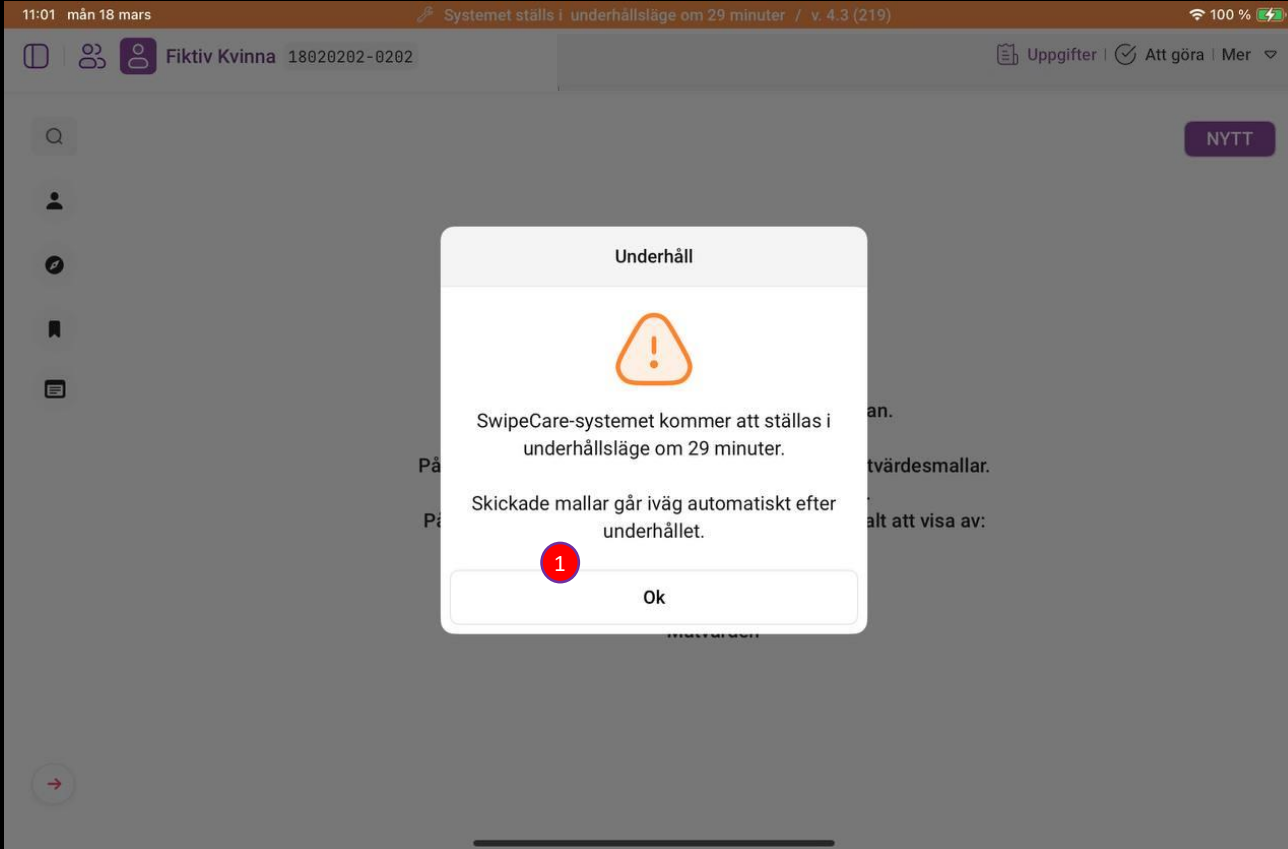

1. Popup med information om kommande underhåll. Klicka på Ok för att stänga.
2. Nedräkning: Systemet kommer att gå för underhåll om 29 minuter.
3. Nedräkning 1 min
4. Nedräkning 0 min
5. Underhållsläge: Du kan fortsatt journalföra med mallarna. Skickar du dem till TakeCare, så kommer de köas och skickas automatiskt iväg till TakeCare så fort uppdateringen när du är inloggad på iPaden.

iPad: Underhållsläge

Underhållsläge innebär att systemet uppdateras. Under denna uppdatering kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills underhåller är över. Då skickas de automatiskt över till TakeCare när användaren är inloggad på iPad.



16:26 fre 9 feb. Underhåll / 2 väntande åtgärder

Fictiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

NYTT

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
Spara

Formulär

Mätvärden inkl NEWS2
Formulär

IPOS bedömning
Formulär

maintenance

Försök igen

Göm

16:28 fre 9 feb.

Fictiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

NYTT

maintenance

Försök igen

1. Underhåll / 2 väntande åtgärder: Två mallar är köade och kommer skickas iväg så fort systemet är uppdaterat
2. Mallarna som är köade
3. Försök igen: Den orangea flaggan är borta och appen är uppdaterad. Tryck på Försök igen så laddar du om sidan och ser att mallarna gått iväg.
4. Patient sidan är tom och alla mallar har skickats iväg till TakeCare

20:39 tis 11 nov.

Fiktiv Äldrekvinn 18060606-0606

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

NYTT

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
2025-10-09 • Sara Bern
Test

Uppgifter

Senaste uppdatering: 20:39

SBAR

Nytt mätvärde

Ny journalant.

ATT GÖRA: Aktiviteter från TakeCare, också med länkade mätvärdesmallar från egna vårdenheten.

MER: Det ni har av: Journalanteckningar, Diagnoser, Läkemedelslista, Läkemedelsadministration & Mätvärden (exkl. Labsvar som är under utveckling).

NYTT MÄTVÄRDE: Utöver de ni redan har länkade till Att Göra. Systemgemensamma och Vårdenhetens lokala.

NY JOURNALANT: Signera eller Spara i TC.

Tilläggstermer / Tilläggsmallar stöds inte. Behöver du så Spara i TC och gör färdigt de anteckningarna i TakeCare. Eller backa ut från halvskriven mall och skicka den när du sitter vid Takecare och snabbt kan komplettera med Tilläggsmall/-Term i TakeCare.

Göm

iPad: Offline-läge

Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalanteckningar och mätvärdesmallar och skicka dem till TakeCare. De kommer då att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare när användaren är inloggad på denna iPad.



08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Senast hanterade patienter

Namn	Nummer	Senaste uppdatering
Fiktiv *****	18101010-****	2024-02-09
Apptest III ***	19791230-****	2024-02-08
Komma *****	19530416-****	2024-02-04
Fiktiv *****	18040404-****	2024-02-01
Fiktiv *****	18020202-****	2024-02-01
App Testperson *	19440813-****	2023-12-15

08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Sök i patientinfo

NYTT

Allmän information
Patientnamn, Personnummer, Kön, Ål...

Adressinformation
Övriga telefonnummer, Adressrad 1,...

Etiketter
Hantera etiketter

Notiser
Spara

Du har ingen internetanslutning. Anslut din iPad till internet och försök igen.

Försök igen

Göm

08:45 mån 12 feb. 13 %

SwipeCare är offline

Fiktiv Pojke 18101010-1010

Uppgifter | Att göra | Mer

Information

Innehållsförteckning

- Samtycke
- Uppgiftslämnare
- Anamnes
- Aktivitetsanalys
- Bedömning
- Mål/Planering/Åtgärder
- Utvärdering
- Önskemål patient/närstående

Samtycke

Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

-Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

-Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient?

-Ta kontakt med kommun och/eller primärvården för planering av patients utskrivning?

-Får närstående kontaktas?

Uppgiftslämnare

-Uppgifter hämtad från/av

Samtycke

Inhämta och lämna ut upplysningar om patient?

Ja

Nej

Ej gått att efterfråga samtycke

Läsa och lämna ut journaluppgifter om patient



Mer nedan

1. "SwipeCare är offline": Den röda flaggan längst upp visar att internet saknas men du kan fortfarande öppna patienter
2. På patientsidan får du information om att du saknar internet. Du kan fortfarande dokumentera i journalmallar och mätvärdesmallar.
3. Dokumentera som vanligt och tryck sedan på "Signera", "Skicka till TakeCare" etc.

iPad: Offline-läge



Offline-läge innebär att appen inte har tillgång till internet. I offline-läge kan man fortfarande dokumentera i journalmallarna samt "skicka iväg till TakeCare". Dessa kommer att stanna kvar på iPaden tills internet finns tillgängligt igen. Då skickas de automatiskt över till TakeCare när användaren är inloggad på denna iPad.

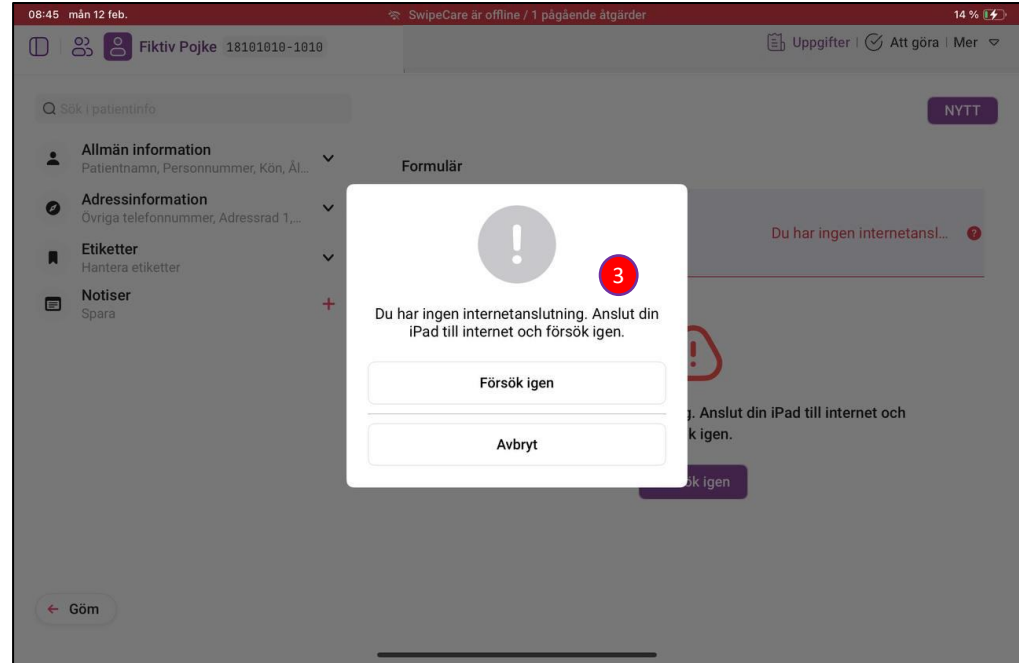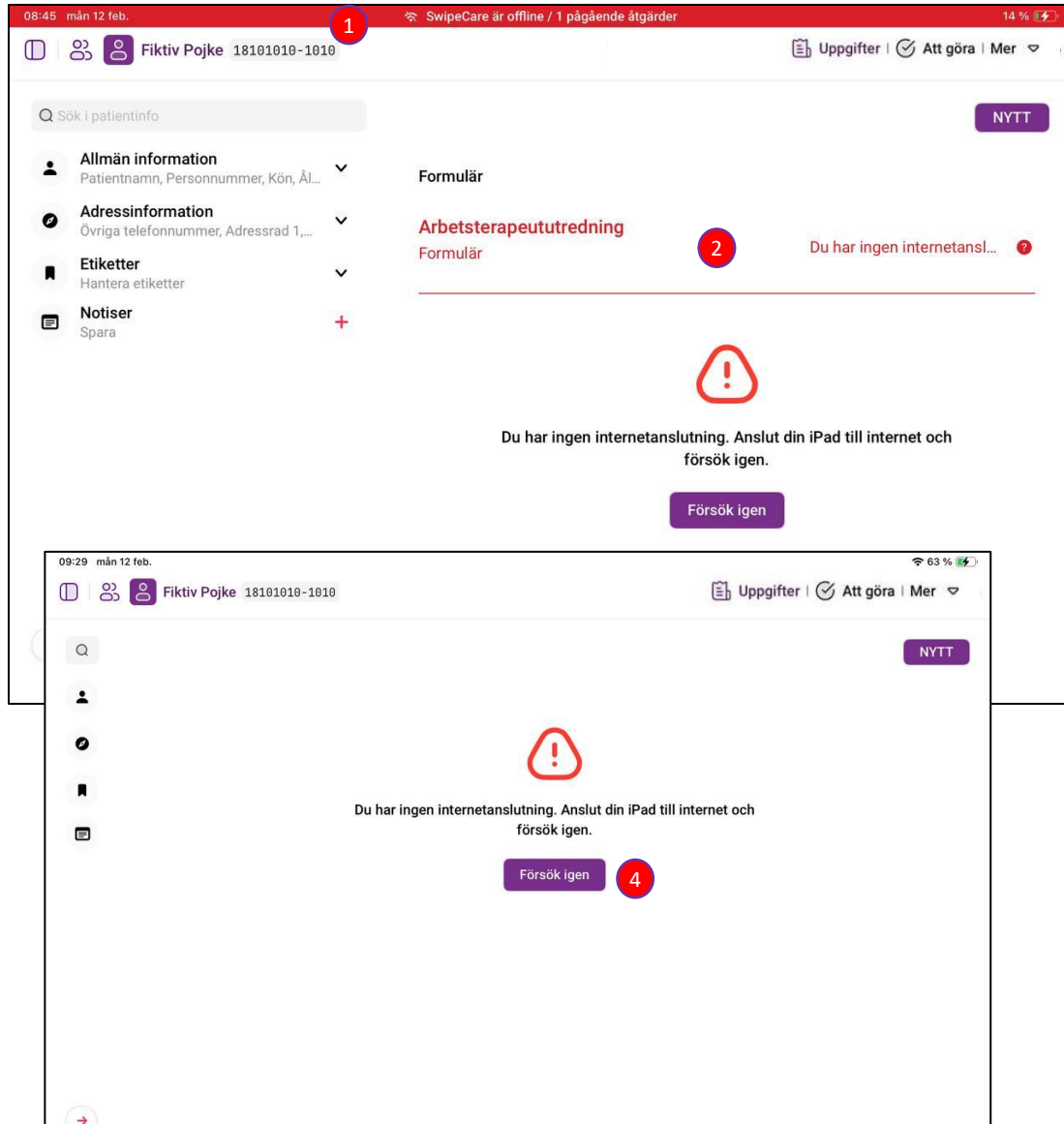

1. "SwipeCare är offline/1 pågående åtgärder": Den röda flaggan indikerar att appen är offline samt att 1 mall väntar på att skickas
2. Här ser du vilken mall som ligger kvar på iPaden. Den skickas automatiskt iväg när internet finns. Klickar du på mallen får du felmeddelandet 3.
3. Felmeddelande som informerar dig om varför mallen inte skickats iväg, i detta fall pga ingen internetuppkoppling.
4. Den röda flaggan är borta och appen har internet. Tryck på försök igen så laddar du om sidan. Mallarna har skickats iväg oavsett om du laddar sidan eller inte.



Felhantering och felmeddelanden

--



Hur hitta formulär/mätvärden som inte gått iväg till TakeCare?

De troligaste vanligaste felen finns som Uppgifter som syns i användarnas iPads och kan enkelt tryckas iväg igen.

De kan också ses i vårdgivarportalens översikt och i Teamarbetsvyn:

- **Granska anteckning: (mallnamn)**
 - Denna uppgift måste rättas i SwipeCare portalen, går ej att göra i paddan. Tala med er IT support och ange aktuell vårdenhet samt patientens samt namn eller personnummer för felsökning.
- **Fel vid sändning**
 - Kan bero på olika orsaker i TakeCare eller SwipeCare. Typiska fel som kommer från TakeCare:
 - "httpErrorJuno: Unexpected 400 JUNO response" (Bero ibland också på temporärt fel i kommunikationen)
 - "Illegal argument!" (Failed to write casenote. User inactivated, eller Patient id failed check.)

Översikt Teamarbete Patienter

Byt vårdenhet Ljust tema Svenska Sara Bern

Teamarbete

Vårdflöde: Alla

Typ: Alla

Task filter: Alla

Etiketter: Alla

Ansvar: 1

Förfallodatum: Alla

Rensa alla

Task filter:

Uppgiftstyp	Patientens namn	Personnummer	Flöde	Förfallodatum
manualPlus	Fel vid sändning: NEWS 2	Test Test	1810101010	Mätvärden till TakeCare: NEWS 2 2023-09-21



För **Fel vid sändning** så är det oftast TakeCare som klagar på fel parametrar:

- Användaren är inaktiverad i TakeCare om detta felmeddelande kommer:
"Illegal argument! (Failed to write casenote. User inactivated:
Om användaren bara loggar in i TakeCare igen så blir användaren aktiverad och anteckningen kan skickas.
- Användaren har skrivit fel personnummer på patient vid detta felmeddelande:
Illegal argument! (Failed to write casenote. Patient id failed check. Fail-code: -4)
Personnummer kan ej justeras i SwipeCare. För över information om patienten manuellt från SwipeCare till TakeCare.
Använd gärna streckkodsläsare-funktion i SwipeCare för att undvika denna typ av problem.
- Användare har inte TakeCare behörighet på denna vårdenhets vid detta felmeddelande:
Unauthorized request! (Failed to write casenote. User has not rights to this ward....

Vid **Kräver åtgärd**: "User is deactivated", så är användaren markerad som Inaktiv i SwipeCare.
Händer aldrig vid QR kodsloginning via TakeCare då den aktiverar användaren.